

MODE D'EMPLOI



Helix Elite™ Molecular Standards (pastille inactivée) Produits

- Helix Elite™ Molecular Standards (pastille inactivée)
- QC Sets and Panels - Helix Elite™ Molecular Standards (pastille inactivée)

APPLICATION

Les standards moléculaires Helix Elite™ (pastille inactivée) et les jeux et panels de CQ - standards moléculaires Helix Elite™ (pastille inactivée) sont conçus pour être utilisés comme des contrôles externes pour la détection qualitative dans des tests moléculaires.

RÉSUMÉ ET EXPLICATIONS

Les tests moléculaires fournissent des résultats rapides et précis quant à la présence d'un micro-organisme. L'interprétation appropriée d'un test moléculaire requiert l'utilisation d'un contrôle. Les standards moléculaires Helix Elite™ (pastille inactivée) sont des contrôles de processus faciles à utiliser qui peuvent être utilisés pour surveiller l'extraction, l'amplification et la détection de tests moléculaires ou des instruments. Ces contrôles indépendants peuvent également être utilisés dans l'évaluation de la compétence d'un laboratoire et pour la formation, ou pour déterminer l'homogénéité d'un lot à l'autre de consommables de test tel que préconisé par diverses exigences réglementaires et normes.

PRINCIPES

Les Helix Elite™ Molecular Standards (pastille inactivée) se composent de micro-organismes mis en culture, inactivés par des traitements chimiques, radiologiques ou thermiques. Chaque pastille est emballée dans un sachet en aluminium à usage unique. Les utilisateurs doivent respecter les procédures du fabricant du test ou du laboratoire pour traiter les contrôles.

COMPOSITION

Les Helix Elite™ Molecular Standards (pastille inactivée) se composent de matériel de contrôle emballé individuellement contenant un ou plusieurs pathogènes inactivés stabilisés dans une matrice exclusive d'excipients.

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

- Réservé à un usage de diagnostic *in vitro*.
- Réservé à un usage professionnel. Doit être utilisé par du personnel formé à l'utilisation du test.
- Consulter le document *QC Sets and Panels: Technical Information* à l'adresse www.microbiologics.com pour connaître les facteurs extrinsèques et les substances interférentes connus pour chaque numéro de référence.
- Ne pas ouvrir le sachet en aluminium avant d'être prêt à l'utiliser.

- Ce produit doit être traité comme un échantillon viable et doit être manipulé conformément aux pratiques de biosécurité de niveau 2 décrites dans les directives relatives à la biosécurité dans les laboratoires de microbiologie et de biomédecine des centres pour le contrôle et la prévention des maladies (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) et des instituts nationaux de la santé (National Institutes of Health, NIH) du ministère de la santé et des services à la personne (Department of Health and Human Services) aux États-Unis ou dans d'autres directives équivalentes.
- Porter un équipement de protection individuelle approprié.
- Se reporter à la fiche de sécurité (MSDS) pour plus d'information. La MSDS se trouve sur le site Internet de Microbiologics à l'adresse www.microbiologics.com ou peut être obtenue en contactant le support technique au +1.320.229.7045 ou depuis les États-Unis (appel gratuit) au 1.866.286.6691.
- Ces produits ne contiennent pas de substances dangereuses figurant dans les directives 67/548/CEE ou 1272/2008/CE.
- Ces produits ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel.
- Tous les instruments et tests ne sont pas compatibles avec les contrôles multi-cibles. Il revient au client de s'assurer de la compatibilité du contrôle avec le test ou le protocole utilisé.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE MAIS NON FOURNI

- Coffret et test pour l'extraction de l'acide nucléique
- Instrumentation pour la détection
- Tampon de réhydratation requis par le test à réaliser, par exemple eau exempte de nucléase, tampon phosphate salin (phosphate buffered saline, PBS), réactif de préparation de l'échantillon ou milieu de transport
- Pipettes pouvant distribuer des volumes compris entre 0,5 et 1 000 µl
- Pointes de pipettes à filtre anti-aérosol exemptes de nucléase
- Agitateur de type vortex
- Micro-centrifugeuse

MODE D'EMPLOI

Préparation

1. Lire la notice du test, le mode d'emploi ou le protocole de laboratoire applicable. Certains instruments et tests sont munis de paramètres CQ spécifiques. Dans ces cas, il peut s'avérer nécessaire d'utiliser le paramètre spécifique lors de l'utilisation des jeux et panels de CQ.
2. Déchirer au niveau de l'encoche pour ouvrir le sachet.
3. Sortir le flacon du sachet et s'assurer que la pastille se trouve au fond du flacon avant de l'ouvrir.

A. Helix Elite™ Molecular Standards (pastille inactivée)

4. Réhydrater la pastille lyophilisée avec le tampon approprié. Il est recommandé d'utiliser un volume minimal de 100 µl.
5. Agiter le flacon au vortex pendant 10 secondes à vitesse maximale pour mélanger. Centrifuger pour recueillir le matériel cible inactivé et réhydraté au fond du tube.
6. Utiliser le volume approprié pour le test à réaliser et respecter les protocoles de laboratoire ou les consignes du fabricant pour traiter un échantillon.

Remarque : chaque pastille est destinée à un test à usage unique. Les dilutions peuvent être réalisées et utilisées immédiatement. Il n'est pas recommandé de conserver le matériel réhydraté ou dilué pour une utilisation ultérieure.

B. QC Sets and Panels - Helix Elite™ Molecular Standards (pastille inactivée)

4. Réhydrater la pastille lyophilisée en la plaçant dans un tube ou un flacon contenant un tampon approprié, un milieu de transport ou de l'eau exempte de nucléase. Pour le volume minimal d'hydratation :
 - Consulter la page du produit correspondant au numéro de référence à l'adresse www.microbiologics.com ou le document *QC Sets and Panels: Technical Information* à l'adresse www.microbiologics.com ou
 - Contacter le support technique au +1.320.229.7045, ou depuis les États-Unis (appel gratuit) au 1.866.286.6691 ou à l'adresse techsupport@microbiologics.com.
5. Agiter la pastille réhydratée au vortex pendant 10 secondes ou jusqu'à ce qu'elle soit dissoute.
6. Utiliser le volume approprié de pastille réhydratée pour le test à réaliser et respecter les protocoles de laboratoire ou les consignes du fabricant pour traiter un échantillon. **Remarque** : chaque pastille est destinée à un test à usage unique. Les dilutions peuvent être réalisées et utilisées immédiatement. Il n'est pas recommandé de conserver le matériel réhydraté ou dilué pour une utilisation ultérieure.

STOCKAGE ET PÉREMPTION

Stocker les Helix Elite™ Molecular Standards (pastille inactivée) à une température comprise entre 2 °C et 25 °C dans leur emballage d'origine, jusqu'à la date de péremption indiquée*. Utiliser la pastille immédiatement après l'ouverture du sachet en aluminium.

Les Helix Elite™ Molecular Standards (pastille inactivée) ne doivent pas être utilisés dans les cas suivants :

- conservation dans de mauvaises conditions ;
- preuve d'exposition excessive à la chaleur ou à l'humidité ;
- dépassement de la date d'expiration.

*Remarque : les numéros de référence 8180, 8181, 8184 et 8198 doivent être conservés à une température comprise entre 2 °C et 8 °C dans leur emballage d'origine jusqu'à la date de péremption indiquée.

RESTRICTIONS

Il est possible que ce produit ne puisse pas être utilisé avec tous les coffrets et toutes les procédures. Seules les amorces et les sondes qui s'hybrident aux séquences des acides nucléiques extraits du micro-organisme doivent donner une réaction positive.

ÉTAT MICROBIOLOGIQUE

Ce produit a été préparé au moyen de procédés adaptés d'inactivation. Bien que l'innocuité du produit ait été testée, il est recommandé de respecter les précautions universelles de laboratoire, et le matériel doit être traité comme s'il s'agissait d'un échantillon viable.

SYMBOLES



Code du lot



Numéro de référence



Attention, consulter les documents joints



Quantité suffisante pour <n> tests



Dispositif médical *in vitro*



Représentant autorisé dans la Communauté européenne



Fabricant



Limite de température



Date d'expiration



Se reporter au mode d'emploi



Numéro de téléphone



Marquage CE

GARANTIE

- Ces produits sont garantis conformes aux spécifications et caractéristiques décrites et illustrées dans la notice, le mode d'emploi et les articles de référence.
- La garantie, explicite ou implicite, n'est pas engagée dans les cas suivants :
 - Les procédures appliquées dans le laboratoire sont contraires aux consignes décrites et illustrées et au mode d'emploi
 - Les produits sont utilisés pour des applications autres que celles prévues dans les notices, les modes d'emploi et les articles de référence

SITE INTERNET

Consultez notre site Internet, www.microbiologics.com, pour connaître les dernières informations techniques et la disponibilité de nos produits.

MENTIONS LÉGALES



Microbiologics, Inc.

200 Cooper Avenue North
St. Cloud, MN 56303 États-Unis
www.microbiologics.com

Support technique

Tél. : +1.320.229.7045
E-mail : techsupport@microbiologics.com

Service clientèle

Tél. : +1.320.253.1640
E-mail : info@microbiologics.com



MediMark® Europe

11, rue Émile Zola - B.P. 2332
38033 Grenoble Cedex 2, France
Tél. : 33 (0)4 76 86 43 22
Fax : 33 (0)4 76 17 19 82
E-mail : info@medimark-europe.com

SCHÉMA DES INSTRUCTIONS

Préparation

1

Lire la notice du test, le mode d'emploi ou le protocole de laboratoire applicable. Certains instruments et tests sont munis de paramètres CQ spécifiques. Dans ces cas, il peut s'avérer nécessaire d'utiliser le paramètre spécifique lors de l'utilisation des jeux et panels de CQ.

2



Déchirer au niveau de l'encoche pour ouvrir le sachet.

3


Sortir le flacon du sachet et s'assurer que la pastille se trouve au fond du flacon avant de l'ouvrir.



A. Helix Elite™ Molecular Standards (pastille inactivée)


4

Réhydrater la pastille lyophilisée avec le tampon approprié. Il est recommandé d'utiliser un volume minimal de 100 µl.

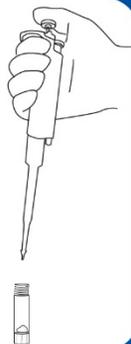

5

Agiter le flacon au vortex pendant 10 secondes à vitesse maximale pour mélanger. Centrifuger pour recueillir le matériel cible inactivé et réhydraté au fond du tube.

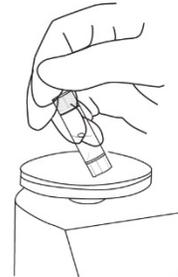

6


Utiliser le volume approprié pour le test à réaliser et respecter les protocoles de laboratoire ou les consignes du fabricant pour traiter un échantillon.

Remarque : chaque pastille est destinée à un test à usage unique. Les dilutions peuvent être réalisées et utilisées immédiatement. Il n'est pas recommandé de conserver le matériel réhydraté ou dilué pour une utilisation ultérieure.

B. QC Sets and Panels - Helix Elite™ Molecular Standards (pastille inactivée)

4

Réhydrater la pastille lyophilisée en la plaçant dans un tube ou un flacon contenant un tampon approprié, un milieu de transport ou de l'eau exempte de nucléase.

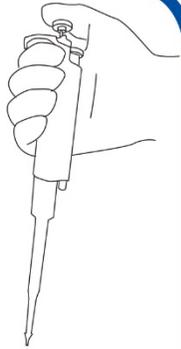

Pour le volume minimal d'hydratation :

- Consulter la page du produit correspondant au numéro de référence à l'adresse www.microbiologics.com ou le document *QC Sets and Panels: Technical Information* à l'adresse www.microbiologics.com ou
- Contacter le support technique au +1.320.229.7045, ou depuis les États-Unis (appel gratuit) au 1.866.286.6691 ou à l'adresse techsupport@microbiologics.com.

5

Agiter le flacon au vortex pendant 10 secondes à vitesse maximale pour mélanger.



6

Utiliser le volume approprié pour le test à réaliser et respecter les protocoles de laboratoire ou les consignes du fabricant pour traiter un échantillon.

Remarque : chaque pastille est destinée à un test à usage unique. Les dilutions peuvent être réalisées et utilisées immédiatement. Il n'est pas recommandé de conserver le matériel réhydraté ou dilué pour une utilisation ultérieure.