



2•3 Bacter-Test ATL®

DOMAINE D'APPLICATION

- ❑ Le **Bacter-Test** permet de **contrôler très rapidement l'état de désinfection** des **surfaces** planes, difficiles d'accès ou coupantes (trancheurs...).


PRINCIPE

- ❑ **Quelques micro-organismes** prélevés par **écouvillonnage** sur une surface donnée et incubés moins de 10 h. à 37° C. **suffisent à faire virer** du **rouge** au **jaune** un milieu de culture étudié à cet effet.

258.000050.02 Bacter-Test ATL®
Pack de 50

AVANTAGES

- ❑ **Test microbiologique** :
 - **Ultra rapide** (quelques heures).
 - **Simple et sûr**.
- ❑ Mise en œuvre ne nécessitant pas de personnel qualifié.
- ❑ **Lecture visuelle** ne nécessitant pas d'appareillage.
- ❑ Étiquette adhésive détachable assurant la **traçabilité de l'analyse**.
- ❑ Stockage à température ambiante.

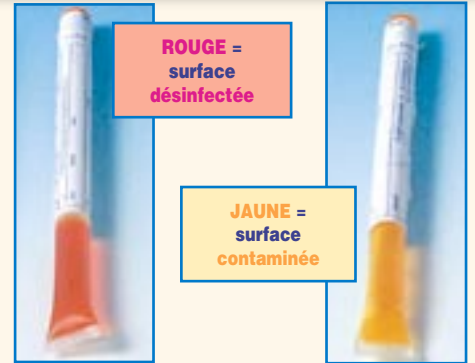

Accessoire indispensable

607.028053.11 Étuve ATL® Mini EM4 Avec étagère