

100 % Swiss

The highest in Quality & Technology



Balances compactes série BJ160

*Plus pour moins !
Et tout ce qu'il vous faut !*

- *Plateau carré et afficheur de grande taille*
- *Format compact*
- *Téléchargement via Internet*
- *Fonctionnement sur batterie*
- *Pack accus intégré- durée de fonctionnement jusqu'à 12 heures (en option)*
- *Sortie de données RS232*
- *Protection antivol électronique et mécanique (option)*
- *Swiss made - 2 ans de garantie*

Tout bien pesé, pesez avec nous !

Distribué par :

LABORATOIRES HUMEAU

Z. A. de Gesvrine - 4 rue Képler - B. P. 4125 - 44241 La Chapelle-sur-Erdre Cedex - France
t. : +33 (0)2 40 93 53 53 - f. : +33 (0)2 40 93 41 00 - e. : info@humeau.com



w w w . h u m e a u . c o m



Simplicité d'utilisation


La balance BJ160 est très conviviale!

5 touches suffisent pour accéder à toutes les commandes. Un guidage clair de l'utilisateur à travers les menus sur l'afficheur facilite les réglages et permet de changer le mode de fonctionnement et d'effectuer les procédures de pesage sans difficulté.



Afficheur

L'affichage à cristaux liquides est un affichage multifonctions qui procure une indication claire des résultats et peut être soit intégré au boîtier de la balance soit fixé sur une colonne au dos de celle-ci.

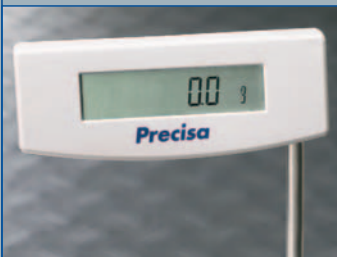

Afficheur supplémentaire

Qu'il soit fixé sur la balance ou indépendant, grâce à cet afficheur supplémentaire, les résultats des pesées peuvent être visualisés et contrôlés par plusieurs personnes.



Valise de transport

Pour protéger la balance et pour votre confort – la valise remplit ces deux rôles à la fois.




Protection antivol

A l'aide d'un code à quatre chiffres cette balance Precisa peut elle aussi être protégée contre le vol. Vous pouvez aussi opter pour l'antivol mécanique (option).



Elle a tout. Et elle fait tout !

Un rapport qualité-prix très attrayant ainsi que le souci permanent de répondre au mieux aux souhaits de la clientèle comptent parmi les points forts de Precisa. C'est dans cet esprit que sont nées les balances de la série BJ160. Les 2 ans de garantie, le boîtier solide et résistant, l'afficheur de grande taille très lisible et la sortie de données RS232 de série ne sont que quelques uns des atouts qui caractérisent ces appareils. En somme, une balance qui répond à tous les critères de simplicité d'utilisation, de design et bien sûr de prix.

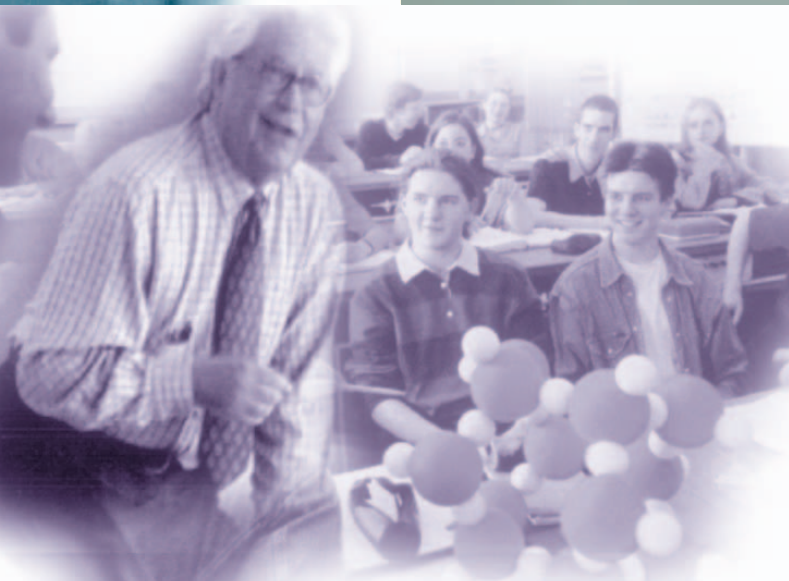

Intelligent Calibration Mode (ICM)

Le ICM reconnaît automatiquement le poids étalon déposé sur la balance. Le protocole s'effectue selon la norme ISO avec un certificat de calibrage édité sur l'imprimante connectée.

Menu utilisateur (UMM)

Vous avez la possibilité d'enregistrer vos propres configurations utilisateur et de les appeler à l'écran à tout moment.


Precisa

■ The Balance of Quality ■



Fonctions intégrées

Grâce à l'optimisation de référence automatique, la balance compte le nombre exact de pièces, permet la commutation des unités, la conversion en pourcentages, la pesée d'animaux etc. (voir aussi données techniques)

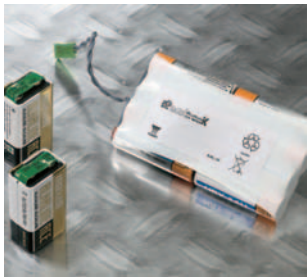

Fonctionnement sur accumulateur ou batterie

Le fonctionnement sur batterie de série donne aux balances une autonomie de 5 heures environ. Avec le pack accus (en option) cette durée peut être portée jusqu'à 12 heures.



Pieds réglables / niveau à bulle d'air

Grâce aux pieds réglables et au niveau à bulle d'air, la balance se met aisément à niveau.

Mise à jour logiciels / chargement par Internet

Rien de plus facile avec l'interface de série. Il vous suffit de télécharger toutes les applications sur le logiciel de la balance via Internet.

Données techniques balances Precisa Série BJ

Specifications		BJ60M	BJ100M	BJ210C
Portée maximale	g	62	102	210
Précision d'affichage	g	0,001	0,001	0,01
Temps de mesure	s	4	4	2
Reproductibilité	g	0,002	0,002	0,01
Linéarité	g	0,002	0,002	0,02
Plateau de pesée	mm	ø100 avec abri contre le vent		
Matériau du plateau				
Dimensions	mm			
Poids	kg			
Type de l'affichage				

Données techniques balances Precisa Série BJ160

Interface RS232

Pesée sous la balance

Batterie	N/D
Indicateur niveau de charge	-
Autonomie	-
Accumulateurs intégrés (recharge automatique)	N/D
Autonomie	-

Mise en veille automatique

Indicateur de sur- /sous-charge

Protection surcharge

Face avant étanche

Antivol mécanique

Code antivol

Niveau à bille / Pieds réglables

Comptage de Pièces

Autres unités

Pourcentage

Addition de pesées

Statistiques

Cumul des poids net

Pesée d'animaux

BPL

Autocalibration (poids externe)

Téléchargement du Software via Internet

Standard

Avec afficheur sur colonne

Standard + Pré-équipée pour 2ème afficheur

Valise de transport

Imprimante

Accumulateurs internes

Housse de protection avec anneau

Crochet pour pesée sous la balance

Antivol mécanique

Afficheur supplémentaire (modèle de table)

Deuxième afficheur (monté sur colonne) 120mm*

Deuxième afficheur (monté sur colonne) 240mm*

Interface nécessaire pour balances avec la référence 160-xxxx-050

BJ410C	BJ610C	BJ1000C	BJ1100D	BJ2100D	BJ4100D	BJ6100D	BJ8100D	BJ4100G	BJ6100G	BJ8100G	BJ12100G
410	610	1020	1100	2100	4100	6100	8100	4100	6100	8100	12100
0,01	0,01	0,01	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	1	1	1	1
2	2	4	2	2	2	2	4	2	2	2	2
0,01	0,01	0,02	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	1	1	1	1
0,02	0,02	0,02	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	2	2	2	2
135 x 135			170 X 140								
			Acier inox								
			195 x 250 x 72								
			1,5								
			Cristaux liquides								

Standard

Option

Alcaline

Standard

5 heures

Option

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Option

Standard

Standard

Standard

16

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

160-xxxx-050

160-xxxx-051

160-xxxx-052

350-8564

350-8363

350-8563

350-8565

350-8561

350-8555


350-8891

350-8890

350-8893

350-8562

Le monde de Precisa

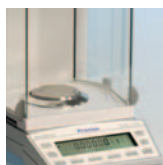

Balances Semi-micro, analytiques, de précision et industrielles

Precisa est traditionnellement fort dans la technique de pesée. Nous offrons une combinaison de haute précision, une grande variété de dispositifs et des prix attractifs. Nos produits sont inégalés sur leur design compact, leur rapidité et leurs dispositifs innovants.



Système de dessiccation

Precisa est le seul fabricant combinant les deux secteurs d'humidité et d'incinération avec un écran tactile commandé par une seule unité autonome.



Préparation d'échantillon

Precisa propose une grande variété de produits pour le processus complet de la préparation d'échantillons. La technologie Precisa offre une grande convivialité d'utilisation et une grande économie en temps tout en assurant la sauvegarde des données.



Service et support

Avec nos propres laboratoires, nous pouvons offrir à notre clientèle tout le support en applications et méthodes de développement. Les produits Precisa sont distribués dans plus de 90 pays par notre réseau de filiales et distributeurs agréés.

Distribué par :

LABORATOIRES HUMEAU

Z. A. de Gesvrine - 4 rue Képler - B. P. 4125 - 44241 La Chapelle-sur-Erdre Cedex - France
t. : +33 (0)2 40 93 53 53 - f. : +33 (0)2 40 93 41 00 - e. : info@humeau.com

