


BagMixer[®] s & sw

Malaxeurs de laboratoire 400 mL

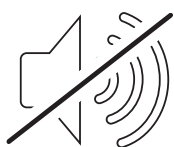

Malaxage Super Silencieux !

Distribué par :



Z.A de Gesvrine - 4 rue Képler - B.P.4125
44241 La Chapelle-sur-Erdre Cedex - France
t. : +33 (0)2 40 93 53 53 | f. : +33 (0)2 40 93 41 00
commercial@humeau.com

interscience



Notre qualité pour votre laboratoire

- Gamme complète d'instruments de laboratoire pour les analyses microbiologiques
- Conçu et fabriqué en France
- Des produits innovants issus de notre R&D
- Distribution mondiale dans plus de 80 pays

20 années d'innovations dans la préparation de l'échantillon

Avec plus de **13 000 BagMixer®** vendus dans le monde, nous sommes aujourd'hui reconnus comme les spécialistes de la préparation de l'échantillon avec les malaxeurs de laboratoire **BagMixer®** et la gamme de produits **BagSystem®**.




Le meilleur de la technologie pour une extraction bactérienne optimale


Force de malaxage ajustable

Jusqu'à 28 kg de pression par pale

BREVETÉ

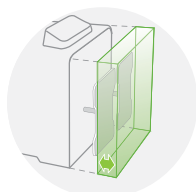

Échantillon petit/dur :
Pales en avant
pour plus de pression

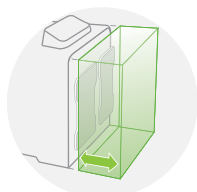

Échantillon gros/mou :
Pales en arrière
pour moins de pression

BagMixer® S

Corps tout acier inox

Acier inox 304 L de haute qualité

Robuste et fiable

3 ans de garantie

Vitre garantie à vie

Amortisseurs garantis à vie

Système d'éclairage intelligent

Système LightCode :

indique l'état du processus de malaxage par code couleur
(rétro-éclairage de la paillasse)

Éclairage LED :

éclaire la chambre de malaxage pendant le processus et le nettoyage

Grande stabilité

Pieds Paulstra™ : absorbe les vibrations

Ne marque pas la paillasse



Malaxage le plus silencieux

Moins de 48 dB
Caisson insonorisé
Porte double vitrage

BagMixer® SW

Système Q-Tight®

250 kg de pression
pour une fermeture parfaitement étanche

Nettoyage facile

Système TotalAccess :
ouverture de la porte à plat
Chambre de malaxage en polycarbonate
Pales et bac de sécurité autoclavables
Pales amovibles Click & Clean®
BREVETÉ

Porte vitrée

LiquidSensor

Arrêt automatique du malaxage
en cas de fuite
BREVETÉ

ISO
7218

GARANTIE
3
ANS

AMORTISSEURS
GARANTIS
À VIE

VITRE
GARANTIE
À VIE

Des fonctionnalités innovantes



Système TotalAccess


Le nettoyage de la chambre a longtemps été fastidieux. Le système TotalAccess permet l'ouverture de la porte à plat pour faciliter le nettoyage. Les pales amovibles Click & Clean® et le bac de sécurité intégré sont autoclavables et la chambre en polycarbonate se nettoie facilement grâce aux angles arrondis.

BREVETÉ

Super Silencieux

Les malaxeurs de laboratoire classiques sont bruyants et peuvent donc être fatigants à l'usage. BagMixer® S & SW vont transformer le confort de travail de votre laboratoire : ils sont si silencieux que vous pourrez discuter ou téléphoner à côté pendant le malaxage : moins de 48 dB comparé aux 54 dB du plus proche concurrent.

Vitesse max avec 250 mL d'eau + 22 g fromage. Testé par le Laboratoire National d'Essai. Données disponibles sur demande.

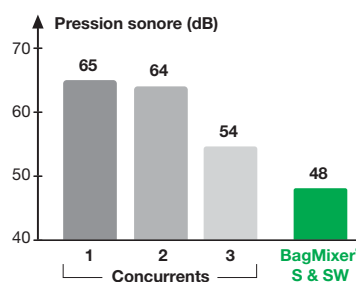

Test acoustique ISO 3744



Système LightCode

Le nouveau BagMixer® est tellement silencieux que vous ne vous apercevrez même pas que le malaxage est fini ! Nous avons ajouté des lumières LED qui illuminent la paillasse pour vous indiquer quand le malaxage est fini, même de loin. Le code couleur indique le statut :



Vert : Prêt



Orange : Malaxage en cours



Rouge : Détection de fuite avec LiquidSensor

LiquidSensor

En cas de rupture de sachet, le BagMixer® s'arrête automatiquement. Le détecteur de liquide vous avertit immédiatement, vous permettant de sauvegarder votre échantillon et nettoyer plus rapidement le malaxeur !



BREVETÉ



EnergySaver

Le nouveau moteur brushless du BagMixer® permet de consommer 50 % moins d'énergie, comparé aux moteurs à charbon des modèles concurrents. Il n'y a pas de pièces d'usure, donc il peut durer beaucoup plus longtemps. La nouvelle fonction AutoSleep met le BagMixer® en mode veille après 30 mn d'inactivité.

Gamme BagMixer® 400

Pour l'analyse des échantillons solides



BagMixer® 400 P
 > L'essentiel

Réf. 021 230



BagMixer® 400 W
 > Porte vitrée

Réf. 022 230



BagMixer® 400 CC®
 > Click & Clean®

Réf. 024 230



BagMixer® 400 S
 > Malaxage silencieux

Réf. 025 000



BagMixer® 400 SW
 > Porte vitrée & LiquidSensor

Réf. 025 100

Aussi disponible : packs incluant sachets et accessoires ; malaxeurs 100 mL et 3500 mL. Contactez-nous pour plus d'infos.

Produits complémentaires & accessoires

BabyGravimat®
 Dilueur gravimétrique
 Réf. 500 230

Gravimat®
 Dilueur gravimétrique
 Réf. 510 230



BagFilter® 400
 Sachet stérile avec filtre latéral
 Réf. 111 425



BagPage® 400
 Sachet stérile avec filtre pleine page
 Réf. 122 025



BagLight® 400
 Sachet stérile
 Réf. 132 025



BagSeal®
 Thermosoudreuse
 Réf. 261 000



BagOpen® 400
 Portoir ouvre-sachet
 Réf. 211 040



BagRack® 400 & DripTray® (en option)
 Portoir de sachets
 Réf. 221 040



BagClip® 400
 Barrettes de fermeture
 Réf. 231 040



BagPipet® & BagTips®
 Pipette - Réf. 251 091
 Embouts stériles - Réf. 252 019

Spécifications techniques

Référence	BagMixer® 400 S	BagMixer® 400 SW
	025 000	025 100
Pales ajustables	✓	✓
4 vitesses ajustables	✓	✓
Pales amovibles Click and Clean®	✓	✓
Coque tout acier inox 304 L	✓	✓
Bac de sécurité intégré acier inox	✓	✓
Moteur brushless silencieux 180 Watts	✓	✓
Écran digital multifonction	✓	✓
Arrêt des pales côte-à-côte	✓	✓
TotalAccess System : ouverture à plat de la porte	✓	✓
LightCode : LED couleur selon statut	✓	✓
Chambre de malaxage blanche	✓	✓
Éclairage LED blanches dans chambre de malaxage	✓	✓
Porte double vitrage	-	✓
LiquidSensor : détecteur de fuite	-	✓
Niveau de son avec 250 mL d'eau + 22 g de fromage	48 dB	
Poids de la porte	1050 g	950 g
Temps de malaxage	de 1 s à 59 mn, ∞	
Vitesse de malaxage	4, 6, 8, 10 coups/s	
Dimensions (l x p x h)	29 x 45 x 37 cm	
Poids	26 kg	
Puissance	100-240 V~ 50-60 Hz	
Capacité	de 50 à 400 mL	
Fabriqué en France	✓	
3 ans de garantie (après enregistrement)	✓	
Vitre garantie à vie	✓	
Amortisseurs garantis à vie	✓	

Livré avec : câble d'alimentation, manuel d'utilisation, pack gratuit de sachets stériles.

Certifié



Distribué par :

Z.A de Gesvrine - 4 rue Képler - B.P.4125
44241 La Chapelle-sur-Erdre Cedex - France
t. : +33 (0)2 40 93 53 53 | f. : +33 (0)2 40 93 41 00
commercial@humeau.com



w w w . h u m e a u . c o m