

Logiciel pour enregistreurs

testo ComSoft Basic
testo ComSoft Professionnel
testo ComSoft CFR

Trois versions de logiciels – le bon pour chaque application

testo ComSoft Basic – le logiciel de base gratuit

testo ComSoft Professionnel – le logiciel complet

testo ComSoft 21 CFR Part 11 – le logiciel pour les exigences pharmaceutiques

Fonctions export pratiques, p. ex. pour un traitement additionnel des données via Excel



Pour la programmation et la relecture des enregistreurs, de même que pour l'analyse des données, vous pouvez choisir entre trois différentes versions de logiciels. Testo a la bonne solution pour vos exigences : le logiciel gratuit testo ComSoft Basic avec son interface utilisateur graphique offre toutes les fonctions de base d'un logiciel standard pour enregistreurs.

Indépendamment du type d'utilisation des enregistreurs, le testo ComSoft Basic propose non seulement la configuration et la relecture des instruments, mais aussi une analyse des données très simple. La convivialité et l'utilisation intuitive sont placées au premier plan.

D'autres exigences, comme la récupération de données créées sur différents sites, sont également parfaitement satisfaites avec le testo ComSoft. Testo offre même une solution de logiciel optimum pour les exigences spécifiques de l'industrie pharmaceutique : le testo ComSoft 21 CFR Part 11.


Logiciel pour enregistreurs

ComSoft Basic

Téléchargement gratuit
www.testo.fr

Logiciel Comsoft Basic permettant la programmation et la lecture de l'enregistreur : exportations des données en mode tableau et valeurs et/ou graphique. Téléchargement gratuit

Réf. 0572 0580

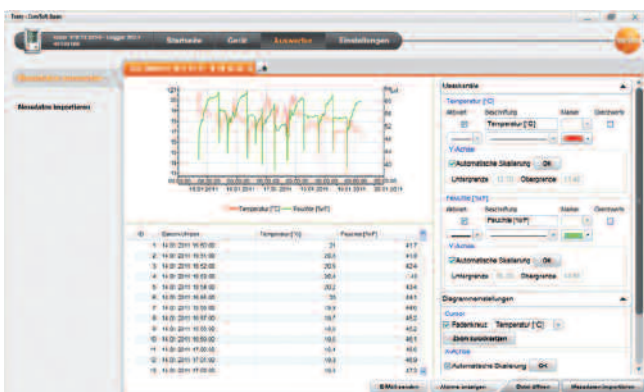

ComSoft Basic – Pour une manipulation aisée et une analyse confortable

- Téléchargement gratuit du logiciel ComSoft Basic sur www.testo.fr (nécessite un enregistrement)
- Le ComSoft Basic offre toutes les fonctions de base d'un logiciel standard pour enregistreurs
- Compatible avec les enregistreurs testo des séries testo 174, testo 175, testo 176 et testo 177
- Fonctionne sous Windows XP SP3, Windows Vista et Windows 7. Plus d'informations de compatibilité sur demande.


Fonctions importantes

- Menu adapté et fonctions étendues
- Sélection de différents entêtes pour l'impression de tableaux et de graphiques
- tableau de valeurs, le graphique ou encore l'affichage en synoptique
- Graphique avec courbe des valeurs de mesure pour une présentation claire des données
- Configuration des enregistreurs : critères de départ et d'arrêt, cadence de mesure et d'affichage et paramétrage des valeurs limites
- Fonction ajustage pour correction des valeurs lues

ComSoft Professionnel

ComSoft Professionnel
Logiciel professionnel pour traitement et archivage des données

Réf. 0554 1704

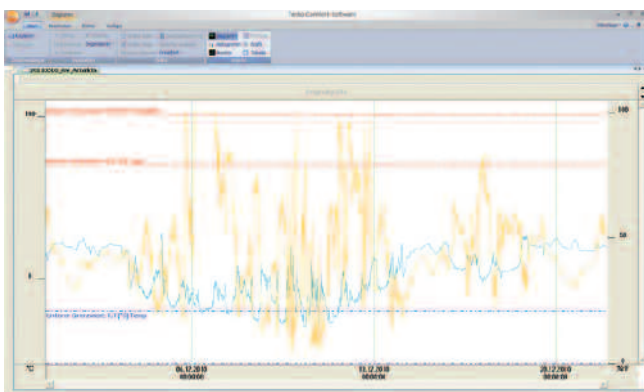

ComSoft Professionnel – pour les utilisateurs exigeants

- Le ComSoft Professionnel 4 propose non seulement toutes les fonctions de base, mais offre également d'autres possibilités d'analyse et de présentation
- De nombreux lieux de mesure et enregistreurs de données peuvent, par exemple, être organisés dans une arborescence claire
- Compatible avec les enregistreurs testo des séries testostor 171, testo 174, testo 175, testo 176 et testo 177
- Fonctionne sous Windows XP ServicePack 2 (SP2), Windows Vista et Windows 7. Plus d'informations de compatibilité sur demande.

Fonctions importantes :


- Adaptation du menu en fonction de l'utilisation
- Sélection de différents entêtes pour impression du graphique et du tableau de valeurs
- Options d'affichage étendues telles qu'affichage sous forme de synoptique, histogramme et graphique
- Graphique avec courbe des valeurs de mesure pour une présentation claire des données
- Configuration des enregistreurs : critères de départ et d'arrêt, cadence de mesure et d'affichage et paramétrage des valeurs limites
- Fonction ajustage (jusqu'à 6 points)

Logiciel pour enregistreurs

ComSoft CFR 21 Part 11

ComSoft 21 CFR Part 11 – Logiciel répondant aux exigences de la norme 21 CFR Part. 11 permettant la programmation et la relecture des enregistreurs testo

Réf. 0554 1705

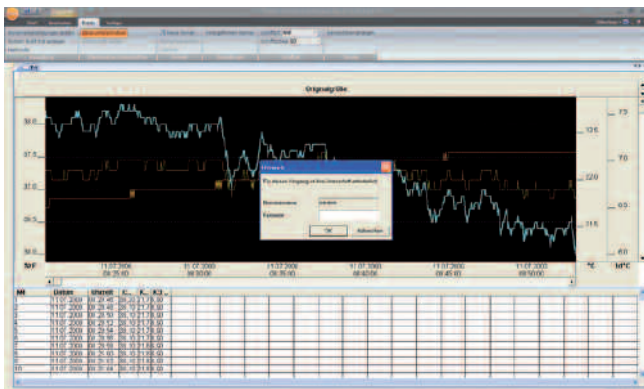

testo ComSoft 21 CFR Part 11 – Spécifique aux exigences de l'industrie pharmaceutique

- Le ComSoft 21 CFR Part 11 est un logiciel permettant la validation du système et est conforme aux exigences de la FDA (Food and Drug Administration) dans le cadre d'un système fermé
- La conformité avec les directives CFR est validée par un institut indépendant
- Compatible avec les enregistreurs testo des séries testostor 171, testo 174, testo 175, testo 176 et testo 177
- Fonctionne sous tous les systèmes d'exploitation 32 et 64 bit, Windows XP SP2, Windows Vista et Windows 7 (sauf les éditions familiales). Plus d'informations de compatibilité sur demande.

Fonctions importantes

- Affectation des utilisateurs à des groupes d'utilisateurs par l'administrateur
- Stockage des données brutes dans un format de fichier non modifiable
- Reconnaissance des erreurs de saisie
- Déconnexion automatique après une inactivité prolongée afin d'éviter les accès non autorisés
- Suivi des actions telles que la connexion/déconnexion, l'utilisation de signatures électroniques et modifications des données de paramétrage grâce à un Audit-Trail.

Quel logiciel allez-vous choisir ?

Sélectionnez le bon logiciel pour votre application

	ComSoft Basic 0572 0580	ComSoft Professionnel 0554 1704	ComSoft CFR 21 Part 11 0554 1705
Configuration et relecture de l'enregistreur	X	X	X
Paramétrage de la cadence de mémorisation et d'affichage	X	X	X
Exportation des données aux formats .xls / .pdf / .html / .csv	X	X	X
Affichage via graphique ou tableau de valeurs	X	X	X
Ajustage des enregistreurs		X	X
Détermination de valeurs statistiques (min./max., valeurs moyennes et valeurs limites)		X	X
Ajout de formules de calcul		X	X
Mesures on-line		X	X
Modèles de rapports		X	X
Archivage des données sous forme d'arborescence		X	X
Signatures électroniques			X
Allocation de droits d'accès via 3 groupes d'utilisateurs			X
Audit-Trail			X



Accessoire(s)

Réf.

Câble pour le raccordement des enregistreurs de données testo 175 et testo 176 au PC, mini-USB sur USB	0449 0047	
Carte SDHC (4Go) pour la récupération des données sur les enregistreurs testo 175 et testo 176; Plage d'utilisation jusqu'à -20 °C	200554 1700	
Interface USB pour configuration et relecture des enregistreurs testo 174T et testo 174H	0572 0500	

0992 4013/san/A/04.2012

Sous réserve de modifications sans préavis



Testo S.à.r.l.
Immeuble Testo
19, rue des Maraîchers
57600 FORBACH
Tél.: 03 87 29 29 29
Fax: 03 87 29 29 18
info@testo.fr