

# Accessoires CTX™

Pour une large gamme de tests

Certains accessoires du CTX ont des applications multiples, d'autres sont dédiés à des applications et des domaines industriels spécifiques. Les codes couleur ci-dessous permettent d'identifier facilement les industries concernées.

- C** COSMÉTIQUE
- F** ALIMENTAIRE
- G** EMBALLAGE
- P** PHARMACEUTIQUE
- T** TENSION


## Cellule d'extrusion double



Cellule d'extrusion double pour l'extrusion vers l'avant ou l'arrière de purées de fruits, puddings, yaourts ou des produits similaires. Table de base de montage requise.

TA-DEC **C F P**

## Dispositif test d'étalement

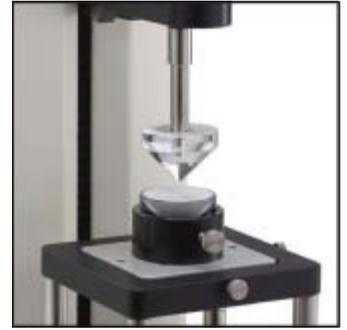

Dispositif de test d'étalement destiné à quantifier la force d'étalement d'un matériau. Livré avec 1 cône mâle, 5 coupes échantillons et 1 support de coupe. Table de base requise.

TA-STF **G F P**

## Lame de cisaillement 1 mm



Pour essai de cisaillement : viande, poisson, saucisse, etc. TA-SBA-WB-3 en option pour des lames de 3 mm. Table de base de montage requise. TA-SBA-WB-1 **F**


## Lame de cisaillement



Utilisé pour les tests de découpe de la viande, du poisson, de la volaille ou des produits similaires. Table d'essai ou plateau tournant recommandé.

TA-52 MOHRS **F**

## Système de pliage 3 points

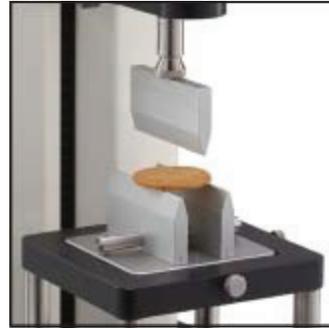

Utilisé avec la lame TA7 du kit de sonde. Version à petite échelle TA-JTPB est disponible. Table de base de montage requise.

TA-TPB **F**

## Plaque supérieure de compression



Pour appliquer des forces de compression uniformes sur des échantillons jusqu'à 10 x 15 cm. Table de base de montage requise.

TA-CTP **F**

## Système d'extensibilité des pâtes



Pour maintenir une feuille de pâte crue ou du pain plat et mesurer le point de rupture d'un échantillon étiré. Sonde à bille non incluse. Table de base de montage requise.

TA-DE **F**

## Système d'extensibilité des nouilles



Pour évaluer la qualité des nouilles en s'étirant avec le test de tension. Table de base de montage requise.

TA-NTF **F T**

## Cellule Ottawa (447cc)



Pour compression en vrac pour déterminer la dureté et le croustillant de céréales, de légumes ou de fruits. Table de base de montage requise.


TA-OC-002 **F**

# Accessoires CTX™

Nous avons beaucoup plus d'accessoires qui ne sont pas montrés ici, et tous sont compatibles sur les texturomètres CTX et CT3.

- C COSMÉTIQUE
- F ALIMENTAIRE
- G EMBALLAGE
- P PHARMACEUTIQUE
- T TENSION

## Cylindre AACC

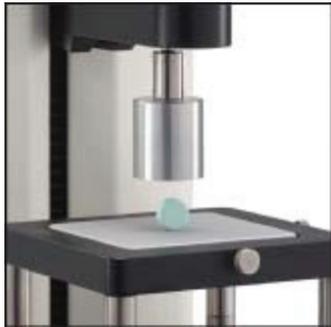

Pour mesurer la force de vos tablettes, les forces de liaison entre les ingrédients actifs et les excipients. Table de base de montage requise.  
TA-AACC36 P

## Sonde guillotine



Pour mesurer la force de cisaillement pour couper un comprimé de deux parties ou une capsule à l'aide d'une lame de guillotine. Table de base de montage requise.  
TA-BLS P

## Assemblage de sondes multiples



Composé de 9 sondes de 3 mm et d'une plaque de base conçue pour le maintien de 9 petits échantillons de forme irrégulière. Table de base requise.  
TA-JMPA P

## Test de seringue



Pour mesurer la force nécessaire pour pousser ou tirer le piston d'une seringue. Test important pour tous les types de seringues. Table de base requise.  
TA-STJ P

## General Peeling Jig



Mesure la force d'adhérence nécessaire pour retirer le couvercle d'un container fermé hermétiquement à des angles de 0°, 45° et 90°.  
TA-GPJ T

## Adjustable Vice Jig



Pour le maintien de petits échantillons lors des tests de perforation. Recommandé pour les bonbons, les gommes, etc. Table de base rotative requise.  
TA-AVJ T F G

## Poignée double



Dispositif à poignée double pour des essais de traction des films fins ou l'intégrité des scellés pour l'emballage.  
TA-DGF T P G

## Système de friction coulissant



Ce système de friction coulissant mesure le coefficient de friction de matériaux d'emballage selon ASTM D1894.  
TA-SFJ T G