

SURVEILLANCE DE TEMPÉRATURE, HUMIDITÉ ET AUTRES PARAMÈTRES SUR LE WEB

■ DESCRIPTION

Thermotrack Webservice est une plateforme sur le Cloud dédiée à la surveillance de températures, humidité et autres paramètres physiques, pour chambres froides, congélateurs, climatisations laboratoires, industries, etc. Fonctionne avec différents capteurs et technologies : FoxNet, Sensor Net Connect, Thermo Boutons, Sigfox, GSM.

Pas de logiciel compliqué à installer. Depuis tout PC, tablette ou smartphone connecté à internet, un identifiant et un mot de passe suffisent pour paramétrer les sondes, les seuils d'alerte, les utilisateurs. En cas d'alarme, les alertes sont envoyées par Email, SMS, Sirène. Les données sont conservées 10 ans.

■ FONCTIONS



SURVEILLANCE
24/7



MULTI-UTILISATEURS




ALARMES PAR EMAIL
SMS - SIRÈNE



HISTORIQUE SUR 10 ANS



CONFORME FDA - CFR21 PART 11

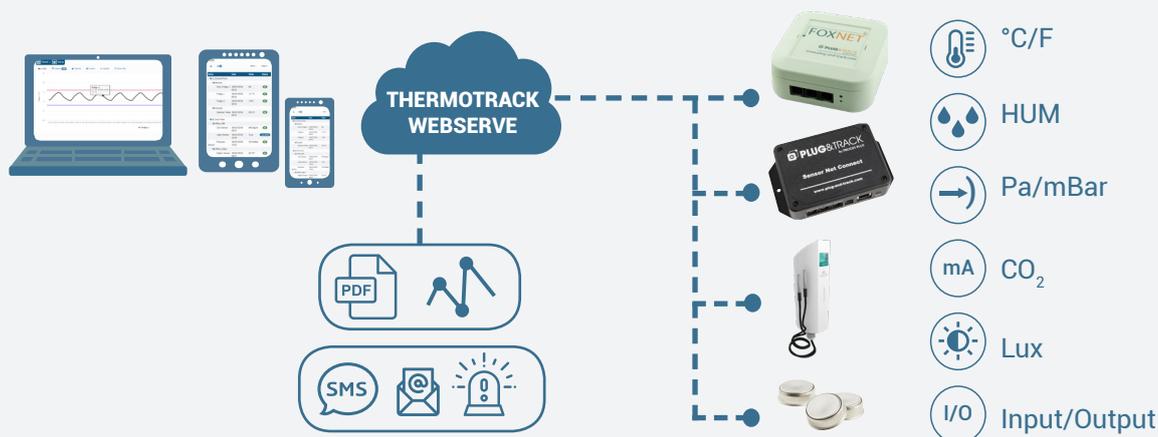

FONCTIONS PRINCIPALES

- Surveillance en temps réel de vos équipements critiques
- Alarmes par email, SMS, Sirène
- Archivage automatique des données

AVANTAGES

- Différents types de sondes, 1 seule application
- Multi sites, multi utilisateurs
- Centralisation et partage des données
- Accès depuis tout PC, Smartphone, tablette
- Archivage sécurisé garanti 10 ans

FONCTIONS DÉTAILLÉES

- Page d'accueil avec liste des sondes ou plans
- Affichage des courbes avec niveaux d'alarme et zoom à la souris
- Liste des valeurs avec **Min, Max, Moyennes et MKT**
- Affichage des 24 dernières heures et **historique sur 10 ans**
- Envoi d'alarme par **Email, SMS et Pop-up**
- Acquiescement des alarmes avec saisie d'action corrective
- Bloc-Notes intégré pour ajout de commentaires
- Impression des courbes
- Impression des listes de valeurs
- Impression des listes d'alarmes
- Export vers **Excel**
- Rapports PDF automatisés envoyés par Email
- Accès sécurisé par **login et mot de passe**
- Gestion des préférences et droits utilisateurs :
 - Restrictions d'accès par Lieux, Zones ou Equipements
 - Langue (Français, Anglais, Espagnol, Allemand)
 - Format de dates
 - Format des températures (°C ou F)
- Conforme **FDA - CFR21 Part 11**



STOCKAGE



AGRO-ALIMENTAIRE



SANTÉ
PHARMA




RECHERCHE



Item name : Door_Fridge_1
Date : 19/07/2018 09:21
Value : 0°C
Instructions : 0°C/0°C
Status : OK
Serial number : 75000000D696DE12

Item name : External-Temp
Date : 19/07/2018 09:21
Value : 27.4°C
Instructions : 0°C/25°C
Status : OK
Serial number : E80000041CFA0328

Items	Date	Value	Status
▼ A_Ground-Floor			
▼ Kitchen			
Door_Fridge_1	29/08/2018 16:23	OK	OK
Fridge_1	29/08/2018 16:23	6.6°C	OK
Fridge_2	29/08/2018 16:23	3°C	OK
▼ Outside			
External-Temp	29/08/2018 16:08	18.4°C	OK
▼ B_First-Floor			
▼ Office_BM			
CO2-Sensor	29/08/2018 16:13	1389.4ppm	OK
Light-Sensor	29/08/2018 16:21	1559Lux	High alarm
Pressure-Sensor	29/08/2018 16:23	1006mBar	OK
▼ Office_Sales			
Sigfox-Sensor	29/08/2018 15:15	23.5°C	OK
▼ C_Mouvoux			
▼ Toilette			
Congélateur	29/08/2018 15:57	-21°C	OK

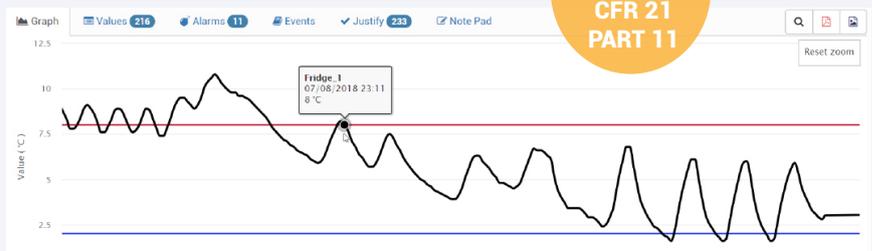

- FR
- EN
- ESP
- DE

FOCUS SUR...

ACCÈS SÉCURISÉ À TOUS, PARTOUT

Accédez à vos données depuis tout PC, tablette ou smartphone. Grâce au Cloud, **aucun logiciel ou Application à installer.**

Donnez un identifiant et un mot de passe à toutes les personnes que vous voulez et contrôlez qui peut modifier les réglages

GESTION DES ALERTES

Recevez les alertes par **Email, SMS, alarmes sur PC, Sirène.** Choisissez les destinataires pour chaque sonde : uniques, multiples, en cascade.

Les SMS sont envoyés par Thermotrack. Pas besoin d'un abonnement GSM

