

Référence 4120C–Chiffonnette 34x16cm, 10mL bouillon neutralisant, sachet bleu déchirable à refermeture, par 25 pièces

Référence Humeau : 757.001000.02

Usages

Contrôles après désinfection en agro-alimentaire

Caractéristiques

- Chiffonnette bleue, non-tissé, structure alvéolée dimensions 34 x 16 cm
- Imprégnation « **BN** » :
10 ml d'eau peptonée tamponnée à 10 % de neutralisant
L'agent neutralisant empêche l'action inhibitrice des résidus de désinfectants et antiseptiques (voir composition du neutralisant)
Dose reproductible et calibrée
- Sachet bleu déchirable, 18 x 30 cm, à refermeture par lien métallique, avec zone d'identification
- Version économique :
25 pièces dans sachet zip 30 x 40 cm




Conditionnement de vente

Pack de 25 pièces

Stérilisation et traçabilité

- Ionisation par rayons gamma dose ciblée de 15 kilograys
étiquette témoin de stérilisation et certificat pour chaque carton
- Durée de validité : 1 an à partir de la date de stérilisation
- Sur chaque dispositif : référence, libellé, n° de lot, code diluant et date de validité

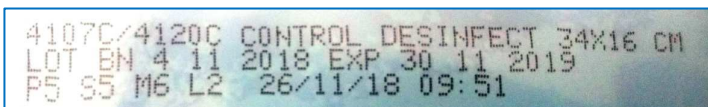

Distribué par :

Z.A de Gesvrine – 4 rue Képler – B.P.4125
44241 La Chapelle-sur-Erdre Cedex – France
t. : +33 (0)2 40 93 53 53 | f. : +33 (0)2 40 93 41 00
commercial@humeau.com



Maj JLN
10/12/18