

**Référence 4031 - Chiffonnette 34 x 37 cm, bouillon neutralisant,
sachet déchirable à refermeture, par 25 pièces**
Référence Humeau : 757.001400.02

Usages

Contrôles après désinfection en élevages et en agro-alimentaire

Caractéristiques

- Chiffonnette blanche, non-tissé, structure alvéolée
dimensions 34 x 37 cm
- Imprégnation « **BN** » :
25 ml d'eau peptonée tamponnée à 10% de neutralisant
L'agent neutralisant empêche l'action inhibitrice
des résidus de désinfectants et antiseptiques
(voir composition du neutralisant)
Dose reproductible et calibrée
- Sachet déchirable 18 x 30 cm à refermeture par lien
métallique, comprenant protocole de prélèvement
imprimé en vert avec zone d'identification
- Version économique :
25 pièces dans un sachet zip 30 x 40 cm




Conditionnement de vente

Carton de 175 pièces (7 x 25 pièces)
Dimensions du carton 40 x 30 x 30 cm environ
Poids du carton 8.5 kg environ

Stérilisation et traçabilité

- Ionisation par rayons gamma dose ciblée de 15 kilograys
étiquette témoin de stérilisation et certificat pour chaque carton
- Durée de validité : 1 an à partir de la date de stérilisation
- Sur chaque dispositif : référence, libellé,
n° de lot, code diluant et date de validité

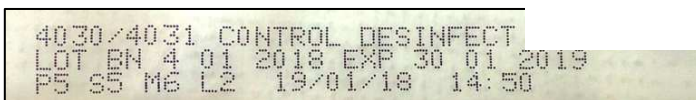

Distribué par :

Z.A de Gesvine - 4 rue Képler - B.P.4125
44241 La Chapelle-sur-Erdre Cedex - France
t. : +33 (0)2 40 93 53 53 | f. : +33 (0)2 40 93 41 00
commercial@humeau.com



Maj JLN
10/12/18