



SÉRIE 790+**EN 14470-1 EN 1363-1 FM 6050****ARMOIRES DE SÉCURITÉ - EN 14470-1 & FM⁽¹⁾
105 minutes pour produits inflammables**

Pictogramme normalisé

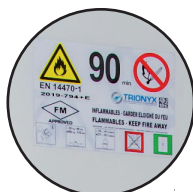

Étagères de rétention

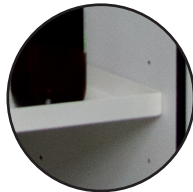

Moving by pallet truck (empty)




795+E + C235



Ferme-porte avec thermofusible



Fermeture à clef

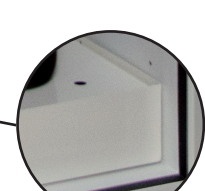

Bac de rétention amovible



APPROVED

CONFORMITÉ

- Testées et homologuées à la norme EN 14470-1 (04/2004) et EN 1363-1 (06/2000)
- Testées et homologuées 10 minutes à la norme FM 6050 (Factory Mutual International)
- Pictogrammes normalisés conformes aux normes ISO 3864, ISO 7010 et à la directive 92/58/CEE et à la norme EN 14470-1 (04/2004)

AVANTAGES

- Résistance au feu de 105 minutes selon la courbe normalisée ISO 834.
- Testées au feu et homologuées par un laboratoire européen indépendant.
- Poignée sur toute la hauteur de l'armoire pour une meilleure ergonomie et une facilité d'ouverture
- Piètement permettant un déplacement aisé par transpalette : évite les lourdes manipulations et permet de déplacer aisément l'armoire en cas de nouvel aménagement
- Cache-plinthe esthétique et simple d'utilisation sans nécessité d'outil de fixation
- Roulettes de mise en place incluses pour les modèles 791+ et 792+.

SÉCURITÉ PASSIVE

- Construction double paroi :
 - Parois extérieures en acier 12/10ème, recouvertes de peinture époxy blanche RAL 9010.
 - Parois intérieures en mélaminé blanc RAL 9010.
- Panneaux d'isolation thermique entre les parois limitant les ponts thermiques.
- Bac de rétention amovible en partie basse.
- Signalisation par symboles normalisés.
- Étagères de rétention réglables (au pas de 6,4 cm).
- Point de fixation pour mise à la terre.

SÉCURITÉ ACTIVE

- Orifices de ventilation avec sortie de ventilation Ø 100 mm pour raccordement éventuel.
- Conduits de ventilation avec système thermofusible permettant d'isoler le contenu de l'armoire en cas d'incendie.
- Joints de porte thermomodulants.
- Portes à fermeture automatique et fermeture à clef.
- Système de maintien des portes en position ouverte avec fermeture automatique thermorégulée à 47°C.

OPTIONS

- Étagère supplémentaire
- Caillebotis pour bac de rétention
- Tiroir/bac de rétention coulissant
- Surprotections en PVC
- Caissons de ventilation ou de filtration
- Tapis absorbants à placer au fond du bac de rétention (paquets de 10 feuilles)
- Possibilité de portes de couleur sur les modèles 794+ et 795+ :
 - Bâti et étagère blancs RAL 9010; **porte(s) jaune(s) RAL 1023.**
- Serrure à code (1 par porte)

Système de réfrigération

Afin d'augmenter la sécurité de votre armoire et de contrôler la température à l'intérieur de celle-ci, nous vous proposons un système de réfrigération. Consultez-nous plus d'informations.



SÉRIE 790+**EN 14470-1 EN 1363-1 FM 6050**

794+E + C148*



795+EJ*



* Option serrure à code SERCODE (1 par porte)

ARMOIRES PRÉ-ÉQUIPÉES

Référence pour porte	Description	Type	Nombre de porte(s)	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Fournie avec		Poids max. par étagère (kg)	Poids (kg)	
						Etagère de rétention	Bac de rétention			
blanche	jaune									
791+E	-	Armoire équipée	sous paillasse	1	630 x 635 x 570 ⁽¹⁾	30	1	1	30	127
791T+	-	Armoire équipée	sous paillasse	1	630 x 635 x 570 ⁽¹⁾	30	-	1	30	155
792+E	-	Armoire équipée	sous paillasse	2	630 x 1137 x 570 ⁽¹⁾	60	1	1	50	213
792T+	-	Armoire équipée	sous paillasse	1	630 x 1137 x 570 ⁽¹⁾	60	-	1	50	240
793+E	-	Armoire équipée	comptoir	2	1100 x 1137 x 670 ⁽²⁾	115	2	1	30	297
798+E	-	Armoire équipée	comptoir	1	1100 x 635 x 670 ⁽²⁾	65	2	1	40	182
794+E	794+PJE	Armoire équipée	haute	1	1950 x 635 x 620 ⁽³⁾	130	3	1	50	287
795+E	795+PJE	Armoire équipée	haute	2	1950 x 1137 x 620 ⁽³⁾	250	3	1	30	453
795+900E	-	Armoire équipée	haute	2	1950 x 905 x 620 ⁽³⁾	200	3	1	46	438

ARMOIRES NON-ÉQUIPÉES

Référence	Description	Type	Nombre de porte(s)	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Poids (kg)
791+	Armoire livrée nue, à équiper	sous paillasse	1	630 x 635 x 570 ⁽¹⁾	420 x 490 x 285	122
792+	Armoire livrée nue, à équiper	sous paillasse	2	630 x 1137 x 570 ⁽¹⁾	420 x 1000 x 285	203
793+	Armoire livrée nue, à équiper	comptoir	2	1100 x 1137 x 670 ⁽²⁾	820 x 1000 x 410	277
798+	Armoire livrée nue, à équiper	comptoir	1	1100 x 635 x 670 ⁽²⁾	820 x 490 x 410	171
794+	Armoire livrée nue, à équiper	haute	1	1950 x 635 x 620 ⁽³⁾	1620 x 490 x 410	277
795+	Armoire livrée nue, à équiper	haute	2	1950 x 1137 x 620 ⁽³⁾	1620 x 1000 x 410	435
795+900	Armoire livrée nue, à équiper	haute	2	1950 x 905 x 620 ⁽³⁾	1620 x 765 x 410	420

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

Référence	Description	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Poids (kg)
E1	Étagère de rétention pour armoire 1 porte type 791+	30 x 490 x 285	3
E2	Étagère de rétention pour armoire 2 portes type 792+	30 x 1000 x 285	6
E48	Étagère de rétention pour armoire 1 porte - L : 635 - P : 670 mm ⁽¹⁾	30 x 490 x 410	3
E35	Étagère de rétention pour armoire 2 portes - L : 1135 - P : 670 mm	30 x 1000 x 410	6
E235-900	Étagère de rétention pour armoire 2 portes - L : 900 - P : 670 mm	30 x 765 x 410	6
B1	Bac de rétention pour armoire 1 porte type 791+	100 x 490 x 285	3
B2	Bac de rétention pour armoire 1 porte type 792+	100 x 1000 x 285	6
B48	Bac de rétention pour armoire 1 porte - L : 635 - P : 670 mm	100 x 480 x 410	5
B35	Bac de rétention pour armoire 2 portes - L : 1135 - P : 670 mm	100 x 1000 x 410	10
B235-900	Bac de rétention pour armoire 2 portes - L : 900 - P : 670 mm	100 x 765 x 410	10
C1	Caillebotis pour armoire 1 porte type 791+	90 x 480 x 315	3
C2	Caillebotis pour armoire 1 porte type 792+	90 x 990 x 315	6
C48	Caillebotis pour bac de rétention pour armoire 1 porte - L : 635 - P : 670 mm	90 x 460 x 390	4
C35	Caillebotis pour bac de rétention pour armoire 2 portes - L : 1135 - P : 670 mm	90 x 990 x 400	8
C235-900	Caillebotis pour bac de rétention pour armoire 2 portes - L : 900 - P : 670 mm	90 x 755 x 400	8
C1T	Caillebotis pour bac pour armoire 1 porte tiroir 791T+	80 x 430 x 390	8
C2T	Caillebotis pour bac pour armoire 1 porte tiroir 792T+	80 x 940 x 390	8
T48	Tiroir/bac coulissant pour armoire 1 porte - L : 635 mm - P : 670 mm	80 x 420 x 380	6
T35	Tiroir/bac coulissant pour armoire 2 portes - L : 1135 mm - P : 670 mm	80 x 930 x 380	12
T235-900	Tiroir/bac coulissant pour armoire 2 portes - L : 900 mm - P : 670 mm	80 x 695 x 380	12
SE48	Surétagère rétention PVC pour E48 (pour modèle E35, 2 pièces par niveau)	30 x 488 x 377	3
SB48	Bac de rétention en PVC pour armoire à 1 porte en L : 670 mm Pour les modèles à 2 portes en L : 1135, prévoir 2 pièces par niveau	100 x 471 x 409	5
TP48	Toit en pente pour armoire 1 porte - L : 635 mm - P : 670 mm	235 x 640 x 620	10
TP35	Toit en pente pour armoire 2 portes - L : 1135 mm - P : 670 mm	235 x 1140 x 620	20
SERCODE	Serrure à code numérique	-	-

(1) Profondeur avec le manchon de raccordement à l'arrière. Profondeur sans manchon : 520 mm
(2) Profondeur avec le manchon de raccordement à l'arrière. Profondeur sans manchon : 620 mm
(3) Hauteur avec le manchon de raccordement au-dessus. Hauteur sans manchon : 1900 mm

Armoires inflammables

Armoires corrosifs

Armoires toxiques et multirisques

Gamme phytosanitaires

Hottes et armoires à filtration - Ventilation

Rétention et Réceptifs

Armoires à documents Équipements anti-feu

Douches et premiers secours