### 3M<sup>™</sup> Clean-Trace<sup>™</sup>

Tests d'hygiène rapide






Une solution complète pour le contrôle d'hygiène rapide par ATPmétrie alliant un appareil léger et ergonomique, un logiciel HACCP en français et des écouvillons simples d'utilisation.

### Le triptyque gagnant : un appareil, un logiciel, des écouvillons

### 3M™ Clean-Trace™ Luminomètre NG, un appareil précis et simple d'utilisation

- Photomultiplicateur pour des mesures fiables et reproductibles
- Design ergonomique et portabilité aisée pour une utilisation directe sur site
- Transferts rapides des données sur PC par la station d'accueil et grâce au câble USB
- Logiciel didactique en français
- ▶ Batterie rechargeable

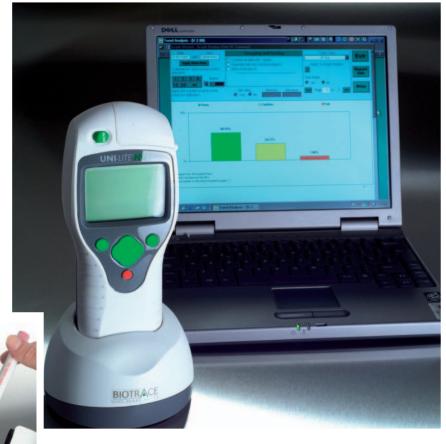


#### Caractéristiques

- Poids: 400 g
- Autonomie: 10 heures
- Capacité d'enregistrement : 10000 résultats
- Nombre de plans de prélèvement dans l'appareil : 100 maximum
- Nombre de points de prélèvement par plan : 300 maximum
- Nombre de points de prélèvement dans l'appareil : 2000 maximum
- Prologiciel en français
- Possibilité d'enregistrer les retests
- Batterie au Lithium-ion



#### Un logiciel complet pour votre plan de contrôle

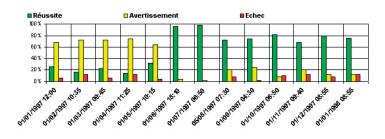

Plan d'échantillon : Tous les plans ID site: Test ID 2 Développé pour répondre aux exigences d'une démarche HACCP, le logiciel de management des données 3M Clean-Trace permet de programmer des plans de contrôle à charger sur le luminomètre. Les résultats seront affichés sur une échelle décimale en URL\* pour une lecture et une interprétation facilitées. Simple d'utilisation et en français, ce logiciel sera votre nouvel assistant pour vos contrôles d'hygiène rapides et votre traçabilité.

\*URL: Unité Relative de Lumière

#### Contrôle des surfaces

L'écouvillon **3M**<sup>™</sup> **Clean-Trace**<sup>™</sup> **Surface ATP** permet d'obtenir, en quelques secondes, une information semi-quantitative sur l'état de propreté d'une surface.

- Mesure de l'ATP Total
- Etiquette métallisée
- Ecouvillon de grande longueur
- Mesure en 1 clic

### Contrôle des eaux de process

La technologie unique de l'écouvillon 3M™

Clean-Trace™ Eau - ATP Total permet de prélever un échantillon avec une grande précision.

- Mesure de l'ATP Total
- Etiquette métallisée
- Ecouvillon à spirale
- Mesure en 1 clic





Les tests  $3M^{\text{\tiny IM}}$  Clean-Trace  $^{\text{\tiny IM}}$  Surface Contrôle Positif ou  $3M^{\text{\tiny IM}}$  Clean-Trace  $^{\text{\tiny IM}}$  Eaux Contrôle Positif sont disponibles pour valider le bon fonctionnement de votre appareil.

# maximum de sûreté e alimentaire





## Le test 3M Clean-Trace Surface Protéine (Allergènes) permet la détection des résidus protéiques et sucres réducteurs en utilisant la réaction du biuret sur les surfaces et les eaux de process.

Sensibilité : 3 μg de protéines

Rapide: en 15 minutes

▶ Ecouvillonner, cliquer, incuber (55° C pendant 15 min), interpréter


♦ Stockage à température ambiante

Lecture simplifiée par code couleur



### Le test « tampon » pour les auto-contrôles HACCP : 3M™ Clean-Trace™ Surface - Test protéique (instantané)

Le test 3M Clean-Trace Surface - Test protéique (instantané) permet un contrôle immédiat de l'état d'une surface. Un virage coloré au vert indique une contamination par des résidus protéiques.

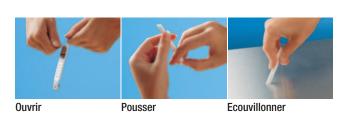



### Le test «stylo» pour les auto-contrôles HACCP : 3M™ Clean-Trace™ Surface - Test Protéique

Utilisant la réaction reconnue du biuret, **le test 3M Clean-Trace Surface Test Protéique** permet en détectant les résidus protéiques et les sucres réducteurs d'évaluer l'état de propreté des surfaces.

- Sensibilité: 50 μg
- Rapide: de 0 à 10 minutes
- ▶ Simple d'utilisation : écouvillonner, cliquer, interpréter
- Stockage à température ambiante
- Lecture simplifiée par code couleur









## maximum de sûreté e alimentaire

### **3M<sup>™</sup> Clean-Trace<sup>™</sup>**

Référence	Désignation	Conditionnement
6705	3M Clean-Trace - Batterie pour Luminomètre NG	1
6706	3M Clean-Trace - Chargeur pour Luminomètre NG	1
6704	3M Clean-Trace - Sacoche pour Luminomètre NG	1
6702	3M Clean-Trace - Station d'accueil pour Luminomètre	1
6701	3M Clean-Trace - Luminomètre NG	1
6750	3M Clean-Trace - Logiciel de management des données	1
6711	3M Clean-Trace Surface ATP	Coffret de 100
6713	3M Clean-Trace Eau ATP Total	Coffret de 100
6712	3M Clean-Trace Eau ATP Libre	Coffret de 100
6714	3M Clean-Trace Surface contrôle positif	Coffret de 10
6716	3M Clean-Trace Eaux - Contrôle positif (3 ng)	Coffret de 10
6715	3M Clean-Trace Eaux - Contrôle positif (30 ng)	Coffret de 10
6723	3M Clean-Trace Surface Test Protéine	Coffret de 50
6726	3M Clean-Trace Surface Test Protéique Instantané	Coffret de 50
6724	3M Clean-Trace Surface Test Protéique (Allergènes)	Coffret de 60



Département Microbiologie Laboratoires 3M Santé

Boulevard de l'Oise 95029 Cergy-Pontoise Cedex France

Tél : 01 30 31 85 77 Fax : 01 30 31 85 78 www.3msante.fr

