

Meubles fixes à portes coulissantes

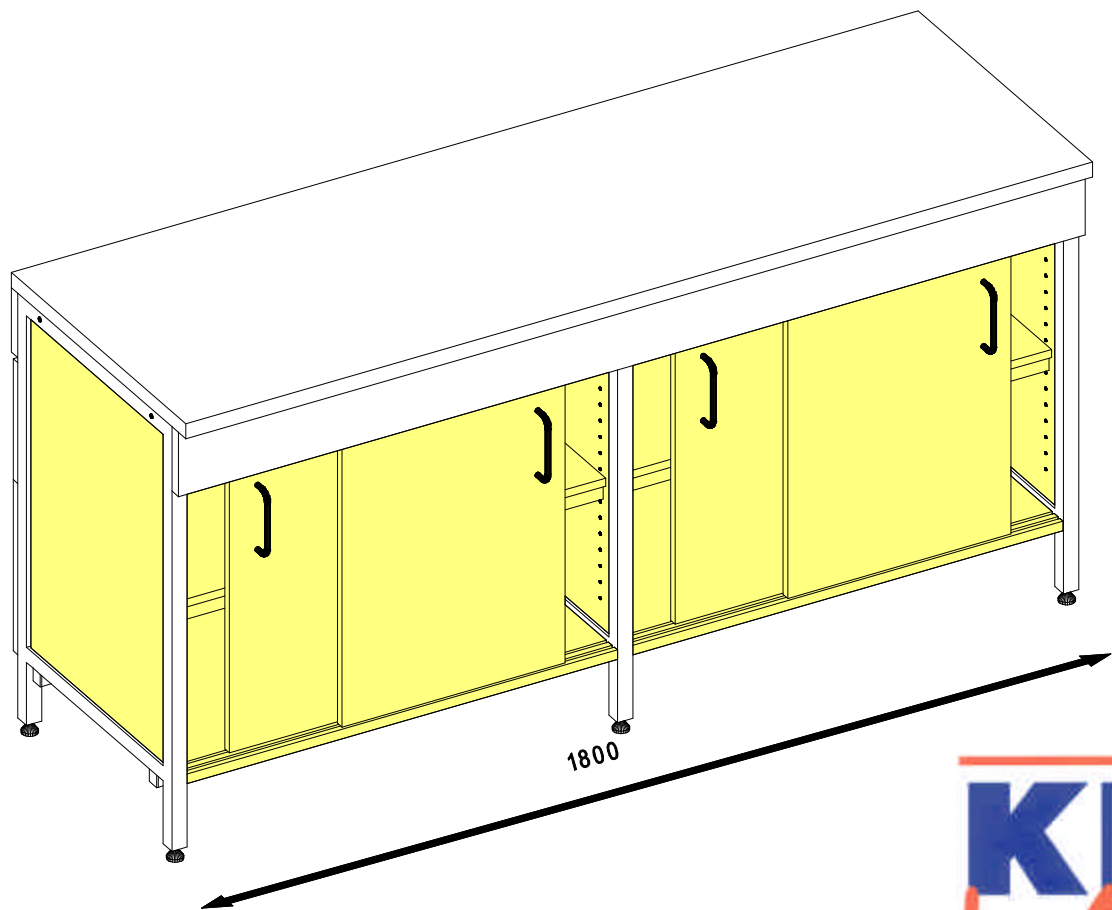
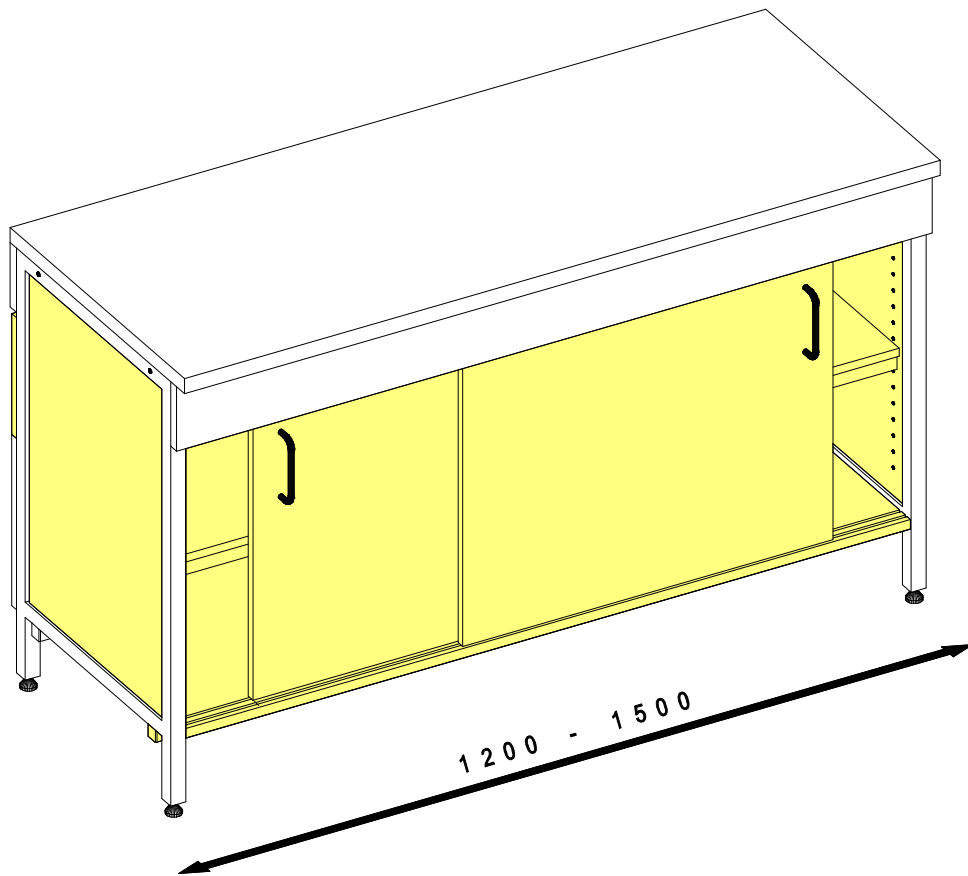


Schéma de montage des meubles fixes 1200-1500



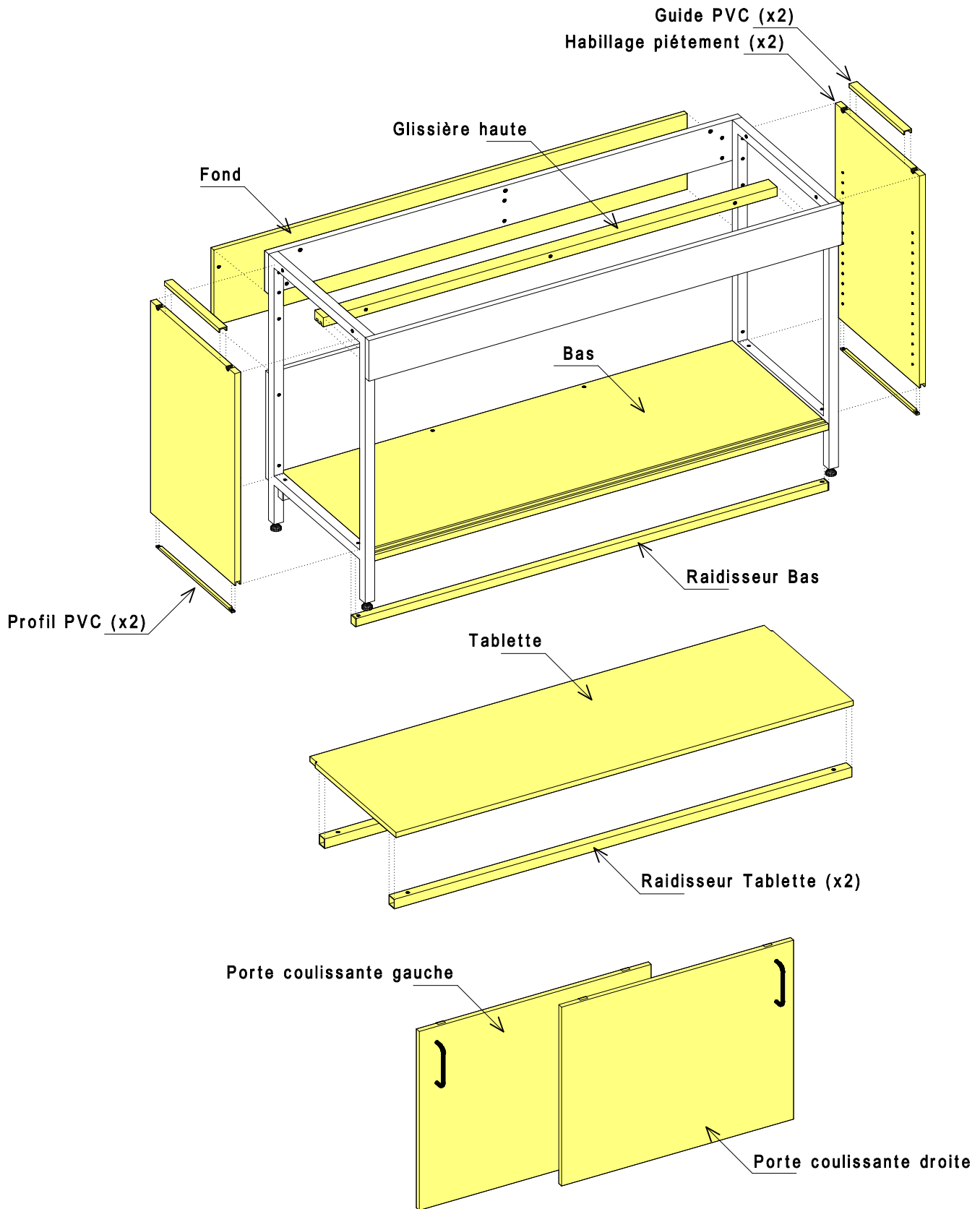
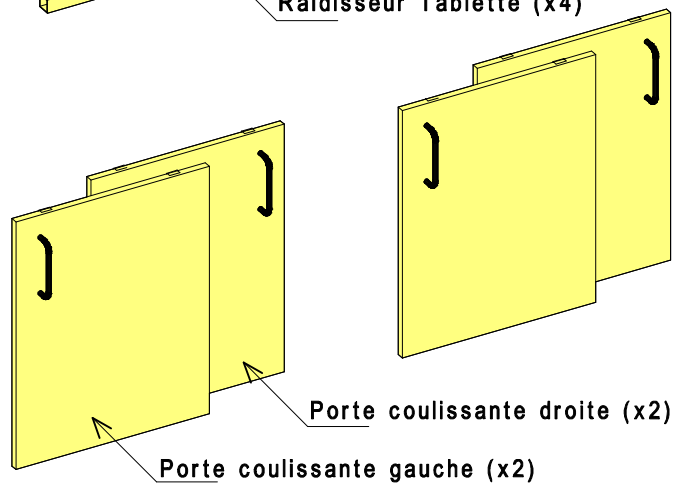
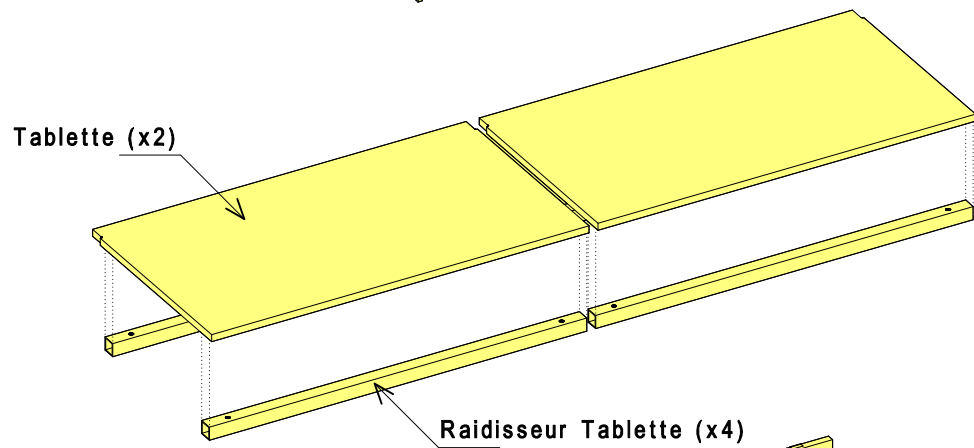


Schéma de montage des meubles fixes 1800

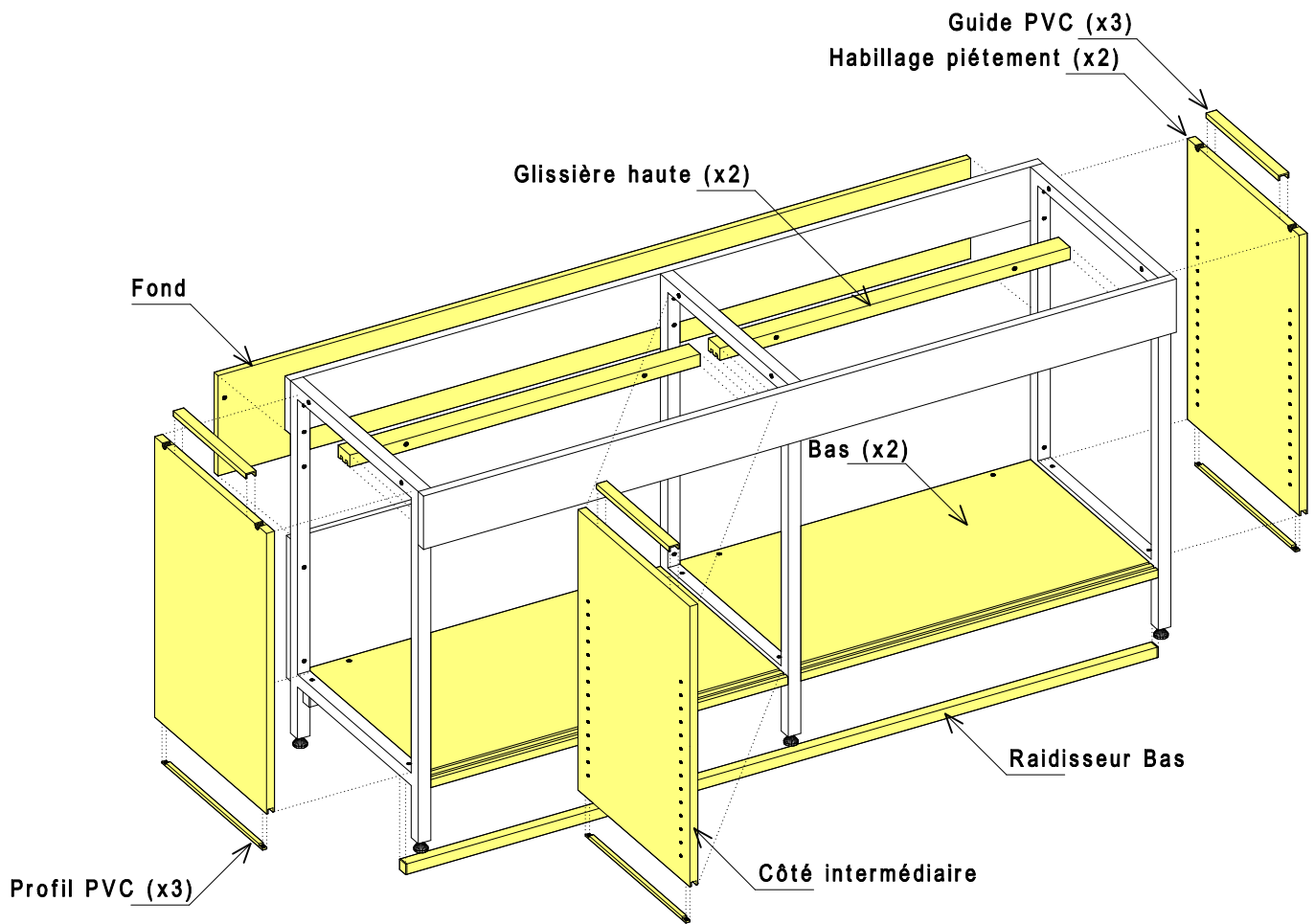


Nomenclature de la quincaillerie



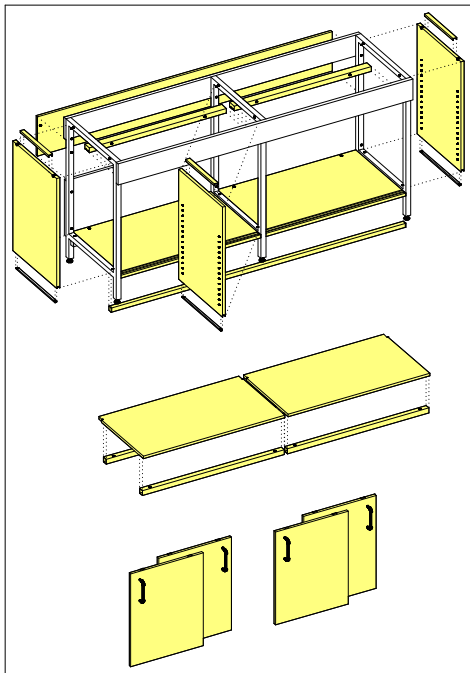


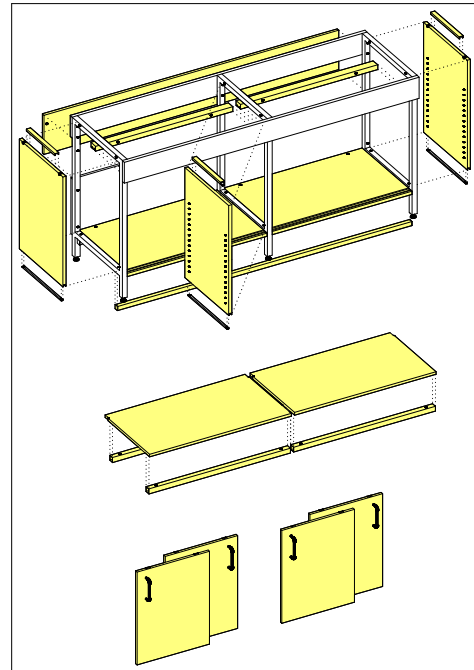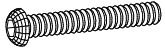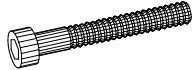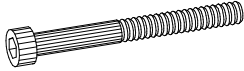
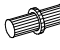
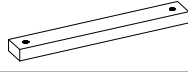

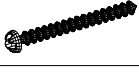
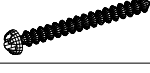
Meubles fixes de 1200-1500



Meubles fixes de 1800




PS : Pour les meubles à portes coulissantes de longueur 1800, 2 sachets de quincaillerie sont fournis

Désignation de la quincaillerie	Largeur 1200 Quantité	Largeur 1500 Quantité	Largeur 1800 Quantité	Quantité par sachet
 Vis Poëlier 6*40	6	6	11	6
 Vis TCHC 6*50	3	3	4	3
 Vis TCHC 6*65	4	4	6	4
 Ecrou borgne Diam. 6mm	4	4	6	4
 Manchon d'écartement	6	6	11	6
 Plot d'assemblage	2	2	4	2
 Taquet métallique Diam. 5mm	4	4	8	4
 Butée PVC Porte Coulissante	1	1	2	1
 Poignée fil	2	2	4	2
 Vis TR 4*30	4	4	8	4
 Vis TR 4*40	2	2	4	2

Mise en place de la glissière haute sur le bandeau avant de la paillasse

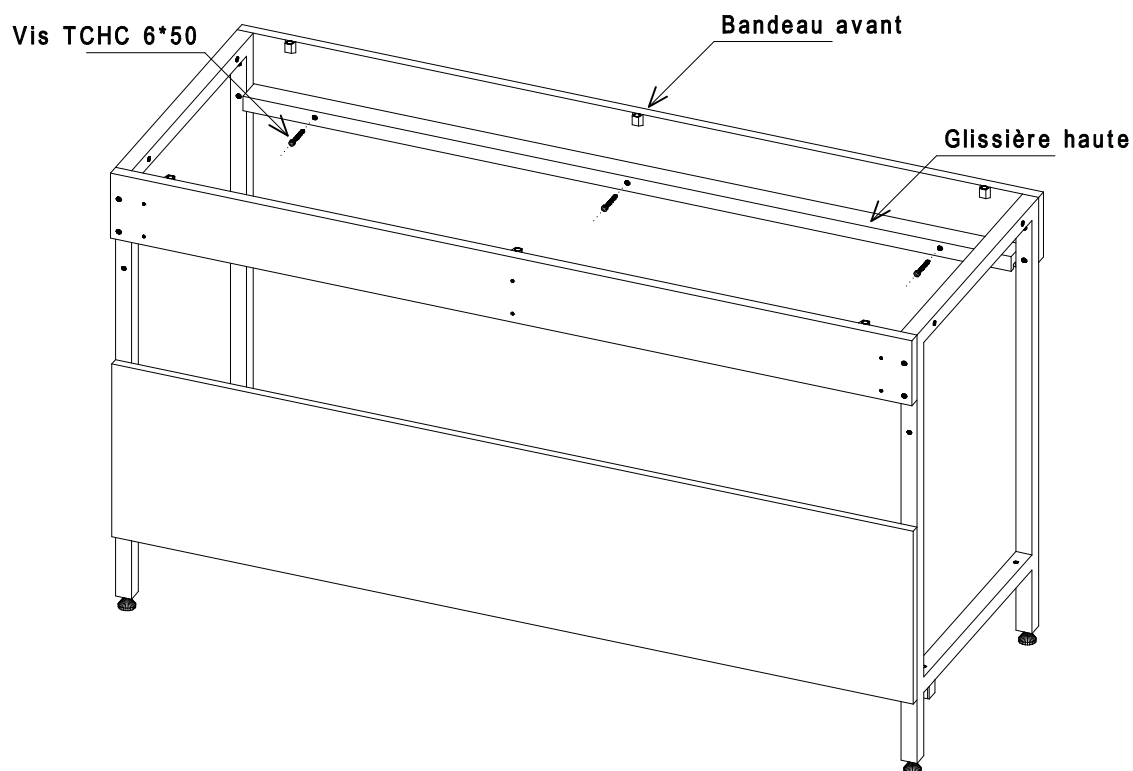
1



PS : La notice de montage décrit les étapes de montage des meubles fixes de 1200 et 1500
Le principe de montage des meubles fixes de 1800 est identique au montage des meubles de 1200 et 1500


Préparation du fond de placard

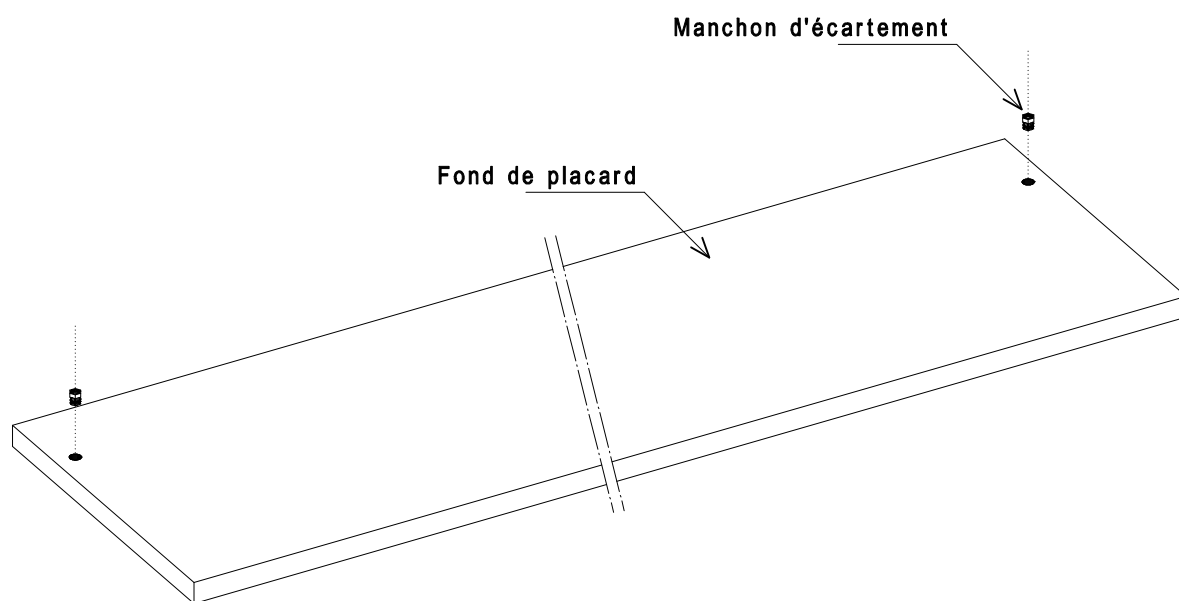2




Mise en place du fond sur la paillasse

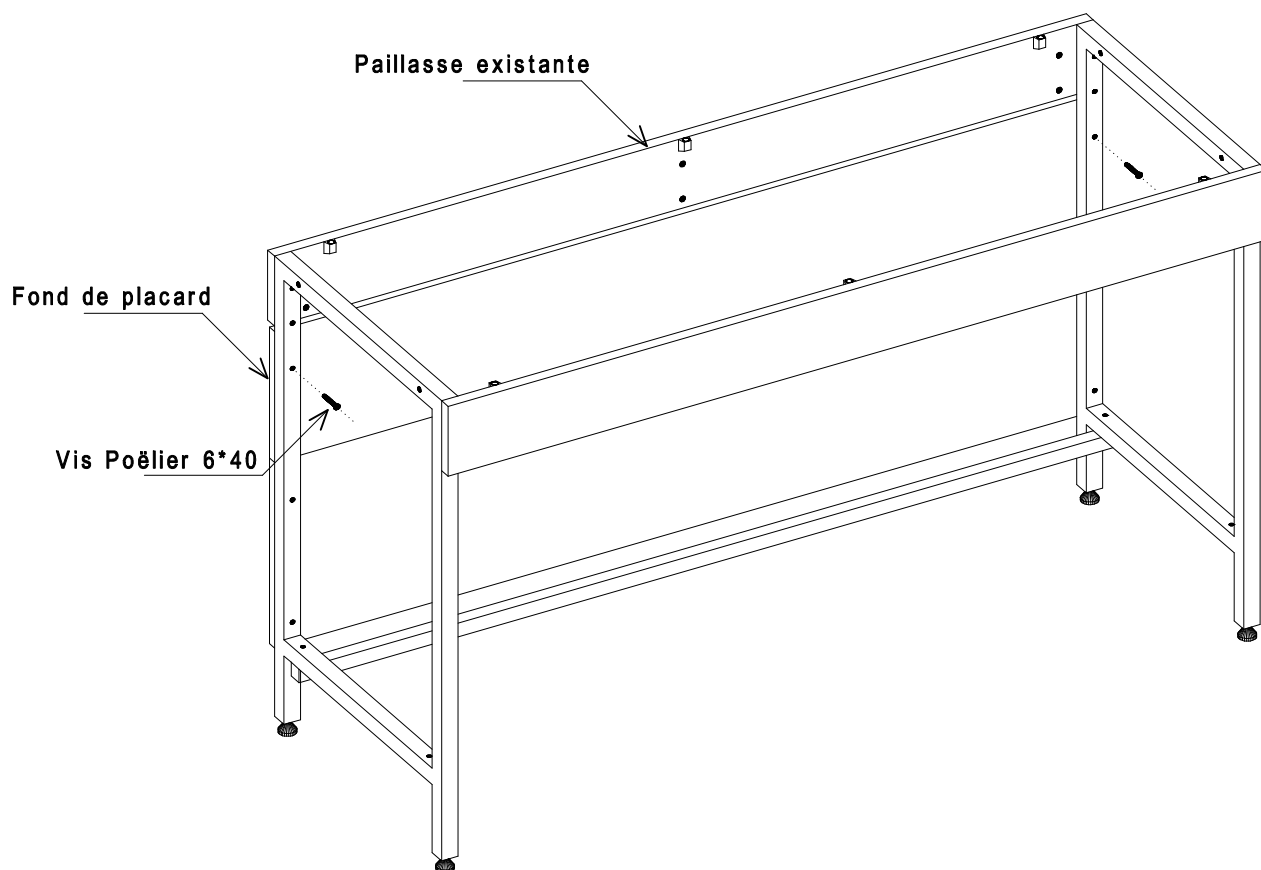3




Mise en place du raidisseur Bas et des guides PVC

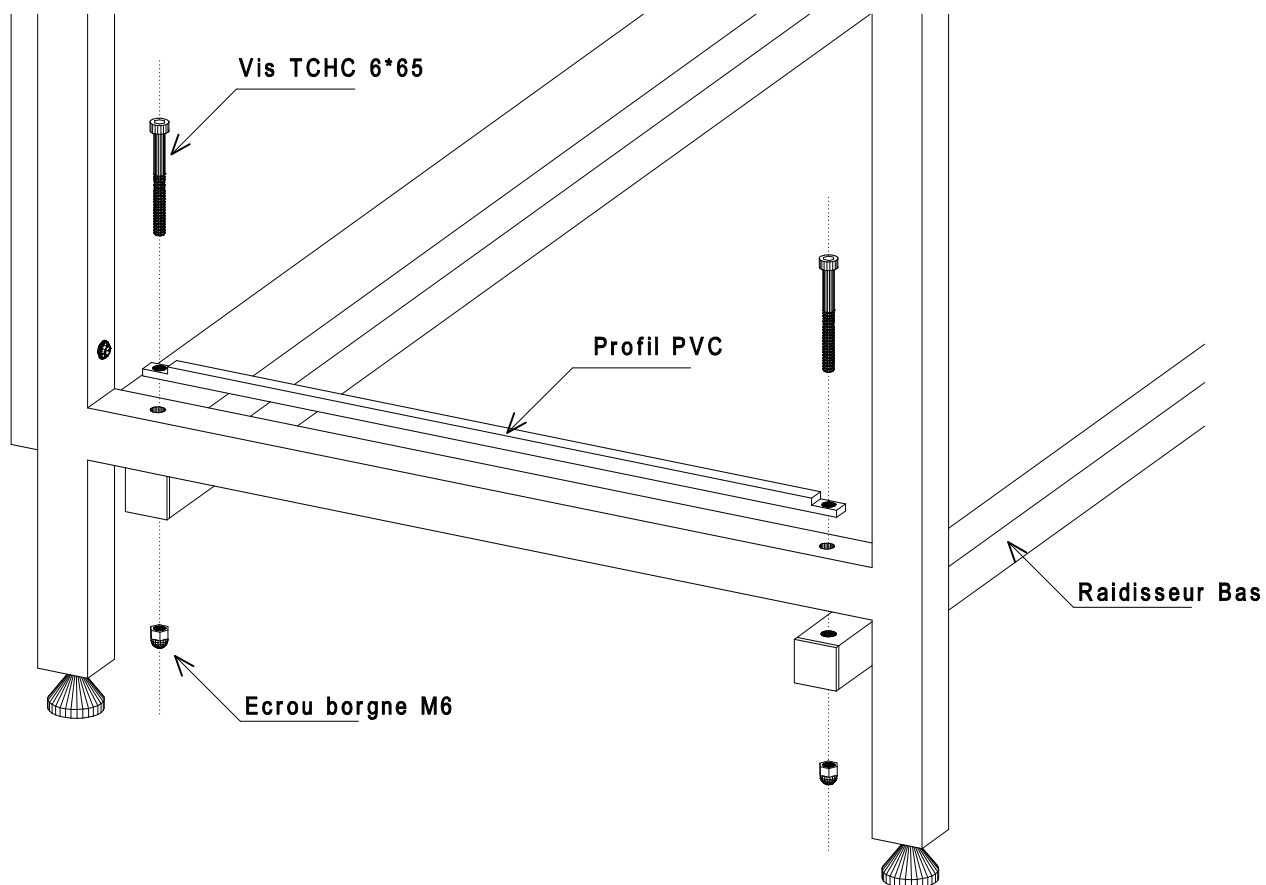4




Préparation du bas de placard

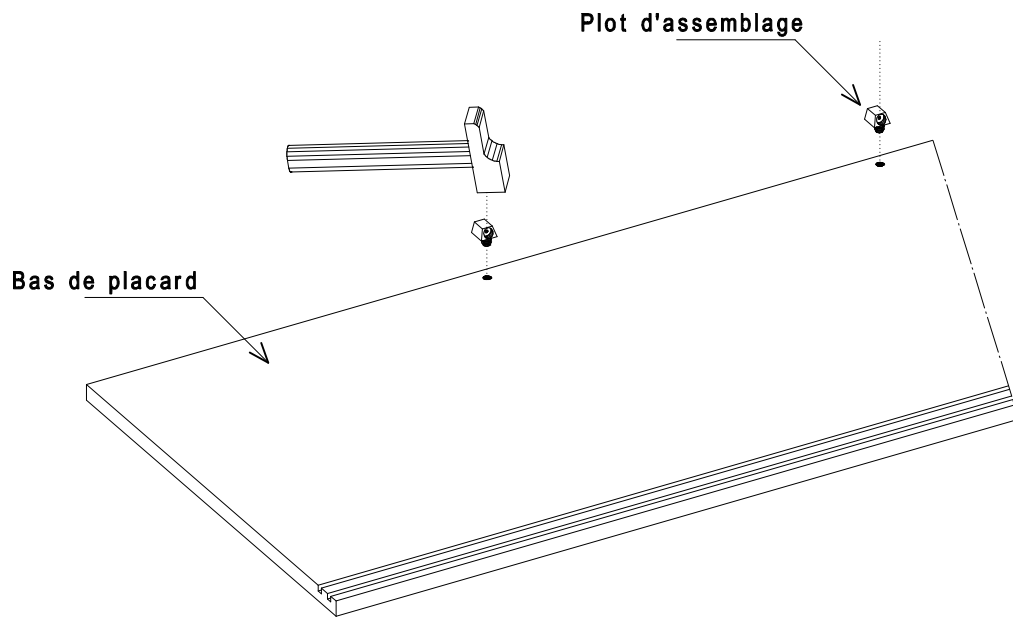5




Mise en place du bas de placard sur la paillasse

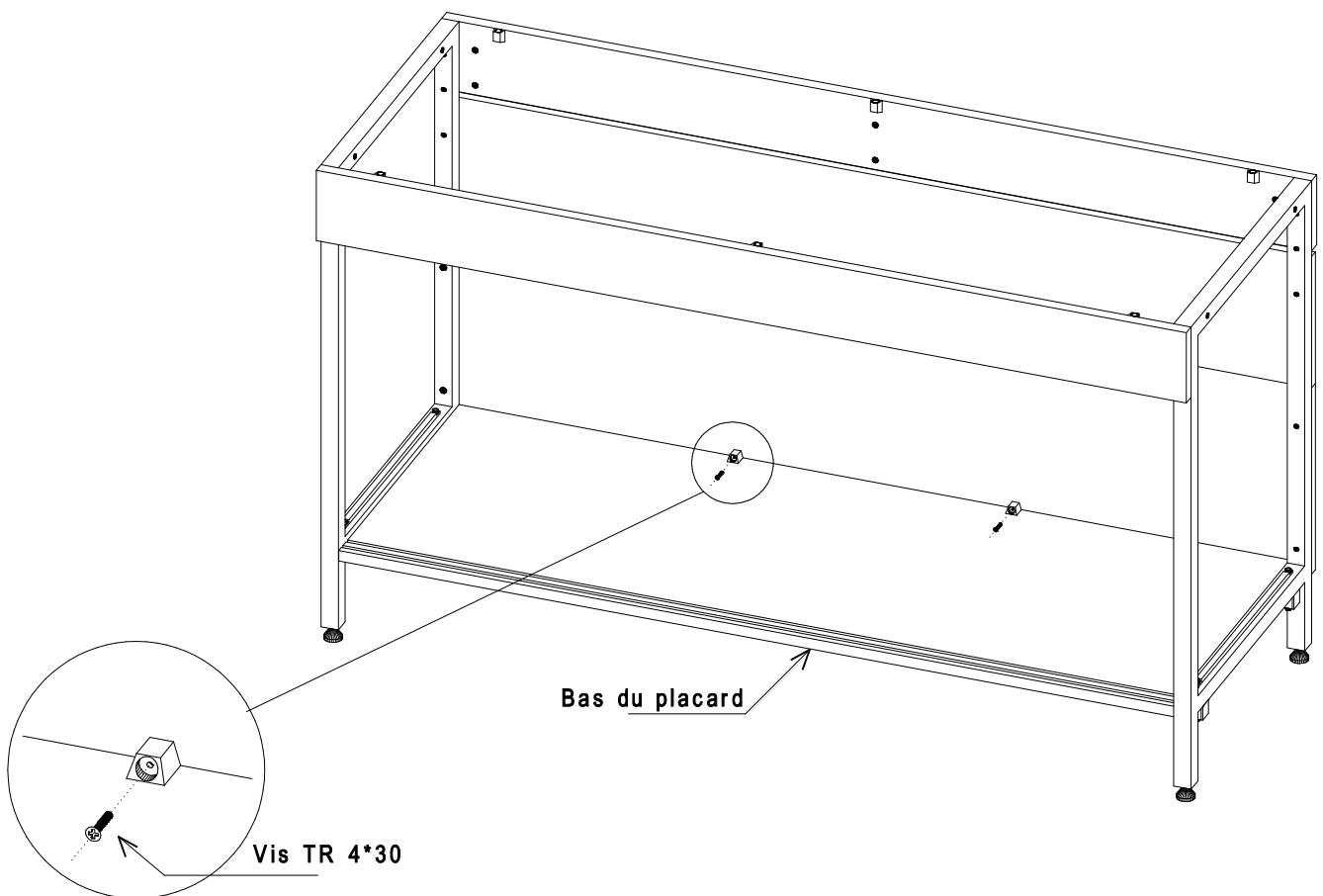6




Préparation des habillages de piétement

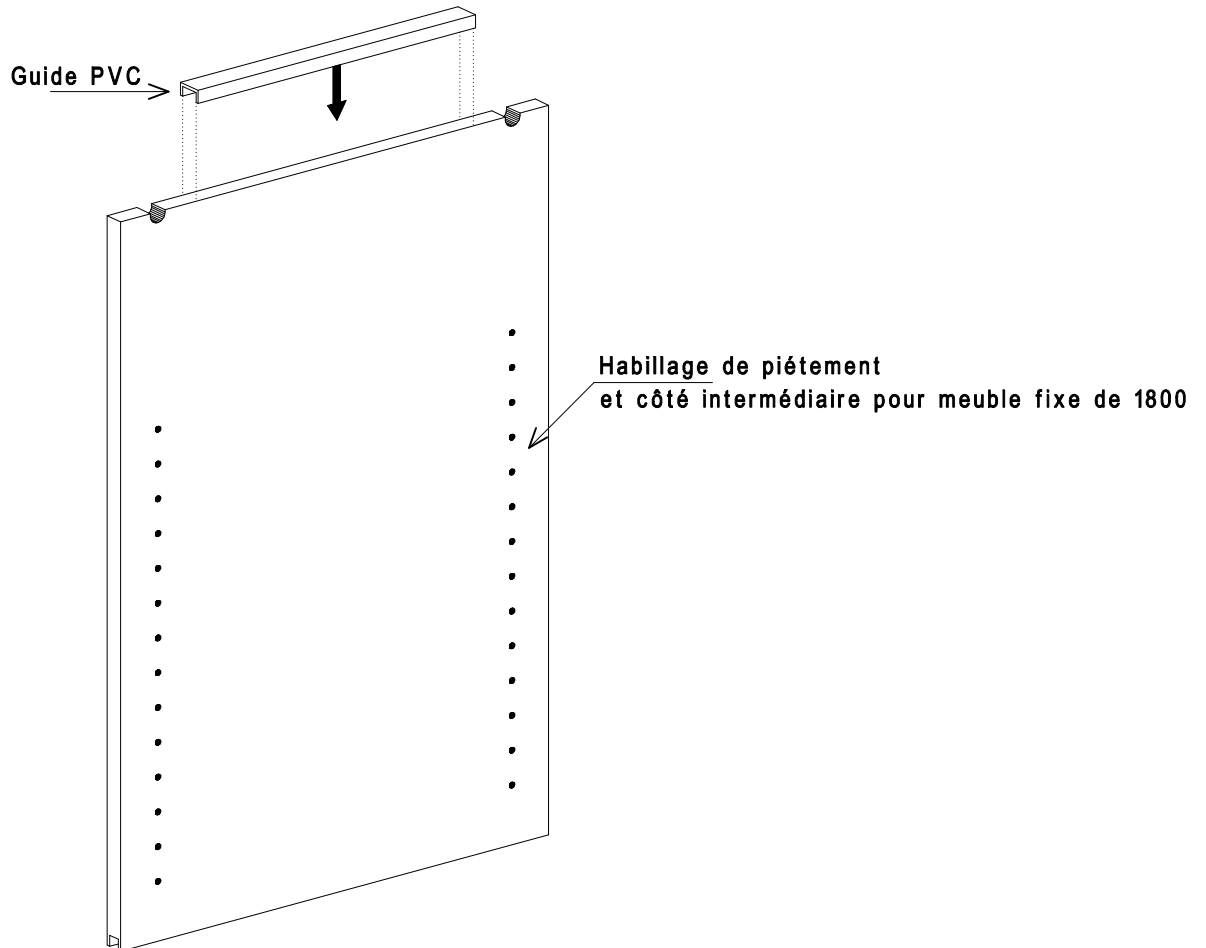7




Mise en place des habillages de piétement

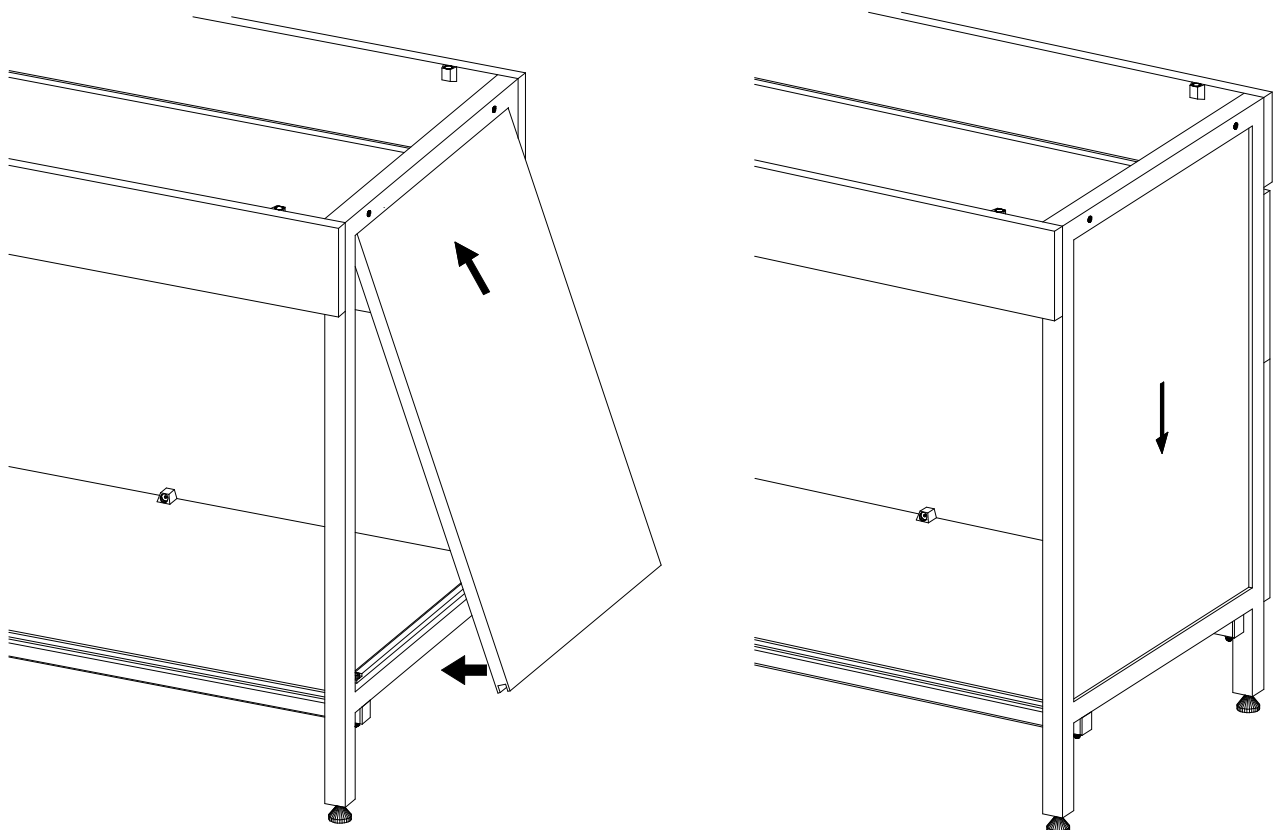8




Préparation des tablettes

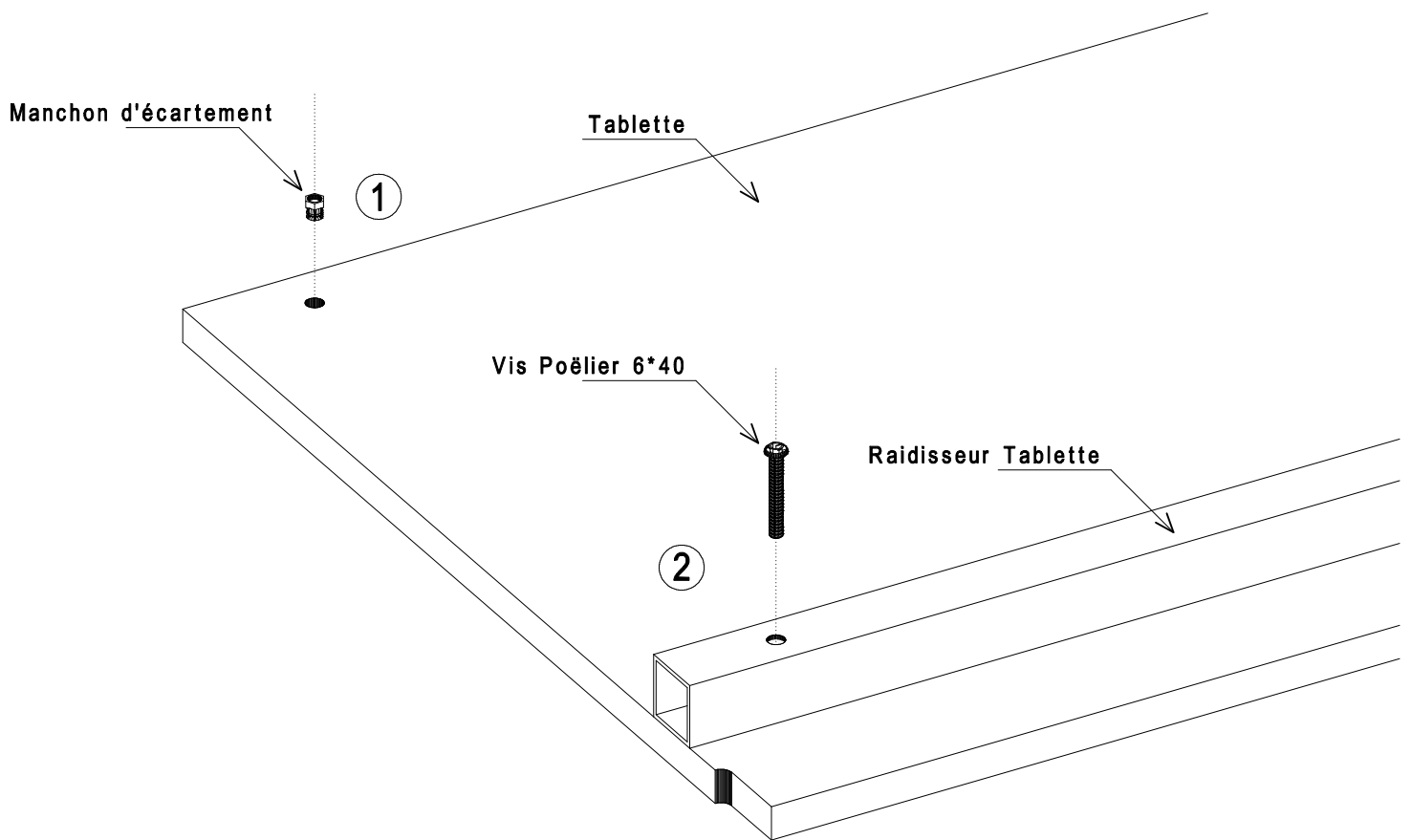9



Mise en place de la tablette dans le placard

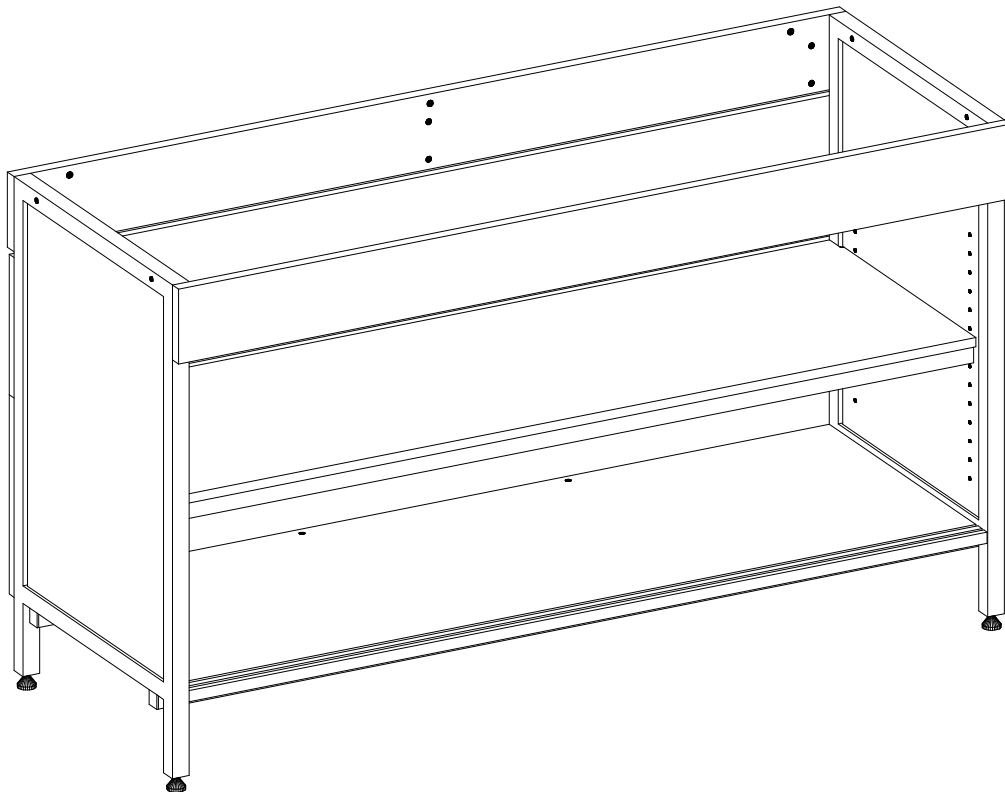
10



PS : Mise en place de la tablette sur des taquets

Préparation des portes coulissantes

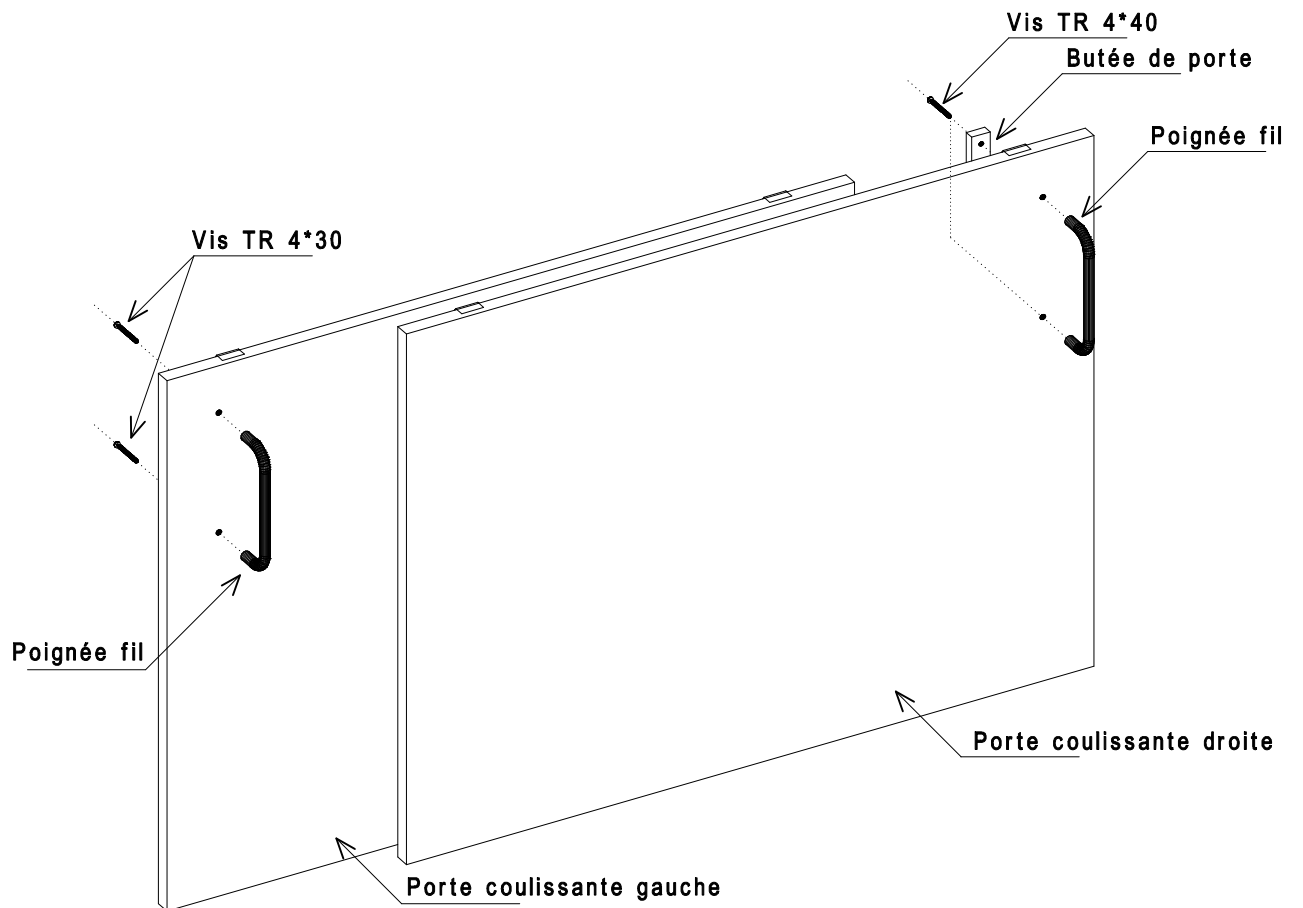11



Mise en place des portes coulissantes sur le placard

12

