

Retour de Dossieret/Tablette





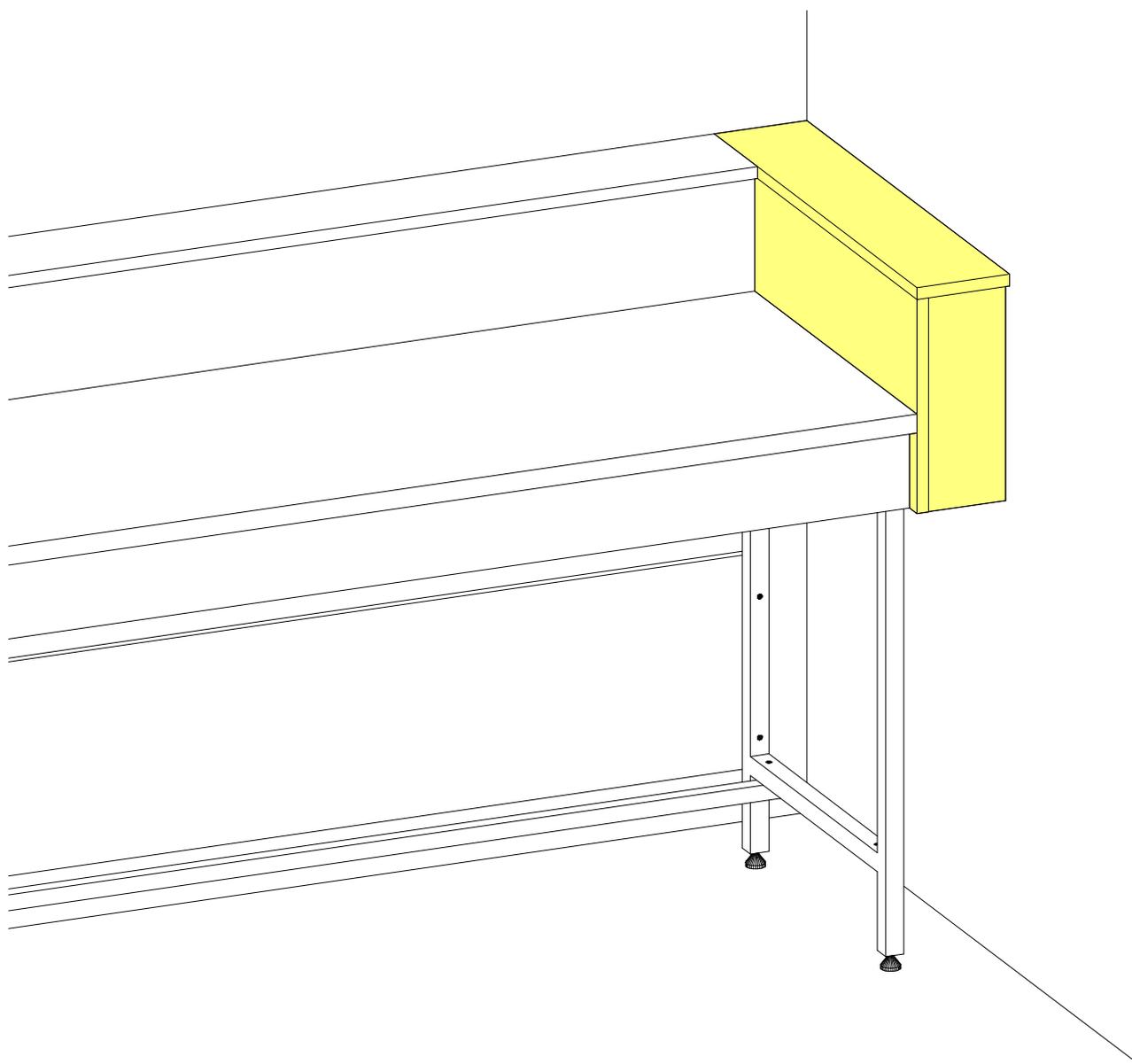



Schéma de montage du retour D/T

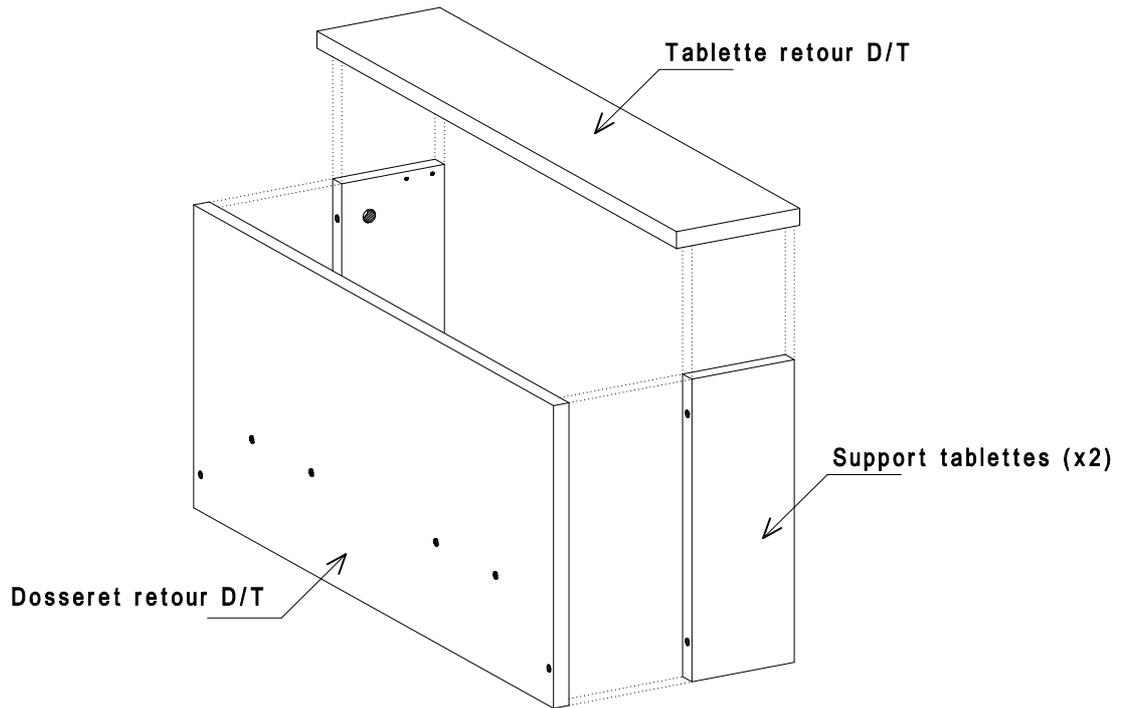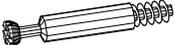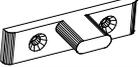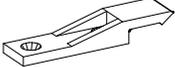

Désignation de la quincaillerie	Retour D/T Quantité	Quantité par sachet
 Vis Poëlier 6*40	2	2
 Manchon d'écartement	4	4
 Goujon Minifix	4	4
 Boitier Minifix	4	4
 Embase clip tablettes	2	2
 Clip tablettes	2	2
 Vis TF 4*35	2	2
 Vis TF 3.5*15	8	8


Pose des manchons d'écartement sur le retour de dossieret D/T

1

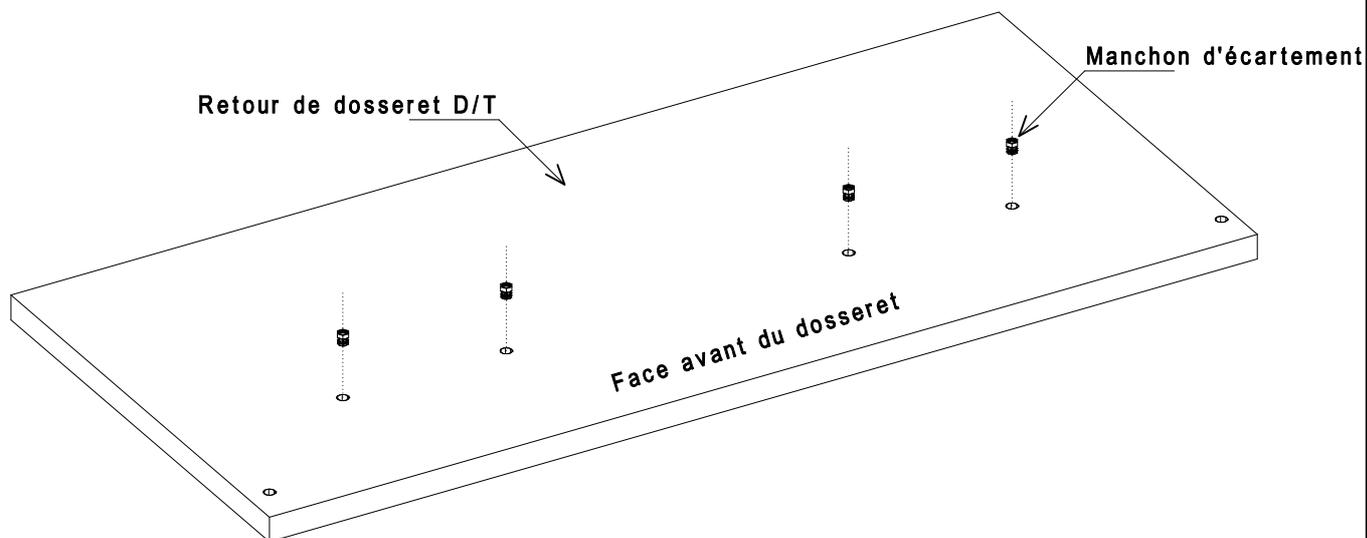


Fixation du retour de dossieret D/T sur la paillasse existante

2

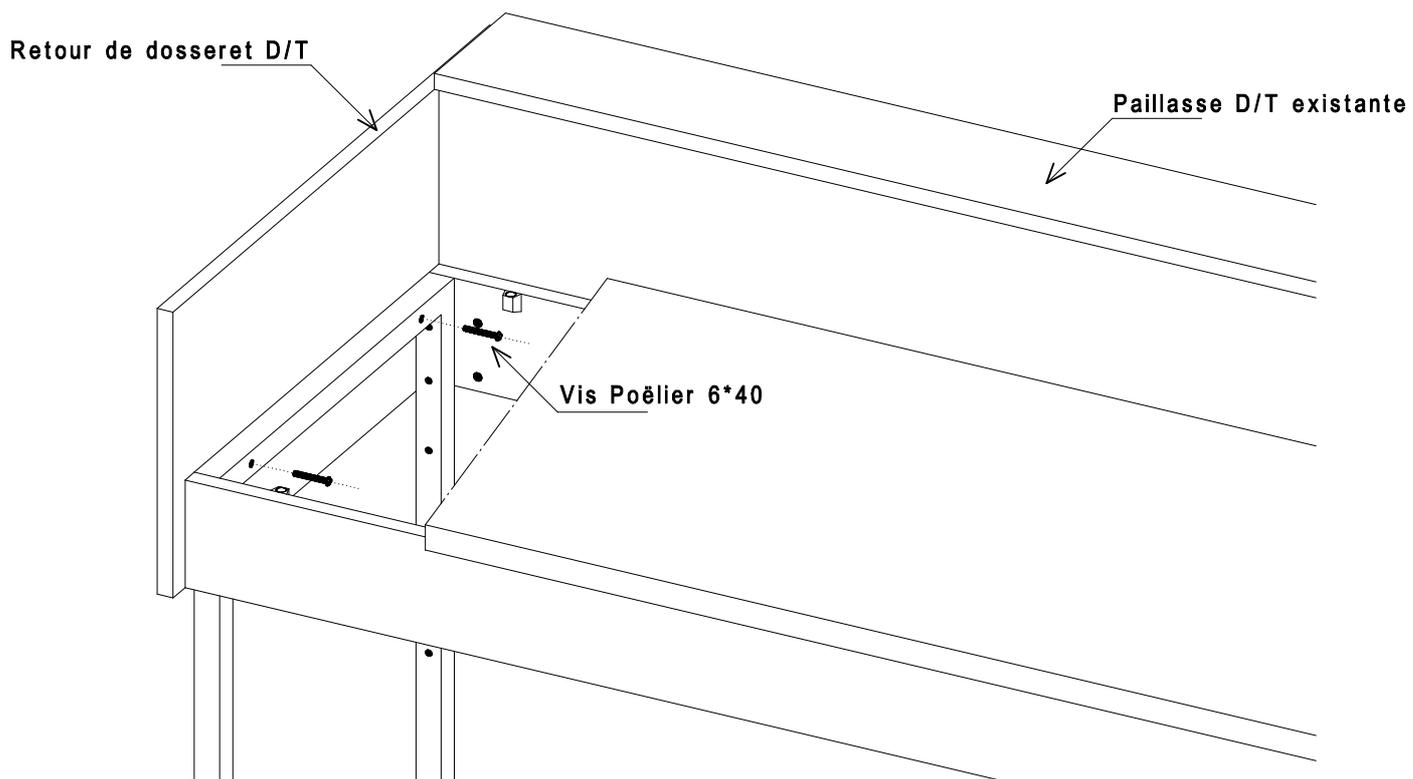


Fixation du retour de dossieret D/T (suite)

3

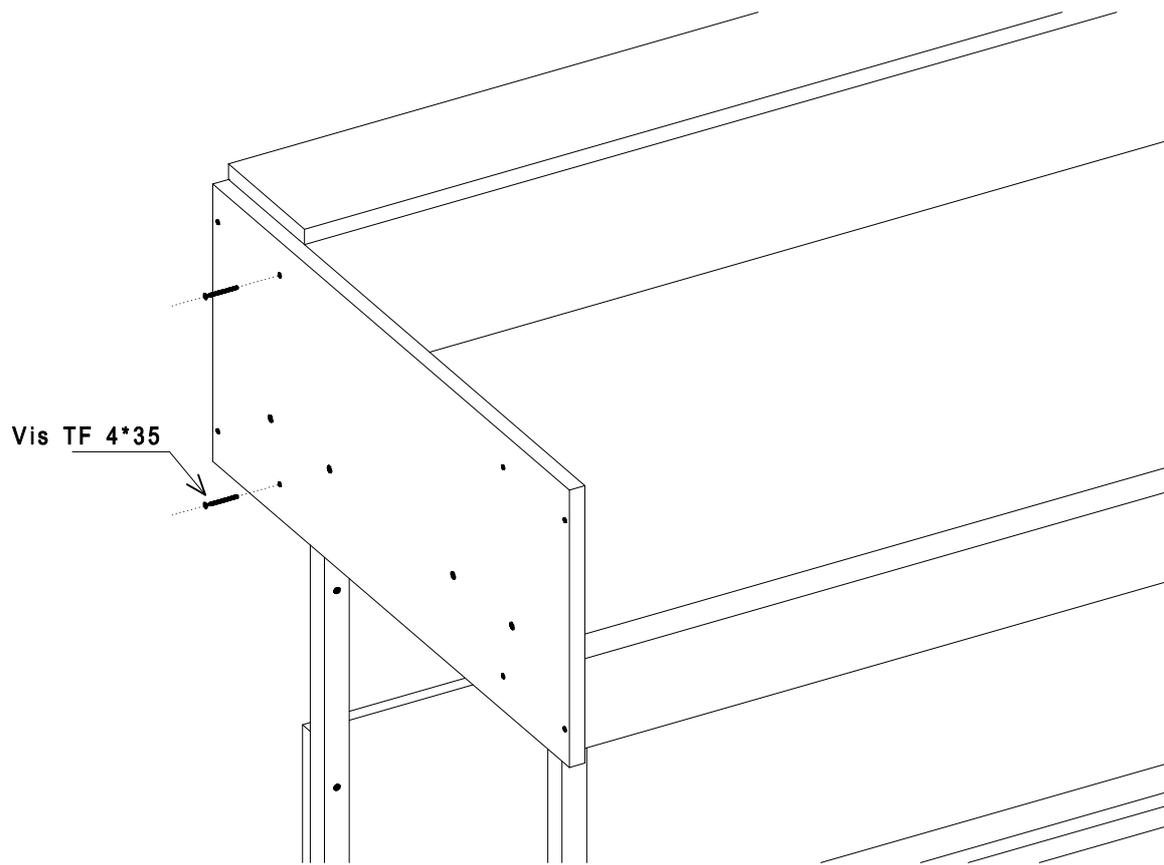


Préparation des supports de tablettes


4

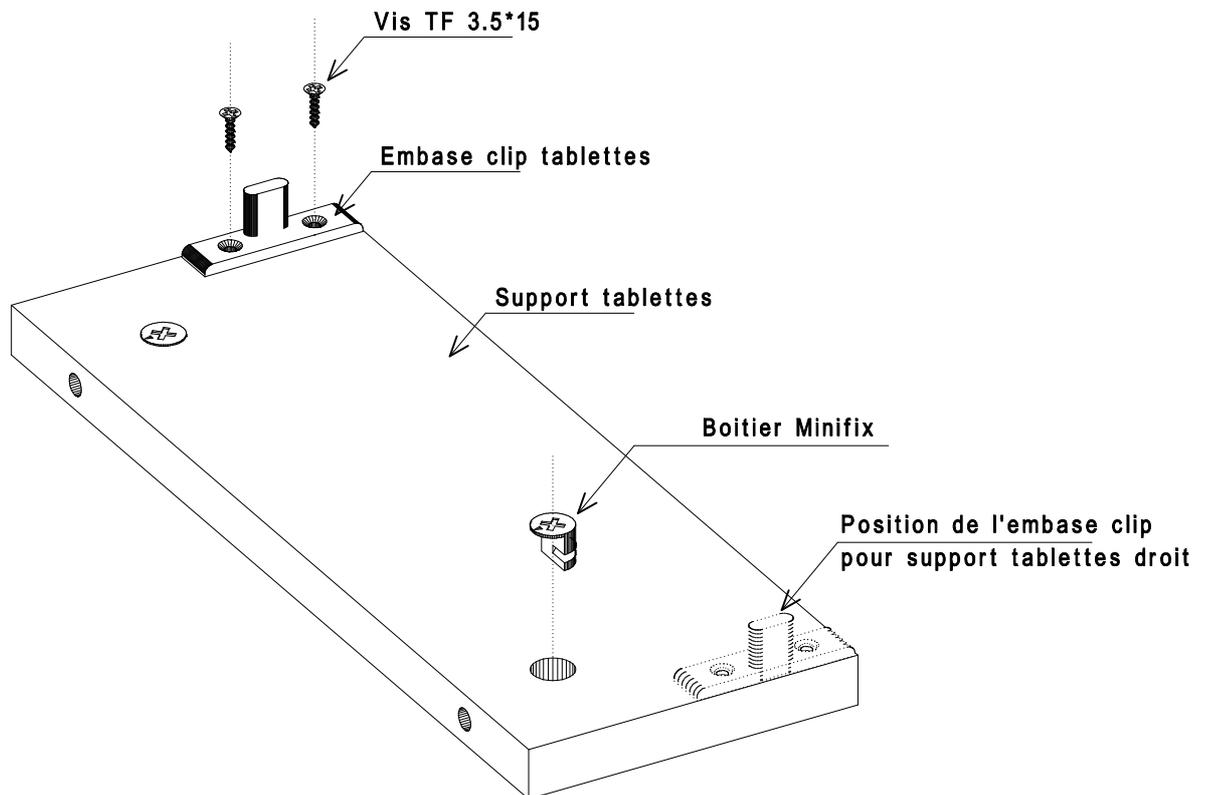

PS : Supports de tablettes gauche et droit avec l'embase clip tablettes
(Schéma ci-dessus : support tablettes gauche)

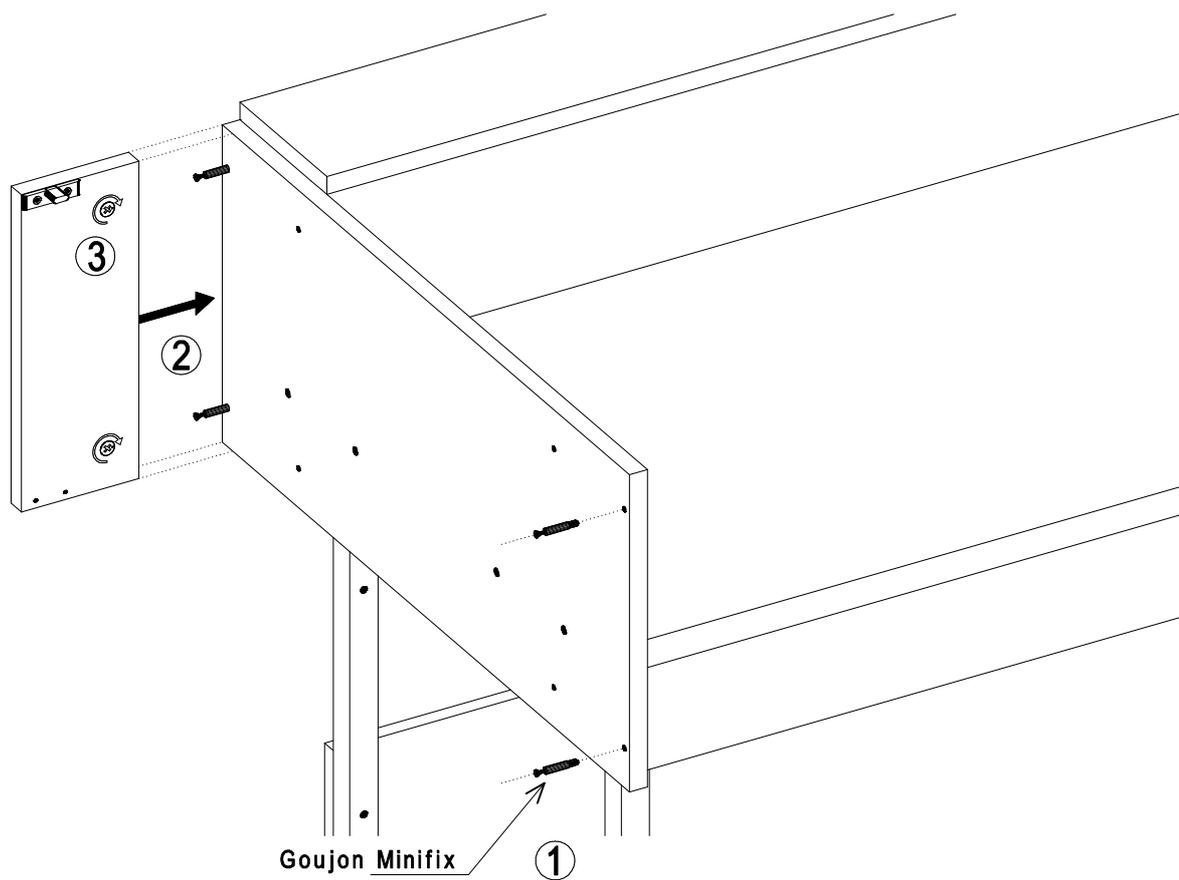


Préparation de la tablette D/T

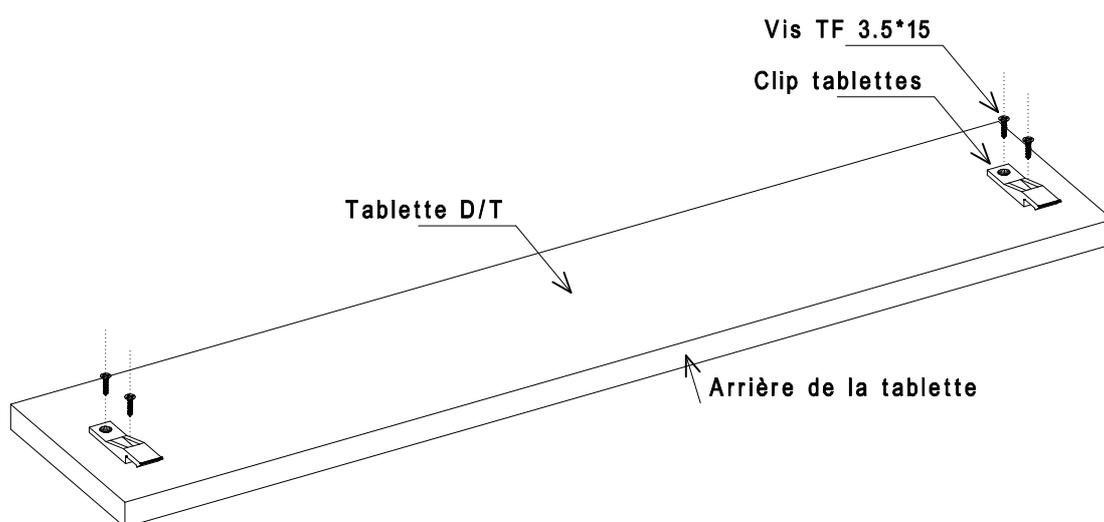

Mise en place de la tablette du retour D/T

7

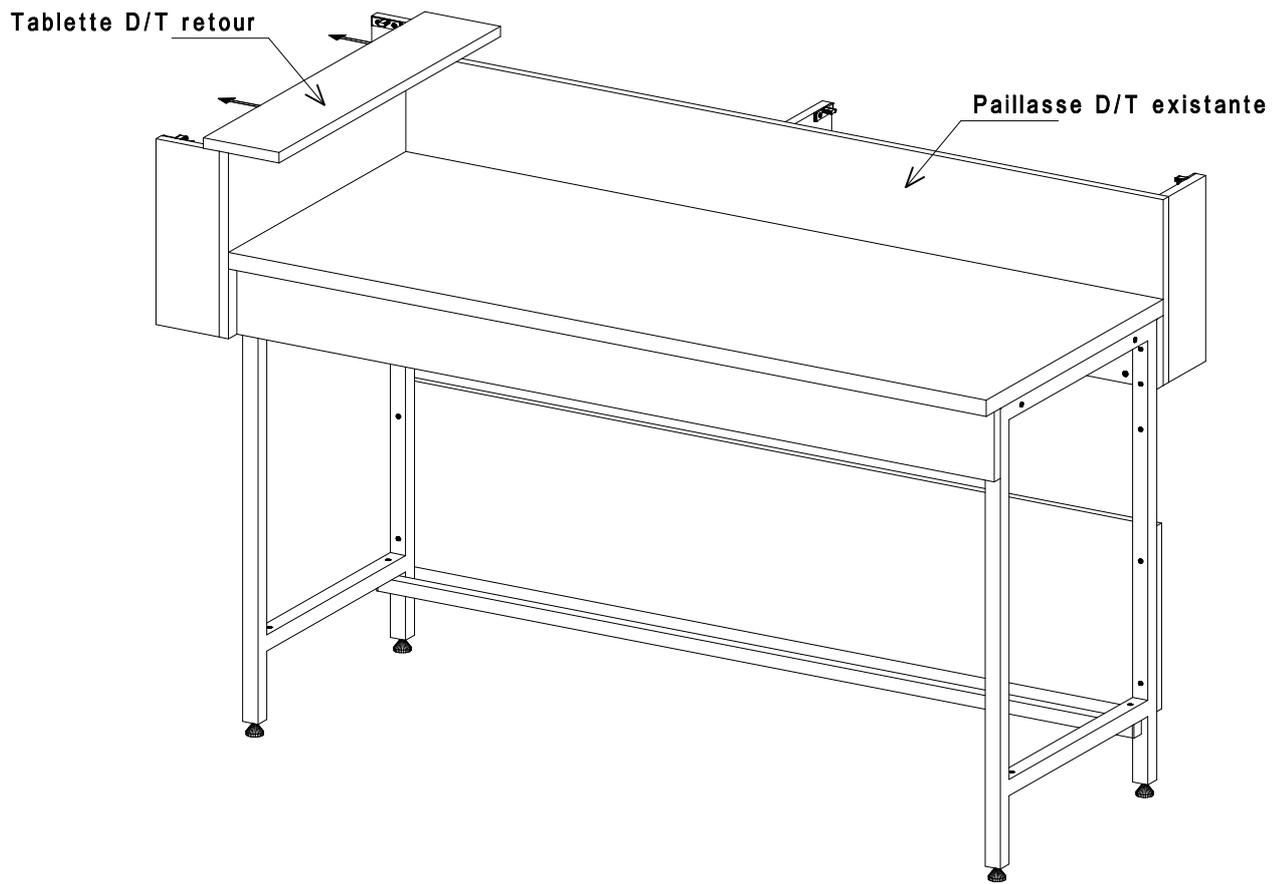

PS : Retirer au préalable la tablette D/T de la paillasse existante

Mise en place de la tablette du retour D/T (suite)

8

