

Sorbonne "Simoun"

Dimension hors tout	Largeur en mm	Profondeur en mm	Hauteur en mm	Réf.
	1200	800	1830	8761
	1500	800	1830	8762
	1800	800	1830	8763

Sorbonne "Mistral"

Dimension hors tout	Largeur en mm	Profondeur en mm	Hauteur en mm	Réf.
	1200	800	1520	8690
	1500	800	1520	8692

Ouverture de travail :

Hauteur 700, largeur 1000, 1300

Composition :

- Même caractéristiques que la sorbonne "Simoun" mais hauteur 1500

Accessoires :

- Ventilation en caisson ou terrasse
- Commande et protection thermique du ventilateur
- Raccordement ventilation
- Eclairage ADF en option

Ouverture de travail :

Hauteur 880, largeur 1000, 1300 ou 1600

Composition :


- Sorbonne avec façade mobile, côtés pleins
- Eclairage intérieur IP65
- Support rack inox
- Registre CPV répartiteur d'air
- Glace sécurit avec système parachute
- Montants mélaminés hydrofuges
- Alarme audiovisuelle de défaut de débit d'air
- Blocage de la glace à 400 mm de plan de travail (débloqué manuel)

Accessoires :


- Identiques à la sorbonne "Mistral"

Les sorbonnes


12 conformes à la norme française XPX 15-203

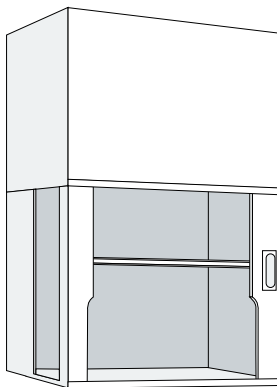

Sorbonne "Simoun"

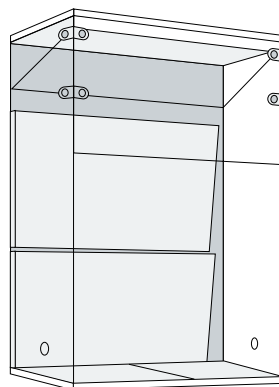

Hotte d'attaque

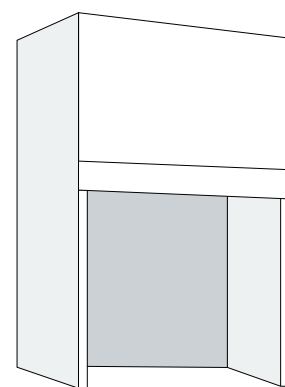

Hotte "Zéphir"

Hotte d'attaque

Sur chaise métallique	1500 tr/min sans caisson de détente
220 TRI	8960
380 TRI	8961

- Ensemble complet : hotte + paillasse sèche avec lavage de caisson intermittent en PVC
- Hotte en verre sécurit, permettant la récupération des condensats (bidon non fourni en option)
- Caisson assécheur d'air en PVC
- Ventilateur axial 1500 m³/h + commande + protection (pour hotte d'attaque)

Hotte "Zéphir"

Profondeur 750	Largeur 1200	Largeur 1500
Hauteur 1500	8672	8682
Hauteur 1800	8772	8782

Ouverture de travail :

Hauteur 900, largeur 1156 ou 1456

Composition :

- Hotte ouverte à côtés pleins, à poser sur paillasse
- Montants mélaminés hydrofuges
- Eclairage intérieur IP65
- Extraction directe par le haut

Accessoires :


- Ventilateur en caisson ou terrasse pour hauteur 800
- Commande et protection thermique du ventilateur
- Eclairage ADF en option

Sorbonne d'attaque : sur demande


Paillasse sous sorbonne ou hotte

Dimensions hors tout en mm	Glace émaillée avec bénitier encastré	Dalles grès avec bénitier moulé dans la dalle	Grès étiré avec bénitier encastré
1200x750	8205	8207	8201
1500x750	8206	8208	8202
1800x750	8209	8211	8203


Accessoires : voir pages 14 et 15

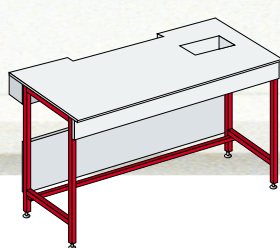

Paillasse sous sorbonne de 1200-1500

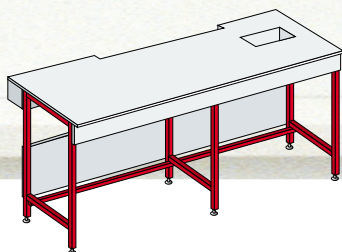

Paillasse sous sorbonne de 1800

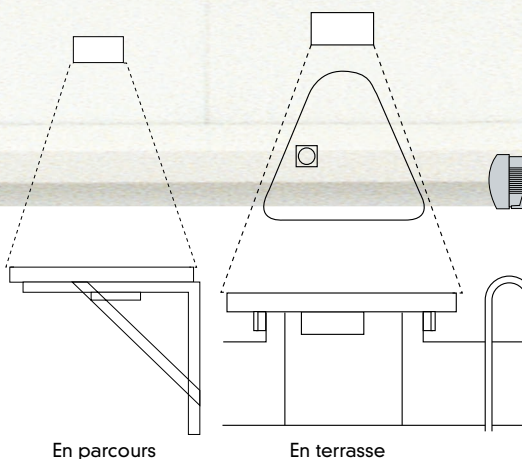

Ventilateur axial jet 20 (2800 tr/mn, en parcours)

220 V tri IP55 Réf. : 8966

380 V tri IP55 Réf. : 8967

Descriptif :

- Triphasé IP55
- 2800 tr/mn, 750 w
- 1000 m³ à 800 Pa
- Triphasé ADF
- Diam. 200

Ventilateur axial jet 20 (2800 tr/mn, en terrasse)

220 V tri IP55 Réf. : 8942

380 V tri IP55 Réf. : 8963

Descriptif :

- Triphasé IP55
- 2800 tr/mn, 750 w
- 1000 m³ à 800 Pa
- Triphasé ADF
- Diam. 200

Ventilateur centrifuge en caisson

Triphasé IP 55 Réf. : 5024

Triphasé ADF Réf. : 5025

Descriptif :

- 1500 tr/mn, 370 w
- 1000 m³ à 380 Pa
- Diam. 200

Ventilateur axial jet 25 (1500 tr/mn, en terrasse ou en parcours)

220 V tri IP55 Réf. : 5022

380 V tri IP55 Réf. : 5041

380 V ADF Réf. : 5043

Descriptif :

- Triphasé IP55
- 1500 tr/mn, 370 w
- 1000 m³ à 340 Pa
- Triphasé ADF
- Diam. 200