



Catalogue
MICROBIOLOGICS
Qualité alimentaire

Laboratoires
HUMEAU
2016

 **Microbiologics®**

ATCC Licensed
Derivative®

SOMMAIRE

Présentation de MICROBIOLOGICS®	5
HISTORIQUE	5
QUALITE.....	5
PRODUITS	5
NOUVEAUTES.....	7
LABORATOIRES 17025 et CRM.....	8
SOUCHES QUALITATIVES	9
LYFO-DISK®	9
KWIK-STIK™.....	12
Lab-Elite™ CRM.....	14
SOUCHES QUANTITATIVES.....	15
Epower™	16
EZ-FPC™	18
EZ-SPORE™	20
EZ-PEC™	22
EZ-Accu Shot™	24
Epower™ CRM.....	26
RECOMMANDATIONS POUR L'ENSEMENCEMENT DES MICRO-ORGANISMES	27
PROTOCOLES RECOMMANDÉS SELON LES MICRO-ORGANISMES	27
PROTOCOLES D'ENSEMENCEMENT.....	29
SOUCHES MICROBIOLOGICS	33
REMARQUES IMPORTANTES.....	33
SOUCHES RECOMMANDÉES DANS LA NORME NF EN ISO 11133:2014	
VERSION JUILLET 2014 MICROBIOLOGIE ALIMENTAIRE	34
CATALOGUE MICROBIOLOGIE ALIMENTAIRE.....	37



HISTORIQUE

1971 Création de MICROBIOLOGICS en tant que laboratoire d'essai spécialisé dans la recherche de pathogènes pour la santé publique et l'environnement.

1976 Fabrication et commercialisation de produits pour le diagnostic microbiologique et notamment de micro-organismes lyophilisés.

Aujourd'hui, fabrication de préparations de micro-organismes lyophilisés dont les applications concernent les domaines suivants : clinique, pharmaceutique, cosmétique, compléments alimentaires, aliments diététiques, eau, industries de l'environnement et de l'éducation.

MICROBIOLOGICS® est présent dans plus de 140 pays.

2012 Accord de partenariat de vente avec **Laboratoires Humeau**

2014-15 Road-Show Microbiologie en France

QUALITE

MICROBIOLOGICS s'engage depuis toujours dans une démarche qualité. La société possède les accréditations et est en accord avec les organismes de référence :

- ISO 9001:2008
- ISO 17025:2005
- **ISO Guide 34:2000**
- Marquage CE
- Food and Drug Administration Establishment
- ATCC Licensed Derivative® Program

L'ATCC Licenced Derivative™ Program est un outil d'assurance qualité de l'*American Type Culture Collection*. Il garantit une traçabilité totale entre la souchothèque de l'ATCC® et l'utilisateur final. Il engage les acteurs à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour assurer une qualité optimale des produits issus de matériaux biologiques de l'ATCC®.

ACTEUR	STATUT	ENGAGEMENTS
MICROBIOLOGICS	Producteur licencié	<ul style="list-style-type: none"> • production de standards de haute qualité • contrôle, stockage et expédition de ses produits dérivés de matériaux biologiques ATCC® • qualité et traçabilité dans l'ensemble de son réseau de distribution international.
LABORATOIRES HUMEAU	Distributeur sous-licencié	<ul style="list-style-type: none"> • réception, stockage, emballage et transport adapté aux produits Microbiologics • traçabilité des produits distribués au travers de son réseau • enregistrement de ses clients utilisateurs finaux via le « <i>end user agreement</i> » ou « accord d'utilisateur final »
CLIENT	Utilisateur final	<ul style="list-style-type: none"> • utiliser les souches issues de l'ATCC® conformément aux bonnes pratiques de microbiologie dans un but de contrôle qualité en laboratoire => signature de l'« accord d'utilisateur final »

LES CERTIFICATS D'ANALYSE SONT TELECHARGEABLES SUR LE SITE :

<http://www.microbiologics.com/site/index.html>



PRODUITS

PROCEDE DE FABRICATION

Les micro-organismes sont livrés sous forme lyophilisée.

Cette méthode (*Obara et coll.*) utilise un milieu de suspension composé de gélatine, lait écrémé, acide ascorbique, dextrose et charbon. La gélatine sert de support pour les micro-organismes. Le lait écrémé, l'acide ascorbique et le dextrose protègent le micro-organisme en préservant l'intégrité des parois cellulaires lors de la lyophilisation et du stockage. La présence de charbon permet de neutraliser les substances toxiques formées lors du processus de lyophilisation.

CARACTERISTIQUES GENERALES

SOUCHOTHEQUE

Plus de **800 souches** sont disponibles. Elles proviennent principalement de l'American Type Culture Collection (ATCC®) mais aussi du « National Collection of Industrial Bacteria » (NCIMB) et du « National Collection of Type Cultures » (NCTC). MICROBIOLOGICS® certifie que ses souches microbiennes ont subi **de 2 à 4 passages maximum** à partir de la collection de référence (selon la gamme produit). Le nombre de passages ATCC correspond au nombre de repiquage depuis la souche de référence.

CONSERVATION

Conservation entre **2-8°C**.

Souches stables après un **transport de 2 semaines** à température ambiante pour les souches non calibrées et de 7 jours pour les souches calibrées (selon étude MICROBIOLOGICS®).

Garantie de la date d'expiration de **6 mois minimum** au moment de la réception dans vos locaux.

GAMMES PRODUITS

QUALITATIF	QUANTITATIF
LYFO-DISK®	Epower™
	EZ-FPC™
KWIK-STIK™	EZ-SPORE™
	EZ-PEC™
Lab-Elite™ CRM	EZ-Accu Shot™
	Epower™ CRM

D'autres gammes sont disponibles. Notre équipe commerciale se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire à l'adresse : commercial@humeau.com

NOUVEAUTES



EMBALLAGES



Deux nouveaux emballages ont été progressivement mis en place pour certaines gammes. Pour une identification simplifiée, les boîtes ont des codes couleur selon chaque ligne de production.

Boîte rectangulaire pour les flacons de pastilles

- EZ-Accu Shot™ : rouge
- EZ-CFU™ : bleu
- EZ-CFU™ One Step : blanc
- EZ-PEC™ : clair
- EZ-HYDRO SHOT™ : bleu
- LYFO-DISK™ : clair

Boîte ronde pour les écouvillons

- KWIK-STIK™ : blanc
- KWIK-STIK™ Plus : gris
- Lab-Elite™ CRM : noir

Facile à ouvrir / fermer
Taille compacte pour un gain de place
Recyclable - Pas de carton
Durable et sécurisé
Conformité avec les lignes directrices IATA

Souches STEC



Les souches d'*Escherichia coli* productrices de Shigatoxines sont maintenant disponibles en Europe sous divers conditionnements : Kwik-stik, Lyfo Disk et Epower. Microbiologics les propose en souche unique pour les sérotypes suivants:

O26:H11 CDC 03-3014
O45:H2 CDC 00-3039
O103:H11 CDC 06-3008
O104:H4 ATCC® BAA-2326™

O111:H8 CDC 2010C-3114
O121:H19 CDC 02-3211
O145:NM CDC 99-3311
O157:H7 ATCC® 35150™

Brochure STEC à télécharger sur :

http://www.humeau.com/media/blfa_files/STEC_Controls_Flyer.pdf

Souche non productrice de Shigatoxine type I ou II disponible :
Escherichia coli (0157:H7) ATCC® 43888™

LABORATOIRES 17025 et CRM

Une **souche CRM** est un **matériau de référence certifié** indispensable pour un laboratoire accrédité ISO 17025.



Qu'est-ce qu'un matériau de référence certifié (**MRC**) ?

C'est un matériau de référence caractérisé par une procédure métrologiquement valide pour une ou plusieurs propriétés spécifiées.

Il est accompagné d'un certificat fournissant les éléments suivants sur la propriété :

- valeur
- incertitude
- déclaration de traçabilité métrologique

Les producteurs peuvent délivrer un CRM uniquement s'ils suivent l'ISO Guide 34. Celui-ci décrit les « Exigences générales pour la compétence des producteurs de matériaux de référence ».

Microbiologics est reconnu OFFICIELLEMENT comme producteur de matériau de référence selon l'ISO Guide 34 depuis 2009.



American Association for Laboratory Accreditation

GAMMES CRM de Microbiologics

QUALITATIVE Lab-Elite™ CRM

QUANTITATIVE Epower™ CRM



Lab-Elite™
CERTIFIED REFERENCE MATERIAL



Epower™
CERTIFIED REFERENCE MATERIAL

Les gammes CRM de Microbiologics sont livrées avec un certificat qui garantit la traçabilité et l'incertitude (si quantitatif) des souches.

Les éléments suivants y sont précisés:

1. Caractérisation - Vérification de l'identité
2. Homogénéité - Variabilité des valeurs d'une pastille à l'autre
3. Transport - Variabilité des valeurs avant et après le transport
4. Stabilité - Variabilité des valeurs sur la durée de vie



- Certified Value
- Expanded Uncertainty
- Standard Deviation

Quelques exemples d'applications au sein d'un laboratoire ISO 17025 :

- identification correcte des micro-organismes par un équipement de laboratoire
- vérification du fonctionnement d'un système d'inoculation automatisé
- formation ou évaluation de la performance du personnel de laboratoire

SOUCHES QUALITATIVES

LYFO-DISK®

KWIK-STIK™

Lab-Elite™ CRM



LYFO-DISK®

DESCRIPTION

Les micro-organismes LYFO DISK® sont conditionnés dans un flacon refermable contenant six pastilles lyophilisées d'une souche de micro-organisme.

SOUCHOTHEQUE

Plus de 800 souches

NOMBRE DE REPIQUAGES

4 passages ATCC maximum depuis la culture de référence

CONDITIONNEMENT

1 flacon de **6 pastilles** d'une seule souche de micro-organisme

DOCUMENT QUALITE

Document assurance qualité composé de :

- étiquette produit
- certificat d'analyse

atteste de l'authenticité et de la traçabilité des micro-organismes et indique le nombre de passages

DUREE DE CONSERVATION

2 ans de péremption à fabrication et 6 mois minimum chez l'utilisateur à 2-8°C.

DOMAINES D'APPLICATION


Laboratoires de microbiologie clinique et industrielle.


TYPES DE TESTS


Contrôle milieux de culture, contrôle des outils d'identification, test de sensibilité aux antibiotiques...





Lyfo-disk®


- 


Retirer, sans l'ouvrir, le flacon de LYFO DISK® du stockage à 2 °C-8 °C et laisser le flacon fermé s'équilibrer à température ambiante.
- 


Dans des conditions d'asepsie, sortir (1) pastille du flacon à l'aide d'une pince stérile. **Ne pas retirer le déshydratant.**
- 

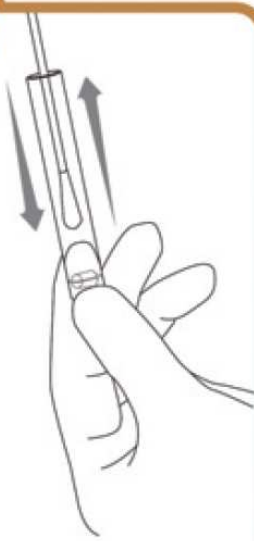Placer la pastille dans 0,5 ml de liquide stérile (eau, sérum physiologique, bouillon trypticase-soja ou bouillon cœur-cervelle). Refermer **IMMÉDIATEMENT** le flacon contenant les pastilles avec le bouchon et le capuchon, et le remettre au stockage entre 2 °C et 8 °C.
- 

Écraser la pastille avec un écouvillon stérile jusqu'à ce que la suspension ait une apparence homogène. Saturer **IMMÉDIATEMENT** et abondamment le même écouvillon avec le matériel hydraté et le transférer sur un milieu gélosé.
- 

Ensemencer le(s) support(s) de la principale culture en roulant doucement l'écouvillon sur un tiers du support.
- 

Répartir pour faciliter l'isolation des colonies en utilisant une anse stérile.
- 

En utilisant une méthode appropriée d'élimination du matériel à risque biologique, jeter le reste du matériel hydraté.
- 

Incuber **IMMÉDIATEMENT** le milieu ensemencé à la température et aux conditions adaptées au micro-organisme.

 **Microbiologics®**

A safer, healthier world.

**SUIVRE LES RECOMMANDATIONS POUR
L'ENSEMENCEMENT DES MICRO-ORGANISMES (PAGES 27-32)**

KWIK-STIK™

DESCRIPTION

Chaque unité KWIK-STIK™ contient une pastille lyophilisée d'une souche de micro-organisme unique, un réservoir de liquide hydratant et un écouvillon pour l'ensemencement. Chaque produit est conditionné hermétiquement dans un sachet.



SOUCHOTHEQUE

Plus de 800 souches

NOMBRE DE REPIQUAGES

4 passages ATCC maximum depuis la culture de référence

CONDITIONNEMENT

2 formes :

- duo-pack : **2 unités**
- canister : **6 unités**

une seule souche de micro-organisme

DOCUMENT QUALITE

Document assurance qualité composé de :

- étiquette produit
- certificat d'analyse

atteste de l'authenticité et de la traçabilité des micro-organismes et indique le nombre de passages

- d'une vignette détachable et autocollante

garantit l'inviolabilité du dispositif

représume le nom de la souche et la référence, le numéro de lot et la date d'expiration.

DUREE DE CONSERVATION

2 ans de péremption à fabrication et 6 mois minimum chez l'utilisateur à 2-8°C.


DOMAINES D'APPLICATION


Laboratoires de microbiologie clinique et industrielle.


TYPES DE TESTS


Contrôle milieux de culture, contrôle des outils d'identification, test de sensibilité aux antibiotiques...


Kwik-stik™


- 

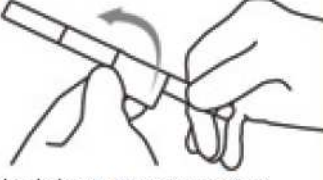
Laisser le sachet du KWIK-STIK™ fermé s'équilibrer à la température ambiante. Déchirer au niveau de l'encoche pour ouvrir le sachet et sortir l'unité KWIK-STIK™.
- 


Détacher la languette se trouvant sur l'étiquette et la joindre au support de la principale culture ou au compte-rendu du contrôle de la qualité. Ne pas démonter le produit au cours de l'hydratation.
- 


Pincer (une fois seulement) l'ampoule en haut du KWIK-STIK™ (juste au-dessous du ménisque liquide de l'ampoule) dans le capuchon afin de libérer le liquide hydratant.
- 


Tenir à la verticale et tapoter sur une surface dure afin de faciliter l'écoulement du liquide par la tige jusqu'au fond de l'unité contenant la pastille. Laisser couler le liquide hydratant par la tige de l'écouvillon et jusqu'au fond de l'unité contenant la pastille.
- 

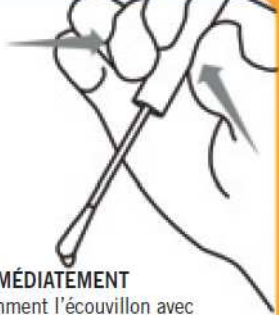
En pinçant le fond de l'unité, écraser la pastille dans le liquide jusqu'à ce que la pastille en suspension ait une apparence homogène.
- 

Saturer **IMMÉDIATEMENT** et abondamment l'écouvillon avec le matériel hydraté et le transférer sur un milieu gélosé.
- 

Ensemencer le(s) support(s) de la principale culture en roulant doucement l'écouvillon sur un tiers du support.
- 

Répartir pour faciliter l'isolation des colonies en utilisant une anse stérile.
- 

En utilisant une méthode appropriée d'élimination du matériel à risque biologique, jeter le KWIK-STIK™. 

Incuber **IMMÉDIATEMENT** le(s) support(s) ensemencé(s) de la principale culture, à la température et aux conditions adaptées au micro-organisme.
- 

 **Microbiologics®**

A safer, healthier world.

**SUIVRE LES RECOMMANDATIONS POUR
L'ENSEMENCEMENT DES MICRO-ORGANISMES (PAGES 27-32)**



LAB-ELITE™ CRM

DESCRIPTION

Chaque unité Lab-Elite™ CRM contient une pastille lyophilisée d'une souche de micro-organisme unique, un réservoir de liquide hydratant et un écouvillon pour l'ensemencement. Chaque produit est conditionné hermétiquement dans un sachet.

Ce matériau de référence certifié (MRC) est une préparation pure, homogène et stable de micro-organismes lyophilisés possédant des caractéristiques microscopiques, macroscopiques, phénotypiques et génotypiques bien définies. Ces caractéristiques sont testées sur un nombre statistiquement représentatif d'échantillons provenant de chaque nouveau lot.

SOUCHOTHEQUE

Près de 60 souches

NOMBRE DE REPIQUAGES

1 passage maximum depuis la culture de référence

CONDITIONNEMENT

Un écouvillon d'une seule souche de micro-organisme

DOCUMENT QUALITE

Document assurance qualité composé de :

- étiquette produit
- certificat d'analyse

atteste de l'authenticité et de la traçabilité des micro-organismes - indique le nombre de passage - sous typage par PFGE - caractéristiques microscopiques, macroscopiques et phénotypiques tel que requis par l'**ISO Guide 34** pour producteurs de matériaux de référence

- vignette détachable et autocollante
garantit l'inviolabilité du dispositif

représume le nom de la souche et la référence, le numéro de lot et la date d'expiration.

DUREE DE CONSERVATION

2 ans de péremption à fabrication et 6 mois minimum chez l'utilisateur à 2-8°C.

DOMAINES D'APPLICATION

Laboratoire de microbiologie accrédité ISO 17025

TYPES DE TESTS

Identification correcte des micro-organismes par un équipement de laboratoire, formation ou évaluation de la performance du personnel de laboratoire



MODE D'EMPLOI (voir page Kwik-stik n°13)

SOUCHES QUANTITATIVES

Epower™

EZ-FPC™

EZ-SPORE™

EZ-PEC™

EZ-Accu Shot™

Epower™ CRM



EPOWER™

DESCRIPTION

Les micro-organismes Epower™ sont des préparations de micro-organismes de contrôle titrées. Ces préparations lyophilisées s'utilisent comme souches de tests d'épreuve de contrôle qualité lorsqu'une concentration prédéterminée est nécessaire.

SOUCHOTHEQUE

Plus de 60 souches

NOMBRE DE REPIQUAGES

4 passages ATCC maximum depuis la culture de référence

CONDITIONNEMENT

1 flacon contenant 10 pastilles d'une seule souche de micro-organisme
1 fiche d'instruction

DOCUMENT QUALITE

Document assurance qualité composé de :

- un certificat d'essai atteste de l'authenticité et de la traçabilité des souches indique le nombre de passages et la valeur moyenne quantitative du lot en UFC/ml
Ce certificat est détachable et autocollant.

CONCENTRATION

10^2 - 10^8 UFC / pastille.

DUREE DE CONSERVATION

2 ans de péremption à fabrication et 6 mois minimum chez l'utilisateur à 2-8°C.

DOMAINES D'APPLICATION

Laboratoires industriels aux fins de contrôle de qualité.

Un micro-organisme Epower™ peut être utilisé seul en population d'épreuve mono- ou polymicrobienne.

TYPES DE TESTS

Test de stérilité, détection ou dénombrement de la flore totale ou d'un micro-organisme spécifique, test d'efficacité de la conservation....

REMARQUE

La valeur quantitative moyenne du lot est indiquée par la lettre et le chiffre inscrit à dans la référence


Exemple : 0791E3 signifie que la valeur quantitative moyenne est comprise entre 1000 et 10 000 UFC.



Epower™


1

Sortir le flacon de pastilles de la zone de stockage réfrigérée et laisser le produit s'équilibrer à température ambiante.

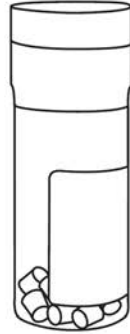


2

AVANT l'emploi, porter le liquide d'hydratation (tampon phosphate pH7,2) à une température comprise entre 35 °C et 37 °C.

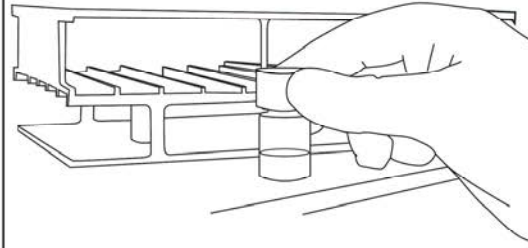

3

Transférer une pastille de **micro-organismes Epower™** dans 1mL de liquide d'hydratation.

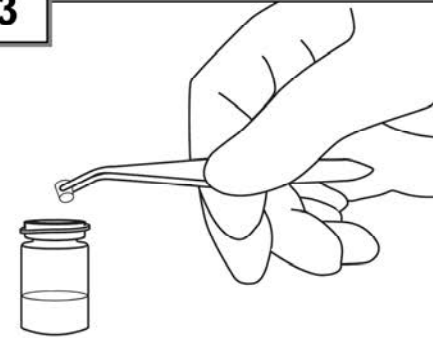

4

Placer immédiatement la suspension du micro-organisme reconstituée dans un incubateur réglé à une température comprise entre 35 °C et 37 °C pendant 30 minutes pour permettre une hydratation complète.

5

Immédiatement après l'incubation, vortexer ou mélanger complètement le produit reconstitué pour obtenir une suspension homogène.



6

Procéder immédiatement au test conformément au protocole du laboratoire. Il doit être terminé dans les 30 minutes qui suivent l'hydratation afin d'éviter un changement de concentration de la suspension.



EZ-FPC™

DESCRIPTION

Les micro-organismes EZ-FPC™ sont des souches de références lyophilisées sur pastille de gélatine, calibrées quantitativement. Ces micro-organismes sont utilisés dans le cadre de vérifications qualitative (Présence / Absence) et quantitative (dénombrement) de tests et méthodes utilisés en microbiologie alimentaire.

SOUCHOTHEQUE

Plus de 20 souches

NOMBRE DE REPIQUAGES

4 passages ATCC maximum depuis la culture de référence

CONDITIONNEMENT

1 flacon contenant 10 pastilles d'une seule souche de micro-organisme
1 fiche d'instruction

DOCUMENT QUALITE

Document assurance qualité composé de :

- un certificat d'essai
- atteste de l'authenticité et de la traçabilité des souches
indique le nombre de passages et la valeur quantitative du lot en UFC/ml
Ce certificat est détachable et autocollant.

CONCENTRATION

10^2 - 10^3 UFC / pastille.

DUREE DE CONSERVATION

2 ans de péremption à fabrication et 6 mois minimum chez l'utilisateur à 2-8°C.

DOMAINES D'APPLICATION

Laboratoires d'hygiène alimentaire.

TYPES DE TESTS

- Test qualitatif
 - Test quantitatif
- Détection des pathogènes d'intérêt agroalimentaire.

REMARQUE


Pour les tests qualitatifs (présence / absence), la valeur quantitative du lot indique le nombre de micro-organismes à dénombrer.



EZ-FPC™


1

Sortir le flacon contenant les pastilles lyophilisées de la zone de stockage réfrigérée (2°C à 8 °C) et laisser le produit s'équilibrer à température ambiante.

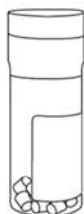

2

Préchauffer le bouillon d'enrichissement ou le diluant à une température comprise entre 35°C et 37°C.

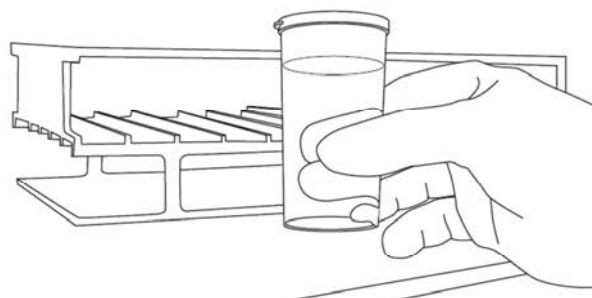

3

À l'aide d'une pince stérile, sortir une pastille et la placer dans un volume de bouillon d'enrichissement ou de diluant, conformément aux procédures d'utilisation du laboratoire. Ne pas enlever le dessicant



4

Reboucher immédiatement le flacon contenant les pastilles non utilisées et le replacer dans la zone de stockage réfrigérée (2°C à 8 °C).

Incuber une température comprise entre 35°C et 37°C pendant 30 minutes.



5

Vortexer ou mélanger complètement le produit reconstitué pour obtenir une solution homogène.



REMARQUE

PROCEDE QUALITATIF

Incuber le bouillon d'enrichissement conformément aux procédures d'utilisation normalisées du laboratoire. Au moins une fois pendant l'incubation du bouillon d'enrichissement (après 30 minutes d'incubation), mélanger le flacon pour garantir une distribution uniforme de la population de microorganisme reconstituée.

PROCEDE QUANTITATIF

Incuber le liquide de reconstitution inoculé à une température comprise entre 35°C et 37°C pendant 30 minutes. À la fin de l'incubation, mélanger soigneusement le liquide de reconstitution inoculé.

Terminer le test selon le protocole du laboratoire et relever les résultats.

EZ-SPORE™

DESCRIPTION

Les micro-organismes EZ-SPORE™ sont des spores lyophilisées sur pastille de gélatine de concentration connue.

Ces micro-organismes sont utilisés dans le cadre de validation de protocoles d'analyses de spores, analyse de la flore d'altération et pour les tests d'évaluation des compétences en microbiologie.

Ces souches ne sont pas destinées à valider les processus de stérilisation.

SOUCHOTHEQUE

3 souches

NOMBRE DE REPIQUAGES

4 passages ATCC maximum depuis la culture de référence

CONDITIONNEMENT

1 flacon contenant 10 pastilles d'une seule souche de micro-organisme

1 fiche d'instruction

DOCUMENT QUALITE

Document assurance qualité composé de :

- un certificat d'essai attesté de l'authenticité et de la traçabilité des souches indique le nombre de passages et la valeur quantitative du lot en UFC/ml. Ce certificat est détachable et autocollant.

CONCENTRATION

10^4 - 10^5 UFC / pastille.

DUREE DE CONSERVATION

2 ans de péremption à fabrication et 6 mois minimum chez l'utilisateur à 2-8°C.

DOMAINES D'APPLICATION

Laboratoires industriels.

TYPES DE TESTS


Validation de protocoles d'analyse des spores. Analyse de la flore d'altération. Tests de compétence du personnel.



EZ-SPORE™


1

Placer le flacon contenant les pastilles de micro-organismes lyophilisées à température ambiante et les laisser s'équilibrer.

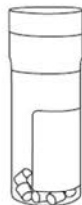

2

Pré-incuber le fluide de dilution à 35°C pendant 30 minutes.

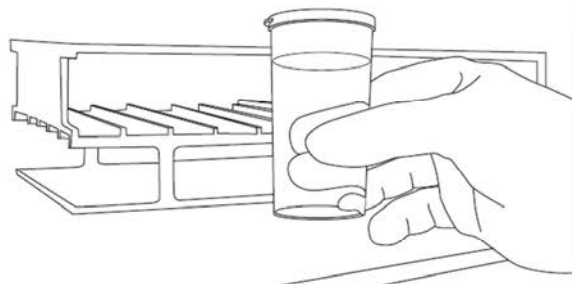

3

A l'aide d'une pince stérile, placer une pastille EZ-SPORE dans le fluide de dilution.
Ne pas retirer le dessiccant. Refermer immédiatement le bouchon et stocker à 2-8°C.



4

Incuber à 35°C pendant 30 minutes.



5

Mélanger jusqu'à obtention d'une suspension homogène.



6

Poursuivre le test selon le protocole du laboratoire.
La suspension doit être utilisée dans les 30 minutes.

EZ-PEC™

DESCRIPTION

Les micro-organismes EZ-PEC™ sont des souches de référence lyophilisées sur pastille de gélatine de concentration connue. Ces micro-organismes sont utilisés pour tester l'efficacité des antimicrobiens et l'efficacité de la conservation des produits contenant des conservateurs (challenge test). La concentration dans l'inoculum se situe entre 2.10^6 à $9.9.10^6$ UFC/0.1ml.

SOUCHOTHEQUE

8 souches

NOMBRE DE REPIQUAGES

4 passages ATCC maximum depuis la culture de référence

CONDITIONNEMENT

2 flacons contenant chacun 10 pastilles d'une seule souche de micro-organisme

10 flacons contenant 2ml de solution d'hydratation.

1 fiche d'instruction

DOCUMENT QUALITE

Document assurance qualité composé de :

- une étiquette du produit
- un certificat d'essai attesté de l'authenticité et de la traçabilité des souches indique le nombre de passages et la valeur moyenne quantitative du lot en UFC/ml. Ce certificat est détachable et autocollant.

CONCENTRATION

2.10^7 à $9.9.10^7$ UFC / pastille.

DUREE DE CONSERVATION

2 ans de péremption à fabrication et 6 mois minimum chez l'utilisateur à 2-8°C.

DOMAINES D'APPLICATION

Laboratoires cosmétiques et pharmaceutiques.


TYPES DE TESTS

Test l'efficacité des agents antimicrobiens et des conservateurs.



EZ-PEC™


1

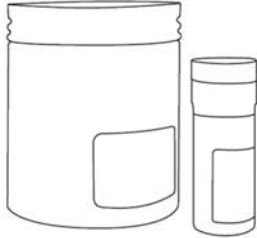


Sortir le flacon contenant les pastilles lyophilisées de la zone de stockage réfrigérée (2-8°C) et laisser le produit s'équilibrer à température ambiante.

2

AVANT l'emploi, porter le liquide de reconstitution et les diluants à une température comprise entre 35°C et 37°C.

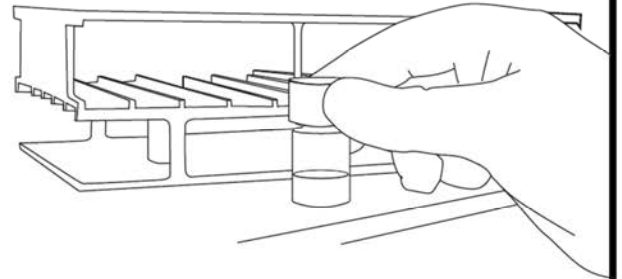

3

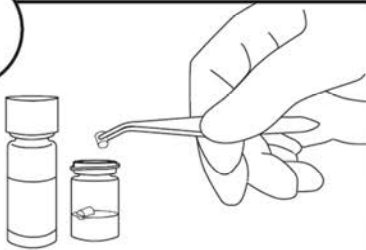


À l'aide d'une pince stérile, sortir 2 pastilles et les placer dans le flacon contenant 2 ml de liquide de reconstitution.

UTILISER DEUX PASTILLES

4

Reboucher immédiatement le flacon avec le bouchon en caoutchouc et remettre la pastille lyophilisée restante dans la zone réfrigérée de stockage (2-8°C).

Reboucher immédiatement le flacon contenant le produit reconstitué et le placer dans un incubateur entre 35°C et 37°C pendant 30 minutes pour garantir une reconstitution complète.

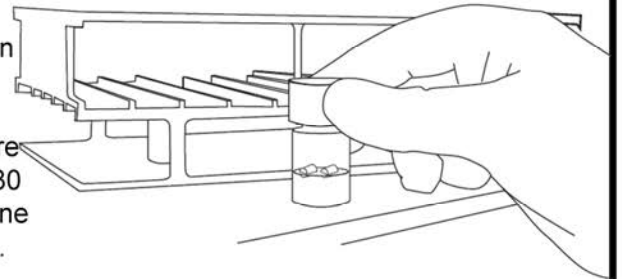

5

Immédiatement après l'incubation, vortexer le produit reconstitué pour obtenir une suspension homogène et une distribution uniforme de la souche dans la suspension. Une présence de particules noires ne nuit pas à la qualité du produit.



6

Prélever le volume adéquat avec une pipette stérile et transférer la suspension dans le produit à contaminer.



7

Poursuivre le test selon le protocole du laboratoire. La suspension doit être utilisée dans les 30 minutes qui suivent l'incubation.

EZ-ACCU SHOT™

DESCRIPTION

Les micro-organismes EZ-Accu Shot™ sont des souches de références lyophilisées sur pastille de gélatine, calibrées quantitativement. Ces micro-organismes sont utilisés dans le cadre de dénombrement rapide pour des tests de croissance sur milieux de culture. Avec la **dissolution instantanée** de la pastille dans le fluide hydratant, **aucune étape de pré-incubation n'est nécessaire**. Votre boîte de pétri est **ensemencée en quelques minutes**.



SOUCHOTHEQUE

Plus de 20 souches

NOMBRE DE REPIQUAGES

4 passages ATCC maximum depuis la culture de référence

CONDITIONNEMENT

5 flacons contenant 1 pastille d'une seule souche de micro-organisme

5 flacons de fluide hydratant de 1,2mL

1 fiche d'instruction

DOCUMENT QUALITE

Document assurance qualité composé de :

- un certificat d'essai attesté de l'authenticité et de la traçabilité des souches
- indique le nombre de passages et la valeur quantitative du lot en UFC/ml
- Ce certificat est détachable et autocollant.

CONCENTRATION

10 - 100 UFC / 0,1ml

DUREE DE CONSERVATION

2 ans de péremption à fabrication et 7 mois minimum chez l'utilisateur à 2-8°C.

DOMAINES D'APPLICATION

Laboratoires d'hygiène alimentaire.

TYPES DE TESTS

- Test de performance des milieux de culture - challenge test
- Test de micro-organismes spécifiques
- Test de stérilité


EZ-Accu Shot™

1

Sortir 1 tube de fluide hydratant et le sachet contenant la pastille lyophilisée de la zone de stockage réfrigérée. Laisser le sachet fermé et le liquide hydratant s'équilibrer à température ambiante (pendant environ 30 minutes).




2

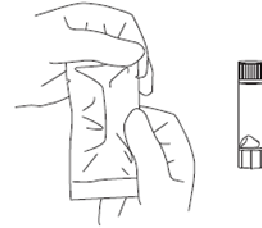

Déchirer le sachet et sortir le tube contenant la pastille lyophilisée.

3

Ouvrir le tube contenant la pastille et celui contenant le fluide hydratant. Verser la pastille dans le tube contenant 1,2mL de fluide hydratant. **Seulement une pastille doit être utilisée pour obtenir la concentration du challenge test de 10-100 UFC par 0,1mL sur un milieu de culture non-sélectif.** Refermer immédiatement le tube.

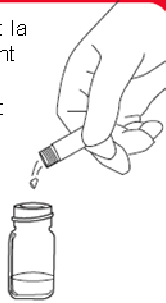



4

Vortexer le tube jusqu'à ce que la pastille se soit complètement dissoute et que la suspension soit devenue homogène.



5

Avec une pipette stérile, transférer 0,1mL de la suspension sur la boîte de pétri à tester (0,1mL contient 10-100 UFC). Étaler l'inoculum sur la boîte de pétri à l'aide d'un étaleur stérile. Remarque : La suspension peut être réfrigérée et utilisée pendant 8 heures à l'exception de la référence 0484A (à utiliser sous 30 minutes). Après utilisation, replacer immédiatement la suspension au réfrigérateur.

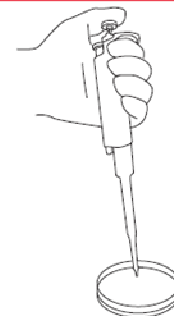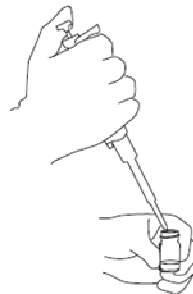

6

Poursuivre le test selon le protocole du laboratoire. Réfrigérer la suspension entre 2-8°C si elle doit être réutilisée.



EPOWER™ CRM

DESCRIPTION

Les micro-organismes Epower™ CRM sont des préparations de micro-organismes de contrôle titrées. Ces préparations lyophilisées s'utilisent comme souches de tests d'épreuve de contrôle qualité lorsqu'une concentration prédéterminée est nécessaire.

Ce matériau de référence certifié (MRC) est une préparation pure, homogène et stable de micro-organismes lyophilisés possédant des caractéristiques microscopiques, macroscopiques, phénotypiques et génotypiques bien définies. Ces caractéristiques sont testées sur un nombre statistiquement représentatif d'échantillons provenant de chaque nouveau lot.

SOUCHOTHEQUE

Plus de 50 souches

NOMBRE DE REPIQUAGES

1 passage maximum depuis la culture de référence

CONDITIONNEMENT

1 flacon contenant 10 pastilles d'une seule souche de micro-organisme
1 fiche d'instruction

DOCUMENT QUALITE

Documents d'assurance qualité composés d'un certificat d'analyse avec les éléments suivants :
Attestation de l'authenticité et de la traçabilité des micro-organismes - nombre de passage - sous typage par PFGE - caractéristiques microscopiques, macroscopiques et phénotypiques
valeur certifiée de chaque lot en UFC/ml - incertitude - écart type tel que requis par l'**ISO Guide 34** pour producteurs de matériaux de référence

CONCENTRATION

10^2 - 10^8 UFC / pastille.

DUREE DE CONSERVATION

2 ans de péremption à fabrication et 6 mois minimum chez l'utilisateur à 2-8°C.

DOMAINES D'APPLICATION

Laboratoire de microbiologie accrédité ISO 17025

TYPES DE TESTS

Vérification du fonctionnement d'un système d'inoculation automatisé, formation ou évaluation de la performance du personnel de laboratoire

REMARQUE

La valeur quantitative moyenne du lot est indiquée par la lettre et le chiffre inscrit à dans la référence

Exemple : 0791E3 signifie que la valeur quantitative moyenne est comprise entre 1000 et 10 000 UFC.



MODE D'EMPLOI (voir page Epower n°18)

RECOMMANDATIONS POUR L'ENSEMENCEMENT DES MICRO-ORGANISMES

LYFO DISK® ET KWIK-STIK™

PROTOCOLES RECOMMANDES SELON LES MICRO-ORGANISMES

MICROBIOLOGICS® a listé les microorganismes disponibles en Lyfo Disk et Kwik-Stik et leur a attribué des recommandations de protocoles d'ensemencement. Ceux-ci sont listés en seconde partie. Attention toutefois, certains microorganismes nécessitent une modification du protocole conseillé. Cette modification est indiquée en bleue dans la liste ci-dessous.

MICRO-ORGANISME	PROTOCOLE
<i>Acetobacter sp.</i> Incuber à 25°C en atmosphère à CO ₂ - 3 à 4 jours.	3
<i>Achromobacter sp.</i>	1
<i>Acinetobacter sp.</i>	1
<i>Actinobacillus sp.</i>	3
<i>Actinomyces sp.</i>	4
<i>Aerococcus sp.</i>	1
<i>Aeromonas sp.</i> <i>A. hydrophila</i> doit être incubée à 30°C. <i>A. salmonicida</i> doit être incubée à 25°C.	2
<i>Aggregatibacter sp.</i>	3
<i>Alcaligenes sp.</i>	1
<i>Alicyclobacillus sp.</i> <i>A. acidoterrestris</i> ATCC® 49025™ doit être incubée à 45°C	12
<i>Alloiococcus sp.</i>	2
<i>Amylomyces sp.</i>	5
<i>Aneurinibacillus sp.</i>	1
<i>Aquaspirillum sp.</i> Incuber à 25°C - 6 jours	1
<i>Arcanobacterium sp.</i>	2
<i>Arthrobacter sp.</i> Incubation à 25°C	1
<i>Aspergillus sp.</i> <i>A. flavus</i> ne pousse pas correctement sur la gélose PCA.	5
<i>Bacillus sp.</i> Certaines espèces de <i>Bacillus</i> montrent un meilleur rendement lorsque la boîte de Pétri est conservée à température ambiante plutôt que 2 à 8°C.	1
<i>Bacteroides sp.</i> <i>B. ureolyticus</i> doit être incubée 5 jours. Les colonies sont très petites. Plusieurs boîtes doivent être inoculées afin d'obtenir une quantité suffisante de microorganismes à tester.	4
<i>Bifidobacterium sp.</i>	4
<i>Bordetella bronchiseptica</i>	20
<i>Bordetella parapertussis</i>	21
<i>Bordetella pertussis</i>	21
<i>Brevibacillus sp.</i>	1
<i>Brevundimonas sp.</i>	1
<i>Brochothrix sp.</i> Incuber à 25°C	1
<i>Budvicia sp.</i> Incuber à 25°C	1
<i>Burkholderia sp.</i>	1

MICRO-ORGANISME	PROTOCOLE
<i>Campylobacter sp.</i> La gélose chocolat est le meilleur milieu pour la croissance de <i>C. jejuni</i> . NE PAS ouvrir les boîtes ensemencées durant les premières 48 heures.	6
<i>Candida sp.</i>	5
<i>Capnocytophaga sp.</i>	3
<i>Cedecea sp.</i>	1
<i>Cellulosimicrobium sp.</i>	1
<i>Citrobacter sp.</i>	1
<i>Cladosporium sp.</i>	5
<i>Clostridium sp.</i> <i>C. difficile</i> , <i>C. sordellii</i> et <i>C. tetani</i> ne pousseront que sur une gélose au sang en anaérobiose.	4
<i>Corynebacterium sp.</i> Utiliser le protocole 2 pour <i>C. urealyticum</i> .	1
<i>Cronobacter sp.</i>	1
<i>Curtobacterium sp.</i>	1
<i>Cryptococcus sp.</i> <i>Cryptococcus</i> DOIT être incubée à 25°C pour assurer sa croissance. <i>C. gattii</i> pousse mieux sur une gélose à l'extrait de malt ou sur gélose Sabouraud dextrose Emmons.	5
<i>Deinococcus sp.</i>	1
<i>Delftia sp.</i>	1
<i>Desulfotomaculum sp.</i>	22
<i>Edwardsiella sp.</i>	1
<i>Eggerthella sp.</i>	4
<i>Eikenella sp.</i>	3
<i>Elizabethkingia sp.</i>	1
<i>Enterobacter sp.</i>	1
<i>Enterococcus sp.</i>	1
<i>Erysipelothrix sp.</i>	2
<i>Escherichia sp.</i>	1
<i>Exiguobacterium sp.</i>	1
<i>Fingoldia sp.</i> Incuber 72 à 96 heures en anaérobiose	4
<i>Flavobacterium sp.</i> Incuber à 30°C	1
<i>Fluoribacter sp.</i>	8
<i>Fusarium sp.</i>	5
<i>Fusobacterium sp.</i>	4
<i>Gardnerella sp.</i>	9
<i>Gemella sp.</i>	4
<i>Geobacillus sp.</i> <i>G. stearothermophilus</i> doit être incubée à 55°C. <i>G. stearothermophilus</i> ATCC® 12978™ ne pousse pas sur une gélose au sang de mouton.	1

MICRO-ORGANISME	PROTOCOLE
<i>Geotrichum sp.</i>	5
<i>Granulicatella adiacens</i>	24
<i>Haemophilus sp.</i>	3
<i>Hafnia sp.</i>	1
<i>Issatchenkia sp.</i>	5
<i>Kingella sp.</i> Incuber dans une atmosphère enrichie avec 5 à 10% de CO ₂ .	2
<i>Klebsiella sp.</i>	1
<i>Kloeckera sp.</i>	5
<i>Kocuria sp.</i> <i>K. rosea</i> doit être incubée à 25°C.	1
<i>Lactobacillus sp.</i>	11
<i>Lactococcus sp.</i>	2
<i>Leclercia sp.</i>	1
<i>Legionella sp.</i>	8
<i>Listeria sp.</i>	1
<i>Lysinibacillus sp.</i>	1
<i>Macrococcus sp.</i>	1
<i>Malassezia sp.</i>	16
<i>Mannheimia sp.</i>	1
<i>Methylobacterium sp.</i> Incuber à 25°C pendant 5 jours. Meilleure croissance sur une gélose PCA. Ne pousse pas sur une gélose TSA ou une gélose non sélective au sang de mouton.	1
<i>Microbacterium sp.</i> Incuber à 30°C.	1
<i>Micrococcus sp.</i> La gélose TSA ou la gélose non sélective au sang de mouton sont les meilleurs milieux pour la croissance des souches NCIMB 8166 et ATCC® 10240™.	1
<i>Microsporum sp.</i> <i>M. canis</i> ne pousse pas bien sur une gélose Sabouraud dextrose.	5
<i>Moraxella sp.</i>	2
<i>Morganella sp.</i>	1
<i>Mycobacterium sp.</i> <i>M. gordonae</i> , <i>M. terrae</i> et <i>M. tuberculosis</i> peuvent nécessiter jusqu'à un mois d'incubation. <i>M. haemophilium</i> doit être ensemencée sur une gélose Middlebrook 7H11 et incubée à 30°C en atmosphère enrichie avec 5 à 7% de CO ₂ pendant 3 à 4 semaines. Une bandelette de facteur X peut être placée sur la gélose afin de faciliter la croissance du microorganisme.	7
<i>Mycoplasma bovis</i>	23
<i>Mycoplasma gallisepticum</i>	17
<i>Mycoplasma hominis</i>	13
<i>Mycoplasma hyorhinis</i>	18
<i>Mycoplasma orale</i>	15
<i>Mycoplasma pneumoniae</i>	14
<i>Mycoplasma synoviae</i>	19
<i>Myroides sp.</i>	2
<i>Neisseria sp.</i> La gélose chocolat est le meilleur milieu pour la croissance des espèces de <i>Neisseria</i> . NE PAS ouvrir la boîte de pétri pendant les premières 48 heures d'incubation si une jarre d'anaérobiose est utilisée.	3
<i>Nocardia sp.</i>	1
<i>Novosphingobium sp.</i> Incuber à 25°C	1
<i>Ochrobactrum sp.</i>	1
<i>Oligella sp.</i>	2
<i>Paecilomyces sp.</i>	5

MICRO-ORGANISME	PROTOCOLE
<i>Paenibacillus sp.</i> <i>P. larvae</i> doit être incubée à 30°C sous atmosphère aérobie.	1
<i>Parabacteroides sp.</i>	4
<i>Parvimonas sp.</i> <i>P. micra</i> nécessite 5 à 7 jours d'incubation sous atmosphère anaérobie.	4
<i>Pasteurella sp.</i>	2
<i>Pediococcus sp.</i> <i>P. damnosus</i> peut croître dans un bouillon MRS, incubée à 25°C pendant 48 à 72 heures. Repiquer la souche sur une gélose MRS lorsque le bouillon devient trouble. Incuber les boîtes à 25°C dans une atmosphère enrichie avec 5 à 7% de CO ₂ pendant 72 à 96 heures. Sinon, le micro-organisme lyophilisé peut croître directement sur une gélose MRS à 25°C dans une atmosphère enrichie avec 5 à 10% de CO ₂ pendant 5 à 7 jours.	11
<i>Penicillium sp.</i>	5
<i>Peptoniphilus sp.</i> Incuber 72 à 96 heures en atmosphère anaérobie.	4
<i>Peptostreptococcus sp.</i>	4
<i>Plesiomonas sp.</i>	1
<i>Porphyromonas sp.</i> Incuber 5 à 7 jours en atmosphère anaérobie.	4
<i>Prevotella sp.</i> 5 à 7 jours d'incubation en condition anaérobie.	4
<i>Propionibacterium sp.</i> 3 à 5 jours d'incubation en condition anaérobie.	4
<i>Proteus sp.</i> <i>P. hauseri</i> pousse mieux sur une gélose au sang ou du TSA.	1
<i>Prototheca sp.</i>	5
<i>Providencia sp.</i>	1
<i>Pseudomonas sp.</i> <i>P. fluorescens</i> doit être incubée à 25°C. <i>Pseudomonas species</i> ATCC® 51821™ doit être incubée à 30°C	1
<i>Ralstonia sp.</i>	1
<i>Raoultella sp.</i>	1
<i>Rhizopus sp.</i>	5
<i>Rhodococcus sp.</i>	2
<i>Rhodotorula sp.</i>	5
<i>Saccharomyces sp.</i> La gélose Sabouraud dextrose Emmons est le meilleur milieu pour la croissance de <i>Saccharomyces sp.</i>	5
<i>Salmonella sp.</i>	1
<i>Scopulariopsis sp.</i>	5
<i>Serratia sp.</i>	1
<i>Shewanella sp.</i>	10
<i>Shigella sp.</i>	1
<i>Sordaria sp.</i> <i>Sordaria sp.</i> sporule mieux sur gélose Sabouraud dextrose Emmons que sur gélose Sabouraud dextrose.	5
<i>Spingobacterium sp.</i>	1
<i>Sphingomonas sp.</i> Incuber à 25°C.	1
<i>Sporidobolus sp.</i>	5

MICRO-ORGANISME	PROTOCOLE
<i>Staphylococcus sp.</i> Le degré de résistance de <i>S. aureus</i> ATCC® 700699™ à la vancomycine tend à diminuer en fonction de l'âge de la souche, du type de milieu de culture et du nombre de repiquages. Pour obtenir de meilleurs résultats, inoculer la souche dans une gélose infusion cœur cerveau contenant 4µg/mL de vancomycine.	1
<i>Stenotrophomonas sp.</i> Incuber à 30°C.	1
<i>Streptococcus sp.</i> <i>S. cricetus</i> doit être incubée dans un environnement microaérophile. <i>Streptococcus species</i> ATCC® 12392™ doit être incubée en atmosphère CO ₂ .	2
<i>Streptomyces sp.</i> <i>Streptomyces sp.</i> ne pousse pas sur gélose glucosée à la pomme de terre.	5

MICRO-ORGANISME	PROTOCOLE
<i>Thermoanaerobacterium sp.</i> <i>T. thermosaccharolyticum</i> ATCC® 7956™, croît sur gélose à la viande cuite. Incubation à 45°C pendant 72 heures. Après cette incubation, cette souche peut pousser sur gélose au sang pour germes anaérobies qui sera incubée à 45°C pendant 72 heures en conditions anaérobies.	4
<i>Trichophyton sp.</i>	5
<i>Trichosporon sp.</i>	5
<i>Ureaplasma sp.</i>	13
<i>Veillonella sp.</i>	4
<i>Vibrio sp.</i>	10
<i>Virgibacillus sp.</i>	1
<i>Yarrowia sp.</i>	5
<i>Yersinia sp.</i>	1
<i>Zygosaccharomyces sp.</i> <i>Z. bailii</i> ATCC® MYA-4549™ ne pousse pas bien sur une gélose non sélective au sang de mouton, sur gélose nutritive ou gélose TSA.	5

PROTOCOLES D'ENSEMENCEMENT

MICROBIOLOGICS® recommande un premier ensemencement sur une gélose non sélective. Un premier ensemencement sur un milieu liquide ne se fait que dans des situations particulières ou quand cela est recommandé.

PROTOCOLE 1

✓ TSA (gélose trypticase soja), gélose non-sélective au sang de mouton, PCA (gélose pour dénombrement) ou gélose nutritive - 35°C en aérobie - 24 à 48 heures.

PROTOCOLE 2

✓ Gélose non-sélective au sang de mouton - 35°C en aérobie - 24 à 72 heures.
La croissance de certaines espèces comme *Streptococcus* et *Arcanobacterium* est renforcée par un enrichissement en CO₂ de l'atmosphère d'incubation. 5% de CO₂ est recommandé pour la culture de *Streptococcus pneumoniae* et d'autres espèces de streptocoques du groupe viridans.

PROTOCOLE 3

✓ Gélose chocolat - 35°C en atmosphère contenant 5 à 7% de CO₂ - 24 à 48 heures.

PROTOCOLE 4

✓ Gélose au sang - 35°C en atmosphère anaérobie - 48 à 72 heures.
✓ Certaines bactéries anaérobies strictes ont besoin de 5 à 7 jours d'incubation pour une croissance suffisante.
✓ Gélose nutritive, gélose trypticase soja, PCA (gélose pour dénombrement) sont des alternatives appropriées pour les *Clostridium* spp. - 24 heures supplémentaires.

PROTOCOLE 5

✓ Gélose Sabouraud dextrose, Emmons - 25°C en atmosphère aérobie - 2 à 7 jours.
✓ Gélose non-sélective au sang de mouton est une méthode alternative appropriée.
✓ Gélose nutritive, gélose trypticase soja (TSA), gélose dextrosée à la pomme de terre et gélose pour dénombrement (PCA) sont des alternatives appropriées - 24 heures supplémentaires.

PROTOCOLE 6

✓ Gélose chocolat - 35°C en atmosphère microaérophilique - 48 à 72 heures.

PROTOCOLE 7

- ✓ Gélose Löwenstein-Jensen ou gélose de Middelbrook - 35°C en atmosphère aérobie ou contenant 5 à 7% de CO₂ - jusqu'à 7 jours. *M. fortuitum* subsp. *fortuitum*, *M. peregrinum* et *M. smegmatis* vont aussi pousser sur gélose TSA avec quelques jours supplémentaires d'incubation.

PROTOCOLE 8

- ✓ Gélose tamponnée à l'extrait de levure et au charbon actif (BCYE) - 35°C en atmosphère aérobie - 3 à 5 jours.

PROTOCOLE 9

- ✓ Agar V ou gélose Chocolat - 35°C en atmosphère enrichie avec 5 à 7% de CO₂ - 48 heures.

PROTOCOLE 10

- ✓ Réhydrater dans un bouillon cœur-cerveille stérile (BHI), du bouillon trypticase soja ou une solution saline à 0,85%. La réhydratation dans de l'eau entraînerait une diminution ou une absence de rendement. Le liquide d'hydratation d'un Kwik-Stik™ est également utilisable.
- ✓ Ensemencer une gélose TSA - 35°C en aérobie - 24 à 48 heures.
- ✓ *Vibrio* sp. pousse aussi sur une gélose marine.

PROTOCOLE 11

- ✓ Dissoudre la souche dans du bouillon MRS (Man Ragosa Sharpe) - 35°C en aérobie - 48 heures. Repiquer sur gélose Columbia CNA au sang de mouton ou gélose TSA avec sang de mouton - 35°C en atmosphère enrichie avec 5 à 7 % de CO₂ - 48 heures. Certaines espèces de *Lactobacillus* comme *L. fermentum*, *L. paracasei* subsp. *paracasei*, *L. plantarum*, *L. rhamnosus* et *L. sakei* ne nécessitent pas de revivification dans du bouillon MRS pour *Lactobacilles*. Elles peuvent être ensemencées directement sur gélose Columbia CNA au sang de mouton ou sur gélose TSA au sang de mouton - 35°C en atmosphère enrichie avec 5 à 7 % de CO₂ - 48 heures.

PROTOCOLE 12

- ✓ Gélose dextrosée à la pomme de terre - 55°C en aérobie - 24 à 48 heures.

PROTOCOLE 13

- ✓ Réhydrater une pastille de *M. hominis* et *Ureaplasma* sp. dans un bouillon Arginine 10B. Sinon, inoculer le bouillon avec un Kwik-Stik. Effectuer des dilutions en série (par exemple 1:10, 1:100, 1:1000, 1:10 000). Incuber à 35°C en aérobie. Dès que le tube d'arginine vire au rose (24 à 48 heures), inoculer 0,1 mL de bouillon sur gélose A-8 et réaliser un isolement par stries. NE PAS UTILISER d'écouvillon en coton ou une tige en bois. Incuber *Mycoplasma* à 35°C en atmosphère enrichie avec 5 à 7 % de CO₂. Incuber *Ureaplasma* à 35°C en anaérobie jusqu'à 96 heures. Examiner les boîtes au microscope.

PROTOCOLE 14

- ✓ Réhydrater une pastille de *M. pneumoniae* dans un bouillon glucosé SP4. Sinon inoculer le bouillon avec un Kwik-Stik. Effectuer des dilutions en série (par exemple 1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 1:32). Incuber à 35°C en aérobie. Dès que le bouillon vire du rouge au jaune (1 à 4 semaines), inoculer 0,2 mL de bouillon sur une gélose glucosée SP4 et réaliser un isolement par stries. NE PAS UTILISER d'écouvillon en coton ou une tige en bois. Incuber à 35°C en atmosphère à CO₂, de préférence dans une jarre à CO₂ pendant 5 à 15 jours. Examiner les boîtes au microscope.

PROTOCOLE 15

- ✓ Réhydrater une pastille de *M. orale* dans un bouillon Arginine 10B. Sinon inoculer le bouillon avec un Kwik-Stik. Effectuer des dilutions en série (par exemple 1:10, 1:100, 1:1000). Incuber à 35°C en aérobie. Dès que le bouillon vire du jaune au rose (48 à 72 heures), inoculer 0,2 mL de bouillon sur une gélose glucosée SP4 et réaliser un isolement par stries. NE PAS UTILISER d'écouvillon en coton ou une tige en bois. Incuber à 35°C en anaérobie pendant 3 à 6 jours. Examiner les boîtes au microscope.

PROTOCOLE 16

- ✓ Gélose Leeming Notman - 30°C sous atmosphère aérobie - 72 heures.

PROTOCOLE 17

- ✓ Réhydrater une pastille de *M. gallisepticum* dans un bouillon glucosé SP4.
Sinon inoculer le bouillon avec un Kwik-Stik.
Effectuer des dilutions en série (par exemple 1:2, 1:4).
Incuber à 35°C en aérobie.
Dès que le bouillon vire du rouge au jaune (4 jours à 2 semaines), inoculer 0,2 mL de bouillon sur une gélose glucosée SP4 et réaliser un isolement par stries. NE PAS UTILISER d'écouvillon en coton ou une tige en bois.
Incuber à 35°C en atmosphère à CO₂, de préférence dans une jarre, pendant 3 jours à 2 semaines.
Examiner les boîtes au microscope.

PROTOCOLE 18

- ✓ Réhydrater une pastille de *M. hyorhinis* dans un bouillon glucosé SP4.
Sinon inoculer le bouillon avec un Kwik-Stik.
Effectuer des dilutions en série (par exemple 1:10, 1:100, 1:1000).
Incuber à 35°C en aérobie.
Dès que le bouillon vire du rouge au jaune (4 jours à 2 semaines), inoculer 0,2 mL de bouillon sur une gélose glucosée SP4 et réaliser un isolement par stries. NE PAS UTILISER d'écouvillon en coton ou une tige en bois.
Incuber à 35°C en atmosphère à CO₂, de préférence dans une jarre, pendant 2 à 10 jours. Examiner les boîtes au microscope.

PROTOCOLE 19

- ✓ Réhydrater une pastille de *M. synoviae* dans un bouillon glucosé SP4.
Sinon inoculer le bouillon avec un Kwik-Stik.
Effectuer des dilutions en série (par exemple 1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 1:32).
Incuber à 35°C dans une atmosphère enrichie avec 5- 10% de CO₂, pendant 7 jours.
Après 7 jours d'incubation (pas de changement de coloration), inoculer 0,2 mL de bouillon sur une gélose glucosée SP4 et réaliser un isolement par stries. NE PAS UTILISER d'écouvillon en coton ou une tige en bois.
Incuber à 35°C en atmosphère à CO₂, de préférence dans une jarre, pendant 1 à 4 semaines.
Examiner les boîtes au microscope.

PROTOCOLE 20

- ✓ Gélose chocolat, gélose au sang, gélose TSA, gélose Bordet Gengou avec 15% de sang défibriné de mouton - 35°C en aérobie - 24 à 48 heures. Les géloses PCA ou nutritive sont des alternatives appropriées avec 24 heures d'incubation supplémentaires.

PROTOCOLE 21

- ✓ Gélose chocolat ou gélose Bordet Gengou avec 15% de sang défibriné de mouton - 35°C en aérobie - 2 jours à 1 semaine.
B. pertussis (ATCC® 9340™) et *B. pertussis* (ATCC® 9797™) nécessitent l'utilisation de la gélose Bordet Gengou avec 15% de sang défibriné de mouton.

PROTOCOLE 22

- ✓ Préparer un bouillon ISF (Infant Soy Formula) en suivant les étapes suivantes :
 - 1-Remplir les tubes avec 10 mL d'ISF
 - 2-Placer un clou en acier ou en fer de 38 mm de longueur dans chaque tube
 - 3-Stériliser le bouillon

Inoculer le bouillon ISF avec un Lyfo Disk ou un Kwik-Stik.

Effectuer 2 dilutions, 1 :10 et 1 :100.

Ensemencer la suspension non diluée et les 2 dilutions.

Il est nécessaire d'ensemencer les échantillons dilués car à fortes concentrations, les colonies sont en « pointe d'épingle » ce qui rend les caractéristiques de ces colonies difficiles à observer.

Incubation à 55°C pendant 48 heures en atmosphère anaérobie.

Le milieu va devenir gris, ce qui indique une croissance. Repiquer avec un écouvillon sur une gélose sulfite. La gélose sulfite est utilisée pour détecter les microorganismes anaérobies thermophiles qui produisent du sulfite.

Incuber en atmosphère anaérobie à 55°C pendant 7 jours.

PROTOCOLE 23

- ✓ Inoculer un bouillon Mycoplasme avec un Lyfo Disk ou un Kwik-Stik.

Effectuer des dilutions au 1 :10, 1 :100 et 1 :1000 dans ce même bouillon.

Incuber à 35°C pendant 48 heures.

Ensuite, ensemencer 0,2 mL de la culture trouble sur une gélose Mycoplasme.

Incuber à 35°C pendant 3 à 7 jours en atmosphère enrichie avec 5 à 7% de CO₂. NE PAS UTILISER d'écouvillon en coton ou une tige en bois.

Examiner les boîtes au microscope.

PROTOCOLE 24

- ✓ Gélose au sang de mouton supplémentée en Pyridoxal - 35°C en atmosphère enrichie avec 5 à 7% de CO₂ - 24 à 48 heures.

SOUCHES MICROBIOLOGICS

REMARQUES IMPORTANTES

EXPORTATION DES ETATS-UNIS

Certaines souches ne peuvent être exportées des Etats-Unis. Celles-ci ne sont donc pas commercialisables en France par Microbiologics. Dans certains cas, un conditionnement à façon via la souchothèque ATCC peut être proposé en alternative. Notre équipe commerciale se tient à votre disposition pour vous donner plus d'informations à l'adresse mail suivante : commercial@humeau.com.

LICENCE D'EXPORTATION

Certaines souches (STEC) nécessitent une licence d'exportation pour être exportées des Etats-Unis. Elles sont identifiables en orange. Nous vous envoyons un document de demande de « licence d'exportation » au moment de votre commande. Une fois complété par vos soins, nous le transmettons à Microbiologics.

SOUCHES RECOMMANDEES DANS LA NORME NF EN ISO 11133:2014 VERSION JUILLET 2014 MICROBIOLOGIE ALIMENTAIRE

Recommandations selon NF EN ISO 11133				Références proposées par Laboratoires Humeau					
WDCM	SOUCHE	Méthode de contrôle		QUALITATIF	QUANTITATIF				
		Qualitative	Quantitative	KWIK-STIK™	Epower™	EZ-FPC™	EZ-Accu Shot™	EZ-PEC™	EZ-SPORE™
00001	<i>Bacillus cereus</i>	X	X	816.200256.02					816.100256.02
00003	<i>Bacillus subtilis subsp. Spizizenii</i>	X	X	816.200486.02	816.300486.02		816.710486.02		
00004	<i>Campylobacter coli</i>	X	X	816.200121.02					
00005	<i>Campylobacter jejuni subsp. jejuni</i>	X	X	816.200481.02					
00006	<i>Citrobacter freundii</i>	X		816.200229.02					
00007	<i>Clostridium perfringens (haemolytic)</i>	X	X	816.200318.02	816.300318.02				
00009	<i>Enterococcus faecalis</i>	X	X	816.200367.02					
00012	<i>Escherichia coli</i>	X	X	816.200483.02	816.300483.02		816.710483.02		
00013	<i>Escherichia coli</i>	X	X	816.200335.02	816.300335.02				
00014	<i>Escherichia coli serotype O157:H7 (non-toxigenic)</i>	X		816.200231.02					
00015	<i>Lactobacillus sakei subsp. Sakei</i>		X	816.200128.02					
00016	<i>Lactococcus lactis subsp. lactis</i>		X	816.200149.02					
00017	<i>Listeria innocua</i>	X		816.200814.02					
00021	<i>Listeria monocytogenes serovar 4b</i>	X	X	816.200129.02	816.300129.02				
00023	<i>Proteus mirabilis</i>	X	X	816.200000.02					
00025	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	X	X	816.200353.02	816.300353.02				

SOUCHES RECOMMANDEES DANS LA NORME NF EN ISO 11133:2014 VERSION JUILLET 2014 MICROBIOLOGIE ALIMENTAIRE

Recommandations selon NF EN ISO 11133				Références proposées par Laboratoires Humeau					
WDCM	SOUCHE	Méthode de contrôle		QUALITATIF	QUANTITATIF				
		Qualitative	Quantitative	KWIK-STIK™	Epower™	EZ-FPC™	EZ-Accu Shot™	EZ-PEC™	EZ-SPORE™
00030	<i>Salmonella enterica subsp. enterica</i>	X	X	816.200345.02					
00031	<i>Salmonella typhimurium</i> now <i>Salmonella enterica subsp. enterica serotype typhimurium</i>	X	X	816.200363.02			816.710363.02		
00032	<i>Staphylococcus aureus</i>	X	X	816.200485.02	816.300485.02	816.900485.02	816.710485.02		
00034	<i>Staphylococcus aureus</i>	X	X	816.200360.02	816.300360.02	816.500360.02	816.710360.02		
00036	<i>Staphylococcus epidermidis</i>	X		816.200371.02					
00038	<i>Yersinia enterocolitica biotype 1 serotype 0:8</i>	X		816.200938.02					
00053	<i>Aspergillus brasiliensis</i>		X		816.300392.02	816.500392.02	816.710392.02	816.900392.02	
00054	<i>Candida albicans</i>		X		816.300443.02		816.710443.02		
00058	<i>Saccharomyces cerevisiae</i>		X				816.710699.02		
00080	<i>Clostridium perfringens (non-haemolytic)</i>		X	816.200123.02					
00087	<i>Enterococcus faecalis</i>	X	X	816.200366.02	816.300366.02		816.710366.02		
00090	<i>Escherichia coli</i>	X		816.200465.02					
00109	<i>Listeria monocytogenes serovar 1/2a</i>	X	X	816.201190.02					
00115	<i>Pseudomonas fluorescens</i>		X	816.200241.02					
00116	<i>Pseudomonas fragi</i>		X	816.201194.02					
00156	<i>Campylobacter jejuni</i>	X	X	816.200325.02					

SOUCHES RECOMMANDEES DANS LA NORME NF EN ISO 11133:2014 VERSION JUILLET 2014 MICROBIOLOGIE ALIMENTAIRE

Recommandations selon NF EN ISO 11133				Références proposées par Laboratoires Humeau					
WDCM	SOUCHE	Méthode de contrôle		QUALITATIF	QUANTITATIF				
		Qualitative	Quantitative	KWIK-STIK™	Epower™	EZ-FPC™	EZ-Accu Shot™	EZ-PEC™	EZ-SPORE™
00158	<i>Pediococcus pentosaceus</i>		X	816.201075.02					
00159	<i>Staphylococcus saprophyticus</i> subsp. <i>saprophyticus</i>	X		816.200494.02					
00160	<i>Yersinia enterocolitica</i> biotype 1 serotype 0:9	X		816.200316.02					
00181	<i>Mucor racemosus</i>		X	816.001142.02					
00182	<i>Wallemia sebi</i>		X	816.001141.02					
00183	<i>Aspergillus restrictus</i>		X	816.001140.02					
00184	<i>Eurotium rubrum</i>		X	816.201160.02					
00185	<i>Vibrio parahaemolyticus</i>	X							
00186	<i>Vibrio furnissi</i>	X		816.200720.02					
00187	<i>Vibrio vulnificus</i>	X							
00202	<i>Escherichia coli</i>	X	X	816.201192.02					
00203	<i>Vibrio Cholerae non-01 / non-0139</i>	X							

CATALOGUE MICROBIOLOGIE ALIMENTAIRE

Référence Microbiologies	Gamme	Souche	Prix de vente 2016 HT susceptible d'évoluer	Commentaire
HF0532	EZ-Accu Shot™ / 5	1.2 ml Hydrating Fluid for EZ-Accu Shot™ / 5	51,90 €	10-100 CFU/0,1ml - Not for use with Pseudomonas
HF0533	EZ-Accu Shot™ / 5	1.2 ml Hydrating Fluid for Pseudomonas	51,90 €	10-100 CFU/0,1ml
0511P	KWIK-STIK™ / 2	Acetobacter aceti ATCC® 15973™*	69,50 €	
0511K	KWIK-STIK™ / 6	Acetobacter aceti ATCC® 15973™*	187,55 €	
0511L	LYFO DISK® / 6	Acetobacter aceti ATCC® 15973™*	166,80 €	
0516P	KWIK-STIK™ / 2	Achromobacter xylosoxidans ATCC® 27061™*	76,80 €	
0516K	KWIK-STIK™ / 6	Achromobacter xylosoxidans ATCC® 27061™*	207,50 €	
0516L	LYFO DISK® / 6	Achromobacter xylosoxidans ATCC® 27061™*	192,40 €	
0357P	KWIK-STIK™ / 2	Acinetobacter baumannii ATCC® 19606™*	60,45 €	
0357K	KWIK-STIK™ / 6	Acinetobacter baumannii ATCC® 19606™*	161,00 €	
0357L	LYFO DISK® / 6	Acinetobacter baumannii ATCC® 19606™*	141,10 €	
01057P	KWIK-STIK™ / 2	Acinetobacter baumannii ATCC® BAA-1605™*	87,35 €	multi-drug resistant
01057K	KWIK-STIK™ / 6	Acinetobacter baumannii ATCC® BAA-1605™*	235,85 €	multi-drug resistant
01057L	LYFO DISK® / 6	Acinetobacter baumannii ATCC® BAA-1605™*	219,75 €	multi-drug resistant
0119P	KWIK-STIK™ / 2	Acinetobacter baumannii ATCC® BAA-747™*	76,80 €	
0119K	KWIK-STIK™ / 6	Acinetobacter baumannii ATCC® BAA-747™*	207,50 €	
0119L	LYFO DISK® / 6	Acinetobacter baumannii ATCC® BAA-747™*	192,40 €	
0599P	KWIK-STIK™ / 2	Acinetobacter baumannii NCIMB 12457	69,50 €	
0599K	KWIK-STIK™ / 6	Acinetobacter baumannii NCIMB 12457	187,55 €	
0599L	LYFO DISK® / 6	Acinetobacter baumannii NCIMB 12457	166,80 €	
0609P	KWIK-STIK™ / 2	Acinetobacter haemolyticus ATCC® 19002™*	87,35 €	
0609K	KWIK-STIK™ / 6	Acinetobacter haemolyticus ATCC® 19002™*	235,85 €	
0609L	LYFO DISK® / 6	Acinetobacter haemolyticus ATCC® 19002™*	219,75 €	
0468P	KWIK-STIK™ / 2	Acinetobacter lwoffii ATCC® 15309™*	69,50 €	
0468K	KWIK-STIK™ / 6	Acinetobacter lwoffii ATCC® 15309™*	187,55 €	
0468L	LYFO DISK® / 6	Acinetobacter lwoffii ATCC® 15309™*	166,80 €	
0973P	KWIK-STIK™ / 2	Acinetobacter lwoffii ATCC® 17925™*	76,80 €	
0973K	KWIK-STIK™ / 6	Acinetobacter lwoffii ATCC® 17925™*	207,50 €	
0973L	LYFO DISK® / 6	Acinetobacter lwoffii ATCC® 17925™*	192,40 €	
0636P	KWIK-STIK™ / 2	Acinetobacter species ATCC® 49137™*	76,80 €	
0636K	KWIK-STIK™ / 6	Acinetobacter species ATCC® 49137™*	207,50 €	
0636L	LYFO DISK® / 6	Acinetobacter species ATCC® 49137™*	192,40 €	
0635P	KWIK-STIK™ / 2	Acinetobacter species ATCC® 49139™*	69,50 €	
0635K	KWIK-STIK™ / 6	Acinetobacter species ATCC® 49139™*	187,55 €	
0635L	LYFO DISK® / 6	Acinetobacter species ATCC® 49139™*	166,80 €	
0934P	KWIK-STIK™ / 2	Acinetobacter species ATCC® 49466™*	76,80 €	
0934K	KWIK-STIK™ / 6	Acinetobacter species ATCC® 49466™*	207,50 €	
0934L	LYFO DISK® / 6	Acinetobacter species ATCC® 49466™*	192,40 €	
01001P	KWIK-STIK™ / 2	Acinetobacter species ATCC® 10153™*	87,35 €	
01001K	KWIK-STIK™ / 6	Acinetobacter species ATCC® 10153™*	235,85 €	
01001L	LYFO DISK® / 6	Acinetobacter species ATCC® 10153™*	219,75 €	
0160P	KWIK-STIK™ / 2	Acinetobacter species ATCC® 51819™*	87,35 €	formerly Micrococcus species
0160K	KWIK-STIK™ / 6	Acinetobacter species ATCC® 51819™*	235,85 €	formerly Micrococcus species
0160L	LYFO DISK® / 6	Acinetobacter species ATCC® 51819™*	219,75 €	formerly Micrococcus species
0658P	KWIK-STIK™ / 2	Actinobacillus pleuropneumoniae ATCC® 27088™*	76,80 €	
0658K	KWIK-STIK™ / 6	Actinobacillus pleuropneumoniae ATCC® 27088™*	207,50 €	
0658L	LYFO DISK® / 6	Actinobacillus pleuropneumoniae ATCC® 27088™*	192,40 €	
0789P	KWIK-STIK™ / 2	Actinobacillus pleuropneumoniae ATCC® 27090™*	76,80 €	
0789K	KWIK-STIK™ / 6	Actinobacillus pleuropneumoniae ATCC® 27090™*	207,50 €	
0789-CRM	Lab-Elite CRM™ / 1	Actinobacillus pleuropneumoniae ATCC® 27090™*	68,65 €	
0789L	LYFO DISK® / 6	Actinobacillus pleuropneumoniae ATCC® 27090™*	192,40 €	
0939P	KWIK-STIK™ / 2	Actinomyces odontolyticus ATCC® 17929™*	76,80 €	
0939K	KWIK-STIK™ / 6	Actinomyces odontolyticus ATCC® 17929™*	207,50 €	
0939L	LYFO DISK® / 6	Actinomyces odontolyticus ATCC® 17929™*	192,40 €	
0750P	KWIK-STIK™ / 2	Actinomyces viscosus ATCC® 15987™*	76,80 €	
0750K	KWIK-STIK™ / 6	Actinomyces viscosus ATCC® 15987™*	207,50 €	
0750L	LYFO DISK® / 6	Actinomyces viscosus ATCC® 15987™*	192,40 €	
0263H	EZ-Hydro Shot™	Aerococcus viridans ATCC® 10400™*	247,10 €	20-100 CFU / pellet
0263P	KWIK-STIK™ / 2	Aerococcus viridans ATCC® 10400™*	69,50 €	
0263K	KWIK-STIK™ / 6	Aerococcus viridans ATCC® 10400™*	187,55 €	
0263L	LYFO DISK® / 6	Aerococcus viridans ATCC® 10400™*	166,80 €	
0276P	KWIK-STIK™ / 2	Aerococcus viridans ATCC® 11563™*	69,50 €	
0276K	KWIK-STIK™ / 6	Aerococcus viridans ATCC® 11563™*	187,55 €	
0276L	LYFO DISK® / 6	Aerococcus viridans ATCC® 11563™*	166,80 €	
0746P	KWIK-STIK™ / 2	Aerococcus viridans ATCC® 700406™*	76,80 €	
0746K	KWIK-STIK™ / 6	Aerococcus viridans ATCC® 700406™*	207,50 €	
0746L	LYFO DISK® / 6	Aerococcus viridans ATCC® 700406™*	192,40 €	
0807P	KWIK-STIK™ / 2	Aeromonas caviae ATCC® 15468™*	69,50 €	
0807K	KWIK-STIK™ / 6	Aeromonas caviae ATCC® 15468™*	187,55 €	

Référence Microbiologics	Gamme	Souche	Prix de vente 2016 HT susceptible d'évoluer	Commentaire
0807L	LYFO DISK® / 6	<i>Aeromonas caviae</i> ATCC® 15468 ^{TM*}	166,80 €	
0910P	KWIK-STIK TM / 2	<i>Aeromonas hydrophila</i> ATCC® 35654 ^{TM*}	69,50 €	
0910K	KWIK-STIK TM / 6	<i>Aeromonas hydrophila</i> ATCC® 35654 ^{TM*}	187,55 €	
0910L	LYFO DISK® / 6	<i>Aeromonas hydrophila</i> ATCC® 35654 ^{TM*}	166,80 €	
0637P	KWIK-STIK TM / 2	<i>Aeromonas hydrophila</i> ATCC® 49140 ^{TM*}	69,50 €	
0637K	KWIK-STIK TM / 6	<i>Aeromonas hydrophila</i> ATCC® 49140 ^{TM*}	187,55 €	
0637L	LYFO DISK® / 6	<i>Aeromonas hydrophila</i> ATCC® 49140 ^{TM*}	166,80 €	
0290P	KWIK-STIK TM / 2	<i>Aeromonas hydrophila</i> ATCC® 7965 ^{TM*}	69,50 €	
0290K	KWIK-STIK TM / 6	<i>Aeromonas hydrophila</i> ATCC® 7965 ^{TM*}	187,55 €	
0290L	LYFO DISK® / 6	<i>Aeromonas hydrophila</i> ATCC® 7965 ^{TM*}	166,80 €	
0870P	KWIK-STIK TM / 2	<i>Aeromonas hydrophila</i> ATCC® 7966 ^{TM*}	69,50 €	
0870K	KWIK-STIK TM / 6	<i>Aeromonas hydrophila</i> ATCC® 7966 ^{TM*}	187,55 €	
0870L	LYFO DISK® / 6	<i>Aeromonas hydrophila</i> ATCC® 7966 ^{TM*}	166,80 €	
0788P	KWIK-STIK TM / 2	<i>Aeromonas salmonicida</i> subsp. <i>salmonicida</i> ATCC® 33658 ^{TM*}	76,80 €	
0788K	KWIK-STIK TM / 6	<i>Aeromonas salmonicida</i> subsp. <i>salmonicida</i> ATCC® 33658 ^{TM*}	207,50 €	
0788L	LYFO DISK® / 6	<i>Aeromonas salmonicida</i> subsp. <i>salmonicida</i> ATCC® 33658 ^{TM*}	192,40 €	
01175P	KWIK-STIK TM / 2	<i>Aggregatibacter actinomycetemcomitans</i> ATCC® 29522 ^{TM*}	76,80 €	
01175K	KWIK-STIK TM / 6	<i>Aggregatibacter actinomycetemcomitans</i> ATCC® 29522 ^{TM*}	207,50 €	
01175L	LYFO DISK® / 6	<i>Aggregatibacter actinomycetemcomitans</i> ATCC® 29522 ^{TM*}	192,40 €	
0862P	KWIK-STIK TM / 2	<i>Aggregatibacter aphrophilus</i> ATCC® 19415 ^{TM*}	76,80 €	does not require X factor; formerly <i>Haemophilus aphrophilus</i>
0862K	KWIK-STIK TM / 6	<i>Aggregatibacter aphrophilus</i> ATCC® 19415 ^{TM*}	207,50 €	does not require X factor; formerly <i>Haemophilus aphrophilus</i>
0862L	LYFO DISK® / 6	<i>Aggregatibacter aphrophilus</i> ATCC® 19415 ^{TM*}	192,40 €	does not require x factor; formerly <i>Haemophilus aphrophilus</i>
0467P	KWIK-STIK TM / 2	<i>Aggregatibacter aphrophilus</i> ATCC® 29241 ^{TM*}	87,35 €	V-dependant; formerly <i>Haemophilus paraphrophilus</i>
0467K	KWIK-STIK TM / 6	<i>Aggregatibacter aphrophilus</i> ATCC® 29241 ^{TM*}	235,85 €	V-dependant; formerly <i>Haemophilus paraphrophilus</i>
0467L	LYFO DISK® / 6	<i>Aggregatibacter aphrophilus</i> ATCC® 29241 ^{TM*}	219,75 €	V-dependant; formerly <i>Haemophilus paraphrophilus</i>
0184P	KWIK-STIK TM / 2	<i>Aggregatibacter aphrophilus</i> ATCC® 33389 ^{TM*}	76,80 €	formerly <i>Haemophilus aphrophilus</i>
0184K	KWIK-STIK TM / 6	<i>Aggregatibacter aphrophilus</i> ATCC® 33389 ^{TM*}	207,50 €	formerly <i>Haemophilus aphrophilus</i>
0184L	LYFO DISK® / 6	<i>Aggregatibacter aphrophilus</i> ATCC® 33389 ^{TM*}	192,40 €	formerly <i>Haemophilus aphrophilus</i>
0645P	KWIK-STIK TM / 2	<i>Aggregatibacter aphrophilus</i> ATCC® 49146 ^{TM*}	76,80 €	formerly <i>Haemophilus paraphrophilus</i>
0645K	KWIK-STIK TM / 6	<i>Aggregatibacter aphrophilus</i> ATCC® 49146 ^{TM*}	207,50 €	formerly <i>Haemophilus paraphrophilus</i>
0645L	LYFO DISK® / 6	<i>Aggregatibacter aphrophilus</i> ATCC® 49146 ^{TM*}	192,40 €	formerly <i>Haemophilus paraphrophilus</i>
0249P	KWIK-STIK TM / 2	<i>Aggregatibacter aphrophilus</i> ATCC® 49917 ^{TM*}	76,80 €	formerly <i>Haemophilus paraphrophilus</i>
0249K	KWIK-STIK TM / 6	<i>Aggregatibacter aphrophilus</i> ATCC® 49917 ^{TM*}	207,50 €	formerly <i>Haemophilus paraphrophilus</i>
0249L	LYFO DISK® / 6	<i>Aggregatibacter aphrophilus</i> ATCC® 49917 ^{TM*}	192,40 €	formerly <i>Haemophilus paraphrophilus</i>
0411P	KWIK-STIK TM / 2	<i>Aggregatibacter aphrophilus</i> ATCC® 7901 ^{TM*}	69,50 €	formerly <i>Haemophilus parainfluenzae</i>
0411K	KWIK-STIK TM / 6	<i>Aggregatibacter aphrophilus</i> ATCC® 7901 ^{TM*}	187,55 €	formerly <i>Haemophilus parainfluenzae</i>
0411L	LYFO DISK® / 6	<i>Aggregatibacter aphrophilus</i> ATCC® 7901 ^{TM*}	166,80 €	formerly <i>Haemophilus parainfluenzae</i>
0911P	KWIK-STIK TM / 2	<i>Alcaligenes faecalis</i> subsp. <i>faecalis</i> ATCC® 35655 ^{TM*}	69,50 €	
0911K	KWIK-STIK TM / 6	<i>Alcaligenes faecalis</i> subsp. <i>faecalis</i> ATCC® 35655 ^{TM*}	187,55 €	
0911L	LYFO DISK® / 6	<i>Alcaligenes faecalis</i> subsp. <i>faecalis</i> ATCC® 35655 ^{TM*}	166,80 €	
0402P	KWIK-STIK TM / 2	<i>Alcaligenes faecalis</i> subsp. <i>faecalis</i> ATCC® 8750 ^{TM*}	69,50 €	
0402K	KWIK-STIK TM / 6	<i>Alcaligenes faecalis</i> subsp. <i>faecalis</i> ATCC® 8750 ^{TM*}	187,55 €	
0402L	LYFO DISK® / 6	<i>Alcaligenes faecalis</i> subsp. <i>faecalis</i> ATCC® 8750 ^{TM*}	166,80 €	
01059P	KWIK-STIK TM / 2	<i>Alicyclobacillus acidocaldarius</i> subsp. <i>acidocaldarius</i> NCIMB 11725	76,80 €	
01059K	KWIK-STIK TM / 6	<i>Alicyclobacillus acidocaldarius</i> subsp. <i>acidocaldarius</i> NCIMB 11725	207,50 €	
01059L	LYFO DISK® / 6	<i>Alicyclobacillus acidocaldarius</i> subsp. <i>acidocaldarius</i> NCIMB 11725	192,40 €	
0265FPC	EZ-FPC TM / 10	<i>Alicyclobacillus acidoterrestris</i> ATCC® 49025 ^{TM*}	285,00 €	Quantitative Preparations at a concentration of 1.0-9.9E+03 CFU per pellet
0265P	KWIK-STIK TM / 2	<i>Alicyclobacillus acidoterrestris</i> ATCC® 49025 ^{TM*}	87,35 €	
0265K	KWIK-STIK TM / 6	<i>Alicyclobacillus acidoterrestris</i> ATCC® 49025 ^{TM*}	235,85 €	
0265L	LYFO DISK® / 6	<i>Alicyclobacillus acidoterrestris</i> ATCC® 49025 ^{TM*}	219,75 €	
01134P	KWIK-STIK TM / 2	<i>Alternaria species</i> ATCC® 20084 ^{TM*}	76,80 €	
01134K	KWIK-STIK TM / 6	<i>Alternaria species</i> ATCC® 20084 ^{TM*}	207,50 €	
01134L	LYFO DISK® / 6	<i>Alternaria species</i> ATCC® 20084 ^{TM*}	192,40 €	
0141P	KWIK-STIK TM / 2	<i>Aneurinibacillus aneurinolyticus</i> ATCC® 11376 ^{TM*}	69,50 €	
0141K	KWIK-STIK TM / 6	<i>Aneurinibacillus aneurinolyticus</i> ATCC® 11376 ^{TM*}	187,55 €	
0141L	LYFO DISK® / 6	<i>Aneurinibacillus aneurinolyticus</i> ATCC® 11376 ^{TM*}	166,80 €	
0169P	KWIK-STIK TM / 2	<i>Aquaspirillum species</i> ATCC® 49643 ^{TM*}	87,35 €	
0169K	KWIK-STIK TM / 6	<i>Aquaspirillum species</i> ATCC® 49643 ^{TM*}	235,85 €	
0169L	LYFO DISK® / 6	<i>Aquaspirillum species</i> ATCC® 49643 ^{TM*}	219,75 €	

Référence Microbiologics	Gamme	Souche	Prix de vente 2016 HT susceptible d'évoluer	Commentaire
01038P	KWIK-STIK™ / 2	Arcanobacterium haemolyticum ATCC® BAA-1784™*	76,80 €	Item Available for Fulfillment August 2010
01038K	KWIK-STIK™ / 6	Arcanobacterium haemolyticum ATCC® BAA-1784™*	207,50 €	Item Available for Fulfillment August 2010
01038L	LYFO DISK® / 6	Arcanobacterium haemolyticum ATCC® BAA-1784™*	192,40 €	Item Available for Fulfillment August 2010
0660P	KWIK-STIK™ / 2	Arcanobacterium pyogenes ATCC® 19411™*	76,80 €	
0660K	KWIK-STIK™ / 6	Arcanobacterium pyogenes ATCC® 19411™*	207,50 €	
0660L	LYFO DISK® / 6	Arcanobacterium pyogenes ATCC® 19411™*	192,40 €	
0966P	KWIK-STIK™ / 2	Arcanobacterium pyogenes ATCC® 49698™*	76,80 €	
0966K	KWIK-STIK™ / 6	Arcanobacterium pyogenes ATCC® 49698™*	207,50 €	
0966L	LYFO DISK® / 6	Arcanobacterium pyogenes ATCC® 49698™*	192,40 €	
0260E4	Epower™ / 10	Arthrobacter psychrolactophilus ATCC® 700733™*	263,40 €	Mean Assay Value: 1.0-9.9E+04 CFU per pellet
0260E3-CRM	Epower™ / 10 CRM	Arthrobacter psychrolactophilus ATCC® 700733™*	512,40 €	psychrotroph
0260FPC	EZ-FPC™ / 10	Arthrobacter psychrolactophilus ATCC® 700733™*	285,00 €	Quantitative Preparations at a concentration of 1.0-9.9E+03 CFU per pellet
0260P	KWIK-STIK™ / 2	Arthrobacter psychrolactophilus ATCC® 700733™*	87,35 €	psychrotroph
0260K	KWIK-STIK™ / 6	Arthrobacter psychrolactophilus ATCC® 700733™*	235,85 €	psychrotroph
0260L	LYFO DISK® / 6	Arthrobacter psychrolactophilus ATCC® 700733™*	219,75 €	psychrotroph
0392E3	Epower™ / 10	Aspergillus brasiliensis ATCC® 16404™*	346,60 €	fungus; Mean Assay Value: 1.0-9.9E+03 CFU per pellet
0392E6	Epower™ / 10	Aspergillus brasiliensis ATCC® 16404™*	346,60 €	fungus; Mean Assay Value: 1.0-9.9E+06 CFU per pellet
0392E3-CRM	Epower™ / 10 CRM	Aspergillus brasiliensis ATCC® 16404™*	512,40 €	fungus; Mean Assay Value: 1.0-9.9E+03 CFU per pellet
0392E6-CRM	Epower™ / 10 CRM	Aspergillus brasiliensis ATCC® 16404™*	512,40 €	fungus; Mean Assay Value: 1.0-9.9E+06 CFU per pellet
0392A	EZ-Accu Shot™ / 5	Aspergillus brasiliensis ATCC® 16404™*	313,40 €	10-100 CFU/0,1ml fungus
0392FPC	EZ-FPC™ / 10	Aspergillus brasiliensis ATCC® 16404™*	285,00 €	fungus; Quantitative Preparations at a concentration of 1.0-9.9E+03 CFU per pellet
0392-PEC	EZ-PEC™ / 20	Aspergillus brasiliensis ATCC® 16404™*	772,90 €	1.0x10 ⁵ to 1.0x10 ⁶ CFU per ml
0392P	KWIK-STIK™ / 2	Aspergillus brasiliensis ATCC® 16404™*	87,35 €	fungus
0392K	KWIK-STIK™ / 6	Aspergillus brasiliensis ATCC® 16404™*	235,85 €	fungus
0392-CRM	Lab-Elite CRM™ / 1	Aspergillus brasiliensis ATCC® 16404™*	68,65 €	fungus
0392L	LYFO DISK® / 6	Aspergillus brasiliensis ATCC® 16404™*	219,75 €	fungus
01130P	KWIK-STIK™ / 2	Aspergillus brasiliensis ATCC® 9642™*	87,35 €	
01130K	KWIK-STIK™ / 6	Aspergillus brasiliensis ATCC® 9642™*	235,85 €	
01130L	LYFO DISK® / 6	Aspergillus brasiliensis ATCC® 9642™*	219,75 €	
01140P	KWIK-STIK™ / 2	Aspergillus caesiellus ATCC® 42693™*	87,35 €	
01140K	KWIK-STIK™ / 6	Aspergillus caesiellus ATCC® 42693™*	235,85 €	
01140L	LYFO DISK® / 6	Aspergillus caesiellus ATCC® 42693™*	219,75 €	
01182P	KWIK-STIK™ / 2	Aspergillus flavus ATCC® 9643™*	87,35 €	
01182K	KWIK-STIK™ / 6	Aspergillus flavus ATCC® 9643™*	235,85 €	
01182L	LYFO DISK® / 6	Aspergillus flavus ATCC® 9643™*	219,75 €	
01021P	KWIK-STIK™ / 2	Aspergillus fumigatus ATCC® 204305™*	87,35 €	fungus
01021K	KWIK-STIK™ / 6	Aspergillus fumigatus ATCC® 204305™*	235,85 €	fungus
01021L	LYFO DISK® / 6	Aspergillus fumigatus ATCC® 204305™*	219,75 €	fungus
0245P	KWIK-STIK™ / 2	Aspergillus niger ATCC® 16888™*	87,35 €	fungus
0245K	KWIK-STIK™ / 6	Aspergillus niger ATCC® 16888™*	235,85 €	fungus
0245L	LYFO DISK® / 6	Aspergillus niger ATCC® 16888™*	219,75 €	fungus
0500P	KWIK-STIK™ / 2	Aspergillus niger ATCC® 6275™*	87,35 €	fungus
0500K	KWIK-STIK™ / 6	Aspergillus niger ATCC® 6275™*	235,85 €	fungus
0500L	LYFO DISK® / 6	Aspergillus niger ATCC® 6275™*	219,75 €	fungus
0177P	KWIK-STIK™ / 2	Aspergillus oryzae ATCC® 10124™*	87,35 €	fungus
0177K	KWIK-STIK™ / 6	Aspergillus oryzae ATCC® 10124™*	235,85 €	fungus
0177L	LYFO DISK® / 6	Aspergillus oryzae ATCC® 10124™*	219,75 €	fungus
0532P	KWIK-STIK™ / 2	Aspergillus ustus ATCC® 10760™*	87,35 €	fungus
0532K	KWIK-STIK™ / 6	Aspergillus ustus ATCC® 10760™*	235,85 €	fungus
0532L	LYFO DISK® / 6	Aspergillus ustus ATCC® 10760™*	219,75 €	fungus
01081P	KWIK-STIK™ / 2	Aureobasidium pullulans var. melanigenum ATCC® 15233™*	87,35 €	fungus
01081K	KWIK-STIK™ / 6	Aureobasidium pullulans var. melanigenum ATCC® 15233™*	235,85 €	fungus
01081L	LYFO DISK® / 6	Aureobasidium pullulans var. melanigenum ATCC® 15233™*	219,75 €	fungus
0515P	KWIK-STIK™ / 2	Bacillus atrophaeus ATCC® 51189™*	87,35 €	
0515K	KWIK-STIK™ / 6	Bacillus atrophaeus ATCC® 51189™*	235,85 €	
0515L	LYFO DISK® / 6	Bacillus atrophaeus ATCC® 51189™*	219,75 €	
0953P	KWIK-STIK™ / 2	Bacillus atrophaeus ATCC® 9372™*	60,45 €	
0953K	KWIK-STIK™ / 6	Bacillus atrophaeus ATCC® 9372™*	161,00 €	
0953L	LYFO DISK® / 6	Bacillus atrophaeus ATCC® 9372™*	141,10 €	
01008P	KWIK-STIK™ / 2	Bacillus badius ATCC® 14574™*	60,45 €	
01008K	KWIK-STIK™ / 6	Bacillus badius ATCC® 14574™*	161,00 €	
01008L	LYFO DISK® / 6	Bacillus badius ATCC® 14574™*	141,10 €	scheduled release date is 6/15/2009
0998E3	Epower™ / 10	Bacillus cereus ATCC® 10876™*	346,60 €	Mean Assay Value: 1.0-9.9E+03 CFU per pellet
0998E3-CRM	Epower™ / 10 CRM	Bacillus cereus ATCC® 10876™*	512,40 €	Mean Assay Value: 1.0-9.9E+03 CFU per pellet
0998A	EZ-Accu Shot™ / 5	Bacillus cereus ATCC® 10876™*	313,40 €	10-100 CFU/0,1ml

Référence Microbiologics	Gamme	Souche	Prix de vente 2016 HT susceptible d'évoluer	Commentaire
0998FPC	EZ-FPC™ / 10	Bacillus cereus ATCC® 10876™*	285,00 €	Quantitative Preparations at a concentration of 1.0-9.9E+03 CFU per pellet
0998P	KWIK-STIK™ / 2	Bacillus cereus ATCC® 10876™*	60,45 €	
0998K	KWIK-STIK™ / 6	Bacillus cereus ATCC® 10876™*	161,00 €	
0998-CRM	Lab-Elite CRMTM / 1	Bacillus cereus ATCC® 10876™*	68,65 €	
0998L	LYFO DISK® / 6	Bacillus cereus ATCC® 10876™*	141,10 €	
0256SPR	EZ-SPORE™ / 10	Bacillus cereus ATCC® 11778™*	471,30 €	10 ⁴ CFU per pellet
0256P	KWIK-STIK™ / 2	Bacillus cereus ATCC® 11778™*	69,50 €	
0256K	KWIK-STIK™ / 6	Bacillus cereus ATCC® 11778™*	187,55 €	
0256L	LYFO DISK® / 6	Bacillus cereus ATCC® 11778™*	166,80 €	
0999P	KWIK-STIK™ / 2	Bacillus cereus ATCC® 13061™*	60,45 €	
0999K	KWIK-STIK™ / 6	Bacillus cereus ATCC® 13061™*	161,00 €	
0999L	LYFO DISK® / 6	Bacillus cereus ATCC® 13061™*	141,10 €	
0200P	KWIK-STIK™ / 2	Bacillus cereus ATCC® 14579™*	76,80 €	
0200K	KWIK-STIK™ / 6	Bacillus cereus ATCC® 14579™*	207,50 €	
0200L	LYFO DISK® / 6	Bacillus cereus ATCC® 14579™*	192,40 €	
0509P	KWIK-STIK™ / 2	Bacillus cereus ATCC® 2™*	87,35 €	
0509K	KWIK-STIK™ / 6	Bacillus cereus ATCC® 2™*	235,85 €	
0509L	LYFO DISK® / 6	Bacillus cereus ATCC® 2™*	219,75 €	
0198P	KWIK-STIK™ / 2	Bacillus cereus ATCC® 33019™*	87,35 €	
0198K	KWIK-STIK™ / 6	Bacillus cereus ATCC® 33019™*	235,85 €	
0198L	LYFO DISK® / 6	Bacillus cereus ATCC® 33019™*	219,75 €	
0330E3-CRM	Epover™ / 10 CRM	Bacillus cereus NCIMB 7464	512,40 €	
0330P	KWIK-STIK™ / 2	Bacillus cereus NCIMB 7464	60,45 €	
0330K	KWIK-STIK™ / 6	Bacillus cereus NCIMB 7464	161,00 €	
0330L	LYFO DISK® / 6	Bacillus cereus NCIMB 7464	141,10 €	
0507P	KWIK-STIK™ / 2	Bacillus circulans ATCC® 4516™*	87,35 €	
0507K	KWIK-STIK™ / 6	Bacillus circulans ATCC® 4516™*	235,85 €	
0507L	LYFO DISK® / 6	Bacillus circulans ATCC® 4516™*	219,75 €	
0140P	KWIK-STIK™ / 2	Bacillus circulans ATCC® 61™*	69,50 €	
0140K	KWIK-STIK™ / 6	Bacillus circulans ATCC® 61™*	187,55 €	
0140L	LYFO DISK® / 6	Bacillus circulans ATCC® 61™*	166,80 €	
0596P	KWIK-STIK™ / 2	Bacillus coagulans ATCC® 7050™*	69,50 €	
0596K	KWIK-STIK™ / 6	Bacillus coagulans ATCC® 7050™*	187,55 €	
0596L	LYFO DISK® / 6	Bacillus coagulans ATCC® 7050™*	166,80 €	
0812P	KWIK-STIK™ / 2	Bacillus licheniformis ATCC® 12759™*	60,45 €	
0812K	KWIK-STIK™ / 6	Bacillus licheniformis ATCC® 12759™*	161,00 €	
0812L	LYFO DISK® / 6	Bacillus licheniformis ATCC® 12759™*	141,10 €	
0799P	KWIK-STIK™ / 2	Bacillus licheniformis ATCC® 14580™*	76,80 €	
0799K	KWIK-STIK™ / 6	Bacillus licheniformis ATCC® 14580™*	207,50 €	
0799L	LYFO DISK® / 6	Bacillus licheniformis ATCC® 14580™*	192,40 €	
0201P	KWIK-STIK™ / 2	Bacillus megaterium ATCC® 14581™*	69,50 €	
0201K	KWIK-STIK™ / 6	Bacillus megaterium ATCC® 14581™*	187,55 €	
0201L	LYFO DISK® / 6	Bacillus megaterium ATCC® 14581™*	166,80 €	
0116P	KWIK-STIK™ / 2	Bacillus megaterium ATCC® 9885™*	69,50 €	
0116K	KWIK-STIK™ / 6	Bacillus megaterium ATCC® 9885™*	187,55 €	
0116L	LYFO DISK® / 6	Bacillus megaterium ATCC® 9885™*	166,80 €	
0258P	KWIK-STIK™ / 2	Bacillus pumilus ATCC® 14884™*	69,50 €	
0258K	KWIK-STIK™ / 6	Bacillus pumilus ATCC® 14884™*	187,55 €	
0258L	LYFO DISK® / 6	Bacillus pumilus ATCC® 14884™*	166,80 €	
0577P	KWIK-STIK™ / 2	Bacillus pumilus ATCC® 700814™*	76,80 €	
0577K	KWIK-STIK™ / 6	Bacillus pumilus ATCC® 700814™*	207,50 €	
0577L	LYFO DISK® / 6	Bacillus pumilus ATCC® 700814™*	192,40 €	
0474P	KWIK-STIK™ / 2	Bacillus pumilus ATCC® BAA-1434™*	69,50 €	
0474K	KWIK-STIK™ / 6	Bacillus pumilus ATCC® BAA-1434™*	187,55 €	
0474L	LYFO DISK® / 6	Bacillus pumilus ATCC® BAA-1434™*	166,80 €	
0269P	KWIK-STIK™ / 2	Bacillus subtilis ATCC® 11774™*	69,50 €	
0269K	KWIK-STIK™ / 6	Bacillus subtilis ATCC® 11774™*	187,55 €	
0269L	LYFO DISK® / 6	Bacillus subtilis ATCC® 11774™*	166,80 €	
0540P	KWIK-STIK™ / 2	Bacillus subtilis ATCC® 19659™*	69,50 €	
0540K	KWIK-STIK™ / 6	Bacillus subtilis ATCC® 19659™*	187,55 €	
0540L	LYFO DISK® / 6	Bacillus subtilis ATCC® 19659™*	166,80 €	
0486E6	Epover™ / 10	Bacillus subtilis subsp. spizizenii ATCC® 6633™*	346,60 €	Mean Assay Value: 1.0-9.9E+06 CFU per pellet
0486E3	Epover™ / 10	Bacillus subtilis subsp. spizizenii ATCC® 6633™*	346,60 €	Mean Assay Value: 1.0-9.9E+03 CFU per pellet
0486E4	Epover™ / 10	Bacillus subtilis subsp. spizizenii ATCC® 6633™*	346,60 €	Mean Assay Value: 1.0-9.9E+04 CFU per pellet
0486E6-CRM	Epover™ / 10 CRM	Bacillus subtilis subsp. spizizenii ATCC® 6633™*	512,40 €	Mean Assay Value: 1.0-9.9E+06 CFU per pellet
0486E3-CRM	Epover™ / 10 CRM	Bacillus subtilis subsp. spizizenii ATCC® 6633™*	512,40 €	Mean Assay Value: 1.0-9.9E+03 CFU per pellet
0486E4-CRM	Epover™ / 10 CRM	Bacillus subtilis subsp. spizizenii ATCC® 6633™*	512,40 €	Mean Assay Value: 1.0-9.9E+04 CFU per pellet
0486A	EZ-Accu Shot™ / 5	Bacillus subtilis subsp. spizizenii ATCC® 6633™*	313,40 €	10-100 CFU/0,1ml
0486-PEC	EZ-PEC™ / 20	Bacillus subtilis subsp. spizizenii ATCC® 6633™*	772,90 €	1.0x10 ⁵ to 1.0x10 ⁶ CFU per ml
0486SPR	EZ-SPORE™ / 10	Bacillus subtilis subsp. spizizenii ATCC® 6633™*	471,30 €	10 ⁴ CFU per pellet
0486P	KWIK-STIK™ / 2	Bacillus subtilis subsp. spizizenii ATCC® 6633™*	60,45 €	

Référence Microbiologics	Gamme	Souche	Prix de vente 2016 HT susceptible d'évoluer	Commentaire
0486K	KWIK-STIK™ / 6	Bacillus subtilis subsp. spizizenii ATCC® 6633™*	161,00 €	
0486-CRM	Lab-Elite CRM™ / 1	Bacillus subtilis subsp. spizizenii ATCC® 6633™*	68,65 €	
0486L	LYFO DISK® / 6	Bacillus subtilis subsp. spizizenii ATCC® 6633™*	141,10 €	
0582P	KWIK-STIK™ / 2	Bacillus subtilis subsp. spizizenii NCIMB 8054	69,50 €	
0582K	KWIK-STIK™ / 6	Bacillus subtilis subsp. spizizenii NCIMB 8054	187,55 €	
0582L	LYFO DISK® / 6	Bacillus subtilis subsp. spizizenii NCIMB 8054	166,80 €	
0120P	KWIK-STIK™ / 2	Bacillus subtilis subsp. subtilis ATCC® 6051™*	69,50 €	
0120K	KWIK-STIK™ / 6	Bacillus subtilis subsp. subtilis ATCC® 6051™*	187,55 €	
0120L	LYFO DISK® / 6	Bacillus subtilis subsp. subtilis ATCC® 6051™*	166,80 €	
0270P	KWIK-STIK™ / 2	Bacillus thuringiensis ATCC® 10792™*	69,50 €	
0270K	KWIK-STIK™ / 6	Bacillus thuringiensis ATCC® 10792™*	187,55 €	
0270L	LYFO DISK® / 6	Bacillus thuringiensis ATCC® 10792™*	166,80 €	
0539P	KWIK-STIK™ / 2	Bacillus thuringiensis ATCC® 33679™*	76,80 €	serotype H3:3a,3b
0539K	KWIK-STIK™ / 6	Bacillus thuringiensis ATCC® 33679™*	207,50 €	serotype H3:3a,3b
0539L	LYFO DISK® / 6	Bacillus thuringiensis ATCC® 33679™*	192,40 €	serotype H3:3a,3b
0940P	KWIK-STIK™ / 2	Bacteroides fragilis ATCC® 23745™*	76,80 €	
0940K	KWIK-STIK™ / 6	Bacteroides fragilis ATCC® 23745™*	207,50 €	
0940L	LYFO DISK® / 6	Bacteroides fragilis ATCC® 23745™*	192,40 €	
0320P	KWIK-STIK™ / 2	Bacteroides fragilis ATCC® 25285™*	76,80 €	
0320K	KWIK-STIK™ / 6	Bacteroides fragilis ATCC® 25285™*	207,50 €	
0320-CRM	Lab-Elite CRM™ / 1	Bacteroides fragilis ATCC® 25285™*	68,65 €	
0320L	LYFO DISK® / 6	Bacteroides fragilis ATCC® 25285™*	192,40 €	
0358P	KWIK-STIK™ / 2	Bacteroides fragilis NCTC 9343	76,80 €	
0358K	KWIK-STIK™ / 6	Bacteroides fragilis NCTC 9343	207,50 €	
0358L	LYFO DISK® / 6	Bacteroides fragilis NCTC 9343	192,40 €	
0400P	KWIK-STIK™ / 2	Bacteroides ovatus ATCC® 8483™*	76,80 €	
0400K	KWIK-STIK™ / 6	Bacteroides ovatus ATCC® 8483™*	207,50 €	
0400L	LYFO DISK® / 6	Bacteroides ovatus ATCC® 8483™*	192,40 €	
0585P	KWIK-STIK™ / 2	Bacteroides ovatus ATCC® BAA-1296™*	76,80 €	
0585K	KWIK-STIK™ / 6	Bacteroides ovatus ATCC® BAA-1296™*	207,50 €	
0585L	LYFO DISK® / 6	Bacteroides ovatus ATCC® BAA-1296™*	192,40 €	
0587P	KWIK-STIK™ / 2	Bacteroides ovatus ATCC® BAA-1304™*	76,80 €	
0587K	KWIK-STIK™ / 6	Bacteroides ovatus ATCC® BAA-1304™*	207,50 €	
0587L	LYFO DISK® / 6	Bacteroides ovatus ATCC® BAA-1304™*	192,40 €	
0319P	KWIK-STIK™ / 2	Bacteroides thetaiotaomicron ATCC® 29741™*	76,80 €	
0319K	KWIK-STIK™ / 6	Bacteroides thetaiotaomicron ATCC® 29741™*	207,50 €	
0319L	LYFO DISK® / 6	Bacteroides thetaiotaomicron ATCC® 29741™*	192,40 €	
0619P	KWIK-STIK™ / 2	Bacteroides uniformis ATCC® 8492™*	76,80 €	
0619K	KWIK-STIK™ / 6	Bacteroides uniformis ATCC® 8492™*	207,50 €	
0619L	LYFO DISK® / 6	Bacteroides uniformis ATCC® 8492™*	192,40 €	
0908P	KWIK-STIK™ / 2	Bacteroides ureolyticus ATCC® 33387™*	76,80 €	
0908K	KWIK-STIK™ / 6	Bacteroides ureolyticus ATCC® 33387™*	207,50 €	
0908L	LYFO DISK® / 6	Bacteroides ureolyticus ATCC® 33387™*	192,40 €	
0848P	KWIK-STIK™ / 2	Bacteroides vulgatus ATCC® 29327™*	87,35 €	
0848K	KWIK-STIK™ / 6	Bacteroides vulgatus ATCC® 29327™*	235,85 €	
0848L	LYFO DISK® / 6	Bacteroides vulgatus ATCC® 29327™*	219,75 €	
0445P	KWIK-STIK™ / 2	Bacteroides vulgatus ATCC® 8482™*	76,80 €	
0445K	KWIK-STIK™ / 6	Bacteroides vulgatus ATCC® 8482™*	207,50 €	
0445L	LYFO DISK® / 6	Bacteroides vulgatus ATCC® 8482™*	192,40 €	
01092A	EZ-Accu Shot™ / 5	Bifidobacterium animalis subsp. animalis ATCC® 25527™*	313,40 €	10-100 CFU/0,1ml
01092P	KWIK-STIK™ / 2	Bifidobacterium animalis subsp. animalis ATCC® 25527™*	87,35 €	
01092K	KWIK-STIK™ / 6	Bifidobacterium animalis subsp. animalis ATCC® 25527™*	235,85 €	
01092L	LYFO DISK® / 6	Bifidobacterium animalis subsp. animalis ATCC® 25527™*	219,75 €	
01025P	KWIK-STIK™ / 2	Bifidobacterium bifidum ATCC® 11863™*	87,35 €	
01025K	KWIK-STIK™ / 6	Bifidobacterium bifidum ATCC® 11863™*	235,85 €	
01025L	LYFO DISK® / 6	Bifidobacterium bifidum ATCC® 11863™*	219,75 €	
0175P	KWIK-STIK™ / 2	Bifidobacterium breve ATCC® 15700™*	76,80 €	
0175K	KWIK-STIK™ / 6	Bifidobacterium breve ATCC® 15700™*	207,50 €	
0175L	LYFO DISK® / 6	Bifidobacterium breve ATCC® 15700™*	192,40 €	
0655P	KWIK-STIK™ / 2	Bordetella bronchiseptica ATCC® 10580™*	76,80 €	
0655K	KWIK-STIK™ / 6	Bordetella bronchiseptica ATCC® 10580™*	207,50 €	
0655L	LYFO DISK® / 6	Bordetella bronchiseptica ATCC® 10580™*	192,40 €	
0671P	KWIK-STIK™ / 2	Bordetella bronchiseptica ATCC® 4617™*	76,80 €	
0671K	KWIK-STIK™ / 6	Bordetella bronchiseptica ATCC® 4617™*	207,50 €	
0671L	LYFO DISK® / 6	Bordetella bronchiseptica ATCC® 4617™*	192,40 €	
01183P	KWIK-STIK™ / 2	Bordetella parapertussis ATCC® 15237™*	76,80 €	
01183K	KWIK-STIK™ / 6	Bordetella parapertussis ATCC® 15237™*	207,50 €	
01183L	LYFO DISK® / 6	Bordetella parapertussis ATCC® 15237™*	192,40 €	
0842P	KWIK-STIK™ / 2	Bordetella parapertussis ATCC® 15311™*	76,80 €	
0842K	KWIK-STIK™ / 6	Bordetella parapertussis ATCC® 15311™*	207,50 €	

Référence Microbiologics	Gamme	Souche	Prix de vente 2016 HT susceptible d'évoluer	Commentaire
0842L	LYFO DISK® / 6	Bordetella parapertussis ATCC® 15311™*	192,40 €	
0489P	KWIK-STIK™ / 2	Bordetella pertussis ATCC® 8467™*	76,80 €	
0489K	KWIK-STIK™ / 6	Bordetella pertussis ATCC® 8467™*	207,50 €	
0489L	LYFO DISK® / 6	Bordetella pertussis ATCC® 8467™*	192,40 €	
0100P	KWIK-STIK™ / 2	Bordetella pertussis ATCC® 9340™*	76,80 €	
0100K	KWIK-STIK™ / 6	Bordetella pertussis ATCC® 9340™*	207,50 €	
0100L	LYFO DISK® / 6	Bordetella pertussis ATCC® 9340™*	192,40 €	
0843P	KWIK-STIK™ / 2	Bordetella pertussis ATCC® 9797™*	76,80 €	
0843K	KWIK-STIK™ / 6	Bordetella pertussis ATCC® 9797™*	207,50 €	
0843L	LYFO DISK® / 6	Bordetella pertussis ATCC® 9797™*	192,40 €	
0139P	KWIK-STIK™ / 2	Brevibacillus agri ATCC® 51663™*	69,50 €	
0139K	KWIK-STIK™ / 6	Brevibacillus agri ATCC® 51663™*	187,55 €	
0139L	LYFO DISK® / 6	Brevibacillus agri ATCC® 51663™*	166,80 €	
0798P	KWIK-STIK™ / 2	Brevibacillus brevis ATCC® 8246™*	60,45 €	
0798K	KWIK-STIK™ / 6	Brevibacillus brevis ATCC® 8246™*	161,00 €	
0798L	LYFO DISK® / 6	Brevibacillus brevis ATCC® 8246™*	141,10 €	
0144P	KWIK-STIK™ / 2	Brevibacillus laterosporus ATCC® 64™*	69,50 €	
0144K	KWIK-STIK™ / 6	Brevibacillus laterosporus ATCC® 64™*	187,55 €	
0144L	LYFO DISK® / 6	Brevibacillus laterosporus ATCC® 64™*	166,80 €	
0754P	KWIK-STIK™ / 2	Brevundimonas diminuta ATCC® 11568™*	60,45 €	
0754K	KWIK-STIK™ / 6	Brevundimonas diminuta ATCC® 11568™*	161,00 €	
0754L	LYFO DISK® / 6	Brevundimonas diminuta ATCC® 11568™*	141,10 €	
0805E8	Epover™ / 10	Brevundimonas diminuta ATCC® 19146™*	263,40 €	Mean Assay Value: 1.0-9.9E+08 CFU per pellet
0805P	KWIK-STIK™ / 2	Brevundimonas diminuta ATCC® 19146™*	76,80 €	
0805K	KWIK-STIK™ / 6	Brevundimonas diminuta ATCC® 19146™*	207,50 €	
0805-CRM	Lab-Elite CRM™ / 1	Brevundimonas diminuta ATCC® 19146™*	68,65 €	
0805L	LYFO DISK® / 6	Brevundimonas diminuta ATCC® 19146™*	192,40 €	
01167P	KWIK-STIK™ / 2	Brevundimonas vesicularis ATCC® 11426™*	76,80 €	
01167K	KWIK-STIK™ / 6	Brevundimonas vesicularis ATCC® 11426™*	207,50 €	
01167L	LYFO DISK® / 6	Brevundimonas vesicularis ATCC® 11426™*	192,40 €	
0150P	KWIK-STIK™ / 2	Brochothrix thermosphacta ATCC® 11509™*	76,80 €	
0150K	KWIK-STIK™ / 6	Brochothrix thermosphacta ATCC® 11509™*	207,50 €	
0150L	LYFO DISK® / 6	Brochothrix thermosphacta ATCC® 11509™*	192,40 €	
0488P	KWIK-STIK™ / 2	Burkholderia cepacia ATCC® 25416™*	69,50 €	
0488K	KWIK-STIK™ / 6	Burkholderia cepacia ATCC® 25416™*	187,55 €	
0488-CRM	Lab-Elite CRM™ / 1	Burkholderia cepacia ATCC® 25416™*	68,65 €	
0488L	LYFO DISK® / 6	Burkholderia cepacia ATCC® 25416™*	166,80 €	
0836P	KWIK-STIK™ / 2	Burkholderia cepacia ATCC® 25608™*	69,50 €	
0836K	KWIK-STIK™ / 6	Burkholderia cepacia ATCC® 25608™*	187,55 €	
0836L	LYFO DISK® / 6	Burkholderia cepacia ATCC® 25608™*	166,80 €	
01023P	KWIK-STIK™ / 2	Campylobacter coli ATCC® 33559™*	87,35 €	
01023K	KWIK-STIK™ / 6	Campylobacter coli ATCC® 33559™*	235,85 €	
01023L	LYFO DISK® / 6	Campylobacter coli ATCC® 33559™*	219,75 €	
0121P	KWIK-STIK™ / 2	Campylobacter coli ATCC® 43478™*	87,35 €	
0121K	KWIK-STIK™ / 6	Campylobacter coli ATCC® 43478™*	235,85 €	
0121L	LYFO DISK® / 6	Campylobacter coli ATCC® 43478™*	219,75 €	
0325P	KWIK-STIK™ / 2	Campylobacter jejuni subsp. jejuni ATCC® 29428™*	87,35 €	
0325K	KWIK-STIK™ / 6	Campylobacter jejuni subsp. jejuni ATCC® 29428™*	235,85 €	
0325L	LYFO DISK® / 6	Campylobacter jejuni subsp. jejuni ATCC® 29428™*	219,75 €	
0481P	KWIK-STIK™ / 2	Campylobacter jejuni subsp. jejuni ATCC® 33291™*	87,35 €	
0481K	KWIK-STIK™ / 6	Campylobacter jejuni subsp. jejuni ATCC® 33291™*	235,85 €	
0481L	LYFO DISK® / 6	Campylobacter jejuni subsp. jejuni ATCC® 33291™*	219,75 €	
0111P	KWIK-STIK™ / 2	Campylobacter jejuni subsp. jejuni ATCC® 33560™*	87,35 €	
0111K	KWIK-STIK™ / 6	Campylobacter jejuni subsp. jejuni ATCC® 33560™*	235,85 €	
0111-CRM	Lab-Elite CRM™ / 1	Campylobacter jejuni subsp. jejuni ATCC® 33560™*	68,65 €	
0111L	LYFO DISK® / 6	Campylobacter jejuni subsp. jejuni ATCC® 33560™*	219,75 €	
0525P	KWIK-STIK™ / 2	Campylobacter jejuni subsp. jejuni ATCC® 43430™*	87,35 €	serotype O:2
0525K	KWIK-STIK™ / 6	Campylobacter jejuni subsp. jejuni ATCC® 43430™*	235,85 €	serotype O:2
0525L	LYFO DISK® / 6	Campylobacter jejuni subsp. jejuni ATCC® 43430™*	219,75 €	serotype O:2
0251P	KWIK-STIK™ / 2	Campylobacter jejuni subsp. jejuni ATCC® 49943™*	87,35 €	
0251K	KWIK-STIK™ / 6	Campylobacter jejuni subsp. jejuni ATCC® 49943™*	235,85 €	
0251L	LYFO DISK® / 6	Campylobacter jejuni subsp. jejuni ATCC® 49943™*	219,75 €	
0188P	KWIK-STIK™ / 2	Campylobacter jejuni subsp. jejuni ATCC® BAA-1153™*	87,35 €	
0188K	KWIK-STIK™ / 6	Campylobacter jejuni subsp. jejuni ATCC® BAA-1153™*	235,85 €	
0188L	LYFO DISK® / 6	Campylobacter jejuni subsp. jejuni ATCC® BAA-1153™*	219,75 €	
0718P	KWIK-STIK™ / 2	Campylobacter jejuni subsp. jejuni NCTC 11322	87,35 €	
0718K	KWIK-STIK™ / 6	Campylobacter jejuni subsp. jejuni NCTC 11322	235,85 €	
0718L	LYFO DISK® / 6	Campylobacter jejuni subsp. jejuni NCTC 11322	219,75 €	
0339P	KWIK-STIK™ / 2	Campylobacter jejuni subsp. jejuni NCTC 11351	87,35 €	serotype 23
0339K	KWIK-STIK™ / 6	Campylobacter jejuni subsp. jejuni NCTC 11351	235,85 €	serotype 23
0339L	LYFO DISK® / 6	Campylobacter jejuni subsp. jejuni NCTC 11351	219,75 €	serotype 23
0712P	KWIK-STIK™ / 2	Campylobacter jejuni subsp. jejuni NCTC 13367	87,35 €	
0712K	KWIK-STIK™ / 6	Campylobacter jejuni subsp. jejuni NCTC 13367	235,85 €	
0712L	LYFO DISK® / 6	Campylobacter jejuni subsp. jejuni NCTC 13367	219,75 €	

Référence Microbiologics	Gamme	Souche	Prix de vente 2016 HT susceptible d'évoluer	Commentaire
01132P	KWIK-STIK™ / 2	Campylobacter lari ATCC® 35221™*	87,35 €	
01132K	KWIK-STIK™ / 6	Campylobacter lari ATCC® 35221™*	235,85 €	
01132L	LYFO DISK® / 6	Campylobacter lari ATCC® 35221™*	219,75 €	
0443E4	Epower™ / 10	Candida albicans ATCC® 10231™*	263,40 €	Mean Assay Value: 1.0-9.9E+04 CFU per pellet
0443E3	Epower™ / 10	Candida albicans ATCC® 10231™*	346,60 €	Mean Assay Value: 1.0-9.9E+03 CFU per pellet
0443E7	Epower™ / 10	Candida albicans ATCC® 10231™*	346,60 €	Mean Assay Value: 1.0-9.9E+07 CFU per pellet
0443E3-CRM	Epower™ / 10 CRM	Candida albicans ATCC® 10231™*	512,40 €	Mean Assay Value: 1.0-9.9E+03 CFU per pellet
0443E7-CRM	Epower™ / 10 CRM	Candida albicans ATCC® 10231™*	512,40 €	Mean Assay Value: 1.0-9.9E+07 CFU per pellet
0443A	EZ-Accu Shot™ / 5	Candida albicans ATCC® 10231™*	313,40 €	10-100 CFU/0,1ml
0443-PEC	EZ-PEC™ / 20	Candida albicans ATCC® 10231™*	772,90 €	1.0x10 ⁵ to 1.0x10 ⁶ CFU per ml
0443P	KWIK-STIK™ / 2	Candida albicans ATCC® 10231™*	76,80 €	
0443K	KWIK-STIK™ / 6	Candida albicans ATCC® 10231™*	207,50 €	
0443-CRM	Lab-Elite CRM™ / 1	Candida albicans ATCC® 10231™*	68,65 €	
0443L	LYFO DISK® / 6	Candida albicans ATCC® 10231™*	192,40 €	
0332P	KWIK-STIK™ / 2	Candida albicans ATCC® 14053™*	76,80 €	
0332K	KWIK-STIK™ / 6	Candida albicans ATCC® 14053™*	207,50 €	
0332L	LYFO DISK® / 6	Candida albicans ATCC® 14053™*	192,40 €	
0896P	KWIK-STIK™ / 2	Candida albicans ATCC® 2091™*	76,80 €	
0896K	KWIK-STIK™ / 6	Candida albicans ATCC® 2091™*	207,50 €	
0896L	LYFO DISK® / 6	Candida albicans ATCC® 2091™*	192,40 €	
0800P	KWIK-STIK™ / 2	Candida albicans ATCC® 24433™*	76,80 €	
0800K	KWIK-STIK™ / 6	Candida albicans ATCC® 24433™*	207,50 €	
0800L	LYFO DISK® / 6	Candida albicans ATCC® 24433™*	192,40 €	
0672P	KWIK-STIK™ / 2	Candida albicans ATCC® 26790™*	87,35 €	
0672K	KWIK-STIK™ / 6	Candida albicans ATCC® 26790™*	235,85 €	
0672L	LYFO DISK® / 6	Candida albicans ATCC® 26790™*	219,75 €	
0425P	KWIK-STIK™ / 2	Candida albicans ATCC® 60193™*	76,80 €	
0425K	KWIK-STIK™ / 6	Candida albicans ATCC® 60193™*	207,50 €	
0425L	LYFO DISK® / 6	Candida albicans ATCC® 60193™*	192,40 €	
0538P	KWIK-STIK™ / 2	Candida albicans ATCC® 62376™*	87,35 €	
0538K	KWIK-STIK™ / 6	Candida albicans ATCC® 62376™*	235,85 €	
0538L	LYFO DISK® / 6	Candida albicans ATCC® 62376™*	219,75 €	
0981P	KWIK-STIK™ / 2	Candida albicans ATCC® 66027™*	76,80 €	
0981K	KWIK-STIK™ / 6	Candida albicans ATCC® 66027™*	207,50 €	
0981L	LYFO DISK® / 6	Candida albicans ATCC® 66027™*	192,40 €	
0264P	KWIK-STIK™ / 2	Candida albicans ATCC® 90028™*	76,80 €	
0264K	KWIK-STIK™ / 6	Candida albicans ATCC® 90028™*	207,50 €	
0264L	LYFO DISK® / 6	Candida albicans ATCC® 90028™*	192,40 €	
0250P	KWIK-STIK™ / 2	Candida albicans ATCC® 90029™*	76,80 €	
0250K	KWIK-STIK™ / 6	Candida albicans ATCC® 90029™*	207,50 €	
0250L	LYFO DISK® / 6	Candida albicans ATCC® 90029™*	192,40 €	
0379P	KWIK-STIK™ / 2	Candida albicans NCYC 1363	76,80 €	
0379K	KWIK-STIK™ / 6	Candida albicans NCYC 1363	207,50 €	
0379L	LYFO DISK® / 6	Candida albicans NCYC 1363	192,40 €	
0187P	KWIK-STIK™ / 2	Candida catenulata ATCC® 10565™*	87,35 €	
0187K	KWIK-STIK™ / 6	Candida catenulata ATCC® 10565™*	235,85 €	
0187L	LYFO DISK® / 6	Candida catenulata ATCC® 10565™*	219,75 €	
01139P	KWIK-STIK™ / 2	Candida dubliniensis NCPF 3949	76,80 €	
01139K	KWIK-STIK™ / 6	Candida dubliniensis NCPF 3949	207,50 €	
01139L	LYFO DISK® / 6	Candida dubliniensis NCPF 3949	192,40 €	
0520P	KWIK-STIK™ / 2	Candida geochares ATCC® 36852™*	76,80 €	
0520K	KWIK-STIK™ / 6	Candida geochares ATCC® 36852™*	207,50 €	
0520L	LYFO DISK® / 6	Candida geochares ATCC® 36852™*	192,40 €	
0737P	KWIK-STIK™ / 2	Candida glabrata ATCC® 15126™*	76,80 €	
0737K	KWIK-STIK™ / 6	Candida glabrata ATCC® 15126™*	207,50 €	
0737L	LYFO DISK® / 6	Candida glabrata ATCC® 15126™*	192,40 €	
01174P	KWIK-STIK™ / 2	Candida glabrata ATCC® 15545™*	76,80 €	
01174K	KWIK-STIK™ / 6	Candida glabrata ATCC® 15545™*	207,50 €	
01174L	LYFO DISK® / 6	Candida glabrata ATCC® 15545™*	192,40 €	
0992P	KWIK-STIK™ / 2	Candida glabrata ATCC® 2001™*	76,80 €	
0992K	KWIK-STIK™ / 6	Candida glabrata ATCC® 2001™*	207,50 €	
0992L	LYFO DISK® / 6	Candida glabrata ATCC® 2001™*	192,40 €	
0226P	KWIK-STIK™ / 2	Candida glabrata ATCC® 64677™*	76,80 €	
0226K	KWIK-STIK™ / 6	Candida glabrata ATCC® 64677™*	207,50 €	
0226L	LYFO DISK® / 6	Candida glabrata ATCC® 64677™*	192,40 €	
0986P	KWIK-STIK™ / 2	Candida glabrata ATCC® 66032™*	76,80 €	
0986K	KWIK-STIK™ / 6	Candida glabrata ATCC® 66032™*	207,50 €	
0986L	LYFO DISK® / 6	Candida glabrata ATCC® 66032™*	192,40 €	
0122P	KWIK-STIK™ / 2	Candida glabrata ATCC® MYA-2950™*	87,35 €	
0122K	KWIK-STIK™ / 6	Candida glabrata ATCC® MYA-2950™*	235,85 €	
0122L	LYFO DISK® / 6	Candida glabrata ATCC® MYA-2950™*	219,75 €	
0738P	KWIK-STIK™ / 2	Candida guilliermondii ATCC® 6260™*	76,80 €	

Référence Microbiologics	Gamme	Souche	Prix de vente 2016 HT susceptible d'évoluer	Commentaire
0738K	KWIK-STIK™ / 6	Candida guilliermondii ATCC® 6260™*	207,50 €	
0738L	LYFO DISK® / 6	Candida guilliermondii ATCC® 6260™*	192,40 €	
0777P	KWIK-STIK™ / 2	Candida kefyr ATCC® 204093™*	76,80 €	
0777K	KWIK-STIK™ / 6	Candida kefyr ATCC® 204093™*	207,50 €	
0777L	LYFO DISK® / 6	Candida kefyr ATCC® 204093™*	192,40 €	
0990P	KWIK-STIK™ / 2	Candida kefyr ATCC® 2512™*	76,80 €	
0990K	KWIK-STIK™ / 6	Candida kefyr ATCC® 2512™*	207,50 €	
0990L	LYFO DISK® / 6	Candida kefyr ATCC® 2512™*	192,40 €	
0769P	KWIK-STIK™ / 2	Candida kefyr ATCC® 4135™*	87,35 €	
0769K	KWIK-STIK™ / 6	Candida kefyr ATCC® 4135™*	235,85 €	
0769L	LYFO DISK® / 6	Candida kefyr ATCC® 4135™*	219,75 €	
0982P	KWIK-STIK™ / 2	Candida kefyr ATCC® 66028™*	76,80 €	
0982K	KWIK-STIK™ / 6	Candida kefyr ATCC® 66028™*	207,50 €	
0982L	LYFO DISK® / 6	Candida kefyr ATCC® 66028™*	192,40 €	
01185P	KWIK-STIK™ / 2	Candida kefyr ATCC® 8553™*	76,80 €	
01185K	KWIK-STIK™ / 6	Candida kefyr ATCC® 8553™*	207,50 €	
01185L	LYFO DISK® / 6	Candida kefyr ATCC® 8553™*	192,40 €	
0809P	KWIK-STIK™ / 2	Candida krusei ATCC® 14243™*	76,80 €	
0809K	KWIK-STIK™ / 6	Candida krusei ATCC® 14243™*	207,50 €	
0809L	LYFO DISK® / 6	Candida krusei ATCC® 14243™*	192,40 €	
0510P	KWIK-STIK™ / 2	Candida krusei ATCC® 34135™*	87,35 €	
0510K	KWIK-STIK™ / 6	Candida krusei ATCC® 34135™*	235,85 €	
0510L	LYFO DISK® / 6	Candida krusei ATCC® 34135™*	219,75 €	
0774P	KWIK-STIK™ / 2	Candida lusitanae ATCC® 34449™*	76,80 €	
0774K	KWIK-STIK™ / 6	Candida lusitanae ATCC® 34449™*	207,50 €	
0774L	LYFO DISK® / 6	Candida lusitanae ATCC® 34449™*	192,40 €	
0145P	KWIK-STIK™ / 2	Candida lusitanae ATCC® 66035™*	76,80 €	
0145K	KWIK-STIK™ / 6	Candida lusitanae ATCC® 66035™*	207,50 €	
0145L	LYFO DISK® / 6	Candida lusitanae ATCC® 66035™*	192,40 €	
0726P	KWIK-STIK™ / 2	Candida parapsilosis ATCC® 22019™*	76,80 €	
0726K	KWIK-STIK™ / 6	Candida parapsilosis ATCC® 22019™*	207,50 €	
0726L	LYFO DISK® / 6	Candida parapsilosis ATCC® 22019™*	192,40 €	
01135P	KWIK-STIK™ / 2	Candida parapsilosis ATCC® 90018™*	76,80 €	
01135K	KWIK-STIK™ / 6	Candida parapsilosis ATCC® 90018™*	207,50 €	
01135L	LYFO DISK® / 6	Candida parapsilosis ATCC® 90018™*	192,40 €	
01036P	KWIK-STIK™ / 2	Candida tropicalis ATCC® 1369™*	87,35 €	
01036K	KWIK-STIK™ / 6	Candida tropicalis ATCC® 1369™*	235,85 €	
01036L	LYFO DISK® / 6	Candida tropicalis ATCC® 1369™*	219,75 €	
0450P	KWIK-STIK™ / 2	Candida tropicalis ATCC® 13803™*	76,80 €	
0450K	KWIK-STIK™ / 6	Candida tropicalis ATCC® 13803™*	207,50 €	
0450L	LYFO DISK® / 6	Candida tropicalis ATCC® 13803™*	192,40 €	
0767P	KWIK-STIK™ / 2	Candida tropicalis ATCC® 201380™*	76,80 €	
0767K	KWIK-STIK™ / 6	Candida tropicalis ATCC® 201380™*	207,50 €	
0767L	LYFO DISK® / 6	Candida tropicalis ATCC® 201380™*	192,40 €	
0768P	KWIK-STIK™ / 2	Candida tropicalis ATCC® 201381™*	87,35 €	
0768K	KWIK-STIK™ / 6	Candida tropicalis ATCC® 201381™*	235,85 €	
0768L	LYFO DISK® / 6	Candida tropicalis ATCC® 201381™*	219,75 €	
0983P	KWIK-STIK™ / 2	Candida tropicalis ATCC® 66029™*	76,80 €	
0983K	KWIK-STIK™ / 6	Candida tropicalis ATCC® 66029™*	207,50 €	
0983L	LYFO DISK® / 6	Candida tropicalis ATCC® 66029™*	192,40 €	
0847P	KWIK-STIK™ / 2	Candida tropicalis ATCC® 750™*	76,80 €	
0847K	KWIK-STIK™ / 6	Candida tropicalis ATCC® 750™*	207,50 €	
0847L	LYFO DISK® / 6	Candida tropicalis ATCC® 750™*	192,40 €	
0897P	KWIK-STIK™ / 2	Candida tropicalis ATCC® 9968™*	76,80 €	
0897K	KWIK-STIK™ / 6	Candida tropicalis ATCC® 9968™*	207,50 €	
0897L	LYFO DISK® / 6	Candida tropicalis ATCC® 9968™*	192,40 €	
0779P	KWIK-STIK™ / 2	Candida utilis ATCC® 9950™*	76,80 €	
0779K	KWIK-STIK™ / 6	Candida utilis ATCC® 9950™*	207,50 €	
0779L	LYFO DISK® / 6	Candida utilis ATCC® 9950™*	192,40 €	
0749P	KWIK-STIK™ / 2	Capnocytophaga sputigena ATCC® 33612™*	69,50 €	
0749K	KWIK-STIK™ / 6	Capnocytophaga sputigena ATCC® 33612™*	187,55 €	
0749L	LYFO DISK® / 6	Capnocytophaga sputigena ATCC® 33612™*	166,80 €	
0517P	KWIK-STIK™ / 2	Cedecea neteri ATCC® 33855™*	87,35 €	
0517K	KWIK-STIK™ / 6	Cedecea neteri ATCC® 33855™*	235,85 €	
0517L	LYFO DISK® / 6	Cedecea neteri ATCC® 33855™*	219,75 €	
0294P	KWIK-STIK™ / 2	Cellulosimicrobium cellulans ATCC® 27402™*	76,80 €	
0294K	KWIK-STIK™ / 6	Cellulosimicrobium cellulans ATCC® 27402™*	207,50 €	
0294L	LYFO DISK® / 6	Cellulosimicrobium cellulans ATCC® 27402™*	192,40 €	
01046P	KWIK-STIK™ / 2	Cellulosimicrobium cellulans ATCC® BAA-1816™*	76,80 €	
01046K	KWIK-STIK™ / 6	Cellulosimicrobium cellulans ATCC® BAA-1816™*	207,50 €	
01046L	LYFO DISK® / 6	Cellulosimicrobium cellulans ATCC® BAA-1816™*	192,40 €	
01047P	KWIK-STIK™ / 2	Cellulosimicrobium cellulans ATCC® BAA-1817™*	76,80 €	
01047K	KWIK-STIK™ / 6	Cellulosimicrobium cellulans ATCC® BAA-1817™*	207,50 €	
01047L	LYFO DISK® / 6	Cellulosimicrobium cellulans ATCC® BAA-1817™*	192,40 €	

Référence Microbiologics	Gamme	Souche	Prix de vente 2016 HT susceptible d'évoluer	Commentaire
01094P	KWIK-STIK™ / 2	Chaetomium globosum ATCC® 6205™*	87,35 €	fungus
01094K	KWIK-STIK™ / 6	Chaetomium globosum ATCC® 6205™*	235,85 €	fungus
01094L	LYFO DISK® / 6	Chaetomium globosum ATCC® 6205™*	219,75 €	fungus
01186P	KWIK-STIK™ / 2	Chryseobacterium indologenes ATCC® 29897™*	87,35 €	
01186K	KWIK-STIK™ / 6	Chryseobacterium indologenes ATCC® 29897™*	235,85 €	
01186L	LYFO DISK® / 6	Chryseobacterium indologenes ATCC® 29897™*	219,75 €	
0164P	KWIK-STIK™ / 2	Chryseobacterium shigense ATCC® 51823™*	87,35 €	Formerly known as Flavobacterium species
0164K	KWIK-STIK™ / 6	Chryseobacterium shigense ATCC® 51823™*	235,85 €	Formerly known as Flavobacterium species
0164L	LYFO DISK® / 6	Chryseobacterium shigense ATCC® 51823™*	219,75 €	Formerly known as Flavobacterium species
0478P	KWIK-STIK™ / 2	Citrobacter braakii ATCC® 43162™*	69,50 €	
0478K	KWIK-STIK™ / 6	Citrobacter braakii ATCC® 43162™*	187,55 €	
0478L	LYFO DISK® / 6	Citrobacter braakii ATCC® 43162™*	166,80 €	
0578P	KWIK-STIK™ / 2	Citrobacter braakii ATCC® 51113™*	76,80 €	
0578K	KWIK-STIK™ / 6	Citrobacter braakii ATCC® 51113™*	207,50 €	
0578L	LYFO DISK® / 6	Citrobacter braakii ATCC® 51113™*	192,40 €	
0229P	KWIK-STIK™ / 2	Citrobacter freundii ATCC® 43864™*	60,45 €	
0229K	KWIK-STIK™ / 6	Citrobacter freundii ATCC® 43864™*	161,00 €	
0229L	LYFO DISK® / 6	Citrobacter freundii ATCC® 43864™*	141,10 €	
0315P	KWIK-STIK™ / 2	Citrobacter freundii ATCC® 8090™*	69,50 €	
0315K	KWIK-STIK™ / 6	Citrobacter freundii ATCC® 8090™*	187,55 €	
0315-CRM	Lab-Elite CRM™ / 1	Citrobacter freundii ATCC® 8090™*	68,65 €	
0315L	LYFO DISK® / 6	Citrobacter freundii ATCC® 8090™*	166,80 €	
01169P	KWIK-STIK™ / 2	Citrobacter freundii ATCC® 8454™*	69,50 €	
01169K	KWIK-STIK™ / 6	Citrobacter freundii ATCC® 8454™*	187,55 €	
01169L	LYFO DISK® / 6	Citrobacter freundii ATCC® 8454™*	166,80 €	
01086P	KWIK-STIK™ / 2	Citrobacter freundii NCTC 8581	76,80 €	
01086K	KWIK-STIK™ / 6	Citrobacter freundii NCTC 8581	207,50 €	
01086L	LYFO DISK® / 6	Citrobacter freundii NCTC 8581	192,40 €	
0574P	KWIK-STIK™ / 2	Citrobacter freundii NCTC 9750	69,50 €	
0574K	KWIK-STIK™ / 6	Citrobacter freundii NCTC 9750	187,55 €	
0574L	LYFO DISK® / 6	Citrobacter freundii NCTC 9750	166,80 €	
0106P	KWIK-STIK™ / 2	Citrobacter koseri ATCC® 27156™*	87,35 €	
0106K	KWIK-STIK™ / 6	Citrobacter koseri ATCC® 27156™*	235,85 €	
0106L	LYFO DISK® / 6	Citrobacter koseri ATCC® 27156™*	219,75 €	
0537P	KWIK-STIK™ / 2	Cladosporium cladosporioides ATCC® 16022™*	87,35 €	fungus
0537K	KWIK-STIK™ / 6	Cladosporium cladosporioides ATCC® 16022™*	235,85 €	fungus
0537L	LYFO DISK® / 6	Cladosporium cladosporioides ATCC® 16022™*	219,75 €	fungus
0828P	KWIK-STIK™ / 2	Clostridium bifermentans ATCC® 638™*	76,80 €	
0828K	KWIK-STIK™ / 6	Clostridium bifermentans ATCC® 638™*	207,50 €	
0828L	LYFO DISK® / 6	Clostridium bifermentans ATCC® 638™*	192,40 €	
01196P	KWIK-STIK™ / 2	Clostridium bifermentans NCTC 506	76,80 €	
01196K	KWIK-STIK™ / 6	Clostridium bifermentans NCTC 506	207,50 €	
01196L	LYFO DISK® / 6	Clostridium bifermentans NCTC 506	192,40 €	
01164K	KWIK-STIK™ / 6	Clostridium difficile 20120905	207,50 €	Genotype: tcdA positive, tcdB positive, tcdC _deletion 0 bp cdtA negative, cdtB negative PFGE Type:NAP4 Isolation: MN 2011
01164P	KWIK-STIK™ / 2	Clostridium difficile 20120905	76,80 €	Genotype: tcdA positive, tcdB positive, tcdC _deletion 0 bp cdtA negative, cdtB negative PFGE Type:NAP4 Isolation: MN 2011
01164L	LYFO DISK® / 6	Clostridium difficile 20120905	192,40 €	Genotype: tcdA positive, tcdB positive, tcdC _deletion 0 bp cdtA negative, cdtB negative PFGE Type:NAP4 Isolation:MN 2011
01165P	KWIK-STIK™ / 2	Clostridium difficile 20121308	76,80 €	Genotype: tcdA positive, tcdB positive, tcdC _deletion 18 bp cdtA positive, cdtB positive PFGE Type:NAP1 Isolation: NY 2011

Référence Microbiologics	Gamme	Souche	Prix de vente 2016 HT susceptible d'évoluer	Commentaire
01165K	KWIK-STIK™ / 6	Clostridium difficile 20121308	207,50 €	Genotype: tcdA positive, tcdB positive, tcdC _deletion 18 bp cdtA positive, cdtB positive PFGE Type: NAP1 Isolation: NY 2011
01165L	LYFO DISK® / 6	Clostridium difficile 20121308	192,40 €	Genotype: tcdA positive, tcdB positive, tcdC _deletion 18 bp cdtA positive, cdtB positive PFGE Type: NAP1 Isolation: NY 2011
0833P	KWIK-STIK™ / 2	Clostridium difficile ATCC® 43593™*	76,80 €	serogroup B; toxin A and B negative
0833K	KWIK-STIK™ / 6	Clostridium difficile ATCC® 43593™*	207,50 €	serogroup B; toxin A and B negative
0833L	LYFO DISK® / 6	Clostridium difficile ATCC® 43593™*	192,40 €	serogroup B; toxin A and B negative
0527P	KWIK-STIK™ / 2	Clostridium difficile ATCC® 700057™*	76,80 €	nontoxicogenic
0527K	KWIK-STIK™ / 6	Clostridium difficile ATCC® 700057™*	207,50 €	nontoxicogenic
0527L	LYFO DISK® / 6	Clostridium difficile ATCC® 700057™*	192,40 €	nontoxicogenic
0329P	KWIK-STIK™ / 2	Clostridium difficile ATCC® 9689™*	76,80 €	produces cytotoxin
0329K	KWIK-STIK™ / 6	Clostridium difficile ATCC® 9689™*	207,50 €	produces cytotoxin
0329L	LYFO DISK® / 6	Clostridium difficile ATCC® 9689™*	192,40 €	produces cytotoxin
01048P	KWIK-STIK™ / 2	Clostridium difficile ATCC® BAA-1870™*	76,80 €	PFGE Type NAP1, Toxinotype III, and Binary Toxin positive. Presence of tcdA and tcdB genes confirmed by PCR.
01048K	KWIK-STIK™ / 6	Clostridium difficile ATCC® BAA-1870™*	207,50 €	PFGE Type NAP1, Toxinotype III, and Binary Toxin positive. Presence of tcdA and tcdB genes confirmed by PCR.
01048L	LYFO DISK® / 6	Clostridium difficile ATCC® BAA-1870™*	192,40 €	PFGE Type NAP1, Toxinotype III, and Binary Toxin positive. Presence of tcdA and tcdB genes confirmed by PCR.
01161P	KWIK-STIK™ / 2	Clostridium difficile CDC 20110736	76,80 €	Genotype: tcdA negative, tcdB negative, tcdC _deletion negative cdtA negative, cdtB negative PFGE Type: Unnamed Isolation: NY 2011
01161K	KWIK-STIK™ / 6	Clostridium difficile CDC 20110736	207,50 €	Genotype: tcdA negative, tcdB negative, tcdC _deletion negative cdtA negative, cdtB negative PFGE Type: Unnamed Isolation: NY 2011
01161L	LYFO DISK® / 6	Clostridium difficile CDC 20110736	192,40 €	Genotype: tcdA negative, tcdB negative, tcdC _deletion negative cdtA negative, cdtB negative PFGE Type: Unnamed Isolation: NY 2011
01162P	KWIK-STIK™ / 2	Clostridium difficile CDC 20110995	76,80 €	Genotype: tcdA positive, tcdB positive, tcdC _deletion 0 bp cdtA negative, cdtB negative PFGE Type: NAP11 Isolation: MN 2011
01162K	KWIK-STIK™ / 6	Clostridium difficile CDC 20110995	207,50 €	Genotype: tcdA positive, tcdB positive, tcdC _deletion 0 bp cdtA negative, cdtB negative PFGE Type: NAP11 Isolation: MN 2011
01162L	LYFO DISK® / 6	Clostridium difficile CDC 20110995	192,40 €	Genotype: tcdA positive, tcdB positive, tcdC _deletion 0 bp cdtA negative, cdtB negative PFGE Type: NAP11 Isolation: MN 2011
01163P	KWIK-STIK™ / 2	Clostridium difficile CDC 20120296	76,80 €	Genotype: tcdA positive, tcdB positive, tcdC _deletion 39 bp cdtA positive, cdtB positive PFGE Type: NAP8 Isolation: GA 2011

Référence Microbiologics	Gamme	Souche	Prix de vente 2016 HT susceptible d'évoluer	Commentaire
01163K	KWIK-STIK™ / 6	Clostridium difficile CDC 20120296	207,50 €	Genotype: tcdA positive, tcdB positive, tcdC _deletion 39 bp cdtA positive, cdtB positive PFGE Type: NAP8 Isolation: GA 2011
01163L	LYFO DISK® / 6	Clostridium difficile CDC 20120296	192,40 €	Genotype: tcdA positive, tcdB positive, tcdC _deletion 39 bp cdtA positive, cdtB positive PFGE Type: NAP8 Isolation: GA 2011
01166P	KWIK-STIK™ / 2	Clostridium difficile CDC 20131122	76,80 €	Genotype: tcdA positive, tcdB positive, tcdC _deletion 39 bp cdtA positive, cdtB positive PFGE Type: NAP7 Isolation: CO 2011
01166K	KWIK-STIK™ / 6	Clostridium difficile CDC 20131122	207,50 €	Genotype: tcdA positive, tcdB positive, tcdC _deletion 39 bp cdtA positive, cdtB positive PFGE Type: NAP7 Isolation: CO 2011
01166L	LYFO DISK® / 6	Clostridium difficile CDC 20131122	192,40 €	Genotype: tcdA positive, tcdB positive, tcdC _deletion 39 bp cdtA positive, cdtB positive PFGE Type: NAP7 Isolation: CO 2011
0327P	KWIK-STIK™ / 2	Clostridium histolyticum ATCC® 19401™*	76,80 €	
0327K	KWIK-STIK™ / 6	Clostridium histolyticum ATCC® 19401™*	207,50 €	
0327L	LYFO DISK® / 6	Clostridium histolyticum ATCC® 19401™*	192,40 €	
0801P	KWIK-STIK™ / 2	Clostridium perfringens ATCC® 12915™*	87,35 €	for USA shipment only License obligatoire pour Import avec Livraison directe chez client final - DELAI : 7-10 semaines
0801K	KWIK-STIK™ / 6	Clostridium perfringens ATCC® 12915™*	235,85 €	for USA shipment only License obligatoire pour Import avec Livraison directe chez client final - DELAI : 7-10 semaines
0801L	LYFO DISK® / 6	Clostridium perfringens ATCC® 12915™*	219,75 €	for USA shipment only License obligatoire pour Import avec Livraison directe chez client final - DELAI : 7-10 semaines
0123P	KWIK-STIK™ / 2	Clostridium perfringens ATCC® 12916™*	76,80 €	for USA shipment only License obligatoire pour Import avec Livraison directe chez client final - DELAI : 7-10 semaines
0123K	KWIK-STIK™ / 6	Clostridium perfringens ATCC® 12916™*	207,50 €	for USA shipment only License obligatoire pour Import avec Livraison directe chez client final - DELAI : 7-10 semaines
0123L	LYFO DISK® / 6	Clostridium perfringens ATCC® 12916™*	192,40 €	for USA shipment only License obligatoire pour Import avec Livraison directe chez client final - DELAI : 7-10 semaines
0674FPC	EZ-FPC™ / 10	Clostridium perfringens ATCC® 12919™*	285,00 €	Quantitative Preparations at a concentration of 1.0-9.9E+03 CFU per pellet : for USA shipment only License obligatoire pour Import avec Livraison directe chez client final - DELAI : 7-10 semaines
0674P	KWIK-STIK™ / 2	Clostridium perfringens ATCC® 12919™*	76,80 €	for USA shipment only License obligatoire pour Import avec Livraison directe chez client final - DELAI : 7-10 semaines
0674K	KWIK-STIK™ / 6	Clostridium perfringens ATCC® 12919™*	207,50 €	for USA shipment only License obligatoire pour Import avec Livraison directe chez client final - DELAI : 7-10 semaines
0674L	LYFO DISK® / 6	Clostridium perfringens ATCC® 12919™*	192,40 €	for USA shipment only License obligatoire pour Import avec Livraison directe chez client final - DELAI : 7-10 semaines
0318E3	Epower™ / 10	Clostridium perfringens ATCC® 13124™*	346,60 €	Mean Assay Value: 1.0-9.9E+03 CFU per pellet
0318E3-CRM	Epower™ / 10 CRM	Clostridium perfringens ATCC® 13124™*	512,40 €	Mean Assay Value: 1.0-9.9E+03 CFU per pellet
0318P	KWIK-STIK™ / 2	Clostridium perfringens ATCC® 13124™*	76,80 €	

Référence Microbiologics	Gamme	Souche	Prix de vente 2016 HT susceptible d'évoluer	Commentaire
0318K	KWIK-STIK™ / 6	Clostridium perfringens ATCC® 13124™*	207,50 €	
0318-CRM	Lab-Elite CRM™ / 1	Clostridium perfringens ATCC® 13124™*	68,65 €	
0318L	LYFO DISK® / 6	Clostridium perfringens ATCC® 13124™*	192,40 €	
0257P	KWIK-STIK™ / 2	Clostridium perfringens ATCC® 3624™*	76,80 €	
0257K	KWIK-STIK™ / 6	Clostridium perfringens ATCC® 3624™*	207,50 €	
0257L	LYFO DISK® / 6	Clostridium perfringens ATCC® 3624™*	192,40 €	
0572P	KWIK-STIK™ / 2	Clostridium perfringens NCTC 8237	76,80 €	Type A
0572K	KWIK-STIK™ / 6	Clostridium perfringens NCTC 8237	207,50 €	Type A
0572L	LYFO DISK® / 6	Clostridium perfringens NCTC 8237	192,40 €	Type A
0547P	KWIK-STIK™ / 2	Clostridium perfringens NCTC 8678	76,80 €	non-epsilon toxin producing; heat resistant
0547K	KWIK-STIK™ / 6	Clostridium perfringens NCTC 8678	207,50 €	non-epsilon toxin producing; heat resistant
0547L	LYFO DISK® / 6	Clostridium perfringens NCTC 8678	192,40 €	non-epsilon toxin producing; heat resistant
0586P	KWIK-STIK™ / 2	Clostridium septicum ATCC® 12464™*	76,80 €	
0586K	KWIK-STIK™ / 6	Clostridium septicum ATCC® 12464™*	207,50 €	
0586L	LYFO DISK® / 6	Clostridium septicum ATCC® 12464™*	192,40 €	
0331P	KWIK-STIK™ / 2	Clostridium sordellii ATCC® 9714™*	76,80 €	
0331K	KWIK-STIK™ / 6	Clostridium sordellii ATCC® 9714™*	207,50 €	
0331L	LYFO DISK® / 6	Clostridium sordellii ATCC® 9714™*	192,40 €	
0487E3	Epover™ / 10	Clostridium sporogenes ATCC® 11437™*	346,60 €	Mean Assay Value: 1.0-9.9E+03 CFU per pellet
0487E3-CRM	Epover™ / 10 CRM	Clostridium sporogenes ATCC® 11437™*	512,40 €	Mean Assay Value: 1.0-9.9E+03 CFU per pellet
0487A	EZ-Accu Shot™ / 5	Clostridium sporogenes ATCC® 11437™*	313,40 €	10-100 CFU/0,1ml
0487P	KWIK-STIK™ / 2	Clostridium sporogenes ATCC® 11437™*	76,80 €	
0487K	KWIK-STIK™ / 6	Clostridium sporogenes ATCC® 11437™*	207,50 €	
0487-CRM	Lab-Elite CRM™ / 1	Clostridium sporogenes ATCC® 11437™*	68,65 €	
0487L	LYFO DISK® / 6	Clostridium sporogenes ATCC® 11437™*	192,40 €	
0317E3	Epover™ / 10	Clostridium sporogenes ATCC® 19404™*	346,60 €	Mean Assay Value: 1.0-9.9E+03 CFU per pellet
0317E3-CRM	Epover™ / 10 CRM	Clostridium sporogenes ATCC® 19404™*	512,40 €	Mean Assay Value: 1.0-9.9E+03 CFU per pellet
0317A	EZ-Accu Shot™ / 5	Clostridium sporogenes ATCC® 19404™*	313,40 €	10-100 CFU/0,1ml
0317P	KWIK-STIK™ / 2	Clostridium sporogenes ATCC® 19404™*	76,80 €	
0317K	KWIK-STIK™ / 6	Clostridium sporogenes ATCC® 19404™*	207,50 €	
0317-CRM	Lab-Elite CRM™ / 1	Clostridium sporogenes ATCC® 19404™*	68,65 €	
0317L	LYFO DISK® / 6	Clostridium sporogenes ATCC® 19404™*	192,40 €	
0676P	KWIK-STIK™ / 2	Clostridium sporogenes ATCC® 3584™*	76,80 €	
0676K	KWIK-STIK™ / 6	Clostridium sporogenes ATCC® 3584™*	207,50 €	
0676L	LYFO DISK® / 6	Clostridium sporogenes ATCC® 3584™*	192,40 €	
01188P	KWIK-STIK™ / 2	Clostridium sporogenes ATCC® 9690™*	76,80 €	
01188K	KWIK-STIK™ / 6	Clostridium sporogenes ATCC® 9690™*	207,50 €	
01188L	LYFO DISK® / 6	Clostridium sporogenes ATCC® 9690™*	192,40 €	
0580P	KWIK-STIK™ / 2	Clostridium sporogenes NCIMB 12343	76,80 €	
0580K	KWIK-STIK™ / 6	Clostridium sporogenes NCIMB 12343	207,50 €	
0580L	LYFO DISK® / 6	Clostridium sporogenes NCIMB 12343	192,40 €	
0704P	KWIK-STIK™ / 2	Clostridium tetani ATCC® 19406™*	87,35 €	
0704K	KWIK-STIK™ / 6	Clostridium tetani ATCC® 19406™*	235,85 €	
0704L	LYFO DISK® / 6	Clostridium tetani ATCC® 19406™*	219,75 €	
0844P	KWIK-STIK™ / 2	Corynebacterium diphtheriae ATCC® 13812™*	76,80 €	
0844K	KWIK-STIK™ / 6	Corynebacterium diphtheriae ATCC® 13812™*	207,50 €	
0844L	LYFO DISK® / 6	Corynebacterium diphtheriae ATCC® 13812™*	192,40 €	
01108P	KWIK-STIK™ / 2	Corynebacterium jeikeium ATCC® 43734™*	76,80 €	
01108K	KWIK-STIK™ / 6	Corynebacterium jeikeium ATCC® 43734™*	207,50 €	
01108L	LYFO DISK® / 6	Corynebacterium jeikeium ATCC® 43734™*	192,40 €	
0275P	KWIK-STIK™ / 2	Corynebacterium minutissimum ATCC® 23348™*	76,80 €	
0275K	KWIK-STIK™ / 6	Corynebacterium minutissimum ATCC® 23348™*	207,50 €	
0275L	LYFO DISK® / 6	Corynebacterium minutissimum ATCC® 23348™*	192,40 €	
0965P	KWIK-STIK™ / 2	Corynebacterium pseudodiphtheriticum ATCC® 10700™*	76,80 €	
0965K	KWIK-STIK™ / 6	Corynebacterium pseudodiphtheriticum ATCC® 10700™*	207,50 €	
0965L	LYFO DISK® / 6	Corynebacterium pseudodiphtheriticum ATCC® 10700™*	192,40 €	
0884P	KWIK-STIK™ / 2	Corynebacterium pseudodiphtheriticum ATCC® 10701™*	76,80 €	
0884K	KWIK-STIK™ / 6	Corynebacterium pseudodiphtheriticum ATCC® 10701™*	207,50 €	
0884L	LYFO DISK® / 6	Corynebacterium pseudodiphtheriticum ATCC® 10701™*	192,40 €	
0293P	KWIK-STIK™ / 2	Corynebacterium renale ATCC® 19412™*	76,80 €	
0293K	KWIK-STIK™ / 6	Corynebacterium renale ATCC® 19412™*	207,50 €	
0293-CRM	Lab-Elite CRM™ / 1	Corynebacterium renale ATCC® 19412™*	68,65 €	
0293L	LYFO DISK® / 6	Corynebacterium renale ATCC® 19412™*	192,40 €	
01040P	KWIK-STIK™ / 2	Corynebacterium renale ATCC® BAA-1785™*	76,80 €	Item Available for Fulfillment August 2010
01040K	KWIK-STIK™ / 6	Corynebacterium renale ATCC® BAA-1785™*	207,50 €	Item Available for Fulfillment August 2010
01040L	LYFO DISK® / 6	Corynebacterium renale ATCC® BAA-1785™*	192,40 €	Item Available for Fulfillment August 2010
0583P	KWIK-STIK™ / 2	Corynebacterium striatum ATCC® BAA-1293™*	76,80 €	
0583K	KWIK-STIK™ / 6	Corynebacterium striatum ATCC® BAA-1293™*	207,50 €	
0583L	LYFO DISK® / 6	Corynebacterium striatum ATCC® BAA-1293™*	192,40 €	

Référence Microbiologics	Gamme	Souche	Prix de vente 2016 HT susceptible d'évoluer	Commentaire
01039P	KWIK-STIK™ / 2	Corynebacterium urealyticum ATCC® 43044™*	76,80 €	
01039K	KWIK-STIK™ / 6	Corynebacterium urealyticum ATCC® 43044™*	207,50 €	
01039L	LYFO DISK® / 6	Corynebacterium urealyticum ATCC® 43044™*	192,40 €	
0153P	KWIK-STIK™ / 2	Corynebacterium xerosis ATCC® 373™*	76,80 €	
0153K	KWIK-STIK™ / 6	Corynebacterium xerosis ATCC® 373™*	207,50 €	
0153L	LYFO DISK® / 6	Corynebacterium xerosis ATCC® 373™*	192,40 €	
0756E3	Epover™ / 10	Cronobacter muytjensii ATCC® 51329™*	263,40 €	Mean Assay Value: 1.0-9.9E+03 CFU per pellet
0756E3-CRM	Epover™ / 10 CRM	Cronobacter muytjensii ATCC® 51329™*	512,40 €	Mean Assay Value: 1.0-9.9E+03 CFU per pellet
0756FPC	EZ-FPC™ / 10	Cronobacter muytjensii ATCC® 51329™*	285,00 €	Quantitative Preparations at a concentration of 1.0-9.9E+03 CFU per pellet
0756P	KWIK-STIK™ / 2	Cronobacter muytjensii ATCC® 51329™*	76,80 €	
0756K	KWIK-STIK™ / 6	Cronobacter muytjensii ATCC® 51329™*	207,50 €	
0756L	LYFO DISK® / 6	Cronobacter muytjensii ATCC® 51329™*	192,40 €	
01088P	KWIK-STIK™ / 2	Cronobacter sakazakii ATCC® 29544™*	87,35 €	formerly Enterobacter sakazakii
01088K	KWIK-STIK™ / 6	Cronobacter sakazakii ATCC® 29544™*	235,85 €	formerly Enterobacter sakazakii
01088L	LYFO DISK® / 6	Cronobacter sakazakii ATCC® 29544™*	219,75 €	formerly Enterobacter sakazakii
0984P	KWIK-STIK™ / 2	Cryptococcus albidus ATCC® 66030™*	76,80 €	
0984K	KWIK-STIK™ / 6	Cryptococcus albidus ATCC® 66030™*	207,50 €	
0984L	LYFO DISK® / 6	Cryptococcus albidus ATCC® 66030™*	192,40 €	
01051P	KWIK-STIK™ / 2	Cryptococcus gattii ATCC® MYA-4560™*	87,35 €	Item Available for Fulfillment January 2011
01051K	KWIK-STIK™ / 6	Cryptococcus gattii ATCC® MYA-4560™*	235,85 €	Item Available for Fulfillment January 2011
01051L	LYFO DISK® / 6	Cryptococcus gattii ATCC® MYA-4560™*	219,75 €	Item Available for Fulfillment January 2011
0225P	KWIK-STIK™ / 2	Cryptococcus humicola ATCC® 64676™*	76,80 €	formerly Cryptococcus humicolus
0225K	KWIK-STIK™ / 6	Cryptococcus humicola ATCC® 64676™*	207,50 €	formerly Cryptococcus humicolus
0225L	LYFO DISK® / 6	Cryptococcus humicola ATCC® 64676™*	192,40 €	formerly Cryptococcus humicolus
0972P	KWIK-STIK™ / 2	Cryptococcus humicola ATCC® 9949™*	76,80 €	formerly Cryptococcus humicolus
0972K	KWIK-STIK™ / 6	Cryptococcus humicola ATCC® 9949™*	207,50 €	formerly Cryptococcus humicolus
0972L	LYFO DISK® / 6	Cryptococcus humicola ATCC® 9949™*	192,40 €	formerly Cryptococcus humicolus
0333P	KWIK-STIK™ / 2	Cryptococcus laurentii ATCC® 18803™*	76,80 €	
0333K	KWIK-STIK™ / 6	Cryptococcus laurentii ATCC® 18803™*	207,50 €	
0333L	LYFO DISK® / 6	Cryptococcus laurentii ATCC® 18803™*	192,40 €	
0991P	KWIK-STIK™ / 2	Cryptococcus laurentii ATCC® 66036™*	76,80 €	
0991K	KWIK-STIK™ / 6	Cryptococcus laurentii ATCC® 66036™*	207,50 €	
0991L	LYFO DISK® / 6	Cryptococcus laurentii ATCC® 66036™*	192,40 €	
0451P	KWIK-STIK™ / 2	Cryptococcus liquefaciens ATCC® 34140™*	76,80 €	formerly Cryptococcus albidus
0451K	KWIK-STIK™ / 6	Cryptococcus liquefaciens ATCC® 34140™*	207,50 €	formerly Cryptococcus albidus
0451L	LYFO DISK® / 6	Cryptococcus liquefaciens ATCC® 34140™*	192,40 €	formerly Cryptococcus albidus
01173P	KWIK-STIK™ / 2	Cryptococcus neoformans (D) ATCC® 36556™*	76,80 €	Serotype D
01173K	KWIK-STIK™ / 6	Cryptococcus neoformans (D) ATCC® 36556™*	207,50 €	Serotype D
01173L	LYFO DISK® / 6	Cryptococcus neoformans (D) ATCC® 36556™*	192,40 €	Serotype D
01172P	KWIK-STIK™ / 2	Cryptococcus neoformans ATCC® 13690™*	76,80 €	
01172K	KWIK-STIK™ / 6	Cryptococcus neoformans ATCC® 13690™*	207,50 €	
01172L	LYFO DISK® / 6	Cryptococcus neoformans ATCC® 13690™*	192,40 €	
0291P	KWIK-STIK™ / 2	Cryptococcus neoformans ATCC® 14116™*	76,80 €	
0291K	KWIK-STIK™ / 6	Cryptococcus neoformans ATCC® 14116™*	207,50 €	
0291L	LYFO DISK® / 6	Cryptococcus neoformans ATCC® 14116™*	192,40 €	
0781P	KWIK-STIK™ / 2	Cryptococcus neoformans ATCC® 204092™*	76,80 €	
0781K	KWIK-STIK™ / 6	Cryptococcus neoformans ATCC® 204092™*	207,50 €	
0781L	LYFO DISK® / 6	Cryptococcus neoformans ATCC® 204092™*	192,40 €	
0334P	KWIK-STIK™ / 2	Cryptococcus neoformans ATCC® 32045™*	76,80 €	
0334K	KWIK-STIK™ / 6	Cryptococcus neoformans ATCC® 32045™*	207,50 €	
0334L	LYFO DISK® / 6	Cryptococcus neoformans ATCC® 32045™*	192,40 €	
01063P	KWIK-STIK™ / 2	Cryptococcus neoformans ATCC® 34877™*	76,80 €	serotype B
01063K	KWIK-STIK™ / 6	Cryptococcus neoformans ATCC® 34877™*	207,50 €	serotype B
01063L	LYFO DISK® / 6	Cryptococcus neoformans ATCC® 34877™*	192,40 €	serotype B
0985P	KWIK-STIK™ / 2	Cryptococcus neoformans ATCC® 66031™*	76,80 €	
0985K	KWIK-STIK™ / 6	Cryptococcus neoformans ATCC® 66031™*	207,50 €	
0985L	LYFO DISK® / 6	Cryptococcus neoformans ATCC® 66031™*	192,40 €	
0915P	KWIK-STIK™ / 2	Cryptococcus neoformans ATCC® 76484™*	76,80 €	
0915K	KWIK-STIK™ / 6	Cryptococcus neoformans ATCC® 76484™*	207,50 €	
0915L	LYFO DISK® / 6	Cryptococcus neoformans ATCC® 76484™*	192,40 €	
0987P	KWIK-STIK™ / 2	Cryptococcus uniguttulatus ATCC® 66033™*	76,80 €	
0987K	KWIK-STIK™ / 6	Cryptococcus uniguttulatus ATCC® 66033™*	207,50 €	
0987L	LYFO DISK® / 6	Cryptococcus uniguttulatus ATCC® 66033™*	192,40 €	
01044P	KWIK-STIK™ / 2	Curtobacterium pusillum ATCC® 19096™*	76,80 €	Item Available for Fulfillment August 2010
01044K	KWIK-STIK™ / 6	Curtobacterium pusillum ATCC® 19096™*	207,50 €	Item Available for Fulfillment August 2010
01044L	LYFO DISK® / 6	Curtobacterium pusillum ATCC® 19096™*	192,40 €	Item Available for Fulfillment August 2010
0210P	KWIK-STIK™ / 2	Deinococcus radiodurans ATCC® 13939™*	87,35 €	
0210K	KWIK-STIK™ / 6	Deinococcus radiodurans ATCC® 13939™*	235,85 €	
0210L	LYFO DISK® / 6	Deinococcus radiodurans ATCC® 13939™*	219,75 €	
01184P	KWIK-STIK™ / 2	Deinococcus radiophilus ATCC® 27603™*	87,35 €	
01184K	KWIK-STIK™ / 6	Deinococcus radiophilus ATCC® 27603™*	235,85 €	
01184L	LYFO DISK® / 6	Deinococcus radiophilus ATCC® 27603™*	219,75 €	
01026P	KWIK-STIK™ / 2	Desulfotomaculum nigrificans ATCC® 7946™*	87,35 €	

Référence Microbiologics	Gamme	Souche	Prix de vente 2016 HT susceptible d'évoluer	Commentaire
01026K	KWIK-STIK™ / 6	Desulfotomaculum nigrificans ATCC® 7946™*	235,85 €	
01026L	LYFO DISK® / 6	Desulfotomaculum nigrificans ATCC® 7946™*	219,75 €	
0845P	KWIK-STIK™ / 2	Edwardsiella tarda ATCC® 15947™*	69,50 €	
0845K	KWIK-STIK™ / 6	Edwardsiella tarda ATCC® 15947™*	187,55 €	
0845L	LYFO DISK® / 6	Edwardsiella tarda ATCC® 15947™*	166,80 €	
0936P	KWIK-STIK™ / 2	Eggerthella lenta ATCC® 43055™*	76,80 €	
0936K	KWIK-STIK™ / 6	Eggerthella lenta ATCC® 43055™*	207,50 €	
0936L	LYFO DISK® / 6	Eggerthella lenta ATCC® 43055™*	192,40 €	
0183P	KWIK-STIK™ / 2	Eikenella corrodens ATCC® 23834™*	76,80 €	
0183K	KWIK-STIK™ / 6	Eikenella corrodens ATCC® 23834™*	207,50 €	
0183L	LYFO DISK® / 6	Eikenella corrodens ATCC® 23834™*	192,40 €	
0189P	KWIK-STIK™ / 2	Eikenella corrodens ATCC® BAA-1152™*	69,50 €	
0189K	KWIK-STIK™ / 6	Eikenella corrodens ATCC® BAA-1152™*	187,55 €	
0189L	LYFO DISK® / 6	Eikenella corrodens ATCC® BAA-1152™*	166,80 €	
0971P	KWIK-STIK™ / 2	Elizabethkingia meningoseptica ATCC® 13253™*	69,50 €	
0971K	KWIK-STIK™ / 6	Elizabethkingia meningoseptica ATCC® 13253™*	187,55 €	
0971L	LYFO DISK® / 6	Elizabethkingia meningoseptica ATCC® 13253™*	166,80 €	
0306E3	Epower™ / 10	Enterobacter aerogenes ATCC® 13048™*	263,40 €	Mean Assay Value: 1.0-9.9E+03 CFU per pellet
0306E3-CRM	Epower™ / 10 CRM	Enterobacter aerogenes ATCC® 13048™*	512,40 €	Mean Assay Value: 1.0-9.9E+03 CFU per pellet
0306A	EZ-Accu Shot™ / 5	Enterobacter aerogenes ATCC® 13048™*	313,40 €	10-100 CFU/0,1ml
0306FPC	EZ-FPC™ / 10	Enterobacter aerogenes ATCC® 13048™*	285,00 €	Quantitative Preparations at a concentration of 1.0-9.9E+03 CFU per pellet
0306P	KWIK-STIK™ / 2	Enterobacter aerogenes ATCC® 13048™*	60,45 €	
0306K	KWIK-STIK™ / 6	Enterobacter aerogenes ATCC® 13048™*	161,00 €	
0306-CRM	Lab-Elite CRM™ / 1	Enterobacter aerogenes ATCC® 13048™*	68,65 €	
0306L	LYFO DISK® / 6	Enterobacter aerogenes ATCC® 13048™*	141,10 €	
0399P	KWIK-STIK™ / 2	Enterobacter aerogenes ATCC® 35029™*	60,45 €	
0399K	KWIK-STIK™ / 6	Enterobacter aerogenes ATCC® 35029™*	161,00 €	
0399L	LYFO DISK® / 6	Enterobacter aerogenes ATCC® 35029™*	141,10 €	
0196P	KWIK-STIK™ / 2	Enterobacter aerogenes ATCC® 51697™*	76,80 €	
0196K	KWIK-STIK™ / 6	Enterobacter aerogenes ATCC® 51697™*	207,50 €	
0196L	LYFO DISK® / 6	Enterobacter aerogenes ATCC® 51697™*	192,40 €	
0597E3	Epower™ / 10	Enterobacter aerogenes NCIMB 10102	263,40 €	Mean Assay Value: 1.0-9.9E+03 CFU per pellet
0597E3-CRM	Epower™ / 10 CRM	Enterobacter aerogenes NCIMB 10102	512,40 €	Mean Assay Value: 1.0-9.9E+03 CFU per pellet
0597P	KWIK-STIK™ / 2	Enterobacter aerogenes NCIMB 10102	60,45 €	
0597K	KWIK-STIK™ / 6	Enterobacter aerogenes NCIMB 10102	161,00 €	
0597L	LYFO DISK® / 6	Enterobacter aerogenes NCIMB 10102	141,10 €	
0166P	KWIK-STIK™ / 2	Enterobacter amnigenus ATCC® 51816™*	87,35 €	
0166K	KWIK-STIK™ / 6	Enterobacter amnigenus ATCC® 51816™*	235,85 €	
0166L	LYFO DISK® / 6	Enterobacter amnigenus ATCC® 51816™*	219,75 €	
0388E8	Epower™ / 10	Enterobacter cloacae subsp. cloacae ATCC® 35030™*	263,40 €	Mean Assay Value: 1.0-9.9E+08 CFU per pellet
0388E8-CRM	Epower™ / 10 CRM	Enterobacter cloacae subsp. cloacae ATCC® 35030™*	512,40 €	Mean Assay Value: 1.0-9.9E+08 CFU per pellet
01202L	LYFO DISK® / 6	Enterobacter cloacae ATCC® BAA-2341™	166,80 €	blaKPC positive produces carbapenemase KPC carbapenem-resistant (Imipenem and Ertapenem)
01202P	KWIK-STIK™ / 2	Enterobacter cloacae ATCC® BAA-2341™*	69,50 €	blaKPC positive produces carbapenemase KPC carbapenem-resistant (Imipenem and Ertapenem)
01202K	KWIK-STIK™ / 6	Enterobacter cloacae ATCC® BAA-2341™*	187,55 €	blaKPC positive produces carbapenemase KPC carbapenem-resistant (Imipenem and Ertapenem)
01111P	KWIK-STIK™ / 2	Enterobacter cloacae NCTC 13406	76,80 €	Control for AmpC detection tests
01111K	KWIK-STIK™ / 6	Enterobacter cloacae NCTC 13406	207,50 €	Control for AmpC detection tests
01111L	LYFO DISK® / 6	Enterobacter cloacae NCTC 13406	192,40 €	Control for AmpC detection tests
01105P	KWIK-STIK™ / 2	Enterobacter cloacae NCTC 13464	76,80 €	
01105K	KWIK-STIK™ / 6	Enterobacter cloacae NCTC 13464	207,50 €	
01105L	LYFO DISK® / 6	Enterobacter cloacae NCTC 13464	192,40 €	
0323P	KWIK-STIK™ / 2	Enterobacter cloacae subsp. cloacae ATCC® 13047™*	60,45 €	
0323K	KWIK-STIK™ / 6	Enterobacter cloacae subsp. cloacae ATCC® 13047™*	161,00 €	
0323-CRM	Lab-Elite CRM™ / 1	Enterobacter cloacae subsp. cloacae ATCC® 13047™*	68,65 €	
0323L	LYFO DISK® / 6	Enterobacter cloacae subsp. cloacae ATCC® 13047™*	141,10 €	
0313P	KWIK-STIK™ / 2	Enterobacter cloacae subsp. cloacae ATCC® 23355™*	60,45 €	
0313K	KWIK-STIK™ / 6	Enterobacter cloacae subsp. cloacae ATCC® 23355™*	161,00 €	
0313L	LYFO DISK® / 6	Enterobacter cloacae subsp. cloacae ATCC® 23355™*	141,10 €	
0388P	KWIK-STIK™ / 2	Enterobacter cloacae subsp. cloacae ATCC® 35030™*	60,45 €	
0388K	KWIK-STIK™ / 6	Enterobacter cloacae subsp. cloacae ATCC® 35030™*	161,00 €	

Référence Microbiologics	Gamme	Souche	Prix de vente 2016 HT susceptible d'évoluer	Commentaire
0388L	LYFO DISK® / 6	Enterobacter cloacae subsp. cloacae ATCC® 35030™*	141,10 €	
0639P	KWIK-STIK™ / 2	Enterobacter cloacae subsp. cloacae ATCC® 49141™*	69,50 €	
0639K	KWIK-STIK™ / 6	Enterobacter cloacae subsp. cloacae ATCC® 49141™*	187,55 €	
0639L	LYFO DISK® / 6	Enterobacter cloacae subsp. cloacae ATCC® 49141™*	166,80 €	
01018P	KWIK-STIK™ / 2	Enterobacter cloacae subsp. cloacae ATCC® BAA-1143™*	76,80 €	control strain for the AmpC disk test; strong positive
01018K	KWIK-STIK™ / 6	Enterobacter cloacae subsp. cloacae ATCC® BAA-1143™*	207,50 €	control strain for the AmpC disk test; strong positive
01018L	LYFO DISK® / 6	Enterobacter cloacae subsp. cloacae ATCC® BAA-1143™*	192,40 €	control strain for the AmpC disk test; strong positive
0394P	KWIK-STIK™ / 2	Enterobacter cloacae subsp. cloacae NCTC 10005	69,50 €	
0394K	KWIK-STIK™ / 6	Enterobacter cloacae subsp. cloacae NCTC 10005	187,55 €	
0394L	LYFO DISK® / 6	Enterobacter cloacae subsp. cloacae NCTC 10005	166,80 €	
0703P	KWIK-STIK™ / 2	Enterobacter gergoviae ATCC® 33028™*	76,80 €	
0703K	KWIK-STIK™ / 6	Enterobacter gergoviae ATCC® 33028™*	207,50 €	
0703-CRM	Lab-Elite CRM™ / 1	Enterobacter gergoviae ATCC® 33028™*	68,65 €	
0703L	LYFO DISK® / 6	Enterobacter gergoviae ATCC® 33028™*	192,40 €	
0755P	KWIK-STIK™ / 2	Enterobacter hormaechei ATCC® 700323™*	69,50 €	formerly Enterobacter cloacae subsp. cloacae
0755K	KWIK-STIK™ / 6	Enterobacter hormaechei ATCC® 700323™*	187,55 €	formerly Enterobacter cloacae subsp. cloacae
0755L	LYFO DISK® / 6	Enterobacter hormaechei ATCC® 700323™*	166,80 €	formerly Enterobacter cloacae subsp. cloacae
0387P	KWIK-STIK™ / 2	Enterococcus avium ATCC® 14025™*	76,80 €	
0387K	KWIK-STIK™ / 6	Enterococcus avium ATCC® 14025™*	207,50 €	
0387L	LYFO DISK® / 6	Enterococcus avium ATCC® 14025™*	192,40 €	
0117P	KWIK-STIK™ / 2	Enterococcus casseliflavus ATCC® 25788™*	76,80 €	
0117K	KWIK-STIK™ / 6	Enterococcus casseliflavus ATCC® 25788™*	207,50 €	
0117L	LYFO DISK® / 6	Enterococcus casseliflavus ATCC® 25788™*	192,40 €	
0761P	KWIK-STIK™ / 2	Enterococcus casseliflavus ATCC® 700327™*	60,45 €	
0761K	KWIK-STIK™ / 6	Enterococcus casseliflavus ATCC® 700327™*	161,00 €	
0761L	LYFO DISK® / 6	Enterococcus casseliflavus ATCC® 700327™*	141,10 €	
0623P	KWIK-STIK™ / 2	Enterococcus durans ATCC® 11576™*	69,50 €	
0623K	KWIK-STIK™ / 6	Enterococcus durans ATCC® 11576™*	187,55 €	
0623L	LYFO DISK® / 6	Enterococcus durans ATCC® 11576™*	166,80 €	
0651P	KWIK-STIK™ / 2	Enterococcus durans ATCC® 6056™*	69,50 €	
0651K	KWIK-STIK™ / 6	Enterococcus durans ATCC® 6056™*	187,55 €	
0651L	LYFO DISK® / 6	Enterococcus durans ATCC® 6056™*	166,80 €	
0181P	KWIK-STIK™ / 2	Enterococcus faecalis ATCC® 14506™*	69,50 €	
0181K	KWIK-STIK™ / 6	Enterococcus faecalis ATCC® 14506™*	187,55 €	
0181L	LYFO DISK® / 6	Enterococcus faecalis ATCC® 14506™*	166,80 €	
0367P	KWIK-STIK™ / 2	Enterococcus faecalis ATCC® 19433™*	69,50 €	
0367K	KWIK-STIK™ / 6	Enterococcus faecalis ATCC® 19433™*	187,55 €	
0367-CRM	Lab-Elite CRM™ / 1	Enterococcus faecalis ATCC® 19433™*	68,65 €	
0367L	LYFO DISK® / 6	Enterococcus faecalis ATCC® 19433™*	166,80 €	
0366E7	Epower™ / 10	Enterococcus faecalis ATCC® 29212™*	346,60 €	Mean Assay Value: 1.0-9.9E+07 CFU per pellet
0366E3	Epower™ / 10	Enterococcus faecalis ATCC® 29212™*	346,60 €	Mean Assay Value: 1.0-9.9E+03 CFU per pellet
0366E7-CRM	Epower™ / 10 CRM	Enterococcus faecalis ATCC® 29212™*	512,40 €	Mean Assay Value: 1.0-9.9E+07 CFU per pellet
0366E3-CRM	Epower™ / 10 CRM	Enterococcus faecalis ATCC® 29212™*	512,40 €	Mean Assay Value: 1.0-9.9E+03 CFU per pellet
0366A	EZ-Accu Shot™ / 5	Enterococcus faecalis ATCC® 29212™*	313,40 €	10-100 CFU/0,1ml
0366P	KWIK-STIK™ / 2	Enterococcus faecalis ATCC® 29212™*	69,50 €	
0366K	KWIK-STIK™ / 6	Enterococcus faecalis ATCC® 29212™*	187,55 €	
0366-CRM	Lab-Elite CRM™ / 1	Enterococcus faecalis ATCC® 29212™*	68,65 €	
0366L	LYFO DISK® / 6	Enterococcus faecalis ATCC® 29212™*	166,80 €	
0197P	KWIK-STIK™ / 2	Enterococcus faecalis ATCC® 33186™*	76,80 €	
0197K	KWIK-STIK™ / 6	Enterococcus faecalis ATCC® 33186™*	207,50 €	
0197L	LYFO DISK® / 6	Enterococcus faecalis ATCC® 33186™*	192,40 €	
0941P	KWIK-STIK™ / 2	Enterococcus faecalis ATCC® 49452™*	76,80 €	
0941K	KWIK-STIK™ / 6	Enterococcus faecalis ATCC® 49452™*	207,50 €	
0941L	LYFO DISK® / 6	Enterococcus faecalis ATCC® 49452™*	192,40 €	
0753P	KWIK-STIK™ / 2	Enterococcus faecalis ATCC® 49532™*	87,35 €	high level Gentamicin-resistant and Streptomycin-sensitive
0753K	KWIK-STIK™ / 6	Enterococcus faecalis ATCC® 49532™*	235,85 €	high level Gentamicin-resistant and Streptomycin-sensitive
0753L	LYFO DISK® / 6	Enterococcus faecalis ATCC® 49532™*	219,75 €	high level Gentamicin-resistant and Streptomycin-sensitive
0752P	KWIK-STIK™ / 2	Enterococcus faecalis ATCC® 49533™*	69,50 €	high level Gentamicin- sensitive and Streptomycin-resistant
0752K	KWIK-STIK™ / 6	Enterococcus faecalis ATCC® 49533™*	187,55 €	high level Gentamicin- sensitive and Streptomycin-resistant
0752L	LYFO DISK® / 6	Enterococcus faecalis ATCC® 49533™*	166,80 €	high level Gentamicin-resistant and Streptomycin-sensitive
0959P	KWIK-STIK™ / 2	Enterococcus faecalis ATCC® 51299™*	69,50 €	Vancomycin resistant and high level aminoglycosides, vanB
0959K	KWIK-STIK™ / 6	Enterococcus faecalis ATCC® 51299™*	187,55 €	Vancomycin resistant and high level aminoglycosides, vanB

Référence Microbiologics	Gamme	Souche	Prix de vente 2016 HT susceptible d'évoluer	Commentaire
0959L	LYFO DISK® / 6	Enterococcus faecalis ATCC® 51299™*	166,80 €	Vancomycin resistant and high level aminoglycosides, vanB
01089P	KWIK-STIK™ / 2	Enterococcus faecalis ATCC® 51575™*	87,35 €	Resistant to gentamicin, streptomycin and vancomycin
01089K	KWIK-STIK™ / 6	Enterococcus faecalis ATCC® 51575™*	235,85 €	Resistant to gentamicin, streptomycin and vancomycin
01089L	LYFO DISK® / 6	Enterococcus faecalis ATCC® 51575™*	219,75 €	Resistant to gentamicin, streptomycin and vancomycin
0497E3	Epower™ / 10	Enterococcus faecalis ATCC® 7080™*	263,40 €	Mean Assay Value: 1.0-9.9E+03 CFU per pellet
0497E3-CRM	Epower™ / 10 CRM	Enterococcus faecalis ATCC® 7080™*	512,40 €	Mean Assay Value: 1.0-9.9E+03 CFU per pellet
0497FPC	EZ-FPC™ / 10	Enterococcus faecalis ATCC® 7080™*	285,00 €	Quantitative Preparations at a concentration of 1.0-9.9E+03 CFU per pellet
0497P	KWIK-STIK™ / 2	Enterococcus faecalis ATCC® 7080™*	69,50 €	
0497K	KWIK-STIK™ / 6	Enterococcus faecalis ATCC® 7080™*	187,55 €	
0497L	LYFO DISK® / 6	Enterococcus faecalis ATCC® 7080™*	166,80 €	
0336P	KWIK-STIK™ / 2	Enterococcus faecalis NCIMB 13280	69,50 €	
0336K	KWIK-STIK™ / 6	Enterococcus faecalis NCIMB 13280	187,55 €	
0336L	LYFO DISK® / 6	Enterococcus faecalis NCIMB 13280	166,80 €	
0714P	KWIK-STIK™ / 2	Enterococcus faecalis NCTC 13379	87,35 €	
0714K	KWIK-STIK™ / 6	Enterococcus faecalis NCTC 13379	235,85 €	
0714L	LYFO DISK® / 6	Enterococcus faecalis NCTC 13379	219,75 €	
0472P	KWIK-STIK™ / 2	Enterococcus faecalis NCTC 775	69,50 €	
0472K	KWIK-STIK™ / 6	Enterococcus faecalis NCTC 775	187,55 €	
0472L	LYFO DISK® / 6	Enterococcus faecalis NCTC 775	166,80 €	
0679P	KWIK-STIK™ / 2	Enterococcus faecium ATCC® 27270™*	76,80 €	
0679K	KWIK-STIK™ / 6	Enterococcus faecium ATCC® 27270™*	207,50 €	
0679L	LYFO DISK® / 6	Enterococcus faecium ATCC® 27270™*	192,40 €	
0968H	EZ-Hydro Shot™	Enterococcus faecium ATCC® 35667™*	247,10 €	20-100 CFU / pellet
0968P	KWIK-STIK™ / 2	Enterococcus faecium ATCC® 35667™*	69,50 €	
0968K	KWIK-STIK™ / 6	Enterococcus faecium ATCC® 35667™*	187,55 €	
0968L	LYFO DISK® / 6	Enterococcus faecium ATCC® 35667™*	166,80 €	
01052P	KWIK-STIK™ / 2	Enterococcus faecium ATCC® 6057™*	87,35 €	
01052K	KWIK-STIK™ / 6	Enterococcus faecium ATCC® 6057™*	235,85 €	
01052L	LYFO DISK® / 6	Enterococcus faecium ATCC® 6057™*	219,75 €	
0677P	KWIK-STIK™ / 2	Enterococcus faecium ATCC® 6569™*	76,80 €	
0677K	KWIK-STIK™ / 6	Enterococcus faecium ATCC® 6569™*	207,50 €	
0677L	LYFO DISK® / 6	Enterococcus faecium ATCC® 6569™*	192,40 €	
01000P	KWIK-STIK™ / 2	Enterococcus faecium ATCC® 700221™*	69,50 €	Vancomycin resistant
01000K	KWIK-STIK™ / 6	Enterococcus faecium ATCC® 700221™*	187,55 €	Vancomycin resistant
01000L	LYFO DISK® / 6	Enterococcus faecium ATCC® 700221™*	166,80 €	Vancomycin resistant
01143P	KWIK-STIK™ / 2	Enterococcus faecium NCTC 12204	69,50 €	
01143K	KWIK-STIK™ / 6	Enterococcus faecium NCTC 12204	187,55 €	
01143L	LYFO DISK® / 6	Enterococcus faecium NCTC 12204	166,80 €	
0895P	KWIK-STIK™ / 2	Enterococcus gallinarum ATCC® 49573™*	69,50 €	
0895K	KWIK-STIK™ / 6	Enterococcus gallinarum ATCC® 49573™*	187,55 €	
0895L	LYFO DISK® / 6	Enterococcus gallinarum ATCC® 49573™*	166,80 €	
0745P	KWIK-STIK™ / 2	Enterococcus gallinarum ATCC® 700425™*	76,80 €	
0745K	KWIK-STIK™ / 6	Enterococcus gallinarum ATCC® 700425™*	207,50 €	
0745L	LYFO DISK® / 6	Enterococcus gallinarum ATCC® 700425™*	192,40 €	
0678P	KWIK-STIK™ / 2	Enterococcus hirae ATCC® 10541™*	76,80 €	
0678K	KWIK-STIK™ / 6	Enterococcus hirae ATCC® 10541™*	207,50 €	
0678L	LYFO DISK® / 6	Enterococcus hirae ATCC® 10541™*	192,40 €	
0624P	KWIK-STIK™ / 2	Enterococcus hirae ATCC® 49135™*	76,80 €	formerly Enterococcus durans
0624K	KWIK-STIK™ / 6	Enterococcus hirae ATCC® 49135™*	207,50 €	formerly Enterococcus durans
0624L	LYFO DISK® / 6	Enterococcus hirae ATCC® 49135™*	192,40 €	formerly Enterococcus durans
0935P	KWIK-STIK™ / 2	Enterococcus hirae ATCC® 49479™*	76,80 €	formerly Enterococcus durans
0935K	KWIK-STIK™ / 6	Enterococcus hirae ATCC® 49479™*	207,50 €	formerly Enterococcus durans
0935L	LYFO DISK® / 6	Enterococcus hirae ATCC® 49479™*	192,40 €	formerly Enterococcus durans
0650P	KWIK-STIK™ / 2	Enterococcus hirae ATCC® 8043™*	69,50 €	
0650K	KWIK-STIK™ / 6	Enterococcus hirae ATCC® 8043™*	187,55 €	
0650L	LYFO DISK® / 6	Enterococcus hirae ATCC® 8043™*	166,80 €	
0857P	KWIK-STIK™ / 2	Enterococcus raffinosus ATCC® 49464™*	69,50 €	
0857K	KWIK-STIK™ / 6	Enterococcus raffinosus ATCC® 49464™*	187,55 €	
0857L	LYFO DISK® / 6	Enterococcus raffinosus ATCC® 49464™*	166,80 €	
0223P	KWIK-STIK™ / 2	Enterococcus saccharolyticus ATCC® 43076™*	69,50 €	
0223K	KWIK-STIK™ / 6	Enterococcus saccharolyticus ATCC® 43076™*	187,55 €	
0223L	LYFO DISK® / 6	Enterococcus saccharolyticus ATCC® 43076™*	166,80 €	
0661P	KWIK-STIK™ / 2	Erysipelothrix rhusiopathiae ATCC® 19414™*	69,50 €	
0661K	KWIK-STIK™ / 6	Erysipelothrix rhusiopathiae ATCC® 19414™*	187,55 €	
0661L	LYFO DISK® / 6	Erysipelothrix rhusiopathiae ATCC® 19414™*	166,80 €	
0795E3-CRM	Epower™ / 10 CRM	Escherichia coli (O157:H7) ATCC® 43888™*	512,40 €	serotype O157:H7; does not produce Shiga-Like Toxin I or II; Mean Assay Value: 1.0-9.9E+03 CFU per pellet

Référence Microbiologics	Gamme	Souche	Prix de vente 2016 HT susceptible d'évoluer	Commentaire
0795E2	Epower™ / 10	Escherichia coli (O157:H7) ATCC® 43888™*	263,40 €	serotype O157:H7; does not produce Shiga-Like Toxin I or II; Mean Assay Value: 1.0-9.9E+02 CFU per pellet
0795E2-CRM	Epower™ / 10 CRM	Escherichia coli (O157:H7) ATCC® 43888™*	512,40 €	serotype O157:H7; does not produce Shiga-Like Toxin I or II; Mean Assay Value: 1.0-9.9E+02 CFU per pellet
0795-CRM	Lab-Elite CRM™ / 1	Escherichia coli (O157:H7) ATCC® 43888™*	68,65 €	serotype O157:H7; does not produce Shiga-Like Toxin I or II
0204P	KWIK-STIK™ / 2	Escherichia coli (JM101) ATCC® 33876™*	69,50 €	
0204K	KWIK-STIK™ / 6	Escherichia coli (JM101) ATCC® 33876™*	187,55 €	
0204L	LYFO DISK® / 6	Escherichia coli (JM101) ATCC® 33876™*	166,80 €	
0795E3	Epower™ / 10	Escherichia coli (O157:H7) ATCC® 43888™*	263,40 €	serotype O157:H7; does not produce Shiga-Like Toxin I or II; Mean Assay Value: 1.0-9.9E+03 CFU per pellet
0795FPC	EZ-FPC™ / 10	Escherichia coli (O157:H7) ATCC® 43888™*	285,00 €	Qualitative Preparations at a concentration of 1.0-9.9E+02 CFU per pellet; serotype O157:H7
0795P	KWIK-STIK™ / 2	Escherichia coli (O157:H7) ATCC® 43888™*	69,50 €	serotype O157:H7; does not produce Shiga-Like Toxin I or II
0795K	KWIK-STIK™ / 6	Escherichia coli (O157:H7) ATCC® 43888™*	187,55 €	serotype O157:H7; does not produce Shiga-Like Toxin I or II
0795L	LYFO DISK® / 6	Escherichia coli (O157:H7) ATCC® 43888™*	166,80 €	serotype O157:H7; does not produce Shiga-Like Toxin I or II
0680P	KWIK-STIK™ / 2	Escherichia coli ATCC® 10536™*	76,80 €	
0680K	KWIK-STIK™ / 6	Escherichia coli ATCC® 10536™*	207,50 €	
0680L	LYFO DISK® / 6	Escherichia coli ATCC® 10536™*	192,40 €	
01050P	KWIK-STIK™ / 2	Escherichia coli ATCC® 10799™*	87,35 €	
01050K	KWIK-STIK™ / 6	Escherichia coli ATCC® 10799™*	235,85 €	
01050L	LYFO DISK® / 6	Escherichia coli ATCC® 10799™*	219,75 €	
0681P	KWIK-STIK™ / 2	Escherichia coli ATCC® 11229™*	69,50 €	
0681K	KWIK-STIK™ / 6	Escherichia coli ATCC® 11229™*	187,55 €	
0681-CRM	Lab-Elite CRM™ / 1	Escherichia coli ATCC® 11229™*	68,65 €	
0681L	LYFO DISK® / 6	Escherichia coli ATCC® 11229™*	166,80 €	
0502P	KWIK-STIK™ / 2	Escherichia coli ATCC® 11303™*	76,80 €	
0502K	KWIK-STIK™ / 6	Escherichia coli ATCC® 11303™*	207,50 €	
0502L	LYFO DISK® / 6	Escherichia coli ATCC® 11303™*	192,40 €	
0465H	EZ-Hydro Shot™	Escherichia coli ATCC® 11775™*	247,10 €	20-100 CFU / pellet serovar O1:K1:H7
0465P	KWIK-STIK™ / 2	Escherichia coli ATCC® 11775™*	69,50 €	serovar O1:K1:H7
0465K	KWIK-STIK™ / 6	Escherichia coli ATCC® 11775™*	187,55 €	serovar O1:K1:H7
0465L	LYFO DISK® / 6	Escherichia coli ATCC® 11775™*	166,80 €	serovar O1:K1:H7
0747P	KWIK-STIK™ / 2	Escherichia coli ATCC® 13706™*	69,50 €	
0747K	KWIK-STIK™ / 6	Escherichia coli ATCC® 13706™*	187,55 €	
0747L	LYFO DISK® / 6	Escherichia coli ATCC® 13706™*	166,80 €	
0682P	KWIK-STIK™ / 2	Escherichia coli ATCC® 13762™*	69,50 €	
0682K	KWIK-STIK™ / 6	Escherichia coli ATCC® 13762™*	187,55 €	
0682L	LYFO DISK® / 6	Escherichia coli ATCC® 13762™*	166,80 €	
0543P	KWIK-STIK™ / 2	Escherichia coli ATCC® 14169™*	69,50 €	
0543K	KWIK-STIK™ / 6	Escherichia coli ATCC® 14169™*	187,55 €	
0543L	LYFO DISK® / 6	Escherichia coli ATCC® 14169™*	166,80 €	
0202P	KWIK-STIK™ / 2	Escherichia coli ATCC® 14948™*	76,80 €	
0202K	KWIK-STIK™ / 6	Escherichia coli ATCC® 14948™*	207,50 €	
0202L	LYFO DISK® / 6	Escherichia coli ATCC® 14948™*	192,40 €	
01037P	KWIK-STIK™ / 2	Escherichia coli ATCC® 15597™*	87,35 €	Host for MS2 Bacteriophage (ATCC® 15597™-B1)
01037K	KWIK-STIK™ / 6	Escherichia coli ATCC® 15597™*	235,85 €	Host for MS2 Bacteriophage (ATCC® 15597™-B1)
01037L	LYFO DISK® / 6	Escherichia coli ATCC® 15597™*	219,75 €	Host for MS2 Bacteriophage (ATCC® 15597™-B1)
0203P	KWIK-STIK™ / 2	Escherichia coli ATCC® 23848™*	69,50 €	Genotype B
0203K	KWIK-STIK™ / 6	Escherichia coli ATCC® 23848™*	187,55 €	Genotype B
0203L	LYFO DISK® / 6	Escherichia coli ATCC® 23848™*	166,80 €	Genotype B
0335E3	Epower™ / 10	Escherichia coli ATCC® 25922™*	346,60 €	Mean Assay Value: 1.0-9.9E+03 CFU per pellet
0335P	KWIK-STIK™ / 2	Escherichia coli ATCC® 25922™*	51,00 €	
0335K	KWIK-STIK™ / 6	Escherichia coli ATCC® 25922™*	132,35 €	
0335-CRM	Lab-Elite CRM™ / 1	Escherichia coli ATCC® 25922™*	68,65 €	
0335L	LYFO DISK® / 6	Escherichia coli ATCC® 25922™*	113,80 €	
01064P	KWIK-STIK™ / 2	Escherichia coli ATCC® 33849™*	76,80 €	DH1; transformation host
01064K	KWIK-STIK™ / 6	Escherichia coli ATCC® 33849™*	207,50 €	DH1; transformation host
01064L	LYFO DISK® / 6	Escherichia coli ATCC® 33849™*	192,40 €	DH1; transformation host
0495E3	Epower™ / 10	Escherichia coli ATCC® 35218™*	263,40 €	Mean Assay Value: 1.0-9.9E+03 CFU per pellet
0495E3-CRM	Epower™ / 10 CRM	Escherichia coli ATCC® 35218™*	512,40 €	Mean Assay Value: 1.0-9.9E+03 CFU per pellet
0495P	KWIK-STIK™ / 2	Escherichia coli ATCC® 35218™*	69,50 €	beta lactamase producer
0495K	KWIK-STIK™ / 6	Escherichia coli ATCC® 35218™*	187,55 €	beta lactamase producer
0495L	LYFO DISK® / 6	Escherichia coli ATCC® 35218™*	166,80 €	beta lactamase producer
01079P	KWIK-STIK™ / 2	Escherichia coli ATCC® 35401™*	87,35 €	serotype O78:H11
01079K	KWIK-STIK™ / 6	Escherichia coli ATCC® 35401™*	235,85 €	serotype O78:H11

Référence Microbiologics	Gamme	Souche	Prix de vente 2016 HT susceptible d'évoluer	Commentaire
01079-CRM	Lab-Elite CRM™ / 1	Escherichia coli ATCC® 35401™*	68,65 €	serotype O78:H11
01079L	LYFO DISK® / 6	Escherichia coli ATCC® 35401™*	219,75 €	serotype O78:H11
0422P	KWIK-STIK™ / 2	Escherichia coli ATCC® 35421™*	69,50 €	
0422K	KWIK-STIK™ / 6	Escherichia coli ATCC® 35421™*	187,55 €	
0422L	LYFO DISK® / 6	Escherichia coli ATCC® 35421™*	166,80 €	
0433P	KWIK-STIK™ / 2	Escherichia coli ATCC® 4157™*	69,50 €	
0433K	KWIK-STIK™ / 6	Escherichia coli ATCC® 4157™*	187,55 €	
0433L	LYFO DISK® / 6	Escherichia coli ATCC® 4157™*	166,80 €	
0869P	KWIK-STIK™ / 2	Escherichia coli ATCC® 51446™*	69,50 €	
0869K	KWIK-STIK™ / 6	Escherichia coli ATCC® 51446™*	187,55 €	
0869L	LYFO DISK® / 6	Escherichia coli ATCC® 51446™*	166,80 €	
0860P	KWIK-STIK™ / 2	Escherichia coli ATCC® 51755™*	76,80 €	
0860K	KWIK-STIK™ / 6	Escherichia coli ATCC® 51755™*	207,50 €	
0860L	LYFO DISK® / 6	Escherichia coli ATCC® 51755™*	192,40 €	
0791E3	Epower™ / 10	Escherichia coli ATCC® 51813™*	263,40 €	Mean Assay Value: 1.0-9.9E+03 CFU per pellet
0791E4	Epower™ / 10	Escherichia coli ATCC® 51813™*	263,40 €	Mean Assay Value: 1.0-9.9E+04 CFU per pellet
0791E3-CRM	Epower™ / 10 CRM	Escherichia coli ATCC® 51813™*	512,40 €	Mean Assay Value: 1.0-9.9E+03 CFU per pellet
0791E4-CRM	Epower™ / 10 CRM	Escherichia coli ATCC® 51813™*	512,40 €	Mean Assay Value: 1.0-9.9E+04 CFU per pellet
0791FPC	EZ-FPC™ / 10	Escherichia coli ATCC® 51813™*	285,00 €	Quantitative Preparations at a concentration of 1.0-9.9E+03 CFU per pellet
0791P	KWIK-STIK™ / 2	Escherichia coli ATCC® 51813™*	76,80 €	
0791K	KWIK-STIK™ / 6	Escherichia coli ATCC® 51813™*	207,50 €	
0791L	LYFO DISK® / 6	Escherichia coli ATCC® 51813™*	192,40 €	
0536P	KWIK-STIK™ / 2	Escherichia coli ATCC® 53498™*	87,35 €	
0536K	KWIK-STIK™ / 6	Escherichia coli ATCC® 53498™*	235,85 €	
0536L	LYFO DISK® / 6	Escherichia coli ATCC® 53498™*	219,75 €	
01137P	KWIK-STIK™ / 2	Escherichia coli ATCC® 700609™*	87,35 €	Designation CN13; Bacteriophage host
01137K	KWIK-STIK™ / 6	Escherichia coli ATCC® 700609™*	235,85 €	Designation CN13; Bacteriophage host
01137L	LYFO DISK® / 6	Escherichia coli ATCC® 700609™*	219,75 €	Designation CN13; Bacteriophage host
0231P	KWIK-STIK™ / 2	Escherichia coli ATCC® 700728™*	69,50 €	serotype O157:H7; for USA shipment only; nontoxicogenic License obligatoire pour Import avec Livraison directe chez client final - DELAI : 7-10 semaines
0231K	KWIK-STIK™ / 6	Escherichia coli ATCC® 700728™*	187,55 €	serotype O157:H7; for USA shipment only; nontoxicogenic License obligatoire pour Import avec Livraison directe chez client final - DELAI : 7-10 semaines
0231L	LYFO DISK® / 6	Escherichia coli ATCC® 700728™*	166,80 €	serotype O157:H7; for USA shipment only; nontoxicogenic License obligatoire pour Import avec Livraison directe chez client final - DELAI : 7-10 semaines
01138P	KWIK-STIK™ / 2	Escherichia coli ATCC® 700891™*	87,35 €	Designation HS(pFamp)R; Bacteriophage host
01138K	KWIK-STIK™ / 6	Escherichia coli ATCC® 700891™*	235,85 €	Designation HS(pFamp)R; Bacteriophage host.
01138L	LYFO DISK® / 6	Escherichia coli ATCC® 700891™*	219,75 €	Designation HS(pFamp)R; Bacteriophage host
0483E7	Epower™ / 10	Escherichia coli ATCC® 8739™*	346,60 €	Mean Assay Value: 1.0-9.9E+07 CFU per pellet
0483E3	Epower™ / 10	Escherichia coli ATCC® 8739™*	346,60 €	Mean Assay Value: 1.0-9.9E+03 CFU per pellet
0483A	EZ-Accu Shot™ / 5	Escherichia coli ATCC® 8739™*	313,40 €	10-100 CFU/0,1ml
0483-PEC	EZ-PEC™ / 20	Escherichia coli ATCC® 8739™*	772,90 €	1.0x10 ⁵ to 1.0x10 ⁶ CFU per ml
0483P	KWIK-STIK™ / 2	Escherichia coli ATCC® 8739™*	69,50 €	
0483K	KWIK-STIK™ / 6	Escherichia coli ATCC® 8739™*	187,55 €	
0483-CRM	Lab-Elite CRM™ / 1	Escherichia coli ATCC® 8739™*	68,65 €	
0483L	LYFO DISK® / 6	Escherichia coli ATCC® 8739™*	166,80 €	
0115P	KWIK-STIK™ / 2	Escherichia coli ATCC® 9637™*	76,80 €	
0115K	KWIK-STIK™ / 6	Escherichia coli ATCC® 9637™*	207,50 €	
0115L	LYFO DISK® / 6	Escherichia coli ATCC® 9637™*	192,40 €	
01201P	KWIK-STIK™ / 2	Escherichia coli ATCC® BAA-2340™*	69,50 €	blaKPC positive blaNDM negative produces carbapenemase KPC Carbapenem-resistant (Imipenem and Ertapenem)
01201K	KWIK-STIK™ / 6	Escherichia coli ATCC® BAA-2340™*	187,55 €	blaKPC positive blaNDM negative produces carbapenemase KPC Carbapenem-resistant (Imipenem and Ertapenem)

Référence Microbiologics	Gamme	Souche	Prix de vente 2016 HT susceptible d'évoluer	Commentaire
01201L	LYFO DISK® / 6	Escherichia coli ATCC® BAA-2340™*	166,80 €	blaKPC positive blaNDM negative produces carbapenemase KPC Carbapenem-resistant (Imipenem and Ertapenem)
01113P	KWIK-STIK™ / 2	Escherichia coli ATCC® BAA-2469™*	87,35 €	New Delhi metallo-beta-lactamase (NDM-1) positive; blaKPC negative by PCR; blaNDM positive by PCR; Carbapenem-resistant (Imipenem and Ertapenem)
01113K	KWIK-STIK™ / 6	Escherichia coli ATCC® BAA-2469™*	235,85 €	New Delhi metallo-beta-lactamase (NDM-1) positive; blaKPC negative by PCR; blaNDM positive by PCR; Carbapenem-resistant (Imipenem and Ertapenem)
01113L	LYFO DISK® / 6	Escherichia coli ATCC® BAA-2469™*	219,75 €	New Delhi metallo-beta-lactamase (NDM-1) positive; blaKPC negative by PCR; blaNDM positive by PCR; Carbapenem-resistant (Imipenem and Ertapenem)
0581-PEC	EZ-PEC™ / 20	Escherichia coli NCIMB 8545	772,90 €	1.0x10 ⁵ to 1.0x10 ⁶ CFU per ml
0581P	KWIK-STIK™ / 2	Escherichia coli NCIMB 8545	87,35 €	
0581K	KWIK-STIK™ / 6	Escherichia coli NCIMB 8545	235,85 €	
0581L	LYFO DISK® / 6	Escherichia coli NCIMB 8545	219,75 €	
01069P	KWIK-STIK™ / 2	Escherichia coli NCTC 10279	69,50 €	serovar 0145:K(B):H-; for USA shipment only License obligatoire pour Import avec Livraison directe chez client final - DELAI : 7-10 semaines
01069K	KWIK-STIK™ / 6	Escherichia coli NCTC 10279	187,55 €	serovar 0145:K(B):H-; for USA shipment only License obligatoire pour Import avec Livraison directe chez client final - DELAI : 7-10 semaines
01069L	LYFO DISK® / 6	Escherichia coli NCTC 10279	166,80 €	serovar 0145:K(B):H-; for USA shipment only License obligatoire pour Import avec Livraison directe chez client final - DELAI : 7-10 semaines
0706P	KWIK-STIK™ / 2	Escherichia coli NCTC 10538	60,45 €	K12
0706K	KWIK-STIK™ / 6	Escherichia coli NCTC 10538	161,00 €	K12
0706L	LYFO DISK® / 6	Escherichia coli NCTC 10538	141,10 €	K12
0715P	KWIK-STIK™ / 2	Escherichia coli NCTC 11954	87,35 €	beta lactamase producer
0715K	KWIK-STIK™ / 6	Escherichia coli NCTC 11954	235,85 €	beta lactamase producer
0715L	LYFO DISK® / 6	Escherichia coli NCTC 11954	219,75 €	beta lactamase producer
0861P	KWIK-STIK™ / 2	Escherichia coli NCTC 12900	69,50 €	serotype O157:H7; non toxigenic; for USA shipment only License obligatoire pour Import avec Livraison directe chez client final - DELAI : 7-10 semaines
0861K	KWIK-STIK™ / 6	Escherichia coli NCTC 12900	187,55 €	serotype O157:H7; non toxigenic; for USA shipment only License obligatoire pour Import avec Livraison directe chez client final - DELAI : 7-10 semaines
0861L	LYFO DISK® / 6	Escherichia coli NCTC 12900	166,80 €	serotype O157:H7; non toxigenic; for USA shipment only License obligatoire pour Import avec Livraison directe chez client final - DELAI : 7-10 semaines
01193P	KWIK-STIK™ / 2	Escherichia coli NCTC 13167	69,50 €	
01193K	KWIK-STIK™ / 6	Escherichia coli NCTC 13167	187,55 €	
01193L	LYFO DISK® / 6	Escherichia coli NCTC 13167	166,80 €	
01192P	KWIK-STIK™ / 2	Escherichia coli NCTC 13216	69,50 €	
01192K	KWIK-STIK™ / 6	Escherichia coli NCTC 13216	187,55 €	
01192L	LYFO DISK® / 6	Escherichia coli NCTC 13216	166,80 €	
01085P	KWIK-STIK™ / 2	Escherichia coli NCTC 13351	76,80 €	TEM-3 ESBL
01085K	KWIK-STIK™ / 6	Escherichia coli NCTC 13351	207,50 €	TEM-3 ESBL
01085L	LYFO DISK® / 6	Escherichia coli NCTC 13351	192,40 €	TEM-3 ESBL
01136P	KWIK-STIK™ / 2	Escherichia coli NCTC 13476	76,80 €	
01136K	KWIK-STIK™ / 6	Escherichia coli NCTC 13476	207,50 €	
01136L	LYFO DISK® / 6	Escherichia coli NCTC 13476	192,40 €	
01072P	KWIK-STIK™ / 2	Escherichia coli NCTC 8009	69,50 €	serovar 0111:K58(B4):H2; for USA shipment only License obligatoire pour Import avec Livraison directe chez client final - DELAI : 7-10 semaines
01072K	KWIK-STIK™ / 6	Escherichia coli NCTC 8009	187,55 €	serovar 0111:K58(B4):H2; for USA shipment only License obligatoire pour Import avec Livraison directe chez client final - DELAI : 7-10 semaines
01072L	LYFO DISK® / 6	Escherichia coli NCTC 8009	166,80 €	serovar 0111:K58(B4):H2; for USA shipment only License obligatoire pour Import avec Livraison directe chez client final - DELAI : 7-10 semaines

Référence Microbiologics	Gamme	Souche	Prix de vente 2016 HT susceptible d'évoluer	Commentaire
01071P	KWIK-STIK™ / 2	Escherichia coli NCTC 8620	69,50 €	serovar 026:K60(B6):H-; for USA shipment only License obligatoire pour Import avec Livraison directe chez client final - DELAI : 7-10 semaines
01071K	KWIK-STIK™ / 6	Escherichia coli NCTC 8620	187,55 €	serovar 026:K60(B6):H-; for USA shipment only License obligatoire pour Import avec Livraison directe chez client final - DELAI : 7-10 semaines
01071L	LYFO DISK® / 6	Escherichia coli NCTC 8620	166,80 €	serovar 026:K60(B6):H-; for USA shipment only License obligatoire pour Import avec Livraison directe chez client final - DELAI : 7-10 semaines
01062P	KWIK-STIK™ / 2	Escherichia coli NCTC 8622	69,50 €	serovar O126:K7(B16):H2; for USA shipment only License obligatoire pour Import avec Livraison directe chez client final - DELAI : 7-10 semaines
01062K	KWIK-STIK™ / 6	Escherichia coli NCTC 8622	187,55 €	serovar O126:K7(B16):H2; for USA shipment only License obligatoire pour Import avec Livraison directe chez client final - DELAI : 7-10 semaines
01062L	LYFO DISK® / 6	Escherichia coli NCTC 8622	166,80 €	serovar O126:K7(B16):H2; for USA shipment only License obligatoire pour Import avec Livraison directe chez client final - DELAI : 7-10 semaines
01109P	KWIK-STIK™ / 2	Escherichia coli NCTC 9001	69,50 €	
01109K	KWIK-STIK™ / 6	Escherichia coli NCTC 9001	187,55 €	
01109L	LYFO DISK® / 6	Escherichia coli NCTC 9001	166,80 €	
01070P	KWIK-STIK™ / 2	Escherichia coli NCTC 9103	69,50 €	serovar 0103:H8; for USA shipment only License obligatoire pour Import avec Livraison directe chez client final - DELAI : 7-10 semaines
01070K	KWIK-STIK™ / 6	Escherichia coli NCTC 9103	187,55 €	serovar 0103:H8; for USA shipment only License obligatoire pour Import avec Livraison directe chez client final - DELAI : 7-10 semaines
01070L	LYFO DISK® / 6	Escherichia coli NCTC 9103	166,80 €	serovar 0103:H8; for USA shipment only License obligatoire pour Import avec Livraison directe chez client final - DELAI : 7-10 semaines
01101E3	Epower™ / 10	Escherichia coli serotype O103:H11 CDC 06-3008 (STEC)	478,30 €	Mean Assay Value: 1.0-9.9E+03 CFU per pellet; serotype O103:H11; eae positive; stx 1 and/or stx 2 positive; export license required for shipping this product outside the United States License obligatoire pour Import avec Livraison directe chez client final - DELAI : 7-10 semaines
01101E2	Epower™ / 10	Escherichia coli serotype O103:H11 CDC 06-3008 (STEC)	478,30 €	Mean Assay Value: 1.0-9.9E+02 CFU per pellet; serotype O103:H11; eae positive; stx 1 and/or stx 2 positive; export license required for shipping this product outside the United States License obligatoire pour Import avec Livraison directe chez client final - DELAI : 7-10 semaines
01101P	KWIK-STIK™ / 2	Escherichia coli serotype O103:H11 CDC 06-3008 (STEC)	116,50 €	serotype O103:H11; eae positive; stx 1 and/or stx 2 positive; export license required for shipping this product outside the United States License obligatoire pour Import avec Livraison directe chez client final - DELAI : 7-10 semaines
01101K	KWIK-STIK™ / 6	Escherichia coli serotype O103:H11 CDC 06-3008 (STEC)	315,00 €	serotype O103:H11; eae positive; stx 1 and/or stx 2 positive; export license required for shipping this product outside the United States License obligatoire pour Import avec Livraison directe chez client final - DELAI : 7-10 semaines
01101L	LYFO DISK® / 6	Escherichia coli serotype O103:H11 CDC 06-3008 (STEC)	297,40 €	serotype O103:H11; eae positive; stx 1 and/or stx 2 positive; export license required for shipping this product outside the United States License obligatoire pour Import avec Livraison directe chez client final - DELAI : 7-10 semaines

Référence Microbiologics	Gamme	Souche	Prix de vente 2016 HT susceptible d'évoluer	Commentaire
01104E3	Epower™ / 10	Escherichia coli serotype O104:H4 ATCC® BAA-2326™* (STEC)	478,30 €	Mean Assay Value: 1.0-9.9E+03 CFU per pellet; serotype O104:H4; aggR positive; stx 2 positive; export license required for shipping this product outside the United States License obligatoire pour Import avec Livraison directe chez client final - DELAI : 7-10 semaines
01104E2	Epower™ / 10	Escherichia coli serotype O104:H4 ATCC® BAA-2326™* (STEC)	478,30 €	Mean Assay Value: 1.0-9.9E+02 CFU per pellet; serotype O104:H4; aggR positive; stx 2 positive; export license required for shipping this product outside the United States License obligatoire pour Import avec Livraison directe chez client final - DELAI : 7-10 semaines
01104P	KWIK-STIK™ / 2	Escherichia coli serotype O104:H4 ATCC® BAA-2326™* (STEC)	116,50 €	serotype O104:H4; aggR positive; stx 2 positive; export license required for shipping this product outside the United States License obligatoire pour Import avec Livraison directe chez client final - DELAI : 7-10 semaines
01104K	KWIK-STIK™ / 6	Escherichia coli serotype O104:H4 ATCC® BAA-2326™* (STEC)	315,00 €	serotype O104:H4; aggR positive; stx2 positive; export license required for shipping this product outside the United States License obligatoire pour Import avec Livraison directe chez client final - DELAI : 7-10 semaines
01104L	LYFO DISK® / 6	Escherichia coli serotype O104:H4 ATCC® BAA-2326™* (STEC)	297,40 €	serotype O104:H4; aggR positive; stx 2 positive; export license required for shipping this product outside the United States License obligatoire pour Import avec Livraison directe chez client final - DELAI : 7-10 semaines
01102E3	Epower™ / 10	Escherichia coli serotype O111:H8 CDC 2010C-3114 (STEC)	478,30 €	Mean Assay Value: 1.0-9.9E+03 CFU per pellet; serotype O111:H8; eae positive; stx 1 and/or stx 2 positive; export license required for shipping this product outside the United States License obligatoire pour Import avec Livraison directe chez client final - DELAI : 7-10 semaines
01102E2	Epower™ / 10	Escherichia coli serotype O111:H8 CDC 2010C-3114 (STEC)	478,30 €	Mean Assay Value: 1.0-9.9E+02 CFU per pellet; serotype O111:H8; eae positive; stx 1 and/or stx 2 positive; export license required for shipping this product outside the United States License obligatoire pour Import avec Livraison directe chez client final - DELAI : 7-10 semaines
01102P	KWIK-STIK™ / 2	Escherichia coli serotype O111:H8 CDC 2010C-3114 (STEC)	116,50 €	serotype O111:H8; eae positive; stx 1 and/or stx 2 positive; export license required for shipping this product outside the United States License obligatoire pour Import avec Livraison directe chez client final - DELAI : 7-10 semaines
01102K	KWIK-STIK™ / 6	Escherichia coli serotype O111:H8 CDC 2010C-3114 (STEC)	315,00 €	serotype O111:H8; eae positive; stx 1 and/or stx 2 positive; export license required for shipping this product outside the United States License obligatoire pour Import avec Livraison directe chez client final - DELAI : 7-10 semaines
01102L	LYFO DISK® / 6	Escherichia coli serotype O111:H8 CDC 2010C-3114 (STEC)	297,40 €	serotype O111:H8; eae positive; stx 1 and/or stx 2 positive; export license required for shipping this product outside the United States License obligatoire pour Import avec Livraison directe chez client final - DELAI : 7-10 semaines
01099E3	Epower™ / 10	Escherichia coli serotype O121:H19 CDC 02-3211 (STEC)	478,30 €	Mean Assay Value: 1.0-9.9E+03 CFU per pellet; serotype O121:H19; eae positive; stx1 and/or stx 2 positive; export license required for shipping this product outside the United States License obligatoire pour Import avec Livraison directe chez client final - DELAI : 7-10 semaines

Référence Microbiologics	Gamme	Souche	Prix de vente 2016 HT susceptible d'évoluer	Commentaire
01099E2	Epower™ / 10	Escherichia coli serotype O121:H19 CDC 02-3211 (STEC)	478,30 €	Mean Assay Value: 1.0-9.9E+02 CFU per pellet; serotype O121:H19; eae positive; stx1 and/or stx 2 positive; export license required for shipping this product outside the United States License obligatoire pour Import avec Livraison directe chez client final - DELAI : 7-10 semaines
01099P	KWIK-STIK™ / 2	Escherichia coli serotype O121:H19 CDC 02-3211 (STEC)	116,50 €	serotype O121:H19; eae positive; stx1 and/or stx 2 positive; export license required for shipping this product outside the United States License obligatoire pour Import avec Livraison directe chez client final - DELAI : 7-10 semaines
01099K	KWIK-STIK™ / 6	Escherichia coli serotype O121:H19 CDC 02-3211 (STEC)	315,00 €	serotype O121:H19; eae positive; stx1 and/or stx 2 positive; export license required for shipping this product outside the United States License obligatoire pour Import avec Livraison directe chez client final - DELAI : 7-10 semaines
01099L	LYFO DISK® / 6	Escherichia coli serotype O121:H19 CDC 02-3211 (STEC)	297,40 €	serotype O121:H19; eae positive; stx1 and/or stx 2 positive; export license required for shipping this product outside the United States License obligatoire pour Import avec Livraison directe chez client final - DELAI : 7-10 semaines
01097E3	Epower™ / 10	Escherichia coli serotype O145:NM CDC 99-3311 (STEC)	478,30 €	Mean Assay Value: 1.0-9.9E+03 CFU per pellet; serotype O145:NM; eae positive; stx1 and/or stx 2 positive; export license required for shipping this product outside the United States. License obligatoire pour Import avec Livraison directe chez client final - DELAI : 7-10 semaines
01097E2	Epower™ / 10	Escherichia coli serotype O145:NM CDC 99-3311 (STEC)	478,30 €	Mean Assay Value: 1.0-9.9E+02 CFU per pellet; serotype O145:NM; eae positive; stx1 and/or stx 2 positive; export license required for shipping this product outside the United States License obligatoire pour Import avec Livraison directe chez client final - DELAI : 7-10 semaines
01097P	KWIK-STIK™ / 2	Escherichia coli serotype O145:NM CDC 99-3311 (STEC)	116,50 €	serotype O145:NM; eae positive; stx1 and/or stx 2 positive; export license required for shipping this product outside the United States. License obligatoire pour Import avec Livraison directe chez client final - DELAI : 7-10 semaines
01097K	KWIK-STIK™ / 6	Escherichia coli serotype O145:NM CDC 99-3311 (STEC)	315,00 €	serotype O145:NM; eae positive; stx1 and/or stx 2 positive; export license required for shipping this product outside the United States License obligatoire pour Import avec Livraison directe chez client final - DELAI : 7-10 semaines
01097L	LYFO DISK® / 6	Escherichia coli serotype O145:NM CDC 99-3311 (STEC)	297,40 €	serotype O145:NM; eae positive; stx1 and/or stx 2 positive; export license required for shipping this product outside the United States. License obligatoire pour Import avec Livraison directe chez client final - DELAI : 7-10 semaines
0617E3	Epower™ / 10	Escherichia coli serotype O157:H7 ATCC® 35150™* (STEC)	478,30 €	serotype O157:H7; Export license required for shipping this product outside the United States; Mean Assay Value: 1.0-9.9E+03 CFU per pellet License obligatoire pour Import avec Livraison directe chez client final - DELAI : 7-10 semaines
0617E2	Epower™ / 10	Escherichia coli serotype O157:H7 ATCC® 35150™* (STEC)	478,30 €	Mean Assay Value: 1.0-9.9E+02 CFU per pellet; serotype O157:H7; Export license required for shipping this product outside the United States License obligatoire pour Import avec Livraison directe chez client final - DELAI : 7-10 semaines
0617FPC	EZ-FPC™ / 10	Escherichia coli serotype O157:H7 ATCC® 35150™* (STEC)	285,00 €	Qualitative Preparations at a concentration of 1.0-9.9E+02 CFU per pellet; serotype O157:H7; Export license required for shipping this product outside the United States License obligatoire pour Import avec Livraison directe chez client final - DELAI : 7-10 semaines

Référence Microbiologics	Gamme	Souche	Prix de vente 2016 HT susceptible d'évoluer	Commentaire
0617P	KWIK-STIK™ / 2	Escherichia coli serotype O157:H7 ATCC® 35150™* (STEC)	76,80 €	serotype O157:H7; Export license required for shipping this product outside the United States License obligatoire pour Import avec Livraison directe chez client final - DELAI : 7-10 semaines
0617K	KWIK-STIK™ / 6	Escherichia coli serotype O157:H7 ATCC® 35150™* (STEC)	207,50 €	serotype O157:H7; Export license required for shipping this product outside the United States License obligatoire pour Import avec Livraison directe chez client final - DELAI : 7-10 semaines
0617L	LYFO DISK® / 6	Escherichia coli serotype O157:H7 ATCC® 35150™* (STEC)	192,40 €	serotype O157:H7; Export license required for shipping this product outside the United States License obligatoire pour Import avec Livraison directe chez client final - DELAI : 7-10 semaines
01100E3	Epower™ / 10	Escherichia coli serotype O26:H11 CDC 03-3014 (STEC)	478,30 €	Mean Assay Value: 1.0-9.9E+03 CFU per pellet; serotype O26:H11; eae positive; stx 1 and/or stx 2 positive; export license required for shipping this product outside the United States License obligatoire pour Import avec Livraison directe chez client final - DELAI : 7-10 semaines
01100E2	Epower™ / 10	Escherichia coli serotype O26:H11 CDC 03-3014 (STEC)	478,30 €	Mean Assay Value: 1.0-9.9E+02 CFU per pellet; serotype O26:H11; eae positive; stx 1 and/or stx 2 positive; export license required for shipping this product outside the United States License obligatoire pour Import avec Livraison directe chez client final - DELAI : 7-10 semaines
01100P	KWIK-STIK™ / 2	Escherichia coli serotype O26:H11 CDC 03-3014 (STEC)	116,50 €	serotype O26:H11; eae positive; stx 1 and/or stx 2 positive; export license required for shipping this product outside the United States License obligatoire pour Import avec Livraison directe chez client final - DELAI : 7-10 semaines
01100K	KWIK-STIK™ / 6	Escherichia coli serotype O26:H11 CDC 03-3014 (STEC)	315,00 €	serotype O26:H11; eae positive; stx 1 and/or stx 2 positive; export license required for shipping this product outside the United States License obligatoire pour Import avec Livraison directe chez client final - DELAI : 7-10 semaines
01100L	LYFO DISK® / 6	Escherichia coli serotype O26:H11 CDC 03-3014 (STEC)	297,40 €	serotype O26:H11; eae positive; stx 1 and/or stx 2 positive; export license required for shipping this product outside the United States License obligatoire pour Import avec Livraison directe chez client final - DELAI : 7-10 semaines
01098E3	Epower™ / 10	Escherichia coli serotype O45:H2 CDC 00-3039 (STEC)	478,30 €	Mean Assay Value: 1.0-9.9E+03 CFU per pellet; serotype O45:H2 serotype O45:H2; eae positive; stx 1 and/or stx 2 positive; export license required for shipping this product outside the United States License obligatoire pour Import avec Livraison directe chez client final - DELAI : 7-10 semaines
01098E2	Epower™ / 10	Escherichia coli serotype O45:H2 CDC 00-3039 (STEC)	478,30 €	Mean Assay Value: 1.0-9.9E+02 CFU per pellet; serotype O45:H2; eae positive; stx 1 and/or stx 2 positive; export license required for shipping this product outside the United States License obligatoire pour Import avec Livraison directe chez client final - DELAI : 7-10 semaines
01098P	KWIK-STIK™ / 2	Escherichia coli serotype O45:H2 CDC 00-3039 (STEC)	116,50 €	serotype O45:H2; eae positive; stx 1 and/or stx 2 positive; export license required for shipping this product outside the United States License obligatoire pour Import avec Livraison directe chez client final - DELAI : 7-10 semaines
01098K	KWIK-STIK™ / 6	Escherichia coli serotype O45:H2 CDC 00-3039 (STEC)	315,00 €	serotype O45:H2; eae positive; stx 1 and/or stx 2 positive; export license required for shipping this product outside the United States License obligatoire pour Import avec Livraison directe chez client final - DELAI : 7-10 semaines

Référence Microbiologics	Gamme	Souche	Prix de vente 2016 HT susceptible d'évoluer	Commentaire
01098L	LYFO DISK® / 6	Escherichia coli serotype O45:H2 CDC 00-3039 (STEC)	297,40 €	serotype O45:H2; eae positive; stx 1 and/or stx 2 positive; export license required for shipping this product outside the United States License obligatoire pour Import avec Livraison directe chez client final - DELAI : 7-10 semaines
01160P	KWIK-STIK™ / 2	Eurotium rubrum ATCC® 42690™*	87,35 €	
01160K	KWIK-STIK™ / 6	Eurotium rubrum ATCC® 42690™*	235,85 €	
01160L	LYFO DISK® / 6	Eurotium rubrum ATCC® 42690™*	219,75 €	
0964P	KWIK-STIK™ / 2	Exiguobacterium mexicanum (A) ATCC® 49676™*	76,80 €	group A; formerly Exiguobacterium aurantiacum
0964K	KWIK-STIK™ / 6	Exiguobacterium mexicanum (A) ATCC® 49676™*	207,50 €	group A; formerly Exiguobacterium aurantiacum
0964L	LYFO DISK® / 6	Exiguobacterium mexicanum (A) ATCC® 49676™*	192,40 €	group A; formerly Exiguobacterium aurantiacum
8172	EZ-Accu Shot™ Select / 5	EZ Accu Shot™ Select	362,40 €	10-100 CFU/0,1ml
8176	EZ-Hydro Shot™	EZ-Hydro Shot™™ E. coli/Coliform Kit	406,60 €	20-100 CFU / pellet
8177	EZ-Hydro Shot™	EZ-Hydro Shot™™ Enterococci Kit	406,60 €	20-100 CFU / pellet
0409P	KWIK-STIK™ / 2	Finegoldia magna ATCC® 29328™*	76,80 €	
0409K	KWIK-STIK™ / 6	Finegoldia magna ATCC® 29328™*	207,50 €	
0409L	LYFO DISK® / 6	Finegoldia magna ATCC® 29328™*	192,40 €	
0212P	KWIK-STIK™ / 2	Fluoribacter bozemanianae ATCC® 33217™*	87,35 €	
0212K	KWIK-STIK™ / 6	Fluoribacter bozemanianae ATCC® 33217™*	235,85 €	
0212L	LYFO DISK® / 6	Fluoribacter bozemanianae ATCC® 33217™*	219,75 €	
0531P	KWIK-STIK™ / 2	Fusarium solani ATCC® 36031™*	87,35 €	fungus
0531K	KWIK-STIK™ / 6	Fusarium solani ATCC® 36031™*	235,85 €	fungus
0531L	LYFO DISK® / 6	Fusarium solani ATCC® 36031™*	219,75 €	fungus
01191P	KWIK-STIK™ / 2	Fusobacterium mortiferum ATCC® 25557™*	76,80 €	
01191K	KWIK-STIK™ / 6	Fusobacterium mortiferum ATCC® 25557™*	207,50 €	
01191L	LYFO DISK® / 6	Fusobacterium mortiferum ATCC® 25557™*	192,40 €	
0407P	KWIK-STIK™ / 2	Fusobacterium necrophorum subsp. necrophorum ATCC® 25286™*	76,80 €	
0407K	KWIK-STIK™ / 6	Fusobacterium necrophorum subsp. necrophorum ATCC® 25286™*	207,50 €	
0407L	LYFO DISK® / 6	Fusobacterium necrophorum subsp. necrophorum ATCC® 25286™*	192,40 €	
0328P	KWIK-STIK™ / 2	Fusobacterium nucleatum subsp. nucleatum ATCC® 25586™*	76,80 €	
0328K	KWIK-STIK™ / 6	Fusobacterium nucleatum subsp. nucleatum ATCC® 25586™*	207,50 €	
0328L	LYFO DISK® / 6	Fusobacterium nucleatum subsp. nucleatum ATCC® 25586™*	192,40 €	
0386P	KWIK-STIK™ / 2	Fusobacterium nucleatum subsp. polymorphum NCTC 10562	87,35 €	formerly Fusobacterium nucleatum subsp. nucleatum
0386K	KWIK-STIK™ / 6	Fusobacterium nucleatum subsp. polymorphum NCTC 10562	235,85 €	formerly Fusobacterium nucleatum subsp. nucleatum
0386L	LYFO DISK® / 6	Fusobacterium nucleatum subsp. polymorphum NCTC 10562	219,75 €	formerly Fusobacterium nucleatum subsp. nucleatum
0886P	KWIK-STIK™ / 2	Fusobacterium varium ATCC® 27725™*	76,80 €	
0886K	KWIK-STIK™ / 6	Fusobacterium varium ATCC® 27725™*	207,50 €	
0886L	LYFO DISK® / 6	Fusobacterium varium ATCC® 27725™*	192,40 €	
0410P	KWIK-STIK™ / 2	Gardnerella vaginalis ATCC® 14018™*	69,50 €	
0410K	KWIK-STIK™ / 6	Gardnerella vaginalis ATCC® 14018™*	187,55 €	
0410L	LYFO DISK® / 6	Gardnerella vaginalis ATCC® 14018™*	166,80 €	
0252P	KWIK-STIK™ / 2	Gardnerella vaginalis ATCC® 14019™*	87,35 €	
0252K	KWIK-STIK™ / 6	Gardnerella vaginalis ATCC® 14019™*	235,85 €	
0252L	LYFO DISK® / 6	Gardnerella vaginalis ATCC® 14019™*	219,75 €	
0643P	KWIK-STIK™ / 2	Gardnerella vaginalis ATCC® 49145™*	69,50 €	
0643K	KWIK-STIK™ / 6	Gardnerella vaginalis ATCC® 49145™*	187,55 €	
0643L	LYFO DISK® / 6	Gardnerella vaginalis ATCC® 49145™*	166,80 €	
0872A	EZ-Accu Shot™ / 5	Geobacillus stearothermophilus ATCC® 12980™*	313,40 €	10-100 CFU/0,1ml
0172P	KWIK-STIK™ / 2	Geobacillus stearothermophilus ATCC® 10149™*	69,50 €	
0172K	KWIK-STIK™ / 6	Geobacillus stearothermophilus ATCC® 10149™*	187,55 €	
0172L	LYFO DISK® / 6	Geobacillus stearothermophilus ATCC® 10149™*	166,80 €	
0137P	KWIK-STIK™ / 2	Geobacillus stearothermophilus ATCC® 12978™*	69,50 €	
0137K	KWIK-STIK™ / 6	Geobacillus stearothermophilus ATCC® 12978™*	187,55 €	
0137L	LYFO DISK® / 6	Geobacillus stearothermophilus ATCC® 12978™*	166,80 €	
0872P	KWIK-STIK™ / 2	Geobacillus stearothermophilus ATCC® 12980™*	60,45 €	
0872K	KWIK-STIK™ / 6	Geobacillus stearothermophilus ATCC® 12980™*	161,00 €	
0872L	LYFO DISK® / 6	Geobacillus stearothermophilus ATCC® 12980™*	141,10 €	
0871E3	Epower™ / 10	Geobacillus stearothermophilus ATCC® 7953™*	346,60 €	Mean Assay Value: 1.0-9.9E+03 CFU per pellet
0871E3-CRM	Epower™ / 10 CRM	Geobacillus stearothermophilus ATCC® 7953™*	512,40 €	Mean Assay Value: 1.0-9.9E+03 CFU per pellet
0871A	EZ-Accu Shot™ / 5	Geobacillus stearothermophilus ATCC® 7953™*	313,40 €	10-100 CFU/0,1ml
0871SPR	EZ-SPORE™ / 10	Geobacillus stearothermophilus ATCC® 7953™*	471,30 €	10 ⁴ CFU per pellet

Référence Microbiologics	Gamme	Souche	Prix de vente 2016 HT susceptible d'évoluer	Commentaire
0871P	KWIK-STIK™ / 2	Geobacillus stearothermophilus ATCC® 7953™*	76,80 €	
0871K	KWIK-STIK™ / 6	Geobacillus stearothermophilus ATCC® 7953™*	207,50 €	
0871L	LYFO DISK® / 6	Geobacillus stearothermophilus ATCC® 7953™*	192,40 €	
0519P	KWIK-STIK™ / 2	Geotrichum candidum ATCC® 34614™*	76,80 €	
0519K	KWIK-STIK™ / 6	Geotrichum candidum ATCC® 34614™*	207,50 €	
0519L	LYFO DISK® / 6	Geotrichum candidum ATCC® 34614™*	192,40 €	
0482P	KWIK-STIK™ / 2	Geotrichum capitatum ATCC® 10663™*	87,35 €	
0482K	KWIK-STIK™ / 6	Geotrichum capitatum ATCC® 10663™*	235,85 €	
0482L	LYFO DISK® / 6	Geotrichum capitatum ATCC® 10663™*	219,75 €	
0124P	KWIK-STIK™ / 2	Geotrichum capitatum ATCC® 28576™*	76,80 €	
0124K	KWIK-STIK™ / 6	Geotrichum capitatum ATCC® 28576™*	207,50 €	
0124L	LYFO DISK® / 6	Geotrichum capitatum ATCC® 28576™*	192,40 €	
01058P	KWIK-STIK™ / 2	Granulicatella adiacens ATCC® 43205™*	87,35 €	
01058K	KWIK-STIK™ / 6	Granulicatella adiacens ATCC® 43205™*	235,85 €	
01058L	LYFO DISK® / 6	Granulicatella adiacens ATCC® 43205™*	219,75 €	
0381P	KWIK-STIK™ / 2	Haemophilus haemolyticus ATCC® 33390™*	76,80 €	
0381K	KWIK-STIK™ / 6	Haemophilus haemolyticus ATCC® 33390™*	207,50 €	
0381L	LYFO DISK® / 6	Haemophilus haemolyticus ATCC® 33390™*	192,40 €	
0441P	KWIK-STIK™ / 2	Haemophilus influenzae ATCC® 10211™*	69,50 €	type b; beta lactamase negative
0441K	KWIK-STIK™ / 6	Haemophilus influenzae ATCC® 10211™*	187,55 €	type b; beta lactamase negative
0441-CRM	Lab-Elite CRM™ / 1	Haemophilus influenzae ATCC® 10211™*	68,65 €	type b; beta lactamase negative
0441L	LYFO DISK® / 6	Haemophilus influenzae ATCC® 10211™*	166,80 €	type b; beta lactamase negative
0376P	KWIK-STIK™ / 2	Haemophilus influenzae ATCC® 19418™*	69,50 €	
0376K	KWIK-STIK™ / 6	Haemophilus influenzae ATCC® 19418™*	187,55 €	
0376L	LYFO DISK® / 6	Haemophilus influenzae ATCC® 19418™*	166,80 €	
0338P	KWIK-STIK™ / 2	Haemophilus influenzae ATCC® 33533™*	69,50 €	type b; beta lactamase producer
0338K	KWIK-STIK™ / 6	Haemophilus influenzae ATCC® 33533™*	187,55 €	type b; beta lactamase producer
0338L	LYFO DISK® / 6	Haemophilus influenzae ATCC® 33533™*	166,80 €	type b; beta lactamase producer
0829P	KWIK-STIK™ / 2	Haemophilus influenzae ATCC® 33930™*	69,50 €	resistant to ampicillin, chloramphenicol and tetracycline
0829K	KWIK-STIK™ / 6	Haemophilus influenzae ATCC® 33930™*	187,55 €	resistant to ampicillin, chloramphenicol and tetracycline
0829L	LYFO DISK® / 6	Haemophilus influenzae ATCC® 33930™*	166,80 €	resistant to ampicillin, chloramphenicol and tetracycline
0993P	KWIK-STIK™ / 2	Haemophilus influenzae ATCC® 35056™*	76,80 €	beta lactamase producer
0993K	KWIK-STIK™ / 6	Haemophilus influenzae ATCC® 35056™*	207,50 €	beta lactamase producer
0993L	LYFO DISK® / 6	Haemophilus influenzae ATCC® 35056™*	192,40 €	beta lactamase producer
0438P	KWIK-STIK™ / 2	Haemophilus influenzae ATCC® 43065™*	69,50 €	
0438K	KWIK-STIK™ / 6	Haemophilus influenzae ATCC® 43065™*	187,55 €	
0438L	LYFO DISK® / 6	Haemophilus influenzae ATCC® 43065™*	166,80 €	
0476P	KWIK-STIK™ / 2	Haemophilus influenzae ATCC® 43163™*	69,50 €	beta lactamase producer
0476K	KWIK-STIK™ / 6	Haemophilus influenzae ATCC® 43163™*	187,55 €	beta lactamase producer
0476L	LYFO DISK® / 6	Haemophilus influenzae ATCC® 43163™*	166,80 €	beta lactamase producer
0644P	KWIK-STIK™ / 2	Haemophilus influenzae ATCC® 49144™*	69,50 €	beta lactamase producer
0644K	KWIK-STIK™ / 6	Haemophilus influenzae ATCC® 49144™*	187,55 €	beta lactamase producer
0644L	LYFO DISK® / 6	Haemophilus influenzae ATCC® 49144™*	166,80 €	beta lactamase producer
0647P	KWIK-STIK™ / 2	Haemophilus influenzae ATCC® 49247™*	69,50 €	
0647K	KWIK-STIK™ / 6	Haemophilus influenzae ATCC® 49247™*	187,55 €	
0647L	LYFO DISK® / 6	Haemophilus influenzae ATCC® 49247™*	166,80 €	
0919P	KWIK-STIK™ / 2	Haemophilus influenzae ATCC® 49766™*	69,50 €	
0919K	KWIK-STIK™ / 6	Haemophilus influenzae ATCC® 49766™*	187,55 €	
0919L	LYFO DISK® / 6	Haemophilus influenzae ATCC® 49766™*	166,80 €	
0620P	KWIK-STIK™ / 2	Haemophilus influenzae ATCC® 9006™*	69,50 €	type a
0620K	KWIK-STIK™ / 6	Haemophilus influenzae ATCC® 9006™*	187,55 €	type a
0620L	LYFO DISK® / 6	Haemophilus influenzae ATCC® 9006™*	166,80 €	type a
0185P	KWIK-STIK™ / 2	Haemophilus influenzae ATCC® 9007™*	76,80 €	type c
0185K	KWIK-STIK™ / 6	Haemophilus influenzae ATCC® 9007™*	207,50 €	type c
0185L	LYFO DISK® / 6	Haemophilus influenzae ATCC® 9007™*	192,40 €	type c
0850P	KWIK-STIK™ / 2	Haemophilus influenzae NCTC 11931	76,80 €	
0850K	KWIK-STIK™ / 6	Haemophilus influenzae NCTC 11931	207,50 €	
0850L	LYFO DISK® / 6	Haemophilus influenzae NCTC 11931	192,40 €	
0717P	KWIK-STIK™ / 2	Haemophilus influenzae NCTC 12699	76,80 €	
0717K	KWIK-STIK™ / 6	Haemophilus influenzae NCTC 12699	207,50 €	
0717L	LYFO DISK® / 6	Haemophilus influenzae NCTC 12699	192,40 €	
01024P	KWIK-STIK™ / 2	Haemophilus influenzae NCTC 8468	69,50 €	
01024K	KWIK-STIK™ / 6	Haemophilus influenzae NCTC 8468	187,55 €	
01024L	LYFO DISK® / 6	Haemophilus influenzae NCTC 8468	166,80 €	
0377P	KWIK-STIK™ / 2	Haemophilus parahaemolyticus ATCC® 10014™*	69,50 €	
0377K	KWIK-STIK™ / 6	Haemophilus parahaemolyticus ATCC® 10014™*	187,55 €	
0377L	LYFO DISK® / 6	Haemophilus parahaemolyticus ATCC® 10014™*	166,80 €	
01171P	KWIK-STIK™ / 2	Haemophilus parainfluenzae ATCC® 9796™*	69,50 €	
01171K	KWIK-STIK™ / 6	Haemophilus parainfluenzae ATCC® 9796™*	187,55 €	
01171L	LYFO DISK® / 6	Haemophilus parainfluenzae ATCC® 9796™*	166,80 €	
0165P	KWIK-STIK™ / 2	Hafnia alvei ATCC® 51815™*	87,35 €	

Référence Microbiologics	Gamme	Souche	Prix de vente 2016 HT susceptible d'évoluer	Commentaire
0165K	KWIK-STIK™ / 6	Hafnia alvei ATCC® 51815™*	235,85 €	
0165L	LYFO DISK® / 6	Hafnia alvei ATCC® 51815™*	219,75 €	
01012P	KWIK-STIK™ / 2	Hanseniaspora valbyensis ATCC® 58370™*	69,50 €	formerly Kloeckera japonica
01012K	KWIK-STIK™ / 6	Hanseniaspora valbyensis ATCC® 58370™*	187,55 €	formerly Kloeckera japonica
01012L	LYFO DISK® / 6	Hanseniaspora valbyensis ATCC® 58370™*	166,80 €	formerly Kloeckera japonica
0227P	KWIK-STIK™ / 2	Issatchenkia orientalis ATCC® 6258™*	76,80 €	
0227K	KWIK-STIK™ / 6	Issatchenkia orientalis ATCC® 6258™*	207,50 €	
0227L	LYFO DISK® / 6	Issatchenkia orientalis ATCC® 6258™*	192,40 €	
0148P	KWIK-STIK™ / 2	Kingella denitrificans ATCC® 33394™*	76,80 €	
0148K	KWIK-STIK™ / 6	Kingella denitrificans ATCC® 33394™*	207,50 €	
0148L	LYFO DISK® / 6	Kingella denitrificans ATCC® 33394™*	192,40 €	
0530P	KWIK-STIK™ / 2	Klebsiella oxytoca ATCC® 13182™*	60,45 €	
0530K	KWIK-STIK™ / 6	Klebsiella oxytoca ATCC® 13182™*	161,00 €	
0530L	LYFO DISK® / 6	Klebsiella oxytoca ATCC® 13182™*	141,10 €	
0606P	KWIK-STIK™ / 2	Klebsiella oxytoca ATCC® 43086™*	69,50 €	
0606K	KWIK-STIK™ / 6	Klebsiella oxytoca ATCC® 43086™*	187,55 €	
0606L	LYFO DISK® / 6	Klebsiella oxytoca ATCC® 43086™*	166,80 €	
0477P	KWIK-STIK™ / 2	Klebsiella oxytoca ATCC® 43165™*	69,50 €	
0477K	KWIK-STIK™ / 6	Klebsiella oxytoca ATCC® 43165™*	187,55 €	
0477L	LYFO DISK® / 6	Klebsiella oxytoca ATCC® 43165™*	166,80 €	
0214P	KWIK-STIK™ / 2	Klebsiella oxytoca ATCC® 43863™*	69,50 €	
0214K	KWIK-STIK™ / 6	Klebsiella oxytoca ATCC® 43863™*	187,55 €	
0214L	LYFO DISK® / 6	Klebsiella oxytoca ATCC® 43863™*	166,80 €	
0626P	KWIK-STIK™ / 2	Klebsiella oxytoca ATCC® 49131™*	60,45 €	
0626K	KWIK-STIK™ / 6	Klebsiella oxytoca ATCC® 49131™*	161,00 €	
0626L	LYFO DISK® / 6	Klebsiella oxytoca ATCC® 49131™*	141,10 €	
0167P	KWIK-STIK™ / 2	Klebsiella oxytoca ATCC® 51817™*	87,35 €	
0167K	KWIK-STIK™ / 6	Klebsiella oxytoca ATCC® 51817™*	235,85 €	
0167L	LYFO DISK® / 6	Klebsiella oxytoca ATCC® 51817™*	219,75 €	
0757P	KWIK-STIK™ / 2	Klebsiella oxytoca ATCC® 700324™*	76,80 €	
0757K	KWIK-STIK™ / 6	Klebsiella oxytoca ATCC® 700324™*	207,50 €	
0757L	LYFO DISK® / 6	Klebsiella oxytoca ATCC® 700324™*	192,40 €	
0840P	KWIK-STIK™ / 2	Klebsiella oxytoca ATCC® 8724™*	60,45 €	
0840K	KWIK-STIK™ / 6	Klebsiella oxytoca ATCC® 8724™*	161,00 €	
0840L	LYFO DISK® / 6	Klebsiella oxytoca ATCC® 8724™*	141,10 €	
01147P	KWIK-STIK™ / 2	Klebsiella oxytoca NCTC 11686	76,80 €	
01147K	KWIK-STIK™ / 6	Klebsiella oxytoca NCTC 11686	207,50 €	
01147L	LYFO DISK® / 6	Klebsiella oxytoca NCTC 11686	192,40 €	
01019P	KWIK-STIK™ / 2	Klebsiella pneumoniae ATCC® BAA-1144™*	76,80 €	control strain for the AmpC disk test; weak positive
01019K	KWIK-STIK™ / 6	Klebsiella pneumoniae ATCC® BAA-1144™*	207,50 €	control strain for the AmpC disk test; weak positive
01019L	LYFO DISK® / 6	Klebsiella pneumoniae ATCC® BAA-1144™*	192,40 €	control strain for the AmpC disk test; weak positive
01005P	KWIK-STIK™ / 2	Klebsiella pneumoniae ATCC® BAA-1705™*	60,45 €	Modified Hodge Test (MHT) positive control
01005K	KWIK-STIK™ / 6	Klebsiella pneumoniae ATCC® BAA-1705™*	161,00 €	Modified Hodge Test (MHT) positive control
01005L	LYFO DISK® / 6	Klebsiella pneumoniae ATCC® BAA-1705™*	141,10 €	Modified Hodge Test (MHT) positive control
01006P	KWIK-STIK™ / 2	Klebsiella pneumoniae ATCC® BAA-1706™*	60,45 €	Modified Hodge Test (MHT) negative control
01006K	KWIK-STIK™ / 6	Klebsiella pneumoniae ATCC® BAA-1706™*	161,00 €	Modified Hodge Test (MHT) negative control
01006L	LYFO DISK® / 6	Klebsiella pneumoniae ATCC® BAA-1706™*	141,10 €	Modified Hodge Test (MHT) negative control
01060P	KWIK-STIK™ / 2	Klebsiella pneumoniae ATCC® BAA-2146™*	87,35 €	New Delhi metallo-beta-lactamase (NDM-1) positive
01060K	KWIK-STIK™ / 6	Klebsiella pneumoniae ATCC® BAA-2146™*	235,85 €	New Delhi metallo-beta-lactamase (NDM-1) positive
01060L	LYFO DISK® / 6	Klebsiella pneumoniae ATCC® BAA-2146™*	219,75 €	New Delhi metallo-beta-lactamase (NDM-1) positive
01153P	KWIK-STIK™ / 2	Klebsiella pneumoniae CDC 1100192	76,80 €	blaNDM-1 metallo-beta-lactamase gene
01153K	KWIK-STIK™ / 6	Klebsiella pneumoniae CDC 1100192	207,50 €	blaNDM-1 metallo-beta-lactamase gene
01153L	LYFO DISK® / 6	Klebsiella pneumoniae CDC 1100192	192,40 €	blaNDM-1 metallo-beta-lactamase gene
01117P	KWIK-STIK™ / 2	Klebsiella pneumoniae NCTC 13438	76,80 €	
01117K	KWIK-STIK™ / 6	Klebsiella pneumoniae NCTC 13438	207,50 €	
01117L	LYFO DISK® / 6	Klebsiella pneumoniae NCTC 13438	192,40 €	
01112P	KWIK-STIK™ / 2	Klebsiella pneumoniae NCTC 13440	76,80 €	metallo-beta-lactamase positive
01112K	KWIK-STIK™ / 6	Klebsiella pneumoniae NCTC 13440	207,50 €	metallo-beta-lactamase positive
01112L	LYFO DISK® / 6	Klebsiella pneumoniae NCTC 13440	192,40 €	metallo-beta-lactamase positive
01148P	KWIK-STIK™ / 2	Klebsiella pneumoniae NCTC 13442	76,80 €	OXA 48
01148K	KWIK-STIK™ / 6	Klebsiella pneumoniae NCTC 13442	207,50 €	OXA 48
01148L	LYFO DISK® / 6	Klebsiella pneumoniae NCTC 13442	192,40 €	OXA 48
01145P	KWIK-STIK™ / 2	Klebsiella pneumoniae NCTC 13443	76,80 €	
01145K	KWIK-STIK™ / 6	Klebsiella pneumoniae NCTC 13443	207,50 €	
01145L	LYFO DISK® / 6	Klebsiella pneumoniae NCTC 13443	192,40 €	
0573P	KWIK-STIK™ / 2	Klebsiella pneumoniae NCTC 9633	69,50 €	
0573K	KWIK-STIK™ / 6	Klebsiella pneumoniae NCTC 9633	187,55 €	
0573L	LYFO DISK® / 6	Klebsiella pneumoniae NCTC 9633	166,80 €	

Référence Microbiologics	Gamme	Souche	Prix de vente 2016 HT susceptible d'évoluer	Commentaire
0684E7	Epower™ / 10	Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae ATCC® 10031™*	263,40 €	Mean Assay Value: 1.0-9.9E+07 CFU per pellet
0684E7-CRM	Epower™ / 10 CRM	Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae ATCC® 10031™*	512,40 €	Mean Assay Value: 1.0-9.9E+07 CFU per pellet
0684P	KWIK-STIK™ / 2	Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae ATCC® 10031™*	69,50 €	
0684K	KWIK-STIK™ / 6	Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae ATCC® 10031™*	187,55 €	
0684L	LYFO DISK® / 6	Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae ATCC® 10031™*	166,80 €	
0458P	KWIK-STIK™ / 2	Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae ATCC® 13882™*	60,45 €	
0458K	KWIK-STIK™ / 6	Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae ATCC® 13882™*	161,00 €	
0458L	LYFO DISK® / 6	Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae ATCC® 13882™*	141,10 €	
0351P	KWIK-STIK™ / 2	Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae ATCC® 13883™*	51,00 €	
0351K	KWIK-STIK™ / 6	Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae ATCC® 13883™*	132,35 €	
0351-CRM	Lab-Elite CRM™ / 1	Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae ATCC® 13883™*	68,65 €	
0351L	LYFO DISK® / 6	Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae ATCC® 13883™*	113,80 €	
0685P	KWIK-STIK™ / 2	Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae ATCC® 27736™*	60,45 €	
0685K	KWIK-STIK™ / 6	Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae ATCC® 27736™*	161,00 €	
0685L	LYFO DISK® / 6	Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae ATCC® 27736™*	141,10 €	
0261H	EZ-Hydro Shot™	Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae ATCC® 31488™*	247,10 €	20-100 CFU / pellet
0261P	KWIK-STIK™ / 2	Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae ATCC® 31488™*	76,80 €	
0261K	KWIK-STIK™ / 6	Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae ATCC® 31488™*	207,50 €	
0261L	LYFO DISK® / 6	Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae ATCC® 31488™*	192,40 €	
0957P	KWIK-STIK™ / 2	Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae ATCC® 33495™*	69,50 €	
0957K	KWIK-STIK™ / 6	Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae ATCC® 33495™*	187,55 €	
0957L	LYFO DISK® / 6	Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae ATCC® 33495™*	166,80 €	
0942P	KWIK-STIK™ / 2	Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae ATCC® 35657™*	76,80 €	
0942K	KWIK-STIK™ / 6	Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae ATCC® 35657™*	207,50 €	
0942-CRM	Lab-Elite CRM™ / 1	Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae ATCC® 35657™*	68,65 €	
0942L	LYFO DISK® / 6	Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae ATCC® 35657™*	192,40 €	
0683P	KWIK-STIK™ / 2	Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae ATCC® 4352™*	60,45 €	
0683K	KWIK-STIK™ / 6	Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae ATCC® 4352™*	161,00 €	
0683L	LYFO DISK® / 6	Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae ATCC® 4352™*	141,10 €	
0784P	KWIK-STIK™ / 2	Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae ATCC® 700603™*	76,80 €	ESBL positive
0784K	KWIK-STIK™ / 6	Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae ATCC® 700603™*	207,50 €	ESBL positive
0784L	LYFO DISK® / 6	Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae ATCC® 700603™*	192,40 €	ESBL positive
0103P	KWIK-STIK™ / 2	Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae ATCC® 8308™*	87,35 €	
0103K	KWIK-STIK™ / 6	Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae ATCC® 8308™*	235,85 €	
0103L	LYFO DISK® / 6	Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae ATCC® 8308™*	219,75 €	
0305P	KWIK-STIK™ / 2	Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae NCIMB 8267	69,50 €	
0305K	KWIK-STIK™ / 6	Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae NCIMB 8267	187,55 €	
0305L	LYFO DISK® / 6	Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae NCIMB 8267	166,80 €	
0471P	KWIK-STIK™ / 2	Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae NCIMB 9111	76,80 €	
0471K	KWIK-STIK™ / 6	Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae NCIMB 9111	207,50 €	
0471L	LYFO DISK® / 6	Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae NCIMB 9111	192,40 €	

Référence Microbiologics	Gamme	Souche	Prix de vente 2016 HT susceptible d'évoluer	Commentaire
0125P	KWIK-STIK™ / 2	Kloeckera apiculata var. apis ATCC® 32857™*	69,50 €	
0125K	KWIK-STIK™ / 6	Kloeckera apiculata var. apis ATCC® 32857™*	187,55 €	
0125L	LYFO DISK® / 6	Kloeckera apiculata var. apis ATCC® 32857™*	166,80 €	
0126P	KWIK-STIK™ / 2	Kocuria kristinae ATCC® BAA-752™*	69,50 €	
0126K	KWIK-STIK™ / 6	Kocuria kristinae ATCC® BAA-752™*	187,55 €	
0126L	LYFO DISK® / 6	Kocuria kristinae ATCC® BAA-752™*	166,80 €	
0670P	KWIK-STIK™ / 2	Kocuria rhizophila ATCC® 15957™*	87,35 €	
0670K	KWIK-STIK™ / 6	Kocuria rhizophila ATCC® 15957™*	235,85 €	
0670L	LYFO DISK® / 6	Kocuria rhizophila ATCC® 15957™*	219,75 €	
0161P	KWIK-STIK™ / 2	Kocuria rhizophila ATCC® 51820™*	76,80 €	formerly Kocuria varians
0161K	KWIK-STIK™ / 6	Kocuria rhizophila ATCC® 51820™*	207,50 €	formerly Kocuria varians
0161L	LYFO DISK® / 6	Kocuria rhizophila ATCC® 51820™*	192,40 €	formerly Kocuria varians
0359P	KWIK-STIK™ / 2	Kocuria rhizophila ATCC® 533™*	69,50 €	
0359K	KWIK-STIK™ / 6	Kocuria rhizophila ATCC® 533™*	187,55 €	
0359L	LYFO DISK® / 6	Kocuria rhizophila ATCC® 533™*	166,80 €	
0669P	KWIK-STIK™ / 2	Kocuria rhizophila ATCC® 9341a™*	69,50 €	
0669K	KWIK-STIK™ / 6	Kocuria rhizophila ATCC® 9341a™*	187,55 €	
0669L	LYFO DISK® / 6	Kocuria rhizophila ATCC® 9341a™*	166,80 €	
0688E3	Epover™ / 10	Kocuria rhizophila ATCC® 9341™*	263,40 €	Mean Assay Value: 1.0-9.9E+03 CFU per pellet
0688E4	Epover™ / 10	Kocuria rhizophila ATCC® 9341™*	263,40 €	Mean Assay Value: 1.0-9.9E+04 CFU per pellet
0688E3-CRM	Epover™ / 10 CRM	Kocuria rhizophila ATCC® 9341™*	512,40 €	Mean Assay Value: 1.0-9.9E+03 CFU per pellet
0688E4-CRM	Epover™ / 10 CRM	Kocuria rhizophila ATCC® 9341™*	512,40 €	Mean Assay Value: 1.0-9.9E+04 CFU per pellet
0688A	EZ-Accu Shot™ / 5	Kocuria rhizophila ATCC® 9341™*	313,40 €	10-100 CFU/0,1ml
0688P	KWIK-STIK™ / 2	Kocuria rhizophila ATCC® 9341™*	76,80 €	
0688K	KWIK-STIK™ / 6	Kocuria rhizophila ATCC® 9341™*	207,50 €	
0688-CRM	Lab-Elite CRM™ / 1	Kocuria rhizophila ATCC® 9341™*	68,65 €	
0688L	LYFO DISK® / 6	Kocuria rhizophila ATCC® 9341™*	192,40 €	
0766P	KWIK-STIK™ / 2	Kocuria rosea ATCC® 186™*	76,80 €	
0766K	KWIK-STIK™ / 6	Kocuria rosea ATCC® 186™*	207,50 €	
0766L	LYFO DISK® / 6	Kocuria rosea ATCC® 186™*	192,40 €	
0885P	KWIK-STIK™ / 2	Lactobacillus acidophilus ATCC® 314™*	69,50 €	
0885K	KWIK-STIK™ / 6	Lactobacillus acidophilus ATCC® 314™*	187,55 €	
0885L	LYFO DISK® / 6	Lactobacillus acidophilus ATCC® 314™*	166,80 €	
0243P	KWIK-STIK™ / 2	Lactobacillus acidophilus ATCC® 4356™*	76,80 €	
0243K	KWIK-STIK™ / 6	Lactobacillus acidophilus ATCC® 4356™*	207,50 €	
0243L	LYFO DISK® / 6	Lactobacillus acidophilus ATCC® 4356™*	192,40 €	
0546P	KWIK-STIK™ / 2	Lactobacillus casei ATCC® 334™*	87,35 €	
0546K	KWIK-STIK™ / 6	Lactobacillus casei ATCC® 334™*	235,85 €	
0546L	LYFO DISK® / 6	Lactobacillus casei ATCC® 334™*	219,75 €	
0176P	KWIK-STIK™ / 2	Lactobacillus casei ATCC® 393™*	76,80 €	
0176K	KWIK-STIK™ / 6	Lactobacillus casei ATCC® 393™*	207,50 €	
0176L	LYFO DISK® / 6	Lactobacillus casei ATCC® 393™*	192,40 €	
0813E3	Epover™ / 10	Lactobacillus fermentum ATCC® 9338™*	263,40 €	Mean Assay Value: 1.0-9.9E+03 CFU per pellet
0813E3-CRM	Epover™ / 10 CRM	Lactobacillus fermentum ATCC® 9338™*	512,40 €	Mean Assay Value: 1.0-9.9E+03 CFU per pellet
0813FPC	EZ-FPC™ / 10	Lactobacillus fermentum ATCC® 9338™*	285,00 €	Quantitative Preparations at a concentration of 1.0-9.9E+03 CFU per pellet
0813P	KWIK-STIK™ / 2	Lactobacillus fermentum ATCC® 9338™*	69,50 €	
0813K	KWIK-STIK™ / 6	Lactobacillus fermentum ATCC® 9338™*	187,55 €	
0813-CRM	Lab-Elite CRM™ / 1	Lactobacillus fermentum ATCC® 9338™*	68,65 €	
0813L	LYFO DISK® / 6	Lactobacillus fermentum ATCC® 9338™*	166,80 €	
0127P	KWIK-STIK™ / 2	Lactobacillus gasseri ATCC® 19992™*	69,50 €	
0127K	KWIK-STIK™ / 6	Lactobacillus gasseri ATCC® 19992™*	187,55 €	
0127L	LYFO DISK® / 6	Lactobacillus gasseri ATCC® 19992™*	166,80 €	
0235P	KWIK-STIK™ / 2	Lactobacillus leichmannii ATCC® 7830™*	69,50 €	formerly Lactobacillus delbrueckii subsp. lactis
0235K	KWIK-STIK™ / 6	Lactobacillus leichmannii ATCC® 7830™*	187,55 €	formerly Lactobacillus delbrueckii subsp. lactis
0235L	LYFO DISK® / 6	Lactobacillus leichmannii ATCC® 7830™*	166,80 €	formerly Lactobacillus delbrueckii subsp. lactis
0526P	KWIK-STIK™ / 2	Lactobacillus paracasei subsp. paracasei ATCC® BAA-52™*	76,80 €	
0526K	KWIK-STIK™ / 6	Lactobacillus paracasei subsp. paracasei ATCC® BAA-52™*	207,50 €	
0526L	LYFO DISK® / 6	Lactobacillus paracasei subsp. paracasei ATCC® BAA-52™*	192,40 €	
0234P	KWIK-STIK™ / 2	Lactobacillus plantarum ATCC® 8014™*	76,80 €	
0234K	KWIK-STIK™ / 6	Lactobacillus plantarum ATCC® 8014™*	207,50 €	
0234L	LYFO DISK® / 6	Lactobacillus plantarum ATCC® 8014™*	192,40 €	
01144P	KWIK-STIK™ / 2	Lactobacillus plantarum subsp. plantarum ATCC® 14917™*	69,50 €	
01144K	KWIK-STIK™ / 6	Lactobacillus plantarum subsp. plantarum ATCC® 14917™*	187,55 €	
01144L	LYFO DISK® / 6	Lactobacillus plantarum subsp. plantarum ATCC® 14917™*	166,80 €	
01090A	EZ-Accu Shot™ / 5	Lactobacillus rhamnosus ATCC® 53103™*	313,40 €	10-100 CFU/0,1ml
01090P	KWIK-STIK™ / 2	Lactobacillus rhamnosus ATCC® 53103™*	87,35 €	

Référence Microbiologics	Gamme	Souche	Prix de vente 2016 HT susceptible d'évoluer	Commentaire
01090K	KWIK-STIK™ / 6	Lactobacillus rhamnosus ATCC® 53103™*	235,85 €	
01090L	LYFO DISK® / 6	Lactobacillus rhamnosus ATCC® 53103™*	219,75 €	
0233P	KWIK-STIK™ / 2	Lactobacillus rhamnosus ATCC® 7469™*	76,80 €	
0233K	KWIK-STIK™ / 6	Lactobacillus rhamnosus ATCC® 7469™*	207,50 €	
0233L	LYFO DISK® / 6	Lactobacillus rhamnosus ATCC® 7469™*	192,40 €	
0989FPC	EZ-FPC™ / 10	Lactobacillus rhamnosus ATCC® 9595™*	285,00 €	Quantitative Preparations at a concentration of 1.0-9.9E+03 CFU per pellet
0989P	KWIK-STIK™ / 2	Lactobacillus rhamnosus ATCC® 9595™*	69,50 €	
0989K	KWIK-STIK™ / 6	Lactobacillus rhamnosus ATCC® 9595™*	187,55 €	
0989L	LYFO DISK® / 6	Lactobacillus rhamnosus ATCC® 9595™*	166,80 €	
0128P	KWIK-STIK™ / 2	Lactobacillus sakei subsp. sakei ATCC® 15521™*	76,80 €	
0128K	KWIK-STIK™ / 6	Lactobacillus sakei subsp. sakei ATCC® 15521™*	207,50 €	
0128L	LYFO DISK® / 6	Lactobacillus sakei subsp. sakei ATCC® 15521™*	192,40 €	
0980P	KWIK-STIK™ / 2	Lactococcus lactis ATCC® 49032™*	76,80 €	formerly Enterococcus faecium
0980K	KWIK-STIK™ / 6	Lactococcus lactis ATCC® 49032™*	207,50 €	formerly Enterococcus faecium
0980L	LYFO DISK® / 6	Lactococcus lactis ATCC® 49032™*	192,40 €	formerly Enterococcus faecium
0152P	KWIK-STIK™ / 2	Lactococcus lactis subsp. cremoris ATCC® 19257™*	76,80 €	
0152K	KWIK-STIK™ / 6	Lactococcus lactis subsp. cremoris ATCC® 19257™*	207,50 €	
0152L	LYFO DISK® / 6	Lactococcus lactis subsp. cremoris ATCC® 19257™*	192,40 €	
0205P	KWIK-STIK™ / 2	Lactococcus lactis subsp. lactis ATCC® 11454™*	76,80 €	
0205K	KWIK-STIK™ / 6	Lactococcus lactis subsp. lactis ATCC® 11454™*	207,50 €	
0205L	LYFO DISK® / 6	Lactococcus lactis subsp. lactis ATCC® 11454™*	192,40 €	
0149P	KWIK-STIK™ / 2	Lactococcus lactis subsp. lactis ATCC® 19435™*	76,80 €	
0149K	KWIK-STIK™ / 6	Lactococcus lactis subsp. lactis ATCC® 19435™*	207,50 €	
0149L	LYFO DISK® / 6	Lactococcus lactis subsp. lactis ATCC® 19435™*	192,40 €	
0837P	KWIK-STIK™ / 2	Leclercia adecarboxylata ATCC® 23216™*	69,50 €	
0837K	KWIK-STIK™ / 6	Leclercia adecarboxylata ATCC® 23216™*	187,55 €	
0837L	LYFO DISK® / 6	Leclercia adecarboxylata ATCC® 23216™*	166,80 €	
01195P	KWIK-STIK™ / 2	Legionella anisa ATCC® 35292™*	87,35 €	
01195K	KWIK-STIK™ / 6	Legionella anisa ATCC® 35292™*	235,85 €	
01195L	LYFO DISK® / 6	Legionella anisa ATCC® 35292™*	219,75 €	
01003P	KWIK-STIK™ / 2	Legionella longbeachae ATCC® 33462™*	87,35 €	
01003K	KWIK-STIK™ / 6	Legionella longbeachae ATCC® 33462™*	235,85 €	
01003L	LYFO DISK® / 6	Legionella longbeachae ATCC® 33462™*	219,75 €	
0211P	KWIK-STIK™ / 2	Legionella pneumophila subsp. pneumophila ATCC® 33152™*	87,35 €	
0211K	KWIK-STIK™ / 6	Legionella pneumophila subsp. pneumophila ATCC® 33152™*	235,85 €	
0211L	LYFO DISK® / 6	Legionella pneumophila subsp. pneumophila ATCC® 33152™*	219,75 €	
01061P	KWIK-STIK™ / 2	Listeria grayi ATCC® 19120™*	87,35 €	
01061K	KWIK-STIK™ / 6	Listeria grayi ATCC® 19120™*	235,85 €	
01061L	LYFO DISK® / 6	Listeria grayi ATCC® 19120™*	219,75 €	
0856P	KWIK-STIK™ / 2	Listeria grayi ATCC® 25401™*	76,80 €	
0856K	KWIK-STIK™ / 6	Listeria grayi ATCC® 25401™*	207,50 €	
0856L	LYFO DISK® / 6	Listeria grayi ATCC® 25401™*	192,40 €	
0222P	KWIK-STIK™ / 2	Listeria grayi ATCC® 700545™*	76,80 €	
0222K	KWIK-STIK™ / 6	Listeria grayi ATCC® 700545™*	207,50 €	
0222L	LYFO DISK® / 6	Listeria grayi ATCC® 700545™*	192,40 €	
0814E2-CRM	Epower™ / 10 CRM	Listeria innocua ATCC® 33090™*	512,40 €	serotype 6a; Mean Assay Value: 1.0-9.9E+02 CFU per pellet
0814FPC	EZ-FPC™ / 10	Listeria innocua ATCC® 33090™*	285,00 €	Qualitative Preparations at a concentration of 1.0-9.9E+02 CFU per pellet; serotype 6a
0814P	KWIK-STIK™ / 2	Listeria innocua ATCC® 33090™*	76,80 €	serotype 6a
0814K	KWIK-STIK™ / 6	Listeria innocua ATCC® 33090™*	207,50 €	serotype 6a
0814-CRM	Lab-Elite CRM™ / 1	Listeria innocua ATCC® 33090™*	68,65 €	serotype 6a
0814L	LYFO DISK® / 6	Listeria innocua ATCC® 33090™*	192,40 €	serotype 6a
0414E3	Epower™ / 10	Listeria innocua NCTC 11288	263,40 €	serotype 6a; Mean Assay Value: 1.0-9.9E+03 CFU per pellet
0414E3-CRM	Epower™ / 10 CRM	Listeria innocua NCTC 11288	512,40 €	serotype 6a; Mean Assay Value: 1.0-9.9E+03 CFU per pellet
0414P	KWIK-STIK™ / 2	Listeria innocua NCTC 11288	76,80 €	serotype 6a
0414K	KWIK-STIK™ / 6	Listeria innocua NCTC 11288	207,50 €	serotype 6a
0414L	LYFO DISK® / 6	Listeria innocua NCTC 11288	192,40 €	serotype 6a
0815P	KWIK-STIK™ / 2	Listeria ivanovii subsp. ivanovii ATCC® 19119™*	76,80 €	
0815K	KWIK-STIK™ / 6	Listeria ivanovii subsp. ivanovii ATCC® 19119™*	207,50 €	
0815L	LYFO DISK® / 6	Listeria ivanovii subsp. ivanovii ATCC® 19119™*	192,40 €	
0299P	KWIK-STIK™ / 2	Listeria ivanovii subsp. londoniensis ATCC® BAA-139™*	87,35 €	formerly Listeria ivanovii subsp. ivanovii
0299K	KWIK-STIK™ / 6	Listeria ivanovii subsp. londoniensis ATCC® BAA-139™*	235,85 €	formerly Listeria ivanovii subsp. ivanovii
0299-CRM	Lab-Elite CRM™ / 1	Listeria ivanovii subsp. londoniensis ATCC® BAA-139™*	68,65 €	formerly Listeria ivanovii subsp. ivanovii

Référence Microbiologics	Gamme	Souche	Prix de vente 2016 HT susceptible d'évoluer	Commentaire
0299L	LYFO DISK® / 6	Listeria ivanovii subsp. londoniensis ATCC® BAA-139™*	219,75 €	formerly Listeria ivanovii subsp. ivanovii
0129E3	Epower™ / 10	Listeria monocytogenes ATCC® 13932™*	346,60 €	Serotype 4b; Mean Assay Value: 1.0-9.9E+03 CFU per pellet
0129E4	Epower™ / 10	Listeria monocytogenes ATCC® 13932™*	263,40 €	serotype 4b
0129E3-CRM	Epower™ / 10 CRM	Listeria monocytogenes ATCC® 13932™*	512,40 €	Serotype 4b; Mean Assay Value: 1.0-9.9E+03 CFU per pellet
0129P	KWIK-STIK™ / 2	Listeria monocytogenes ATCC® 13932™*	69,50 €	serotype 4b
0129K	KWIK-STIK™ / 6	Listeria monocytogenes ATCC® 13932™*	187,55 €	serotype 4b
0129L	LYFO DISK® / 6	Listeria monocytogenes ATCC® 13932™*	166,80 €	serotype 4b
0727P	KWIK-STIK™ / 2	Listeria monocytogenes ATCC® 15313™*	76,80 €	non-hemolytic on sheep blood
0727K	KWIK-STIK™ / 6	Listeria monocytogenes ATCC® 15313™*	207,50 €	non-hemolytic on sheep blood
0727-CRM	Lab-Elite CRM™ / 1	Listeria monocytogenes ATCC® 15313™*	68,65 €	non-hemolytic on sheep blood
0727L	LYFO DISK® / 6	Listeria monocytogenes ATCC® 15313™*	192,40 €	non-hemolytic on sheep blood
0277E3	Epower™ / 10	Listeria monocytogenes ATCC® 19111™*	346,60 €	serotype 1; Mean Assay Value: 1.0-9.9E+03 CFU per pellet
0277E3-CRM	Epower™ / 10 CRM	Listeria monocytogenes ATCC® 19111™*	512,40 €	serotype 1; Mean Assay Value: 1.0-9.9E+03 CFU per pellet
0277P	KWIK-STIK™ / 2	Listeria monocytogenes ATCC® 19111™*	76,80 €	serotype 1
0277K	KWIK-STIK™ / 6	Listeria monocytogenes ATCC® 19111™*	207,50 €	serotype 1
0277-CRM	Lab-Elite CRM™ / 1	Listeria monocytogenes ATCC® 19111™*	68,65 €	serotype 1
0277L	LYFO DISK® / 6	Listeria monocytogenes ATCC® 19111™*	192,40 €	serotype 1
0232P	KWIK-STIK™ / 2	Listeria monocytogenes ATCC® 19112™*	76,80 €	serotype 2
0232K	KWIK-STIK™ / 6	Listeria monocytogenes ATCC® 19112™*	207,50 €	serotype 2
0232L	LYFO DISK® / 6	Listeria monocytogenes ATCC® 19112™*	192,40 €	serotype 2
0686P	KWIK-STIK™ / 2	Listeria monocytogenes ATCC® 19114™*	76,80 €	serotype 4a
0686K	KWIK-STIK™ / 6	Listeria monocytogenes ATCC® 19114™*	207,50 €	serotype 4a
0686L	LYFO DISK® / 6	Listeria monocytogenes ATCC® 19114™*	192,40 €	serotype 4a
0687E3	Epower™ / 10	Listeria monocytogenes ATCC® 19115™*	346,60 €	serotype 4b; Mean Assay Value: 1.0-9.9E+03 CFU per pellet
0687E2	Epower™ / 10	Listeria monocytogenes ATCC® 19115™*	263,40 €	serotype 4b; Mean Assay Value: 1.0-9.9E+02 CFU per pellet
0687E3-CRM	Epower™ / 10 CRM	Listeria monocytogenes ATCC® 19115™*	512,40 €	serotype 4b; Mean Assay Value: 1.0-9.9E+03 CFU per pellet
0687FPC	EZ-FPC™ / 10	Listeria monocytogenes ATCC® 19115™*	285,00 €	Qualitative Preparations at a concentration of 1.0-9.9E+02 CFU per pellet; serotype 4b
0687P	KWIK-STIK™ / 2	Listeria monocytogenes ATCC® 19115™*	76,80 €	serotype 4b
0687K	KWIK-STIK™ / 6	Listeria monocytogenes ATCC® 19115™*	207,50 €	serotype 4b
0687L	LYFO DISK® / 6	Listeria monocytogenes ATCC® 19115™*	192,40 €	serotype 4b
0154P	KWIK-STIK™ / 2	Listeria monocytogenes ATCC® 19118™*	76,80 €	serotype 4e
0154K	KWIK-STIK™ / 6	Listeria monocytogenes ATCC® 19118™*	207,50 €	serotype 4e
0154L	LYFO DISK® / 6	Listeria monocytogenes ATCC® 19118™*	192,40 €	serotype 4e
01190P	KWIK-STIK™ / 2	Listeria monocytogenes ATCC® 35152™*	69,50 €	Non-hemolytic variation
01190K	KWIK-STIK™ / 6	Listeria monocytogenes ATCC® 35152™*	187,55 €	Non-hemolytic variation
01190L	LYFO DISK® / 6	Listeria monocytogenes ATCC® 35152™*	166,80 €	Non-hemolytic variation
0398P	KWIK-STIK™ / 2	Listeria monocytogenes ATCC® 7644™*	76,80 €	
0398K	KWIK-STIK™ / 6	Listeria monocytogenes ATCC® 7644™*	207,50 €	
0398L	LYFO DISK® / 6	Listeria monocytogenes ATCC® 7644™*	192,40 €	
0130P	KWIK-STIK™ / 2	Listeria monocytogenes ATCC® BAA-751™*	69,50 €	
0130K	KWIK-STIK™ / 6	Listeria monocytogenes ATCC® BAA-751™*	187,55 €	
0130L	LYFO DISK® / 6	Listeria monocytogenes ATCC® BAA-751™*	166,80 €	
0254FPC	EZ-FPC™ / 10	Listeria monocytogenes Cornell University SLR2249	285,00 €	Act A gene removed; Qualitative; 100 to 1,000 CFU per pellet
0254P	KWIK-STIK™ / 2	Listeria monocytogenes Cornell University SLR2249	76,80 €	Act A gene removed
0254K	KWIK-STIK™ / 6	Listeria monocytogenes Cornell University SLR2249	207,50 €	Act A gene removed
0254L	LYFO DISK® / 6	Listeria monocytogenes Cornell University SLR2249	192,40 €	Act A gene removed
0308E3	Epower™ / 10	Listeria monocytogenes NCIMB 13726	263,40 €	serotype 4b; Mean Assay Value: 1.0-9.9E+03 CFU per pellet
0308E3-CRM	Epower™ / 10 CRM	Listeria monocytogenes NCIMB 13726	512,40 €	serotype 4b; Mean Assay Value: 1.0-9.9E+03 CFU per pellet
0783P	KWIK-STIK™ / 2	Listeria monocytogenes NCTC 10890	76,80 €	serotype 7
0783K	KWIK-STIK™ / 6	Listeria monocytogenes NCTC 10890	207,50 €	serotype 7
0783L	LYFO DISK® / 6	Listeria monocytogenes NCTC 10890	192,40 €	serotype 7
0802P	KWIK-STIK™ / 2	Listeria seeligeri ATCC® 35967™*	76,80 €	
0802K	KWIK-STIK™ / 6	Listeria seeligeri ATCC® 35967™*	207,50 €	
0802-CRM	Lab-Elite CRM™ / 1	Listeria seeligeri ATCC® 35967™*	68,65 €	
0802L	LYFO DISK® / 6	Listeria seeligeri ATCC® 35967™*	192,40 €	
0816P	KWIK-STIK™ / 2	Listeria welshimeri ATCC® 35897™*	76,80 €	
0816K	KWIK-STIK™ / 6	Listeria welshimeri ATCC® 35897™*	207,50 €	
0816-CRM	Lab-Elite CRM™ / 1	Listeria welshimeri ATCC® 35897™*	68,65 €	
0816L	LYFO DISK® / 6	Listeria welshimeri ATCC® 35897™*	192,40 €	
0810P	KWIK-STIK™ / 2	Lysinibacillus sphaericus ATCC® 4525™*	76,80 €	formerly Bacillus sphaericus
0810K	KWIK-STIK™ / 6	Lysinibacillus sphaericus ATCC® 4525™*	207,50 €	formerly Bacillus sphaericus
0810L	LYFO DISK® / 6	Lysinibacillus sphaericus ATCC® 4525™*	192,40 €	formerly Bacillus sphaericus

Référence Microbiologics	Gamme	Souche	Prix de vente 2016 HT susceptible d'évoluer	Commentaire
0415P	KWIK-STIK™ / 2	Macroccoccus caseolyticus ATCC® 13518™*	76,80 €	formerly Staphylococcus epidermidis
0415K	KWIK-STIK™ / 6	Macroccoccus caseolyticus ATCC® 13518™*	207,50 €	formerly Staphylococcus epidermidis
0415L	LYFO DISK® / 6	Macroccoccus caseolyticus ATCC® 13518™*	192,40 €	formerly Staphylococcus epidermidis
0962P	KWIK-STIK™ / 2	Macroccoccus caseolyticus ATCC® 35662™*	76,80 €	
0962K	KWIK-STIK™ / 6	Macroccoccus caseolyticus ATCC® 35662™*	207,50 €	
0962L	LYFO DISK® / 6	Macroccoccus caseolyticus ATCC® 35662™*	192,40 €	
0701P	KWIK-STIK™ / 2	Malassezia furfur ATCC® 14521™*	76,80 €	
0701K	KWIK-STIK™ / 6	Malassezia furfur ATCC® 14521™*	207,50 €	fungus
0701L	LYFO DISK® / 6	Malassezia furfur ATCC® 14521™*	192,40 €	fungus
0664P	KWIK-STIK™ / 2	Mannheimia haemolytica ATCC® 33396™*	87,35 €	
0664K	KWIK-STIK™ / 6	Mannheimia haemolytica ATCC® 33396™*	235,85 €	
0664L	LYFO DISK® / 6	Mannheimia haemolytica ATCC® 33396™*	219,75 €	
01110P	KWIK-STIK™ / 2	Methylobacterium extorquens ATCC® BAA-2500™*	87,35 €	
01110K	KWIK-STIK™ / 6	Methylobacterium extorquens ATCC® BAA-2500™*	235,85 €	
01110L	LYFO DISK® / 6	Methylobacterium extorquens ATCC® BAA-2500™*	219,75 €	
0280P	KWIK-STIK™ / 2	Methylobacterium mesophilicum ATCC® 29983™*	87,35 €	
0280K	KWIK-STIK™ / 6	Methylobacterium mesophilicum ATCC® 29983™*	235,85 €	
0280L	LYFO DISK® / 6	Methylobacterium mesophilicum ATCC® 29983™*	219,75 €	
01181P	KWIK-STIK™ / 2	Methylobacterium organophilum ATCC® 27886™*	87,35 €	
01181K	KWIK-STIK™ / 6	Methylobacterium organophilum ATCC® 27886™*	235,85 €	
01181L	LYFO DISK® / 6	Methylobacterium organophilum ATCC® 27886™*	219,75 €	
01042P	KWIK-STIK™ / 2	Microbacterium liquefaciens ATCC® BAA-1819™*	76,80 €	Item Available for Fulfillment August 2010
01042K	KWIK-STIK™ / 6	Microbacterium liquefaciens ATCC® BAA-1819™*	207,50 €	Item Available for Fulfillment August 2010
01042L	LYFO DISK® / 6	Microbacterium liquefaciens ATCC® BAA-1819™*	192,40 €	Item Available for Fulfillment August 2010
01041P	KWIK-STIK™ / 2	Microbacterium paraoxydans ATCC® BAA-1818™*	76,80 €	Item Available for Fulfillment August 2010
01041K	KWIK-STIK™ / 6	Microbacterium paraoxydans ATCC® BAA-1818™*	207,50 €	Item Available for Fulfillment August 2010
01041L	LYFO DISK® / 6	Microbacterium paraoxydans ATCC® BAA-1818™*	192,40 €	Item Available for Fulfillment August 2010
0295P	KWIK-STIK™ / 2	Microbacterium testaceum ATCC® 15829™*	76,80 €	
0295K	KWIK-STIK™ / 6	Microbacterium testaceum ATCC® 15829™*	207,50 €	
0295L	LYFO DISK® / 6	Microbacterium testaceum ATCC® 15829™*	192,40 €	
0689P	KWIK-STIK™ / 2	Micrococcus luteus ATCC® 10240™*	69,50 €	
0689K	KWIK-STIK™ / 6	Micrococcus luteus ATCC® 10240™*	187,55 €	
0689-CRM	Lab-Elite CRM™ / 1	Micrococcus luteus ATCC® 10240™*	68,65 €	
0689L	LYFO DISK® / 6	Micrococcus luteus ATCC® 10240™*	166,80 €	
0242P	KWIK-STIK™ / 2	Micrococcus luteus ATCC® 4698™*	76,80 €	
0242K	KWIK-STIK™ / 6	Micrococcus luteus ATCC® 4698™*	207,50 €	
0242L	LYFO DISK® / 6	Micrococcus luteus ATCC® 4698™*	192,40 €	
0804P	KWIK-STIK™ / 2	Micrococcus luteus ATCC® 49732™*	69,50 €	
0804K	KWIK-STIK™ / 6	Micrococcus luteus ATCC® 49732™*	187,55 €	
0804L	LYFO DISK® / 6	Micrococcus luteus ATCC® 49732™*	166,80 €	
0218P	KWIK-STIK™ / 2	Micrococcus luteus ATCC® 7468™*	69,50 €	
0218K	KWIK-STIK™ / 6	Micrococcus luteus ATCC® 7468™*	187,55 €	
0218L	LYFO DISK® / 6	Micrococcus luteus ATCC® 7468™*	166,80 €	
0337P	KWIK-STIK™ / 2	Micrococcus luteus NCIMB 8166	76,80 €	
0337K	KWIK-STIK™ / 6	Micrococcus luteus NCIMB 8166	207,50 €	
0337L	LYFO DISK® / 6	Micrococcus luteus NCIMB 8166	192,40 €	
0740P	KWIK-STIK™ / 2	Micrococcus species ATCC® 700405™*	76,80 €	
0740K	KWIK-STIK™ / 6	Micrococcus species ATCC® 700405™*	207,50 €	
0740L	LYFO DISK® / 6	Micrococcus species ATCC® 700405™*	192,40 €	
0894P	KWIK-STIK™ / 2	Microsporium canis ATCC® 36299™*	87,35 €	fungus
0894K	KWIK-STIK™ / 6	Microsporium canis ATCC® 36299™*	235,85 €	fungus
0894L	LYFO DISK® / 6	Microsporium canis ATCC® 36299™*	219,75 €	fungus
0893P	KWIK-STIK™ / 2	Microsporium gypseum ATCC® 24102™*	87,35 €	fungus
0893K	KWIK-STIK™ / 6	Microsporium gypseum ATCC® 24102™*	235,85 €	fungus
0893L	LYFO DISK® / 6	Microsporium gypseum ATCC® 24102™*	219,75 €	fungus
0642L	LYFO DISK® / 6	Moraxella catarrhalis ATCC® 49143™*	166,80 €	formerly Moraxella (Branhamella) catarrhalis
0395P	KWIK-STIK™ / 2	Moraxella (Branhamella) catarrhalis NCTC 4103	76,80 €	
0395K	KWIK-STIK™ / 6	Moraxella (Branhamella) catarrhalis NCTC 4103	207,50 €	
0395L	LYFO DISK® / 6	Moraxella (Branhamella) catarrhalis NCTC 4103	192,40 €	
0248P	KWIK-STIK™ / 2	Moraxella catarrhalis ATCC® 23246™*	76,80 €	formerly Moraxella (Branhamella) catarrhalis
0248K	KWIK-STIK™ / 6	Moraxella catarrhalis ATCC® 23246™*	207,50 €	formerly Moraxella (Branhamella) catarrhalis
0248L	LYFO DISK® / 6	Moraxella catarrhalis ATCC® 23246™*	192,40 €	formerly Moraxella (Branhamella) catarrhalis
0951P	KWIK-STIK™ / 2	Moraxella catarrhalis ATCC® 25238™*	69,50 €	Formerly Moraxella (Branhamella) catarrhalis
0951K	KWIK-STIK™ / 6	Moraxella catarrhalis ATCC® 25238™*	187,55 €	Formerly Moraxella (Branhamella) catarrhalis
0951L	LYFO DISK® / 6	Moraxella catarrhalis ATCC® 25238™*	166,80 €	Formerly Moraxella (Branhamella) catarrhalis
0403P	KWIK-STIK™ / 2	Moraxella catarrhalis ATCC® 25240™*	69,50 €	Formerly Moraxella (Branhamella) catarrhalis
0403K	KWIK-STIK™ / 6	Moraxella catarrhalis ATCC® 25240™*	187,55 €	Formerly Moraxella (Branhamella) catarrhalis
0403-CRM	Lab-Elite CRM™ / 1	Moraxella catarrhalis ATCC® 25240™*	68,65 €	
0403L	LYFO DISK® / 6	Moraxella catarrhalis ATCC® 25240™*	166,80 €	Formerly Moraxella (Branhamella) catarrhalis
0642P	KWIK-STIK™ / 2	Moraxella catarrhalis ATCC® 49143™*	69,50 €	formerly Moraxella (Branhamella) catarrhalis
0642K	KWIK-STIK™ / 6	Moraxella catarrhalis ATCC® 49143™*	187,55 €	formerly Moraxella (Branhamella) catarrhalis
0622P	KWIK-STIK™ / 2	Moraxella catarrhalis ATCC® 8176™*	69,50 €	Formerly Moraxella (Branhamella) catarrhalis
0622K	KWIK-STIK™ / 6	Moraxella catarrhalis ATCC® 8176™*	187,55 €	Formerly Moraxella (Branhamella) catarrhalis
0622L	LYFO DISK® / 6	Moraxella catarrhalis ATCC® 8176™*	166,80 €	Formerly Moraxella (Branhamella) catarrhalis

Référence Microbiologiques	Gamme	Souche	Prix de vente 2016 HT susceptible d'évoluer	Commentaire
0475P	KWIK-STIK™ / 2	Moraxella osloensis ATCC® 10973™*	69,50 €	Formerly Moraxella (Moraxella) osloensis
0475K	KWIK-STIK™ / 6	Moraxella osloensis ATCC® 10973™*	187,55 €	Formerly Moraxella (Moraxella) osloensis
0475L	LYFO DISK® / 6	Moraxella osloensis ATCC® 10973™*	166,80 €	Formerly Moraxella (Moraxella) osloensis
0215P	KWIK-STIK™ / 2	Morganella morganii subsp. morganii ATCC® 25829™*	69,50 €	
0215K	KWIK-STIK™ / 6	Morganella morganii subsp. morganii ATCC® 25829™*	187,55 €	
0215L	LYFO DISK® / 6	Morganella morganii subsp. morganii ATCC® 25829™*	166,80 €	
0839P	KWIK-STIK™ / 2	Morganella morganii subsp. morganii ATCC® 25830™*	76,80 €	
0839K	KWIK-STIK™ / 6	Morganella morganii subsp. morganii ATCC® 25830™*	207,50 €	
0839L	LYFO DISK® / 6	Morganella morganii subsp. morganii ATCC® 25830™*	192,40 €	
01142P	KWIK-STIK™ / 2	Mucor racemosus ATCC® 42647™*	76,80 €	
01142K	KWIK-STIK™ / 6	Mucor racemosus ATCC® 42647™*	207,50 €	
01142L	LYFO DISK® / 6	Mucor racemosus ATCC® 42647™*	192,40 €	
01149P	KWIK-STIK™ / 2	Mycobacterium avium ATCC® 700898™*	87,35 €	
01149K	KWIK-STIK™ / 6	Mycobacterium avium ATCC® 700898™*	235,85 €	
01149L	LYFO DISK® / 6	Mycobacterium avium ATCC® 700898™*	219,75 €	
0522P	KWIK-STIK™ / 2	Mycobacterium avium subsp. avium ATCC® 15769™*	87,35 €	serotype 1
0522K	KWIK-STIK™ / 6	Mycobacterium avium subsp. avium ATCC® 15769™*	235,85 €	serotype 1
0522L	LYFO DISK® / 6	Mycobacterium avium subsp. avium ATCC® 15769™*	219,75 €	serotype 1
0544P	KWIK-STIK™ / 2	Mycobacterium avium subsp. avium ATCC® 25291™*	87,35 €	serotype 2
0544K	KWIK-STIK™ / 6	Mycobacterium avium subsp. avium ATCC® 25291™*	235,85 €	serotype 2
0544L	LYFO DISK® / 6	Mycobacterium avium subsp. avium ATCC® 25291™*	219,75 €	serotype 2
0513P	KWIK-STIK™ / 2	Mycobacterium fortuitum subsp. fortuitum ATCC® 6841™*	87,35 €	
0513K	KWIK-STIK™ / 6	Mycobacterium fortuitum subsp. fortuitum ATCC® 6841™*	235,85 €	
0513L	LYFO DISK® / 6	Mycobacterium fortuitum subsp. fortuitum ATCC® 6841™*	219,75 €	
0995P	KWIK-STIK™ / 2	Mycobacterium gordonae ATCC® 14470™*	87,35 €	
0995K	KWIK-STIK™ / 6	Mycobacterium gordonae ATCC® 14470™*	235,85 €	
0995L	LYFO DISK® / 6	Mycobacterium gordonae ATCC® 14470™*	219,75 €	
0364P	KWIK-STIK™ / 2	Mycobacterium gordonae NCTC 10267	87,35 €	
0364K	KWIK-STIK™ / 6	Mycobacterium gordonae NCTC 10267	235,85 €	
0364L	LYFO DISK® / 6	Mycobacterium gordonae NCTC 10267	219,75 €	
01049P	KWIK-STIK™ / 2	Mycobacterium haemophilum ATCC® 29548™*	87,35 €	requires hemin (x factor) for growth
01049K	KWIK-STIK™ / 6	Mycobacterium haemophilum ATCC® 29548™*	235,85 €	requires hemin (x factor) for growth
01049L	LYFO DISK® / 6	Mycobacterium haemophilum ATCC® 29548™*	219,75 €	requires hemin (x factor) for growth
0157P	KWIK-STIK™ / 2	Mycobacterium intracellulare ATCC® 13950™*	87,35 €	
0157K	KWIK-STIK™ / 6	Mycobacterium intracellulare ATCC® 13950™*	235,85 €	
0157L	LYFO DISK® / 6	Mycobacterium intracellulare ATCC® 13950™*	219,75 €	
0545P	KWIK-STIK™ / 2	Mycobacterium kansasii ATCC® 12478™*	87,35 €	
0545K	KWIK-STIK™ / 6	Mycobacterium kansasii ATCC® 12478™*	235,85 €	
0545L	LYFO DISK® / 6	Mycobacterium kansasii ATCC® 12478™*	219,75 €	
0512P	KWIK-STIK™ / 2	Mycobacterium peregrinum ATCC® 700686™*	87,35 €	
0512K	KWIK-STIK™ / 6	Mycobacterium peregrinum ATCC® 700686™*	235,85 €	
0512L	LYFO DISK® / 6	Mycobacterium peregrinum ATCC® 700686™*	219,75 €	
0721P	KWIK-STIK™ / 2	Mycobacterium smegmatis ATCC® 14468™*	87,35 €	
0721K	KWIK-STIK™ / 6	Mycobacterium smegmatis ATCC® 14468™*	235,85 €	
0721L	LYFO DISK® / 6	Mycobacterium smegmatis ATCC® 14468™*	219,75 €	
0514P	KWIK-STIK™ / 2	Mycobacterium smegmatis ATCC® 19420™*	87,35 €	
0514K	KWIK-STIK™ / 6	Mycobacterium smegmatis ATCC® 19420™*	235,85 €	
0514L	LYFO DISK® / 6	Mycobacterium smegmatis ATCC® 19420™*	219,75 €	
0114P	KWIK-STIK™ / 2	Mycobacterium smegmatis ATCC® 607™*	87,35 €	
0114K	KWIK-STIK™ / 6	Mycobacterium smegmatis ATCC® 607™*	235,85 €	
0114L	LYFO DISK® / 6	Mycobacterium smegmatis ATCC® 607™*	219,75 €	
0272P	KWIK-STIK™ / 2	Mycobacterium terrae ATCC® 15755™*	87,35 €	
0272K	KWIK-STIK™ / 6	Mycobacterium terrae ATCC® 15755™*	235,85 €	
0272L	LYFO DISK® / 6	Mycobacterium terrae ATCC® 15755™*	219,75 €	
0112P	KWIK-STIK™ / 2	Mycobacterium tuberculosis ATCC® 25177™*	87,35 €	attenuated
0112K	KWIK-STIK™ / 6	Mycobacterium tuberculosis ATCC® 25177™*	235,85 €	attenuated
0112L	LYFO DISK® / 6	Mycobacterium tuberculosis ATCC® 25177™*	219,75 €	attenuated
01053P	KWIK-STIK™ / 2	Mycoplasma bovis ATCC® 25025™*	87,35 €	
01053K	KWIK-STIK™ / 6	Mycoplasma bovis ATCC® 25025™*	235,85 €	
01053L	LYFO DISK® / 6	Mycoplasma bovis ATCC® 25025™*	219,75 €	
0156P	KWIK-STIK™ / 2	Mycoplasma hominis ATCC® 15488™*	87,35 €	
0156K	KWIK-STIK™ / 6	Mycoplasma hominis ATCC® 15488™*	235,85 €	
0156L	LYFO DISK® / 6	Mycoplasma hominis ATCC® 15488™*	219,75 €	
0503P	KWIK-STIK™ / 2	Mycoplasma pneumoniae ATCC® 15531™*	87,35 €	
0503K	KWIK-STIK™ / 6	Mycoplasma pneumoniae ATCC® 15531™*	235,85 €	
0503L	LYFO DISK® / 6	Mycoplasma pneumoniae ATCC® 15531™*	219,75 €	
0324P	KWIK-STIK™ / 2	Myroides odoratus ATCC® 4651™*	76,80 €	
0324K	KWIK-STIK™ / 6	Myroides odoratus ATCC® 4651™*	207,50 €	
0324L	LYFO DISK® / 6	Myroides odoratus ATCC® 4651™*	192,40 €	
0378P	KWIK-STIK™ / 2	Neisseria gonorrhoeae ATCC® 19424™*	69,50 €	
0378K	KWIK-STIK™ / 6	Neisseria gonorrhoeae ATCC® 19424™*	187,55 €	

Référence Microbiologiques	Gamme	Souche	Prix de vente 2016 HT susceptible d'évoluer	Commentaire
0378L	LYFO DISK® / 6	Neisseria gonorrhoeae ATCC® 19424™*	166,80 €	
0375P	KWIK-STIK™ / 2	Neisseria gonorrhoeae ATCC® 31426™*	69,50 €	beta lactamase producer
0375K	KWIK-STIK™ / 6	Neisseria gonorrhoeae ATCC® 31426™*	187,55 €	beta lactamase producer
0375L	LYFO DISK® / 6	Neisseria gonorrhoeae ATCC® 31426™*	166,80 €	beta lactamase producer
0429P	KWIK-STIK™ / 2	Neisseria gonorrhoeae ATCC® 43069™*	69,50 €	
0429K	KWIK-STIK™ / 6	Neisseria gonorrhoeae ATCC® 43069™*	187,55 €	
0429L	LYFO DISK® / 6	Neisseria gonorrhoeae ATCC® 43069™*	166,80 €	
0426P	KWIK-STIK™ / 2	Neisseria gonorrhoeae ATCC® 43070™*	69,50 €	
0426K	KWIK-STIK™ / 6	Neisseria gonorrhoeae ATCC® 43070™*	187,55 €	
0426L	LYFO DISK® / 6	Neisseria gonorrhoeae ATCC® 43070™*	166,80 €	
0648P	KWIK-STIK™ / 2	Neisseria gonorrhoeae ATCC® 49226™*	69,50 €	
0648K	KWIK-STIK™ / 6	Neisseria gonorrhoeae ATCC® 49226™*	187,55 €	
0648L	LYFO DISK® / 6	Neisseria gonorrhoeae ATCC® 49226™*	166,80 €	
0552P	KWIK-STIK™ / 2	Neisseria gonorrhoeae ATCC® 49498™*	69,50 €	
0552K	KWIK-STIK™ / 6	Neisseria gonorrhoeae ATCC® 49498™*	187,55 €	
0552L	LYFO DISK® / 6	Neisseria gonorrhoeae ATCC® 49498™*	166,80 €	
0952P	KWIK-STIK™ / 2	Neisseria gonorrhoeae ATCC® 49981™*	76,80 €	Penicillin resistant
0952K	KWIK-STIK™ / 6	Neisseria gonorrhoeae ATCC® 49981™*	207,50 €	Penicillin resistant
0952L	LYFO DISK® / 6	Neisseria gonorrhoeae ATCC® 49981™*	192,40 €	Penicillin resistant
0368P	KWIK-STIK™ / 2	Neisseria gonorrhoeae NCTC 8375	69,50 €	
0368K	KWIK-STIK™ / 6	Neisseria gonorrhoeae NCTC 8375	187,55 €	
0368L	LYFO DISK® / 6	Neisseria gonorrhoeae NCTC 8375	166,80 €	
0405P	KWIK-STIK™ / 2	Neisseria lactamica ATCC® 23970™*	69,50 €	
0405K	KWIK-STIK™ / 6	Neisseria lactamica ATCC® 23970™*	187,55 €	
0405L	LYFO DISK® / 6	Neisseria lactamica ATCC® 23970™*	166,80 €	
0943P	KWIK-STIK™ / 2	Neisseria lactamica ATCC® 23971™*	69,50 €	
0943K	KWIK-STIK™ / 6	Neisseria lactamica ATCC® 23971™*	187,55 €	
0943L	LYFO DISK® / 6	Neisseria lactamica ATCC® 23971™*	166,80 €	
0646P	KWIK-STIK™ / 2	Neisseria lactamica ATCC® 49142™*	69,50 €	
0646K	KWIK-STIK™ / 6	Neisseria lactamica ATCC® 49142™*	187,55 €	
0646L	LYFO DISK® / 6	Neisseria lactamica ATCC® 49142™*	166,80 €	
0453P	KWIK-STIK™ / 2	Neisseria meningitidis ATCC® 13077™*	69,50 €	serogroup A
0453K	KWIK-STIK™ / 6	Neisseria meningitidis ATCC® 13077™*	187,55 €	serogroup A
0453L	LYFO DISK® / 6	Neisseria meningitidis ATCC® 13077™*	166,80 €	serogroup A
0454P	KWIK-STIK™ / 2	Neisseria meningitidis ATCC® 13090™*	69,50 €	serogroup B
0454K	KWIK-STIK™ / 6	Neisseria meningitidis ATCC® 13090™*	187,55 €	serogroup B
0454L	LYFO DISK® / 6	Neisseria meningitidis ATCC® 13090™*	166,80 €	serogroup B
0404P	KWIK-STIK™ / 2	Neisseria meningitidis ATCC® 13102™*	69,50 €	serogroup C
0404K	KWIK-STIK™ / 6	Neisseria meningitidis ATCC® 13102™*	187,55 €	serogroup C
0404L	LYFO DISK® / 6	Neisseria meningitidis ATCC® 13102™*	166,80 €	serogroup C
01004P	KWIK-STIK™ / 2	Neisseria meningitidis ATCC® 13113™*	87,35 €	serogroup D
01004K	KWIK-STIK™ / 6	Neisseria meningitidis ATCC® 13113™*	235,85 €	serogroup D
01004L	LYFO DISK® / 6	Neisseria meningitidis ATCC® 13113™*	219,75 €	serogroup D
0268P	KWIK-STIK™ / 2	Neisseria meningitidis ATCC® 35561™*	76,80 €	serogroup Y
0268K	KWIK-STIK™ / 6	Neisseria meningitidis ATCC® 35561™*	207,50 €	serogroup Y
0268L	LYFO DISK® / 6	Neisseria meningitidis ATCC® 35561™*	192,40 €	serogroup Y
0649P	KWIK-STIK™ / 2	Neisseria meningitidis NCTC 10026	87,35 €	serogroup B
0649K	KWIK-STIK™ / 6	Neisseria meningitidis NCTC 10026	235,85 €	serogroup B
0649L	LYFO DISK® / 6	Neisseria meningitidis NCTC 10026	219,75 €	serogroup B
0653P	KWIK-STIK™ / 2	Neisseria mucosa ATCC® 19695™*	76,80 €	
0653K	KWIK-STIK™ / 6	Neisseria mucosa ATCC® 19695™*	207,50 €	
0653L	LYFO DISK® / 6	Neisseria mucosa ATCC® 19695™*	192,40 €	
0131P	KWIK-STIK™ / 2	Neisseria mucosa ATCC® 49233™*	76,80 €	
0131K	KWIK-STIK™ / 6	Neisseria mucosa ATCC® 49233™*	207,50 €	
0131L	LYFO DISK® / 6	Neisseria mucosa ATCC® 49233™*	192,40 €	
0390P	KWIK-STIK™ / 2	Neisseria mucosa NCTC 10774	69,50 €	
0390K	KWIK-STIK™ / 6	Neisseria mucosa NCTC 10774	187,55 €	
0390L	LYFO DISK® / 6	Neisseria mucosa NCTC 10774	166,80 €	
0456P	KWIK-STIK™ / 2	Neisseria perflava ATCC® 14799™*	76,80 €	
0456K	KWIK-STIK™ / 6	Neisseria perflava ATCC® 14799™*	207,50 €	
0456L	LYFO DISK® / 6	Neisseria perflava ATCC® 14799™*	192,40 €	
0464P	KWIK-STIK™ / 2	Neisseria sicca ATCC® 29193™*	76,80 €	
0464K	KWIK-STIK™ / 6	Neisseria sicca ATCC® 29193™*	207,50 €	
0464L	LYFO DISK® / 6	Neisseria sicca ATCC® 29193™*	192,40 €	
0406P	KWIK-STIK™ / 2	Neisseria sicca ATCC® 9913™*	69,50 €	
0406K	KWIK-STIK™ / 6	Neisseria sicca ATCC® 9913™*	187,55 €	
0406L	LYFO DISK® / 6	Neisseria sicca ATCC® 9913™*	166,80 €	
0866P	KWIK-STIK™ / 2	Nocardia brasiliensis ATCC® 19296™*	76,80 €	
0866K	KWIK-STIK™ / 6	Nocardia brasiliensis ATCC® 19296™*	207,50 €	
0866L	LYFO DISK® / 6	Nocardia brasiliensis ATCC® 19296™*	192,40 €	
0206P	KWIK-STIK™ / 2	Novosphingobium capsulatum ATCC® 14666™*	87,35 €	
0206K	KWIK-STIK™ / 6	Novosphingobium capsulatum ATCC® 14666™*	235,85 €	
0206L	LYFO DISK® / 6	Novosphingobium capsulatum ATCC® 14666™*	219,75 €	
0518P	KWIK-STIK™ / 2	Ochrobactrum anthropi ATCC® 49687™*	76,80 €	

Référence Microbiologics	Gamme	Souche	Prix de vente 2016 HT susceptible d'évoluer	Commentaire
0518K	KWIK-STIK™ / 6	Ochrobactrum anthropi ATCC® 49687™*	207,50 €	
0518L	LYFO DISK® / 6	Ochrobactrum anthropi ATCC® 49687™*	192,40 €	
0132P	KWIK-STIK™ / 2	Ochrobactrum anthropi ATCC® BAA-749™*	69,50 €	
0132K	KWIK-STIK™ / 6	Ochrobactrum anthropi ATCC® BAA-749™*	187,55 €	
0132L	LYFO DISK® / 6	Ochrobactrum anthropi ATCC® BAA-749™*	166,80 €	
0868P	KWIK-STIK™ / 2	Oligella ureolytica ATCC® 43534™*	69,50 €	
0868K	KWIK-STIK™ / 6	Oligella ureolytica ATCC® 43534™*	187,55 €	
0868L	LYFO DISK® / 6	Oligella ureolytica ATCC® 43534™*	166,80 €	
0621P	KWIK-STIK™ / 2	Oligella urethralis ATCC® 17960™*	69,50 €	
0621K	KWIK-STIK™ / 6	Oligella urethralis ATCC® 17960™*	187,55 €	
0621L	LYFO DISK® / 6	Oligella urethralis ATCC® 17960™*	166,80 €	
0281P	KWIK-STIK™ / 2	Paecilomyces marquandii ATCC® 10525™*	87,35 €	fungus
0281K	KWIK-STIK™ / 6	Paecilomyces marquandii ATCC® 10525™*	235,85 €	fungus
0281L	LYFO DISK® / 6	Paecilomyces marquandii ATCC® 10525™*	219,75 €	fungus
01107P	KWIK-STIK™ / 2	Paecilomyces variotii ATCC® 18502™*	87,35 €	
01107K	KWIK-STIK™ / 6	Paecilomyces variotii ATCC® 18502™*	235,85 €	
01107L	LYFO DISK® / 6	Paecilomyces variotii ATCC® 18502™*	219,75 €	
01199P	KWIK-STIK™ / 2	Paenibacillus glucanolyticus ATCC® 49279™*	87,35 €	
01199K	KWIK-STIK™ / 6	Paenibacillus glucanolyticus ATCC® 49279™*	235,85 €	
01199L	LYFO DISK® / 6	Paenibacillus glucanolyticus ATCC® 49279™*	219,75 €	
0473P	KWIK-STIK™ / 2	Paenibacillus gordonae ATCC® 29948™*	69,50 €	
0473K	KWIK-STIK™ / 6	Paenibacillus gordonae ATCC® 29948™*	187,55 €	
0473L	LYFO DISK® / 6	Paenibacillus gordonae ATCC® 29948™*	166,80 €	
0431P	KWIK-STIK™ / 2	Paenibacillus larvae subsp. larvae ATCC® 9545™*	87,35 €	
0431K	KWIK-STIK™ / 6	Paenibacillus larvae subsp. larvae ATCC® 9545™*	235,85 €	
0431L	LYFO DISK® / 6	Paenibacillus larvae subsp. larvae ATCC® 9545™*	219,75 €	
0142P	KWIK-STIK™ / 2	Paenibacillus macerans ATCC® 8509™*	69,50 €	
0142K	KWIK-STIK™ / 6	Paenibacillus macerans ATCC® 8509™*	187,55 €	
0142L	LYFO DISK® / 6	Paenibacillus macerans ATCC® 8509™*	166,80 €	
0228P	KWIK-STIK™ / 2	Paenibacillus polymyxa ATCC® 43865™*	60,45 €	
0228K	KWIK-STIK™ / 6	Paenibacillus polymyxa ATCC® 43865™*	161,00 €	
0228L	LYFO DISK® / 6	Paenibacillus polymyxa ATCC® 43865™*	141,10 €	
0296P	KWIK-STIK™ / 2	Paenibacillus polymyxa ATCC® 7070™*	76,80 €	
0296K	KWIK-STIK™ / 6	Paenibacillus polymyxa ATCC® 7070™*	207,50 €	
0296L	LYFO DISK® / 6	Paenibacillus polymyxa ATCC® 7070™*	192,40 €	
0883P	KWIK-STIK™ / 2	Paenibacillus polymyxa ATCC® 842™*	76,80 €	
0883K	KWIK-STIK™ / 6	Paenibacillus polymyxa ATCC® 842™*	207,50 €	
0883L	LYFO DISK® / 6	Paenibacillus polymyxa ATCC® 842™*	192,40 €	
0618P	KWIK-STIK™ / 2	Parabacteroides distasonis ATCC® 8503™*	76,80 €	
0618K	KWIK-STIK™ / 6	Parabacteroides distasonis ATCC® 8503™*	207,50 €	
0618L	LYFO DISK® / 6	Parabacteroides distasonis ATCC® 8503™*	192,40 €	
0584P	KWIK-STIK™ / 2	Parabacteroides distasonis ATCC® BAA-1295™*	76,80 €	
0584K	KWIK-STIK™ / 6	Parabacteroides distasonis ATCC® BAA-1295™*	207,50 €	
0584L	LYFO DISK® / 6	Parabacteroides distasonis ATCC® BAA-1295™*	192,40 €	
0958P	KWIK-STIK™ / 2	Parvimonas micra ATCC® 33270™*	76,80 €	formerly Micromonas micros
0958K	KWIK-STIK™ / 6	Parvimonas micra ATCC® 33270™*	207,50 €	formerly Micromonas micros
0958L	LYFO DISK® / 6	Parvimonas micra ATCC® 33270™*	192,40 €	formerly Micromonas micros
0808P	KWIK-STIK™ / 2	Pasteurella aerogenes ATCC® 27883™*	69,50 €	
0808K	KWIK-STIK™ / 6	Pasteurella aerogenes ATCC® 27883™*	187,55 €	
0808L	LYFO DISK® / 6	Pasteurella aerogenes ATCC® 27883™*	166,80 €	
0668P	KWIK-STIK™ / 2	Pasteurella multocida subsp. multocida ATCC® 12945™*	69,50 €	
0668K	KWIK-STIK™ / 6	Pasteurella multocida subsp. multocida ATCC® 12945™*	187,55 €	
0668-CRM	Lab-Elite CRM™ / 1	Pasteurella multocida subsp. multocida ATCC® 12945™*	68,65 €	
0668L	LYFO DISK® / 6	Pasteurella multocida subsp. multocida ATCC® 12945™*	166,80 €	
0259P	KWIK-STIK™ / 2	Pediococcus acidilactici ATCC® 8042™*	69,50 €	
0259K	KWIK-STIK™ / 6	Pediococcus acidilactici ATCC® 8042™*	187,55 €	
0259L	LYFO DISK® / 6	Pediococcus acidilactici ATCC® 8042™*	166,80 €	
0133P	KWIK-STIK™ / 2	Pediococcus damnosus ATCC® 29358™*	69,50 €	
0133K	KWIK-STIK™ / 6	Pediococcus damnosus ATCC® 29358™*	187,55 €	
0133L	LYFO DISK® / 6	Pediococcus damnosus ATCC® 29358™*	166,80 €	
01075P	KWIK-STIK™ / 2	Pediococcus pentosaceus ATCC® 33316™*	87,35 €	
01075K	KWIK-STIK™ / 6	Pediococcus pentosaceus ATCC® 33316™*	235,85 €	
01075L	LYFO DISK® / 6	Pediococcus pentosaceus ATCC® 33316™*	219,75 €	
0794E3	Epowers™ / 10	Penicillium aurantiogriseum ATCC® 16025™*	263,40 €	Mean Assay Value: 1.0-9.9E+03 CFU per pellet; fungus
0794E3-CRM	Epowers™ / 10 CRM	Penicillium aurantiogriseum ATCC® 16025™*	512,40 €	Mean Assay Value: 1.0-9.9E+03 CFU per pellet; fungus
0794FPC	EZ-FPC™ / 10	Penicillium aurantiogriseum ATCC® 16025™*	285,00 €	Quantitative Preparations at a concentration of 1.0-9.9E+03 CFU per pellet
0794P	KWIK-STIK™ / 2	Penicillium aurantiogriseum ATCC® 16025™*	87,35 €	fungus

Référence Microbiologics	Gamme	Souche	Prix de vente 2016 HT susceptible d'évoluer	Commentaire
0794K	KWIK-STIK™ / 6	Penicillium aurantiogriseum ATCC® 16025™*	235,85 €	fungus
0794L	LYFO DISK® / 6	Penicillium aurantiogriseum ATCC® 16025™*	219,75 €	fungus
0178P	KWIK-STIK™ / 2	Penicillium chrysogenum ATCC® 10106™*	87,35 €	fungus
0178K	KWIK-STIK™ / 6	Penicillium chrysogenum ATCC® 10106™*	235,85 €	fungus
0178L	LYFO DISK® / 6	Penicillium chrysogenum ATCC® 10106™*	219,75 €	fungus
01200P	KWIK-STIK™ / 2	Penicillium chrysogenum ATCC® 11709™*	87,35 €	Fungus Produces penicillin
01200K	KWIK-STIK™ / 6	Penicillium chrysogenum ATCC® 11709™*	235,85 €	Fungus Produces penicillin
01200L	LYFO DISK® / 6	Penicillium chrysogenum ATCC® 11709™*	219,75 €	
01133P	KWIK-STIK™ / 2	Penicillium citrinum ATCC® 9849™*	87,35 €	
01133K	KWIK-STIK™ / 6	Penicillium citrinum ATCC® 9849™*	235,85 €	
01133L	LYFO DISK® / 6	Penicillium citrinum ATCC® 9849™*	219,75 €	
0207P	KWIK-STIK™ / 2	Penicillium rubens ATCC® 9179™*	76,80 €	formerly Penicillium chrysogenum; fungus
0207K	KWIK-STIK™ / 6	Penicillium rubens ATCC® 9179™*	207,50 €	formerly Penicillium chrysogenum; fungus
0207L	LYFO DISK® / 6	Penicillium rubens ATCC® 9179™*	192,40 €	formerly Penicillium chrysogenum; fungus
0535P	KWIK-STIK™ / 2	Penicillium variable ATCC® 32333™*	87,35 €	fungus
0535K	KWIK-STIK™ / 6	Penicillium variable ATCC® 32333™*	235,85 €	fungus
0535L	LYFO DISK® / 6	Penicillium variable ATCC® 32333™*	219,75 €	fungus
0102P	KWIK-STIK™ / 2	Peptoniphilus asaccharolyticus ATCC® 14963™*	76,80 €	
0102K	KWIK-STIK™ / 6	Peptoniphilus asaccharolyticus ATCC® 14963™*	207,50 €	
0102L	LYFO DISK® / 6	Peptoniphilus asaccharolyticus ATCC® 14963™*	192,40 €	
0849P	KWIK-STIK™ / 2	Peptoniphilus asaccharolyticus ATCC® 29743™*	76,80 €	
0849K	KWIK-STIK™ / 6	Peptoniphilus asaccharolyticus ATCC® 29743™*	207,50 €	
0849L	LYFO DISK® / 6	Peptoniphilus asaccharolyticus ATCC® 29743™*	192,40 €	
0322P	KWIK-STIK™ / 2	Peptostreptococcus anaerobius ATCC® 27337™*	76,80 €	
0322K	KWIK-STIK™ / 6	Peptostreptococcus anaerobius ATCC® 27337™*	207,50 €	
0322-CRM	Lab-Elite CRM™ / 1	Peptostreptococcus anaerobius ATCC® 27337™*	68,65 €	
0322L	LYFO DISK® / 6	Peptostreptococcus anaerobius ATCC® 27337™*	192,40 €	
0846P	KWIK-STIK™ / 2	Plesiomonas shigelloides ATCC® 14029™*	76,80 €	
0846K	KWIK-STIK™ / 6	Plesiomonas shigelloides ATCC® 14029™*	207,50 €	
0846L	LYFO DISK® / 6	Plesiomonas shigelloides ATCC® 14029™*	192,40 €	
0835P	KWIK-STIK™ / 2	Plesiomonas shigelloides ATCC® 51903™*	69,50 €	
0835K	KWIK-STIK™ / 6	Plesiomonas shigelloides ATCC® 51903™*	187,55 €	
0835L	LYFO DISK® / 6	Plesiomonas shigelloides ATCC® 51903™*	166,80 €	
0912P	KWIK-STIK™ / 2	Porphyromonas gingivalis ATCC® 33277™*	76,80 €	
0912K	KWIK-STIK™ / 6	Porphyromonas gingivalis ATCC® 33277™*	207,50 €	
0912L	LYFO DISK® / 6	Porphyromonas gingivalis ATCC® 33277™*	192,40 €	
0600P	KWIK-STIK™ / 2	Porphyromonas levii ATCC® 29147™*	76,80 €	
0600K	KWIK-STIK™ / 6	Porphyromonas levii ATCC® 29147™*	207,50 €	
0600L	LYFO DISK® / 6	Porphyromonas levii ATCC® 29147™*	192,40 €	
01187P	KWIK-STIK™ / 2	Prevotella intermedia ATCC® 25611™*	87,35 €	
01187K	KWIK-STIK™ / 6	Prevotella intermedia ATCC® 25611™*	235,85 €	
01187L	LYFO DISK® / 6	Prevotella intermedia ATCC® 25611™*	219,75 €	
0408P	KWIK-STIK™ / 2	Prevotella loescheii ATCC® 15930™*	87,35 €	
0408K	KWIK-STIK™ / 6	Prevotella loescheii ATCC® 15930™*	235,85 €	
0408L	LYFO DISK® / 6	Prevotella loescheii ATCC® 15930™*	219,75 €	
0110P	KWIK-STIK™ / 2	Prevotella melaninogenica ATCC® 25845™*	76,80 €	
0110K	KWIK-STIK™ / 6	Prevotella melaninogenica ATCC® 25845™*	207,50 €	
0110L	LYFO DISK® / 6	Prevotella melaninogenica ATCC® 25845™*	192,40 €	
0419A	EZ-Accu Shot™ / 5	Propionibacterium acnes ATCC® 11827™*	313,40 €	10-100 CFU/0,1ml
0419P	KWIK-STIK™ / 2	Propionibacterium acnes ATCC® 11827™*	76,80 €	
0419K	KWIK-STIK™ / 6	Propionibacterium acnes ATCC® 11827™*	207,50 €	
0419L	LYFO DISK® / 6	Propionibacterium acnes ATCC® 11827™*	192,40 €	
0170P	KWIK-STIK™ / 2	Propionibacterium acnes ATCC® 6919™*	87,35 €	
0170K	KWIK-STIK™ / 6	Propionibacterium acnes ATCC® 6919™*	235,85 €	
0170L	LYFO DISK® / 6	Propionibacterium acnes ATCC® 6919™*	219,75 €	
0355P	KWIK-STIK™ / 2	Proteus hauseri ATCC® 13315™*	60,45 €	
0355K	KWIK-STIK™ / 6	Proteus hauseri ATCC® 13315™*	161,00 €	
0355L	LYFO DISK® / 6	Proteus hauseri ATCC® 13315™*	141,10 €	
0440P	KWIK-STIK™ / 2	Proteus mirabilis ATCC® 12453™*	60,45 €	
0440K	KWIK-STIK™ / 6	Proteus mirabilis ATCC® 12453™*	161,00 €	
0440L	LYFO DISK® / 6	Proteus mirabilis ATCC® 12453™*	141,10 €	
01116P	KWIK-STIK™ / 2	Proteus mirabilis ATCC® 21100™*	76,80 €	
01116K	KWIK-STIK™ / 6	Proteus mirabilis ATCC® 21100™*	207,50 €	
01116L	LYFO DISK® / 6	Proteus mirabilis ATCC® 21100™*	192,40 €	
0690H	EZ-Hydro Shot™	Proteus mirabilis ATCC® 25933™*	247,10 €	20-100 CFU / pellet
0690P	KWIK-STIK™ / 2	Proteus mirabilis ATCC® 25933™*	76,80 €	
0690K	KWIK-STIK™ / 6	Proteus mirabilis ATCC® 25933™*	207,50 €	
0690L	LYFO DISK® / 6	Proteus mirabilis ATCC® 25933™*	192,40 €	
0321P	KWIK-STIK™ / 2	Proteus mirabilis ATCC® 29245™*	60,45 €	
0321K	KWIK-STIK™ / 6	Proteus mirabilis ATCC® 29245™*	161,00 €	
0321L	LYFO DISK® / 6	Proteus mirabilis ATCC® 29245™*	141,10 €	

Référence Microbiologics	Gamme	Souche	Prix de vente 2016 HT susceptible d'évoluer	Commentaire
0190P	KWIK-STIK™ / 2	Proteus mirabilis ATCC® 33583™*	76,80 €	
0190K	KWIK-STIK™ / 6	Proteus mirabilis ATCC® 33583™*	207,50 €	
0190L	LYFO DISK® / 6	Proteus mirabilis ATCC® 33583™*	192,40 €	
0944P	KWIK-STIK™ / 2	Proteus mirabilis ATCC® 35659™*	76,80 €	
0944K	KWIK-STIK™ / 6	Proteus mirabilis ATCC® 35659™*	207,50 €	
0944-CRM	Lab-Elite CRM™ / 1	Proteus mirabilis ATCC® 35659™*	68,65 €	
0944L	LYFO DISK® / 6	Proteus mirabilis ATCC® 35659™*	192,40 €	
0432P	KWIK-STIK™ / 2	Proteus mirabilis ATCC® 43071™*	60,45 €	
0432K	KWIK-STIK™ / 6	Proteus mirabilis ATCC® 43071™*	161,00 €	
0432L	LYFO DISK® / 6	Proteus mirabilis ATCC® 43071™*	141,10 €	
0607P	KWIK-STIK™ / 2	Proteus mirabilis ATCC® 7002™*	60,45 €	
0607K	KWIK-STIK™ / 6	Proteus mirabilis ATCC® 7002™*	161,00 €	
0607L	LYFO DISK® / 6	Proteus mirabilis ATCC® 7002™*	141,10 €	
0310P	KWIK-STIK™ / 2	Proteus mirabilis NCIMB 13283	76,80 €	
0310K	KWIK-STIK™ / 6	Proteus mirabilis NCIMB 13283	207,50 €	
0310L	LYFO DISK® / 6	Proteus mirabilis NCIMB 13283	192,40 €	
01168K	KWIK-STIK™ / 6	Proteus vulgaris ATCC® 9484™*	187,55 €	OX19 strain
01152P	KWIK-STIK™ / 2	Proteus vulgaris ATCC® 29905™*	76,80 €	
01152K	KWIK-STIK™ / 6	Proteus vulgaris ATCC® 29905™*	207,50 €	
01152L	LYFO DISK® / 6	Proteus vulgaris ATCC® 29905™*	192,40 €	
0300P	KWIK-STIK™ / 2	Proteus vulgaris ATCC® 33420™*	60,45 €	
0300K	KWIK-STIK™ / 6	Proteus vulgaris ATCC® 33420™*	161,00 €	
0300L	LYFO DISK® / 6	Proteus vulgaris ATCC® 33420™*	141,10 €	
0640P	KWIK-STIK™ / 2	Proteus vulgaris ATCC® 49132™*	60,45 €	
0640K	KWIK-STIK™ / 6	Proteus vulgaris ATCC® 49132™*	161,00 €	
0640L	LYFO DISK® / 6	Proteus vulgaris ATCC® 49132™*	141,10 €	
0459P	KWIK-STIK™ / 2	Proteus vulgaris ATCC® 6380™*	60,45 €	
0459K	KWIK-STIK™ / 6	Proteus vulgaris ATCC® 6380™*	161,00 €	
0459L	LYFO DISK® / 6	Proteus vulgaris ATCC® 6380™*	141,10 €	
0841P	KWIK-STIK™ / 2	Proteus vulgaris ATCC® 6896™*	60,45 €	
0841K	KWIK-STIK™ / 6	Proteus vulgaris ATCC® 6896™*	161,00 €	
0841L	LYFO DISK® / 6	Proteus vulgaris ATCC® 6896™*	141,10 €	
0691P	KWIK-STIK™ / 2	Proteus vulgaris ATCC® 8427™*	60,45 €	
0691K	KWIK-STIK™ / 6	Proteus vulgaris ATCC® 8427™*	161,00 €	
0691-CRM	Lab-Elite CRM™ / 1	Proteus vulgaris ATCC® 8427™*	68,65 €	
0691L	LYFO DISK® / 6	Proteus vulgaris ATCC® 8427™*	141,10 €	
01168P	KWIK-STIK™ / 2	Proteus vulgaris ATCC® 9484™*	69,50 €	OX19 strain
01168L	LYFO DISK® / 6	Proteus vulgaris ATCC® 9484™*	166,80 €	OX19 strain
0393P	KWIK-STIK™ / 2	Proteus vulgaris NCTC 4636	69,50 €	
0393K	KWIK-STIK™ / 6	Proteus vulgaris NCTC 4636	187,55 €	
0393L	LYFO DISK® / 6	Proteus vulgaris NCTC 4636	166,80 €	
0780P	KWIK-STIK™ / 2	Prototheca wickerhamii ATCC® 16529™*	76,80 €	
0780K	KWIK-STIK™ / 6	Prototheca wickerhamii ATCC® 16529™*	207,50 €	
0780L	LYFO DISK® / 6	Prototheca wickerhamii ATCC® 16529™*	192,40 €	
0834P	KWIK-STIK™ / 2	Providencia alcalifaciens ATCC® 51902™*	60,45 €	
0834K	KWIK-STIK™ / 6	Providencia alcalifaciens ATCC® 51902™*	161,00 €	
0834L	LYFO DISK® / 6	Providencia alcalifaciens ATCC® 51902™*	141,10 €	
0692P	KWIK-STIK™ / 2	Providencia alcalifaciens ATCC® 9886™*	69,50 €	
0692K	KWIK-STIK™ / 6	Providencia alcalifaciens ATCC® 9886™*	187,55 €	
0692L	LYFO DISK® / 6	Providencia alcalifaciens ATCC® 9886™*	166,80 €	
0997P	KWIK-STIK™ / 2	Providencia rettgeri ATCC® 9250™*	76,80 €	
0997K	KWIK-STIK™ / 6	Providencia rettgeri ATCC® 9250™*	207,50 €	
0997L	LYFO DISK® / 6	Providencia rettgeri ATCC® 9250™*	192,40 €	
0384P	KWIK-STIK™ / 2	Providencia stuartii ATCC® 33672™*	69,50 €	
0384K	KWIK-STIK™ / 6	Providencia stuartii ATCC® 33672™*	187,55 €	
0384L	LYFO DISK® / 6	Providencia stuartii ATCC® 33672™*	166,80 €	
0879P	KWIK-STIK™ / 2	Providencia stuartii ATCC® 49809™*	69,50 €	
0879K	KWIK-STIK™ / 6	Providencia stuartii ATCC® 49809™*	187,55 €	
0879L	LYFO DISK® / 6	Providencia stuartii ATCC® 49809™*	166,80 €	
0163P	KWIK-STIK™ / 2	Pseudoclavibacter helvolus ATCC® 51822™*	87,35 €	Formerly Microbacterium esteraromaticum
0163K	KWIK-STIK™ / 6	Pseudoclavibacter helvolus ATCC® 51822™*	235,85 €	Formerly Microbacterium esteraromaticum
0163L	LYFO DISK® / 6	Pseudoclavibacter helvolus ATCC® 51822™*	219,75 €	Formerly Microbacterium esteraromaticum
0416P	KWIK-STIK™ / 2	Pseudomonas aeruginosa ATCC® 10145™*	60,45 €	
0416K	KWIK-STIK™ / 6	Pseudomonas aeruginosa ATCC® 10145™*	161,00 €	
0416L	LYFO DISK® / 6	Pseudomonas aeruginosa ATCC® 10145™*	141,10 €	
01078P	KWIK-STIK™ / 2	Pseudomonas aeruginosa ATCC® 13388™*	87,35 €	
01078K	KWIK-STIK™ / 6	Pseudomonas aeruginosa ATCC® 13388™*	235,85 €	
01078L	LYFO DISK® / 6	Pseudomonas aeruginosa ATCC® 13388™*	219,75 €	
0693E3	Epower™ / 10	Pseudomonas aeruginosa ATCC® 15442™*	263,40 €	Pyocyanin not produced; Mean Assay Value: 1.0-9.9E+03 CFU per pellet
0693FPC	EZ-FPC™ / 10	Pseudomonas aeruginosa ATCC® 15442™*	285,00 €	Quantitative Preparations at a concentration of 1.0-9.9E+03 CFU per pellet; Pyocyanin not produced
0693P	KWIK-STIK™ / 2	Pseudomonas aeruginosa ATCC® 15442™*	69,50 €	Pyocyanin not produced

Référence Microbiologics	Gamme	Souche	Prix de vente 2016 HT susceptible d'évoluer	Commentaire
0693K	KWIK-STIK™ / 6	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC® 15442™*	187,55 €	Pyocyanin not produced
0693-CRM	Lab-Elite CRM™ / 1	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC® 15442™*	68,65 €	Pyocyanin not produced
0693L	LYFO DISK® / 6	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC® 15442™*	166,80 €	Pyocyanin not produced
0199P	KWIK-STIK™ / 2	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC® 19429™*	76,80 €	
0199K	KWIK-STIK™ / 6	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC® 19429™*	207,50 €	
0199L	LYFO DISK® / 6	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC® 19429™*	192,40 €	
0695P	KWIK-STIK™ / 2	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC® 25619™*	69,50 €	
0695K	KWIK-STIK™ / 6	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC® 25619™*	187,55 €	
0695L	LYFO DISK® / 6	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC® 25619™*	166,80 €	
0353E6	Epower™ / 10	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC® 27853™*	346,60 €	Mean Assay Value: 1.0-9.9E+06 CFU per pellet
0353E3	Epower™ / 10	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC® 27853™*	346,60 €	Mean Assay Value: 1.0-9.9E+03 CFU per pellet
0353P	KWIK-STIK™ / 2	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC® 27853™*	51,00 €	
0353K	KWIK-STIK™ / 6	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC® 27853™*	132,35 €	
0353-CRM	Lab-Elite CRM™ / 1	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC® 27853™*	68,65 €	
0353L	LYFO DISK® / 6	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC® 27853™*	113,80 €	
0975P	KWIK-STIK™ / 2	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC® 35032™*	69,50 €	
0975K	KWIK-STIK™ / 6	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC® 35032™*	187,55 €	
0975L	LYFO DISK® / 6	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC® 35032™*	166,80 €	
0182P	KWIK-STIK™ / 2	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC® 35554™*	76,80 €	
0182K	KWIK-STIK™ / 6	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC® 35554™*	207,50 €	
0182L	LYFO DISK® / 6	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC® 35554™*	192,40 €	
0484E7	Epower™ / 10	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC® 9027™*	346,60 €	Mean Assay Value: 1.0-9.9E+07 CFU per pellet
0484A	EZ-Accu Shot™ / 5	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC® 9027™*	313,40 €	10-100 CFU/0.1ml
0484-PEC	EZ-PEC™ / 20	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC® 9027™*	772,90 €	1.0x10 ⁵ to 1.0x10 ⁶ CFU per ml
0484P	KWIK-STIK™ / 2	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC® 9027™*	60,45 €	
0484K	KWIK-STIK™ / 6	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC® 9027™*	161,00 €	
0484-CRM	Lab-Elite CRM™ / 1	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC® 9027™*	68,65 €	
0484L	LYFO DISK® / 6	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC® 9027™*	141,10 €	
01009P	KWIK-STIK™ / 2	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC® 9721™*	60,45 €	
01009K	KWIK-STIK™ / 6	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC® 9721™*	161,00 €	
01009L	LYFO DISK® / 6	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC® 9721™*	141,10 €	
01010P	KWIK-STIK™ / 2	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC® BAA-1744™*	60,45 €	scheduled release date is 6/15/2009
01010K	KWIK-STIK™ / 6	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC® BAA-1744™*	161,00 €	scheduled release date is 6/15/2009
01010L	LYFO DISK® / 6	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC® BAA-1744™*	141,10 €	scheduled release date is 6/15/2009
0297P	KWIK-STIK™ / 2	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC® BAA-427™*	76,80 €	
0297K	KWIK-STIK™ / 6	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC® BAA-427™*	207,50 €	
0297L	LYFO DISK® / 6	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC® BAA-427™*	192,40 €	
0598P	KWIK-STIK™ / 2	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> NCIMB 12469	69,50 €	
0598K	KWIK-STIK™ / 6	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> NCIMB 12469	187,55 €	
0598L	LYFO DISK® / 6	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> NCIMB 12469	166,80 €	
0304P	KWIK-STIK™ / 2	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> NCIMB 8295	69,50 €	
0304K	KWIK-STIK™ / 6	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> NCIMB 8295	187,55 €	
0304L	LYFO DISK® / 6	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> NCIMB 8295	166,80 €	
0576P	KWIK-STIK™ / 2	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> NCIMB 8626	69,50 €	
0576K	KWIK-STIK™ / 6	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> NCIMB 8626	187,55 €	
0576L	LYFO DISK® / 6	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> NCIMB 8626	166,80 €	
0830P	KWIK-STIK™ / 2	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> NCTC 10662	76,80 €	
0830K	KWIK-STIK™ / 6	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> NCTC 10662	207,50 €	
0830L	LYFO DISK® / 6	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> NCTC 10662	192,40 €	
0241P	KWIK-STIK™ / 2	<i>Pseudomonas fluorescens</i> ATCC® 13525™*	76,80 €	
0241K	KWIK-STIK™ / 6	<i>Pseudomonas fluorescens</i> ATCC® 13525™*	207,50 €	
0241L	LYFO DISK® / 6	<i>Pseudomonas fluorescens</i> ATCC® 13525™*	192,40 €	
0168P	KWIK-STIK™ / 2	<i>Pseudomonas fluorescens</i> ATCC® 49642™*	87,35 €	
0168K	KWIK-STIK™ / 6	<i>Pseudomonas fluorescens</i> ATCC® 49642™*	235,85 €	
0168L	LYFO DISK® / 6	<i>Pseudomonas fluorescens</i> ATCC® 49642™*	219,75 €	
0880P	KWIK-STIK™ / 2	<i>Pseudomonas fluorescens</i> ATCC® 49838™*	69,50 €	
0880K	KWIK-STIK™ / 6	<i>Pseudomonas fluorescens</i> ATCC® 49838™*	187,55 €	
0880L	LYFO DISK® / 6	<i>Pseudomonas fluorescens</i> ATCC® 49838™*	166,80 €	
01194P	KWIK-STIK™ / 2	<i>Pseudomonas fragi</i> ATCC® 4973™*	60,45 €	
01194K	KWIK-STIK™ / 6	<i>Pseudomonas fragi</i> ATCC® 4973™*	161,00 €	
01194L	LYFO DISK® / 6	<i>Pseudomonas fragi</i> ATCC® 4973™*	141,10 €	
0524P	KWIK-STIK™ / 2	<i>Pseudomonas protegens</i> (G) ATCC® 17386™*	76,80 €	Formerly <i>Pseudomonas fluorescens</i> ; biotype G
0524K	KWIK-STIK™ / 6	<i>Pseudomonas protegens</i> (G) ATCC® 17386™*	207,50 €	Formerly <i>Pseudomonas fluorescens</i> ; biotype G
0524L	LYFO DISK® / 6	<i>Pseudomonas protegens</i> (G) ATCC® 17386™*	192,40 €	Formerly <i>Pseudomonas fluorescens</i> ; biotype G
0702P	KWIK-STIK™ / 2	<i>Pseudomonas putida</i> ATCC® 31483™*	87,35 €	
0702K	KWIK-STIK™ / 6	<i>Pseudomonas putida</i> ATCC® 31483™*	235,85 €	
0702L	LYFO DISK® / 6	<i>Pseudomonas putida</i> ATCC® 31483™*	219,75 €	
0627P	KWIK-STIK™ / 2	<i>Pseudomonas putida</i> ATCC® 49128™*	69,50 €	
0627K	KWIK-STIK™ / 6	<i>Pseudomonas putida</i> ATCC® 49128™*	187,55 €	
0627L	LYFO DISK® / 6	<i>Pseudomonas putida</i> ATCC® 49128™*	166,80 €	
0162P	KWIK-STIK™ / 2	<i>Pseudomonas species</i> ATCC® 51821™*	87,35 €	
0162K	KWIK-STIK™ / 6	<i>Pseudomonas species</i> ATCC® 51821™*	235,85 €	
0162L	LYFO DISK® / 6	<i>Pseudomonas species</i> ATCC® 51821™*	219,75 €	
0853P	KWIK-STIK™ / 2	<i>Pseudomonas stutzeri</i> ATCC® 17588™*	76,80 €	

Référence Microbiologics	Gamme	Souche	Prix de vente 2016 HT susceptible d'évoluer	Commentaire
0853K	KWIK-STIK™ / 6	<i>Pseudomonas stutzeri</i> ATCC® 17588™*	207,50 €	
0853L	LYFO DISK® / 6	<i>Pseudomonas stutzeri</i> ATCC® 17588™*	192,40 €	
0641P	KWIK-STIK™ / 2	<i>Ralstonia insidiosa</i> ATCC® 49129™*	69,50 €	formerly <i>Ralstonia pickettii</i>
0641K	KWIK-STIK™ / 6	<i>Ralstonia insidiosa</i> ATCC® 49129™*	187,55 €	formerly <i>Ralstonia pickettii</i>
0641L	LYFO DISK® / 6	<i>Ralstonia insidiosa</i> ATCC® 49129™*	166,80 €	formerly <i>Ralstonia pickettii</i>
01159P	KWIK-STIK™ / 2	<i>Ralstonia pickettii</i> ATCC® 27511™*	76,80 €	
01159K	KWIK-STIK™ / 6	<i>Ralstonia pickettii</i> ATCC® 27511™*	207,50 €	
01159L	LYFO DISK® / 6	<i>Ralstonia pickettii</i> ATCC® 27511™*	192,40 €	
01197P	KWIK-STIK™ / 2	<i>Ralstonia pickettii</i> ATCC® 700591™*	76,80 €	Testing filters
01197K	KWIK-STIK™ / 6	<i>Ralstonia pickettii</i> ATCC® 700591™*	207,50 €	Testing filters
01197L	LYFO DISK® / 6	<i>Ralstonia pickettii</i> ATCC® 700591™*	192,40 €	Testing filters
0191P	KWIK-STIK™ / 2	<i>Raoultella terrigena</i> ATCC® 33257™*	87,35 €	
0191K	KWIK-STIK™ / 6	<i>Raoultella terrigena</i> ATCC® 33257™*	235,85 €	
0191L	LYFO DISK® / 6	<i>Raoultella terrigena</i> ATCC® 33257™*	219,75 €	
01198P	KWIK-STIK™ / 2	<i>Rhizobium radiobacter</i> ATCC® BAA-101™*	87,35 €	
01198K	KWIK-STIK™ / 6	<i>Rhizobium radiobacter</i> ATCC® BAA-101™*	235,85 €	
01198L	LYFO DISK® / 6	<i>Rhizobium radiobacter</i> ATCC® BAA-101™*	219,75 €	
0208P	KWIK-STIK™ / 2	<i>Rhizopus stolonifer</i> (-) ATCC® 6227a™*	87,35 €	fungus
0208K	KWIK-STIK™ / 6	<i>Rhizopus stolonifer</i> (-) ATCC® 6227a™*	235,85 €	fungus
0208L	LYFO DISK® / 6	<i>Rhizopus stolonifer</i> (-) ATCC® 6227a™*	219,75 €	fungus
0209P	KWIK-STIK™ / 2	<i>Rhizopus stolonifer</i> (+) ATCC® 6227b™*	87,35 €	fungus
0209K	KWIK-STIK™ / 6	<i>Rhizopus stolonifer</i> (+) ATCC® 6227b™*	235,85 €	fungus
0209L	LYFO DISK® / 6	<i>Rhizopus stolonifer</i> (+) ATCC® 6227b™*	219,75 €	fungus
0697P	KWIK-STIK™ / 2	<i>Rhodococcus equi</i> ATCC® 6939™*	76,80 €	recommended for CAMP test for <i>Listeria monocytogenes</i>
0697K	KWIK-STIK™ / 6	<i>Rhodococcus equi</i> ATCC® 6939™*	207,50 €	recommended for CAMP test for <i>Listeria monocytogenes</i>
0697L	LYFO DISK® / 6	<i>Rhodococcus equi</i> ATCC® 6939™*	192,40 €	recommended for CAMP test for <i>Listeria monocytogenes</i>
0143P	KWIK-STIK™ / 2	<i>Rhodotorula mucilaginosa</i> ATCC® 66034™*	76,80 €	
0143K	KWIK-STIK™ / 6	<i>Rhodotorula mucilaginosa</i> ATCC® 66034™*	207,50 €	
0143L	LYFO DISK® / 6	<i>Rhodotorula mucilaginosa</i> ATCC® 66034™*	192,40 €	
01066P	KWIK-STIK™ / 2	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> ATCC® 18824™*	87,35 €	
01066K	KWIK-STIK™ / 6	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> ATCC® 18824™*	235,85 €	
01066L	LYFO DISK® / 6	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> ATCC® 18824™*	219,75 €	
0534P	KWIK-STIK™ / 2	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> ATCC® 4098™*	76,80 €	
0534K	KWIK-STIK™ / 6	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> ATCC® 4098™*	207,50 €	
0534L	LYFO DISK® / 6	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> ATCC® 4098™*	192,40 €	
01205P	KWIK-STIK™ / 2	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> ATCC® 7753™*	69,50 €	Inositol deficiency
01205K	KWIK-STIK™ / 6	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> ATCC® 7753™*	187,55 €	Inositol deficiency
01205L	LYFO DISK® / 6	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> ATCC® 7753™*	166,80 €	Inositol deficiency
0186P	KWIK-STIK™ / 2	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> ATCC® 7754™*	87,35 €	
0186K	KWIK-STIK™ / 6	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> ATCC® 7754™*	235,85 €	
0186L	LYFO DISK® / 6	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> ATCC® 7754™*	219,75 €	
0900P	KWIK-STIK™ / 2	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> ATCC® 9080™*	76,80 €	
0900K	KWIK-STIK™ / 6	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> ATCC® 9080™*	207,50 €	
0900L	LYFO DISK® / 6	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> ATCC® 9080™*	192,40 €	
0699E3	Epower™ / 10	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> ATCC® 9763™*	263,40 €	Mean Assay Value: 1.0-9.9E+03 CFU per pellet
0699A	EZ-Accu Shot™ / 5	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> ATCC® 9763™*	313,40 €	10-100 CFU/0,1ml
0699P	KWIK-STIK™ / 2	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> ATCC® 9763™*	76,80 €	
0699K	KWIK-STIK™ / 6	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> ATCC® 9763™*	207,50 €	
0699-CRM	Lab-Elite CRM™ / 1	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> ATCC® 9763™*	68,65 €	
0699L	LYFO DISK® / 6	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> ATCC® 9763™*	192,40 €	
0736P	KWIK-STIK™ / 2	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> NCYC 79	76,80 €	
0736K	KWIK-STIK™ / 6	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> NCYC 79	207,50 €	
0736L	LYFO DISK® / 6	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> NCYC 79	192,40 €	
0374P	KWIK-STIK™ / 2	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> NCYC 853	76,80 €	
0374K	KWIK-STIK™ / 6	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> NCYC 853	207,50 €	
0374L	LYFO DISK® / 6	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> NCYC 853	192,40 €	
0698E3	Epower™ / 10	<i>Saccharomyces kudriavzevii</i> ATCC® 2601™*	346,60 €	Mean Assay Value: 1.0-9.9E+03 CFU per pellet; Formerly <i>Saccharomyces cerevisiae</i>
0698E3-CRM	Epower™ / 10 CRM	<i>Saccharomyces kudriavzevii</i> ATCC® 2601™*	512,40 €	Mean Assay Value: 1.0-9.9E+03 CFU per pellet; Formerly <i>Saccharomyces cerevisiae</i>
0698FPC	EZ-FPC™ / 10	<i>Saccharomyces kudriavzevii</i> ATCC® 2601™*	285,00 €	Quantitative Preparations at a concentration of 1.0-9.9E+03 CFU per pellet; Formerly <i>Saccharomyces cerevisiae</i>
0698P	KWIK-STIK™ / 2	<i>Saccharomyces kudriavzevii</i> ATCC® 2601™*	76,80 €	Formerly <i>Saccharomyces cerevisiae</i>
0698K	KWIK-STIK™ / 6	<i>Saccharomyces kudriavzevii</i> ATCC® 2601™*	207,50 €	Formerly <i>Saccharomyces cerevisiae</i>
0698L	LYFO DISK® / 6	<i>Saccharomyces kudriavzevii</i> ATCC® 2601™*	192,40 €	Formerly <i>Saccharomyces cerevisiae</i>
0595FPC	EZ-FPC™ / 10	<i>Salmonella bongori</i> ATCC® 43975™*	285,00 €	Qualitative Preparations at a concentration of 1.0-9.9E+02 CFU per pellet
0595P	KWIK-STIK™ / 2	<i>Salmonella bongori</i> ATCC® 43975™*	87,35 €	
0595K	KWIK-STIK™ / 6	<i>Salmonella bongori</i> ATCC® 43975™*	235,85 €	
0595L	LYFO DISK® / 6	<i>Salmonella bongori</i> ATCC® 43975™*	219,75 €	

Référence Microbiologics	Gamme	Souche	Prix de vente 2016 HT susceptible d'évoluer	Commentaire
0901P	KWIK-STIK™ / 2	Salmonella enterica subsp. arizonae ATCC® 13314™*	76,80 €	
0901K	KWIK-STIK™ / 6	Salmonella enterica subsp. arizonae ATCC® 13314™*	207,50 €	
0901L	LYFO DISK® / 6	Salmonella enterica subsp. arizonae ATCC® 13314™*	192,40 €	
01054P	KWIK-STIK™ / 2	Salmonella enterica subsp. diarizonae ATCC® 12325™*	87,35 €	lactose broth positive; H2S positive
01054K	KWIK-STIK™ / 6	Salmonella enterica subsp. diarizonae ATCC® 12325™*	235,85 €	lactose broth positive; H2S positive
01054L	LYFO DISK® / 6	Salmonella enterica subsp. diarizonae ATCC® 12325™*	219,75 €	lactose broth positive; H2S positive
01045P	KWIK-STIK™ / 2	Salmonella enterica subsp. diarizonae ATCC® 29934™*	87,35 €	lactose broth positive; H2S negative
01045K	KWIK-STIK™ / 6	Salmonella enterica subsp. diarizonae ATCC® 29934™*	235,85 €	lactose broth positive; H2S negative
01045L	LYFO DISK® / 6	Salmonella enterica subsp. diarizonae ATCC® 29934™*	219,75 €	lactose broth positive; H2S negative
0501P	KWIK-STIK™ / 2	Salmonella enterica subsp. enterica ATCC® 51741™*	76,80 €	H2S negative; formerly Salmonella enterica subsp. enterica serovar Infantis
0501K	KWIK-STIK™ / 6	Salmonella enterica subsp. enterica ATCC® 51741™*	207,50 €	H2S negative; formerly Salmonella enterica subsp. enterica serovar Infantis
0501L	LYFO DISK® / 6	Salmonella enterica subsp. enterica ATCC® 51741™*	192,40 €	H2S negative; formerly Salmonella enterica subsp. enterica serovar Infantis
0817E2	Epower™ / 10	Salmonella enterica subsp. enterica serovar Abaetetuba ATCC® 35640™*	263,40 €	Mean Assay Value: 1.0-9.9E+02 CFU per pellet
0817FPC	EZ-FPC™ / 10	Salmonella enterica subsp. enterica serovar Abaetetuba ATCC® 35640™*	285,00 €	Qualitative Preparations at a concentration of 1.0-9.9E+02 CFU per pellet
0817P	KWIK-STIK™ / 2	Salmonella enterica subsp. enterica serovar Abaetetuba ATCC® 35640™*	76,80 €	
0817K	KWIK-STIK™ / 6	Salmonella enterica subsp. enterica serovar Abaetetuba ATCC® 35640™*	207,50 €	
0817L	LYFO DISK® / 6	Salmonella enterica subsp. enterica serovar Abaetetuba ATCC® 35640™*	192,40 €	
0826P	KWIK-STIK™ / 2	Salmonella enterica subsp. enterica serovar Abaetetuba Silliker® SLR156	69,50 €	
0826K	KWIK-STIK™ / 6	Salmonella enterica subsp. enterica serovar Abaetetuba Silliker® SLR156	187,55 €	
0826L	LYFO DISK® / 6	Salmonella enterica subsp. enterica serovar Abaetetuba Silliker® SLR156	166,80 €	
0890E7	Epower™ / 10	Salmonella enterica subsp. enterica serovar Abony NCTC 6017	263,40 €	serovar Abony; Mean Assay Value: 1.0-9.9E+07 CFU per pellet
0890E7-CRM	Epower™ / 10 CRM	Salmonella enterica subsp. enterica serovar Abony NCTC 6017	512,40 €	serovar Abony; Mean Assay Value: 1.0-9.9E+07 CFU per pellet
0890A	EZ-Accu Shot™ / 5	Salmonella enterica subsp. enterica serovar Abony NCTC 6017	313,40 €	10-100 CFU/0,1ml serovar Abony
0890P	KWIK-STIK™ / 2	Salmonella enterica subsp. enterica serovar Abony NCTC 6017	69,50 €	serovar Abony
0890K	KWIK-STIK™ / 6	Salmonella enterica subsp. enterica serovar Abony NCTC 6017	187,55 €	serovar Abony
0890-CRM	Lab-Elite CRM™ / 1	Salmonella enterica subsp. enterica serovar Abony NCTC 6017	68,65 €	
0890L	LYFO DISK® / 6	Salmonella enterica subsp. enterica serovar Abony NCTC 6017	166,80 €	serovar Abony
01056P	KWIK-STIK™ / 2	Salmonella enterica subsp. enterica serovar Abortusequi ATCC® 9842™*	87,35 €	formerly Salmonella enterica subsp. enterica Abortusequi; H2S negative
01056K	KWIK-STIK™ / 6	Salmonella enterica subsp. enterica serovar Abortusequi ATCC® 9842™*	235,85 €	formerly Salmonella enterica subsp. enterica Abortusequi; H2S negative
01056L	LYFO DISK® / 6	Salmonella enterica subsp. enterica serovar Abortusequi ATCC® 9842™*	219,75 €	formerly Salmonella enterica subsp. enterica Abortusequi; H2S negative
01154P	KWIK-STIK™ / 2	Salmonella enterica subsp. enterica serovar Agona ATCC® 51957™	76,80 €	
01154K	KWIK-STIK™ / 6	Salmonella enterica subsp. enterica serovar Agona ATCC® 51957™	207,50 €	
01154L	LYFO DISK® / 6	Salmonella enterica subsp. enterica serovar Agona ATCC® 51957™	192,40 €	
0346P	KWIK-STIK™ / 2	Salmonella enterica subsp. enterica serovar Anatum ATCC® 9270™*	69,50 €	group E
0346K	KWIK-STIK™ / 6	Salmonella enterica subsp. enterica serovar Anatum ATCC® 9270™*	187,55 €	group E
0346L	LYFO DISK® / 6	Salmonella enterica subsp. enterica serovar Anatum ATCC® 9270™*	166,80 €	group E
0902A	EZ-Accu Shot™ / 5	Salmonella enterica subsp. enterica serovar Choleraesuis ATCC® 10708™*	313,40 €	10-100 CFU/0,1ml H2S negative
0902P	KWIK-STIK™ / 2	Salmonella enterica subsp. enterica serovar Choleraesuis ATCC® 10708™*	69,50 €	H2S negative
0902K	KWIK-STIK™ / 6	Salmonella enterica subsp. enterica serovar Choleraesuis ATCC® 10708™*	187,55 €	H2S negative
0902L	LYFO DISK® / 6	Salmonella enterica subsp. enterica serovar Choleraesuis ATCC® 10708™*	166,80 €	H2S negative
0343P	KWIK-STIK™ / 2	Salmonella enterica subsp. enterica serovar Choleraesuis ATCC® 7001™*	69,50 €	group C; H2S negative
0343K	KWIK-STIK™ / 6	Salmonella enterica subsp. enterica serovar Choleraesuis ATCC® 7001™*	187,55 €	group C; H2S negative

Référence Microbiologiques	Gamme	Souche	Prix de vente 2016 HT susceptible d'évoluer	Commentaire
0343-CRM	Lab-Elite CRM™ / 1	Salmonella enterica subsp. enterica serovar Choleraesuis ATCC® 7001™*	68,65 €	group C; H2S negative
0343L	LYFO DISK® / 6	Salmonella enterica subsp. enterica serovar Choleraesuis ATCC® 7001™*	166,80 €	group C; H2S negative
0903P	KWIK-STIK™ / 2	Salmonella enterica subsp. enterica serovar Choleraesuis var Kunzendorf ATCC® 12011™*	76,80 €	
0903K	KWIK-STIK™ / 6	Salmonella enterica subsp. enterica serovar Choleraesuis var Kunzendorf ATCC® 12011™*	207,50 €	
0903L	LYFO DISK® / 6	Salmonella enterica subsp. enterica serovar Choleraesuis var Kunzendorf ATCC® 12011™*	192,40 €	
0345P	KWIK-STIK™ / 2	Salmonella enterica subsp. enterica serovar Enteritidis ATCC® 13076™*	69,50 €	group D
0345K	KWIK-STIK™ / 6	Salmonella enterica subsp. enterica serovar Enteritidis ATCC® 13076™*	187,55 €	group D
0345L	LYFO DISK® / 6	Salmonella enterica subsp. enterica serovar Enteritidis ATCC® 13076™*	166,80 €	group D
01103P	KWIK-STIK™ / 2	Salmonella enterica subsp. enterica serovar Enteritidis ATCC® 49223™*	87,35 €	
01103K	KWIK-STIK™ / 6	Salmonella enterica subsp. enterica serovar Enteritidis ATCC® 49223™*	235,85 €	
01103L	LYFO DISK® / 6	Salmonella enterica subsp. enterica serovar Enteritidis ATCC® 49223™*	219,75 €	
01151P	KWIK-STIK™ / 2	Salmonella enterica subsp. enterica serovar Heidelberg ATCC® 8326™*	76,80 €	Antigenic properties: I 4,5,12:r:1,2
01151K	KWIK-STIK™ / 6	Salmonella enterica subsp. enterica serovar Heidelberg ATCC® 8326™*	207,50 €	Antigenic properties: I 4,5,12:r:1,2
01151L	LYFO DISK® / 6	Salmonella enterica subsp. enterica serovar Heidelberg ATCC® 8326™*	192,40 €	Antigenic properties: I 4,5,12:r:1,2
01095P	KWIK-STIK™ / 2	Salmonella enterica subsp. enterica serovar Newport ATCC® 6962™*	76,80 €	
01095K	KWIK-STIK™ / 6	Salmonella enterica subsp. enterica serovar Newport ATCC® 6962™*	207,50 €	
01095L	LYFO DISK® / 6	Salmonella enterica subsp. enterica serovar Newport ATCC® 6962™*	192,40 €	
0341P	KWIK-STIK™ / 2	Salmonella enterica subsp. enterica serovar Paratyphi A ATCC® 9150™*	69,50 €	group A; H2S negative
0341K	KWIK-STIK™ / 6	Salmonella enterica subsp. enterica serovar Paratyphi A ATCC® 9150™*	187,55 €	group A; H2S negative
0341L	LYFO DISK® / 6	Salmonella enterica subsp. enterica serovar Paratyphi A ATCC® 9150™*	166,80 €	group A; H2S negative
01170P	KWIK-STIK™ / 2	Salmonella enterica subsp. enterica serovar Paratyphi B ATCC® 8759™*	69,50 €	
01170K	KWIK-STIK™ / 6	Salmonella enterica subsp. enterica serovar Paratyphi B ATCC® 8759™*	187,55 €	
01170L	LYFO DISK® / 6	Salmonella enterica subsp. enterica serovar Paratyphi B ATCC® 8759™*	166,80 €	
0851P	KWIK-STIK™ / 2	Salmonella enterica subsp. enterica serovar Poona NCTC 4840	69,50 €	
0851K	KWIK-STIK™ / 6	Salmonella enterica subsp. enterica serovar Poona NCTC 4840	187,55 €	
0851L	LYFO DISK® / 6	Salmonella enterica subsp. enterica serovar Poona NCTC 4840	166,80 €	
0604P	KWIK-STIK™ / 2	Salmonella enterica subsp. enterica serovar Pullorum ATCC® 13036™*	76,80 €	H2S negative
0604K	KWIK-STIK™ / 6	Salmonella enterica subsp. enterica serovar Pullorum ATCC® 13036™*	207,50 €	H2S negative
0604L	LYFO DISK® / 6	Salmonella enterica subsp. enterica serovar Pullorum ATCC® 13036™*	192,40 €	H2S negative
0344P	KWIK-STIK™ / 2	Salmonella enterica subsp. enterica serovar Tallahassee ATCC® 12002™*	76,80 €	
0344K	KWIK-STIK™ / 6	Salmonella enterica subsp. enterica serovar Tallahassee ATCC® 12002™*	207,50 €	
0344L	LYFO DISK® / 6	Salmonella enterica subsp. enterica serovar Tallahassee ATCC® 12002™*	192,40 €	
0421E3	Epower™ / 10	Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium ATCC® 13311™*	346,60 €	Mean Assay Value: 1.0-9.9E+03 CFU per pellet
0421E7	Epower™ / 10	Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium ATCC® 13311™*	346,60 €	Mean Assay Value: 1.0-9.9E+07 CFU per pellet
0421E3-CRM	Epower™ / 10 CRM	Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium ATCC® 13311™*	512,40 €	Mean Assay Value: 1.0-9.9E+03 CFU per pellet
0421E7-CRM	Epower™ / 10 CRM	Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium ATCC® 13311™*	512,40 €	Mean Assay Value: 1.0-9.9E+07 CFU per pellet
0421A	EZ-Accu Shot™ / 5	Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium ATCC® 13311™*	313,40 €	10-100 CFU/0,1ml
0421P	KWIK-STIK™ / 2	Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium ATCC® 13311™*	76,80 €	

Référence Microbiologiques	Gamme	Souche	Prix de vente 2016 HT susceptible d'évoluer	Commentaire
0421K	KWIK-STIK™ / 6	Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium ATCC® 13311™*	207,50 €	
0421-CRM	Lab-Elite CRM™ / 1	Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium ATCC® 13311™*	68,65 €	
0421L	LYFO DISK® / 6	Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium ATCC® 13311™*	192,40 €	
0363E4	Epower™ / 10	Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium ATCC® 14028™*	263,40 €	Mean Assay Value: 1.0-9.9E+04 CFU per pellet
0363E3	Epower™ / 10	Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium ATCC® 14028™*	346,60 €	Mean Assay Value: 1.0-9.9E+03 CFU per pellet
0363E4-CRM	Epower™ / 10 CRM	Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium ATCC® 14028™*	512,40 €	Mean Assay Value: 1.0-9.9E+04 CFU per pellet
0363E3-CRM	Epower™ / 10 CRM	Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium ATCC® 14028™*	512,40 €	Mean Assay Value: 1.0-9.9E+03 CFU per pellet
0363A	EZ-Accu Shot™ / 5	Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium ATCC® 14028™*	313,40 €	10-100 CFU/0,1ml
0363P	KWIK-STIK™ / 2	Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium ATCC® 14028™*	69,50 €	
0363K	KWIK-STIK™ / 6	Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium ATCC® 14028™*	187,55 €	
0363-CRM	Lab-Elite CRM™ / 1	Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium ATCC® 14028™*	68,65 €	
0363L	LYFO DISK® / 6	Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium ATCC® 14028™*	166,80 €	
0253P	KWIK-STIK™ / 2	Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium ATCC® 25241™*	69,50 €	
0253K	KWIK-STIK™ / 6	Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium ATCC® 25241™*	187,55 €	
0253L	LYFO DISK® / 6	Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium ATCC® 25241™*	166,80 €	
0541P	KWIK-STIK™ / 2	Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium ATCC® 29629™*	87,35 €	H2S negative
0541K	KWIK-STIK™ / 6	Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium ATCC® 29629™*	235,85 €	H2S negative
0541L	LYFO DISK® / 6	Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium ATCC® 29629™*	219,75 €	H2S negative
0292P	KWIK-STIK™ / 2	Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium ATCC® 49416™*	69,50 €	highly mutable; recommended for Ames test
0292K	KWIK-STIK™ / 6	Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium ATCC® 49416™*	187,55 €	highly mutable; recommended for Ames test
0292L	LYFO DISK® / 6	Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium ATCC® 49416™*	166,80 €	highly mutable; recommended for Ames test
0180P	KWIK-STIK™ / 2	Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium ATCC® 51812™*	76,80 €	
0180K	KWIK-STIK™ / 6	Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium ATCC® 51812™*	207,50 €	
0180L	LYFO DISK® / 6	Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium ATCC® 51812™*	192,40 €	
0301P	KWIK-STIK™ / 2	Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium NCIMB 13284	76,80 €	
0301K	KWIK-STIK™ / 6	Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium NCIMB 13284	207,50 €	
0301L	LYFO DISK® / 6	Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium NCIMB 13284	192,40 €	
0340P	KWIK-STIK™ / 2	Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium NCTC 74	76,80 €	
0340K	KWIK-STIK™ / 6	Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium NCTC 74	207,50 €	
0340L	LYFO DISK® / 6	Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium NCTC 74	192,40 €	
0342P	KWIK-STIK™ / 2	Salmonella enterica subsp. enterica serovar Vellore ATCC® 15611™*	76,80 €	group B
0342K	KWIK-STIK™ / 6	Salmonella enterica subsp. enterica serovar Vellore ATCC® 15611™*	207,50 €	group B
0342L	LYFO DISK® / 6	Salmonella enterica subsp. enterica serovar Vellore ATCC® 15611™*	192,40 €	group B
01087P	KWIK-STIK™ / 2	Salmonella enterica subsp. salamae serotype Tranaroa NCTC 10252	76,80 €	serotype Tranaroa
01087K	KWIK-STIK™ / 6	Salmonella enterica subsp. salamae serotype Tranaroa NCTC 10252	207,50 €	serotype Tranaroa
01087L	LYFO DISK® / 6	Salmonella enterica subsp. salamae serotype Tranaroa NCTC 10252	192,40 €	serotype Tranaroa
0171P	KWIK-STIK™ / 2	Scopulariopsis acremonium ATCC® 58636™*	87,35 €	fungus
0171K	KWIK-STIK™ / 6	Scopulariopsis acremonium ATCC® 58636™*	235,85 €	fungus
0171L	LYFO DISK® / 6	Scopulariopsis acremonium ATCC® 58636™*	219,75 €	fungus
0838P	KWIK-STIK™ / 2	Serratia liquefaciens ATCC® 27592™*	69,50 €	

Référence Microbiologics	Gamme	Souche	Prix de vente 2016 HT susceptible d'évoluer	Commentaire
0838K	KWIK-STIK™ / 6	Serratia liquefaciens ATCC® 27592™*	187,55 €	
0838L	LYFO DISK® / 6	Serratia liquefaciens ATCC® 27592™*	166,80 €	
0247P	KWIK-STIK™ / 2	Serratia marcescens ATCC® 13880™*	76,80 €	
0247K	KWIK-STIK™ / 6	Serratia marcescens ATCC® 13880™*	207,50 €	
0247L	LYFO DISK® / 6	Serratia marcescens ATCC® 13880™*	192,40 €	
0506P	KWIK-STIK™ / 2	Serratia marcescens ATCC® 14041™*	76,80 €	pigmented
0506K	KWIK-STIK™ / 6	Serratia marcescens ATCC® 14041™*	207,50 €	pigmented
0506L	LYFO DISK® / 6	Serratia marcescens ATCC® 14041™*	192,40 €	pigmented
0806P	KWIK-STIK™ / 2	Serratia marcescens ATCC® 14756™*	76,80 €	pigmented
0806K	KWIK-STIK™ / 6	Serratia marcescens ATCC® 14756™*	207,50 €	pigmented
0806L	LYFO DISK® / 6	Serratia marcescens ATCC® 14756™*	192,40 €	pigmented
0216P	KWIK-STIK™ / 2	Serratia marcescens ATCC® 43861™*	69,50 €	
0216K	KWIK-STIK™ / 6	Serratia marcescens ATCC® 43861™*	187,55 €	
0216L	LYFO DISK® / 6	Serratia marcescens ATCC® 43861™*	166,80 €	
0262H	EZ-Hydro Shot™	Serratia marcescens ATCC® 43862™*	247,10 €	20-100 CFU / pellet
0262P	KWIK-STIK™ / 2	Serratia marcescens ATCC® 43862™*	69,50 €	
0262K	KWIK-STIK™ / 6	Serratia marcescens ATCC® 43862™*	187,55 €	
0262L	LYFO DISK® / 6	Serratia marcescens ATCC® 43862™*	166,80 €	
0354P	KWIK-STIK™ / 2	Serratia marcescens ATCC® 8100™*	69,50 €	
0354K	KWIK-STIK™ / 6	Serratia marcescens ATCC® 8100™*	187,55 €	
0354L	LYFO DISK® / 6	Serratia marcescens ATCC® 8100™*	166,80 €	
01146P	KWIK-STIK™ / 2	Serratia marcescens NCTC 9743	69,50 €	
01146K	KWIK-STIK™ / 6	Serratia marcescens NCTC 9743	187,55 €	
01146L	LYFO DISK® / 6	Serratia marcescens NCTC 9743	166,80 €	
0638P	KWIK-STIK™ / 2	Shewanella haliotis ATCC® 49138™*	69,50 €	formerly Shewanella putrefaciens
0638K	KWIK-STIK™ / 6	Shewanella haliotis ATCC® 49138™*	187,55 €	formerly Shewanella putrefaciens
0638L	LYFO DISK® / 6	Shewanella haliotis ATCC® 49138™*	166,80 €	formerly Shewanella putrefaciens
0888P	KWIK-STIK™ / 2	Shewanella putrefaciens ATCC® 8071™*	76,80 €	
0888K	KWIK-STIK™ / 6	Shewanella putrefaciens ATCC® 8071™*	207,50 €	
0888L	LYFO DISK® / 6	Shewanella putrefaciens ATCC® 8071™*	192,40 €	
0349P	KWIK-STIK™ / 2	Shigella boydii ATCC® 9207™*	69,50 €	serotype 1
0349K	KWIK-STIK™ / 6	Shigella boydii ATCC® 9207™*	187,55 €	serotype 1
0349L	LYFO DISK® / 6	Shigella boydii ATCC® 9207™*	166,80 €	serotype 1
0356P	KWIK-STIK™ / 2	Shigella flexneri ATCC® 12022™*	69,50 €	serotype 2b
0356K	KWIK-STIK™ / 6	Shigella flexneri ATCC® 12022™*	187,55 €	serotype 2b
0356L	LYFO DISK® / 6	Shigella flexneri ATCC® 12022™*	166,80 €	serotype 2b
0348P	KWIK-STIK™ / 2	Shigella flexneri ATCC® 9199™*	69,50 €	serotype 1a
0348K	KWIK-STIK™ / 6	Shigella flexneri ATCC® 9199™*	187,55 €	serotype 1a
0348L	LYFO DISK® / 6	Shigella flexneri ATCC® 9199™*	166,80 €	serotype 1a
0303P	KWIK-STIK™ / 2	Shigella sonnei ATCC® 25931™*	69,50 €	
0303K	KWIK-STIK™ / 6	Shigella sonnei ATCC® 25931™*	187,55 €	
0303L	LYFO DISK® / 6	Shigella sonnei ATCC® 25931™*	166,80 €	
0350P	KWIK-STIK™ / 2	Shigella sonnei ATCC® 29930™*	76,80 €	
0350K	KWIK-STIK™ / 6	Shigella sonnei ATCC® 29930™*	207,50 €	
0350L	LYFO DISK® / 6	Shigella sonnei ATCC® 29930™*	192,40 €	
0446P	KWIK-STIK™ / 2	Shigella sonnei ATCC® 9290™*	60,45 €	
0446K	KWIK-STIK™ / 6	Shigella sonnei ATCC® 9290™*	161,00 €	
0446L	LYFO DISK® / 6	Shigella sonnei ATCC® 9290™*	141,10 €	
0705P	KWIK-STIK™ / 2	Shigella sonnei NCTC 12984	69,50 €	
0705K	KWIK-STIK™ / 6	Shigella sonnei NCTC 12984	187,55 €	
0705L	LYFO DISK® / 6	Shigella sonnei NCTC 12984	166,80 €	
0948P	KWIK-STIK™ / 2	Sphingobacterium multivorum ATCC® 35656™*	69,50 €	
0948K	KWIK-STIK™ / 6	Sphingobacterium multivorum ATCC® 35656™*	187,55 €	
0948L	LYFO DISK® / 6	Sphingobacterium multivorum ATCC® 35656™*	166,80 €	
0274P	KWIK-STIK™ / 2	Sphingomonas paucimobilis ATCC® 29837™*	69,50 €	
0274K	KWIK-STIK™ / 6	Sphingomonas paucimobilis ATCC® 29837™*	187,55 €	
0274L	LYFO DISK® / 6	Sphingomonas paucimobilis ATCC® 29837™*	166,80 €	
01013P	KWIK-STIK™ / 2	Sporidiobolus salmonicolor ATCC® MYA-4550™*	76,80 €	
01013K	KWIK-STIK™ / 6	Sporidiobolus salmonicolor ATCC® MYA-4550™*	207,50 €	
01013L	LYFO DISK® / 6	Sporidiobolus salmonicolor ATCC® MYA-4550™*	192,40 €	
0179P	KWIK-STIK™ / 2	Staphylococcus aureus ATCC® BAA-1026™*	76,80 €	
0179K	KWIK-STIK™ / 6	Staphylococcus aureus ATCC® BAA-1026™*	207,50 €	
0179L	LYFO DISK® / 6	Staphylococcus aureus ATCC® BAA-1026™*	192,40 €	
01007P	KWIK-STIK™ / 2	Staphylococcus aureus ATCC® BAA-1708™*	76,80 €	mupA positive by PCR
01007K	KWIK-STIK™ / 6	Staphylococcus aureus ATCC® BAA-1708™*	207,50 €	mupA positive by PCR
01007L	LYFO DISK® / 6	Staphylococcus aureus ATCC® BAA-1708™*	192,40 €	mupA positive by PCR
01122P	KWIK-STIK™ / 2	Staphylococcus aureus ATCC® BAA-2312™	76,80 €	
01122K	KWIK-STIK™ / 6	Staphylococcus aureus ATCC® BAA-2312™*	207,50 €	
01122L	LYFO DISK® / 6	Staphylococcus aureus ATCC® BAA-2312™*	192,40 €	
01065P	KWIK-STIK™ / 2	Staphylococcus aureus NCTC 12493	69,50 €	EUCAST Strain; methicillin resistant
01065K	KWIK-STIK™ / 6	Staphylococcus aureus NCTC 12493	187,55 €	EUCAST Strain; methicillin resistant
01065L	LYFO DISK® / 6	Staphylococcus aureus NCTC 12493	166,80 €	EUCAST Strain; methicillin resistant
0831P	KWIK-STIK™ / 2	Staphylococcus aureus NCTC 6571	60,45 €	
0831K	KWIK-STIK™ / 6	Staphylococcus aureus NCTC 6571	161,00 €	

Référence Microbiologics	Gamme	Souche	Prix de vente 2016 HT susceptible d'évoluer	Commentaire
0831L	LYFO DISK® / 6	Staphylococcus aureus NCTC 6571	141,10 €	
0462P	KWIK-STIK™ / 2	Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 11632™*	69,50 €	beta lactamase producer
0462K	KWIK-STIK™ / 6	Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 11632™*	187,55 €	beta lactamase producer
0462L	LYFO DISK® / 6	Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 11632™*	166,80 €	beta lactamase producer
0173P	KWIK-STIK™ / 2	Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 12600™*	76,80 €	
0173K	KWIK-STIK™ / 6	Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 12600™*	207,50 €	
0173L	LYFO DISK® / 6	Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 12600™*	192,40 €	
01093P	KWIK-STIK™ / 2	Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 14775™*	87,35 €	
01093K	KWIK-STIK™ / 6	Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 14775™*	235,85 €	
01093L	LYFO DISK® / 6	Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 14775™*	219,75 €	
0360E3	Epower™ / 10	Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 25923™*	346,60 €	Mean Assay Value: 1.0-9.9E+03 CFU per pellet; recommended for CAMP Test
0360E4	Epower™ / 10	Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 25923™*	346,60 €	Mean Assay Value: 1.0-9.9E+04 CFU per pellet; recommended for CAMP Test
0360E3-CRM	Epower™ / 10 CRM	Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 25923™*	512,40 €	Mean Assay Value: 1.0-9.9E+03 CFU per pellet; recommended for CAMP Test
0360E4-CRM	Epower™ / 10 CRM	Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 25923™*	512,40 €	Mean Assay Value: 1.0-9.9E+04 CFU per pellet; recommended for CAMP Test
0360A	EZ-Accu Shot™ / 5	Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 25923™*	313,40 €	10-100 CFU/0,1ml recommended for CAMP Test
0360FPC	EZ-FPC™ / 10	Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 25923™*	285,00 €	Quantitative Preparations at a concentration of 1.0-9.9E+03 CFU per pellet; recommended for CAMP Test
0360P	KWIK-STIK™ / 2	Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 25923™*	51,00 €	recommended for CAMP Test
0360K	KWIK-STIK™ / 6	Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 25923™*	132,35 €	recommended for CAMP Test
0360-CRM	Lab-Elite CRM™ / 1	Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 25923™*	68,65 €	recommended for CAMP Test
0360L	LYFO DISK® / 6	Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 25923™*	113,80 €	recommended for CAMP Test
0365P	KWIK-STIK™ / 2	Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 29213™*	51,00 €	
0365K	KWIK-STIK™ / 6	Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 29213™*	132,35 €	
0365L	LYFO DISK® / 6	Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 29213™*	113,80 €	
0906P	KWIK-STIK™ / 2	Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 29737™*	69,50 €	
0906K	KWIK-STIK™ / 6	Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 29737™*	187,55 €	
0906L	LYFO DISK® / 6	Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 29737™*	166,80 €	
0496P	KWIK-STIK™ / 2	Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 33591™*	69,50 €	Methicillin resistant
0496K	KWIK-STIK™ / 6	Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 33591™*	187,55 €	Methicillin resistant
0496-CRM	Lab-Elite CRM™ / 1	Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 33591™*	68,65 €	methicillin resistant
0496L	LYFO DISK® / 6	Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 33591™*	166,80 €	Methicillin resistant
0889P	KWIK-STIK™ / 2	Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 33592™*	60,45 €	Gentamicin and Methicillin resistant
0889K	KWIK-STIK™ / 6	Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 33592™*	161,00 €	Gentamicin and Methicillin resistant
0889L	LYFO DISK® / 6	Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 33592™*	141,10 €	Gentamicin and Methicillin resistant
0352P	KWIK-STIK™ / 2	Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 33862™*	60,45 €	recommended for CAMP Test
0352K	KWIK-STIK™ / 6	Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 33862™*	161,00 €	recommended for CAMP Test
0352L	LYFO DISK® / 6	Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 33862™*	141,10 €	recommended for CAMP Test
0852P	KWIK-STIK™ / 2	Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 43300™*	69,50 €	Methicillin resistant; mec A positive
0852K	KWIK-STIK™ / 6	Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 43300™*	187,55 €	Methicillin resistant; mec A positive
0852L	LYFO DISK® / 6	Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 43300™*	166,80 €	Methicillin resistant; mec A positive
0937P	KWIK-STIK™ / 2	Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 49476™*	76,80 €	
0937K	KWIK-STIK™ / 6	Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 49476™*	207,50 €	
0937L	LYFO DISK® / 6	Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 49476™*	192,40 €	
0832P	KWIK-STIK™ / 2	Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 51153™*	76,80 €	
0832K	KWIK-STIK™ / 6	Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 51153™*	207,50 €	
0832L	LYFO DISK® / 6	Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 51153™*	192,40 €	
0159P	KWIK-STIK™ / 2	Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 51740™*	76,80 €	
0159K	KWIK-STIK™ / 6	Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 51740™*	207,50 €	
0159L	LYFO DISK® / 6	Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 51740™*	192,40 €	
0827E3	Epower™ / 10	Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 6538P™*	263,40 €	Mean Assay Value: 1.0-9.9E+03 CFU per pellet
0827E3-CRM	Epower™ / 10 CRM	Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 6538P™*	512,40 €	Mean Assay Value: 1.0-9.9E+03 CFU per pellet
0827A	EZ-Accu Shot™ / 5	Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 6538P™*	313,40 €	10-100 CFU/0,1ml
0827P	KWIK-STIK™ / 2	Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 6538P™*	69,50 €	
0827K	KWIK-STIK™ / 6	Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 6538P™*	187,55 €	
0827-CRM	Lab-Elite CRM™ / 1	Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 6538P™*	68,65 €	
0827L	LYFO DISK® / 6	Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 6538P™*	166,80 €	
0485E7	Epower™ / 10	Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 6538™*	346,60 €	Mean Assay Value: 1.0-9.9E+07 CFU per pellet
0485E3	Epower™ / 10	Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 6538™*	346,60 €	Mean Assay Value: 1.0-9.9E+03 CFU per pellet
0485E7-CRM	Epower™ / 10 CRM	Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 6538™*	512,40 €	Mean Assay Value: 1.0-9.9E+07 CFU per pellet
0485E3-CRM	Epower™ / 10 CRM	Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 6538™*	512,40 €	Mean Assay Value: 1.0-9.9E+03 CFU per pellet
0485A	EZ-Accu Shot™ / 5	Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 6538™*	313,40 €	10-100 CFU/0,1ml
0485FPC	EZ-FPC™ / 10	Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 6538™*	285,00 €	Quantitative Preparations at a concentration of 1.0-9.9E+03 CFU per pellet
0485-PEC	EZ-PEC™ / 20	Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 6538™*	772,90 €	1.0x10 ⁵ to 1.0x10 ⁶ CFU per ml
0485P	KWIK-STIK™ / 2	Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 6538™*	69,50 €	
0485K	KWIK-STIK™ / 6	Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 6538™*	187,55 €	
0485-CRM	Lab-Elite CRM™ / 1	Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 6538™*	68,65 €	
0485L	LYFO DISK® / 6	Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 6538™*	166,80 €	

Référence Microbiologics	Gamme	Souche	Prix de vente 2016 HT susceptible d'évoluer	Commentaire
01022P	KWIK-STIK™ / 2	Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 700698™*	87,35 €	Methicillin resistant; GRD Etest® control
01022K	KWIK-STIK™ / 6	Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 700698™*	235,85 €	Methicillin resistant; GRD Etest® control
01022L	LYFO DISK® / 6	Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 700698™*	219,75 €	Methicillin resistant; GRD Etest® control
0158E4	Epower™ / 10	Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 700699™*	263,40 €	Methicillin resistant; Mean Assay Value: 1.0-9.9E+04 CFU per pellet
0158E4-CRM	Epower™ / 10 CRM	Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 700699™*	512,40 €	Methicillin resistant; Mean Assay Value: 1.0-9.9E+04 CFU per pellet
0158P	KWIK-STIK™ / 2	Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 700699™*	76,80 €	Methicillin resistant; MU50; reduced Vancomycin susceptibility
0158K	KWIK-STIK™ / 6	Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 700699™*	207,50 €	Methicillin resistant; MU50; reduced Vancomycin susceptibility
0158L	LYFO DISK® / 6	Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 700699™*	192,40 €	Methicillin resistant; MU50; reduced Vancomycin susceptibility
0113P	KWIK-STIK™ / 2	Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 9144™*	76,80 €	
0113K	KWIK-STIK™ / 6	Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 9144™*	207,50 €	
0113L	LYFO DISK® / 6	Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 9144™*	192,40 €	
01055P	KWIK-STIK™ / 2	Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® BAA-44™*	76,80 €	methicillin-resistant
01055K	KWIK-STIK™ / 6	Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® BAA-44™*	207,50 €	methicillin-resistant
01055L	LYFO DISK® / 6	Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® BAA-44™*	192,40 €	methicillin-resistant
0146P	KWIK-STIK™ / 2	Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® BAA-976™*	69,50 €	clindamycin sensitive; D-zone test negative
0146K	KWIK-STIK™ / 6	Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® BAA-976™*	187,55 €	clindamycin sensitive; D-zone test negative
0146L	LYFO DISK® / 6	Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® BAA-976™*	166,80 €	clindamycin sensitive; D-zone test negative
0147P	KWIK-STIK™ / 2	Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® BAA-977™*	69,50 €	clindamycin sensitive; D-zone test positive
0147K	KWIK-STIK™ / 6	Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® BAA-977™*	187,55 €	clindamycin sensitive; D-zone test positive
0147L	LYFO DISK® / 6	Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® BAA-977™*	166,80 €	clindamycin sensitive; D-zone test positive
0312P	KWIK-STIK™ / 2	Staphylococcus aureus subsp. aureus NCIMB 12702	51,00 €	
0312K	KWIK-STIK™ / 6	Staphylococcus aureus subsp. aureus NCIMB 12702	132,35 €	
0312L	LYFO DISK® / 6	Staphylococcus aureus subsp. aureus NCIMB 12702	113,80 €	
0579P	KWIK-STIK™ / 2	Staphylococcus aureus subsp. aureus NCIMB 9518	87,35 €	
0579K	KWIK-STIK™ / 6	Staphylococcus aureus subsp. aureus NCIMB 9518	235,85 €	
0579L	LYFO DISK® / 6	Staphylococcus aureus subsp. aureus NCIMB 9518	219,75 €	
0713P	KWIK-STIK™ / 2	Staphylococcus aureus subsp. aureus NCTC 12973	69,50 €	
0713K	KWIK-STIK™ / 6	Staphylococcus aureus subsp. aureus NCTC 12973	187,55 €	
0713L	LYFO DISK® / 6	Staphylococcus aureus subsp. aureus NCTC 12973	166,80 €	
0533P	KWIK-STIK™ / 2	Staphylococcus capitis ATCC® 146™*	87,35 €	formerly Staphylococcus epidermidis
0533K	KWIK-STIK™ / 6	Staphylococcus capitis ATCC® 146™*	235,85 €	formerly Staphylococcus epidermidis
0533L	LYFO DISK® / 6	Staphylococcus capitis ATCC® 146™*	219,75 €	formerly Staphylococcus epidermidis
0963P	KWIK-STIK™ / 2	Staphylococcus capitis subsp. capitis ATCC® 35661™*	69,50 €	
0963K	KWIK-STIK™ / 6	Staphylococcus capitis subsp. capitis ATCC® 35661™*	187,55 €	
0963L	LYFO DISK® / 6	Staphylococcus capitis subsp. capitis ATCC® 35661™*	166,80 €	
0371E3	Epower™ / 10	Staphylococcus epidermidis ATCC® 12228™*	346,60 €	Mean Assay Value: 1.0-9.9E+03 CFU per pellet
0371E8	Epower™ / 10	Staphylococcus epidermidis ATCC® 12228™*	346,60 €	Mean Assay Value: 1.0-9.9E+08 CFU per pellet
0371E4	Epower™ / 10	Staphylococcus epidermidis ATCC® 12228™*	346,60 €	Mean Assay Value: 1.0-9.9E+04 CFU per pellet
0371E3-CRM	Epower™ / 10 CRM	Staphylococcus epidermidis ATCC® 12228™*	512,40 €	Mean Assay Value: 1.0-9.9E+03 CFU per pellet
0371E8-CRM	Epower™ / 10 CRM	Staphylococcus epidermidis ATCC® 12228™*	512,40 €	Mean Assay Value: 1.0-9.9E+08 CFU per pellet
0371E4-CRM	Epower™ / 10 CRM	Staphylococcus epidermidis ATCC® 12228™*	512,40 €	Mean Assay Value: 1.0-9.9E+04 CFU per pellet
0371A	EZ-Accu Shot™ / 5	Staphylococcus epidermidis ATCC® 12228™*	313,40 €	10-100 CFU/0,1ml
0371P	KWIK-STIK™ / 2	Staphylococcus epidermidis ATCC® 12228™*	60,45 €	
0371K	KWIK-STIK™ / 6	Staphylococcus epidermidis ATCC® 12228™*	161,00 €	
0371-CRM	Lab-Elite CRM™ / 1	Staphylococcus epidermidis ATCC® 12228™*	68,65 €	
0371L	LYFO DISK® / 6	Staphylococcus epidermidis ATCC® 12228™*	141,10 €	
0412P	KWIK-STIK™ / 2	Staphylococcus epidermidis ATCC® 14990™*	60,45 €	
0412K	KWIK-STIK™ / 6	Staphylococcus epidermidis ATCC® 14990™*	161,00 €	
0412-CRM	Lab-Elite CRM™ / 1	Staphylococcus epidermidis ATCC® 14990™*	68,65 €	
0412L	LYFO DISK® / 6	Staphylococcus epidermidis ATCC® 14990™*	141,10 €	
01189P	KWIK-STIK™ / 2	Staphylococcus epidermidis ATCC® 35984™*	87,35 €	
01189K	KWIK-STIK™ / 6	Staphylococcus epidermidis ATCC® 35984™*	235,85 €	
01189L	LYFO DISK® / 6	Staphylococcus epidermidis ATCC® 35984™*	219,75 €	
0628P	KWIK-STIK™ / 2	Staphylococcus epidermidis ATCC® 49134™*	69,50 €	
0628K	KWIK-STIK™ / 6	Staphylococcus epidermidis ATCC® 49134™*	187,55 €	

Référence Microbiologiques	Gamme	Souche	Prix de vente 2016 HT susceptible d'évoluer	Commentaire
0628L	LYFO DISK® / 6	Staphylococcus epidermidis ATCC® 49134™*	166,80 €	
0976P	KWIK-STIK™ / 2	Staphylococcus epidermidis ATCC® 49461™*	69,50 €	
0976K	KWIK-STIK™ / 6	Staphylococcus epidermidis ATCC® 49461™*	187,55 €	
0976L	LYFO DISK® / 6	Staphylococcus epidermidis ATCC® 49461™*	166,80 €	
01068P	KWIK-STIK™ / 2	Staphylococcus epidermidis ATCC® 51625™*	87,35 €	methicillin resistant
01068K	KWIK-STIK™ / 6	Staphylococcus epidermidis ATCC® 51625™*	235,85 €	methicillin resistant
01068L	LYFO DISK® / 6	Staphylococcus epidermidis ATCC® 51625™*	219,75 €	methicillin resistant
0155P	KWIK-STIK™ / 2	Staphylococcus epidermidis ATCC® 700296™*	69,50 €	
0155K	KWIK-STIK™ / 6	Staphylococcus epidermidis ATCC® 700296™*	187,55 €	
0155L	LYFO DISK® / 6	Staphylococcus epidermidis ATCC® 700296™*	166,80 €	
0571P	KWIK-STIK™ / 2	Staphylococcus epidermidis NCIMB 8853	69,50 €	
0571K	KWIK-STIK™ / 6	Staphylococcus epidermidis NCIMB 8853	187,55 €	
0571L	LYFO DISK® / 6	Staphylococcus epidermidis NCIMB 8853	166,80 €	
0219P	KWIK-STIK™ / 2	Staphylococcus gallinarum ATCC® 700401™*	87,35 €	
0219K	KWIK-STIK™ / 6	Staphylococcus gallinarum ATCC® 700401™*	235,85 €	
0219L	LYFO DISK® / 6	Staphylococcus gallinarum ATCC® 700401™*	219,75 €	
0246P	KWIK-STIK™ / 2	Staphylococcus haemolyticus ATCC® 29970™*	76,80 €	
0246K	KWIK-STIK™ / 6	Staphylococcus haemolyticus ATCC® 29970™*	207,50 €	
0246L	LYFO DISK® / 6	Staphylococcus haemolyticus ATCC® 29970™*	192,40 €	
0739P	KWIK-STIK™ / 2	Staphylococcus lentus ATCC® 700403™*	76,80 €	
0739K	KWIK-STIK™ / 6	Staphylococcus lentus ATCC® 700403™*	207,50 €	
0739L	LYFO DISK® / 6	Staphylococcus lentus ATCC® 700403™*	192,40 €	
0217P	KWIK-STIK™ / 2	Staphylococcus lugdunensis ATCC® 49576™*	60,45 €	
0217K	KWIK-STIK™ / 6	Staphylococcus lugdunensis ATCC® 49576™*	161,00 €	
0217L	LYFO DISK® / 6	Staphylococcus lugdunensis ATCC® 49576™*	141,10 €	
0762P	KWIK-STIK™ / 2	Staphylococcus lugdunensis ATCC® 700328™*	76,80 €	
0762K	KWIK-STIK™ / 6	Staphylococcus lugdunensis ATCC® 700328™*	207,50 €	
0762L	LYFO DISK® / 6	Staphylococcus lugdunensis ATCC® 700328™*	192,40 €	
01150P	KWIK-STIK™ / 2	Staphylococcus lugdunensis NCTC 7990	76,80 €	
01150K	KWIK-STIK™ / 6	Staphylococcus lugdunensis NCTC 7990	207,50 €	
01150L	LYFO DISK® / 6	Staphylococcus lugdunensis NCTC 7990	192,40 €	
0907P	KWIK-STIK™ / 2	Staphylococcus pseudintermedius ATCC® 49444™*	69,50 €	formerly Staphylococcus aureus subsp. aureus; recommended for CAMP test for Listeria monocytogenes
0907K	KWIK-STIK™ / 6	Staphylococcus pseudintermedius ATCC® 49444™*	187,55 €	formerly Staphylococcus aureus subsp. aureus; recommended for CAMP test for Listeria monocytogenes
0907L	LYFO DISK® / 6	Staphylococcus pseudintermedius ATCC® 49444™*	166,80 €	formerly Staphylococcus aureus subsp. aureus; recommended for CAMP test for Listeria monocytogenes
0494P	KWIK-STIK™ / 2	Staphylococcus saprophyticus ATCC® 15305™*	60,45 €	
0494K	KWIK-STIK™ / 6	Staphylococcus saprophyticus ATCC® 15305™*	161,00 €	
0494L	LYFO DISK® / 6	Staphylococcus saprophyticus ATCC® 15305™*	141,10 €	
01035P	KWIK-STIK™ / 2	Staphylococcus saprophyticus ATCC® 35552™*	76,80 €	
01035K	KWIK-STIK™ / 6	Staphylococcus saprophyticus ATCC® 35552™*	207,50 €	
01035L	LYFO DISK® / 6	Staphylococcus saprophyticus ATCC® 35552™*	192,40 €	
0529P	KWIK-STIK™ / 2	Staphylococcus saprophyticus ATCC® 43867™*	87,35 €	
0529K	KWIK-STIK™ / 6	Staphylococcus saprophyticus ATCC® 43867™*	235,85 €	
0529L	LYFO DISK® / 6	Staphylococcus saprophyticus ATCC® 43867™*	219,75 €	
0945P	KWIK-STIK™ / 2	Staphylococcus saprophyticus ATCC® 49453™*	76,80 €	
0945K	KWIK-STIK™ / 6	Staphylococcus saprophyticus ATCC® 49453™*	207,50 €	
0945L	LYFO DISK® / 6	Staphylococcus saprophyticus ATCC® 49453™*	192,40 €	
0881P	KWIK-STIK™ / 2	Staphylococcus saprophyticus ATCC® 49907™*	76,80 €	
0881K	KWIK-STIK™ / 6	Staphylococcus saprophyticus ATCC® 49907™*	207,50 €	
0881L	LYFO DISK® / 6	Staphylococcus saprophyticus ATCC® 49907™*	192,40 €	
0134P	KWIK-STIK™ / 2	Staphylococcus saprophyticus ATCC® BAA-750™*	60,45 €	
0134K	KWIK-STIK™ / 6	Staphylococcus saprophyticus ATCC® BAA-750™*	161,00 €	
0134L	LYFO DISK® / 6	Staphylococcus saprophyticus ATCC® BAA-750™*	141,10 €	
0470P	KWIK-STIK™ / 2	Staphylococcus saprophyticus subsp. saprophyticus NCIMB 8711	69,50 €	
0470K	KWIK-STIK™ / 6	Staphylococcus saprophyticus subsp. saprophyticus NCIMB 8711	187,55 €	
0470L	LYFO DISK® / 6	Staphylococcus saprophyticus subsp. saprophyticus NCIMB 8711	166,80 €	
0764P	KWIK-STIK™ / 2	Staphylococcus sciuri subsp. sciuri ATCC® 29061™*	76,80 €	
0764K	KWIK-STIK™ / 6	Staphylococcus sciuri subsp. sciuri ATCC® 29061™*	207,50 €	
0764L	LYFO DISK® / 6	Staphylococcus sciuri subsp. sciuri ATCC® 29061™*	192,40 €	
0413P	KWIK-STIK™ / 2	Staphylococcus simulans ATCC® 27851™*	76,80 €	
0413K	KWIK-STIK™ / 6	Staphylococcus simulans ATCC® 27851™*	207,50 €	
0413L	LYFO DISK® / 6	Staphylococcus simulans ATCC® 27851™*	192,40 €	
0238P	KWIK-STIK™ / 2	Staphylococcus species ATCC® 155™*	87,35 €	
0238K	KWIK-STIK™ / 6	Staphylococcus species ATCC® 155™*	235,85 €	
0238L	LYFO DISK® / 6	Staphylococcus species ATCC® 155™*	219,75 €	
01067P	KWIK-STIK™ / 2	Staphylococcus species ATCC® 27626™*	87,35 €	

Référence Microbiologics	Gamme	Souche	Prix de vente 2016 HT susceptible d'évoluer	Commentaire
01067K	KWIK-STIK™ / 6	Staphylococcus species ATCC® 27626™*	235,85 €	
01067L	LYFO DISK® / 6	Staphylococcus species ATCC® 27626™*	219,75 €	
0946P	KWIK-STIK™ / 2	Staphylococcus warneri ATCC® 49454™*	69,50 €	
0946K	KWIK-STIK™ / 6	Staphylococcus warneri ATCC® 49454™*	187,55 €	
0946L	LYFO DISK® / 6	Staphylococcus warneri ATCC® 49454™*	166,80 €	
0605P	KWIK-STIK™ / 2	Staphylococcus xylosus ATCC® 29971™*	76,80 €	
0605K	KWIK-STIK™ / 6	Staphylococcus xylosus ATCC® 29971™*	207,50 €	
0605L	LYFO DISK® / 6	Staphylococcus xylosus ATCC® 29971™*	192,40 €	
0797P	KWIK-STIK™ / 2	Staphylococcus xylosus ATCC® 35033™*	76,80 €	
0797K	KWIK-STIK™ / 6	Staphylococcus xylosus ATCC® 35033™*	207,50 €	
0797L	LYFO DISK® / 6	Staphylococcus xylosus ATCC® 35033™*	192,40 €	
0629P	KWIK-STIK™ / 2	Staphylococcus xylosus ATCC® 49148™*	76,80 €	
0629K	KWIK-STIK™ / 6	Staphylococcus xylosus ATCC® 49148™*	207,50 €	
0629L	LYFO DISK® / 6	Staphylococcus xylosus ATCC® 49148™*	192,40 €	
0741P	KWIK-STIK™ / 2	Staphylococcus xylosus ATCC® 700404™*	76,80 €	
0741K	KWIK-STIK™ / 6	Staphylococcus xylosus ATCC® 700404™*	207,50 €	
0741L	LYFO DISK® / 6	Staphylococcus xylosus ATCC® 700404™*	192,40 €	
01020P	KWIK-STIK™ / 2	Stenotrophomonas maltophilia ATCC® 13636™*	76,80 €	positive control for Etest® metallo Beta-Lactamase strip
01020K	KWIK-STIK™ / 6	Stenotrophomonas maltophilia ATCC® 13636™*	207,50 €	positive control for Etest® metallo Beta-Lactamase strip
01020L	LYFO DISK® / 6	Stenotrophomonas maltophilia ATCC® 13636™*	192,40 €	positive control for Etest® metallo Beta-Lactamase strip
0369P	KWIK-STIK™ / 2	Stenotrophomonas maltophilia ATCC® 13637™*	69,50 €	
0369K	KWIK-STIK™ / 6	Stenotrophomonas maltophilia ATCC® 13637™*	187,55 €	
0369L	LYFO DISK® / 6	Stenotrophomonas maltophilia ATCC® 13637™*	166,80 €	
0759P	KWIK-STIK™ / 2	Stenotrophomonas maltophilia ATCC® 17666™*	69,50 €	
0759K	KWIK-STIK™ / 6	Stenotrophomonas maltophilia ATCC® 17666™*	187,55 €	
0759L	LYFO DISK® / 6	Stenotrophomonas maltophilia ATCC® 17666™*	166,80 €	
0135P	KWIK-STIK™ / 2	Stenotrophomonas maltophilia ATCC® 49130™*	60,45 €	
0135K	KWIK-STIK™ / 6	Stenotrophomonas maltophilia ATCC® 49130™*	161,00 €	
0135L	LYFO DISK® / 6	Stenotrophomonas maltophilia ATCC® 49130™*	141,10 €	
0742P	KWIK-STIK™ / 2	Stenotrophomonas maltophilia ATCC® 51331™*	76,80 €	
0742K	KWIK-STIK™ / 6	Stenotrophomonas maltophilia ATCC® 51331™*	207,50 €	
0742L	LYFO DISK® / 6	Stenotrophomonas maltophilia ATCC® 51331™*	192,40 €	
0439P	KWIK-STIK™ / 2	Streptococcus agalactiae ATCC® 12386™*	69,50 €	group B
0439K	KWIK-STIK™ / 6	Streptococcus agalactiae ATCC® 12386™*	187,55 €	group B
0439L	LYFO DISK® / 6	Streptococcus agalactiae ATCC® 12386™*	166,80 €	group B
0104P	KWIK-STIK™ / 2	Streptococcus agalactiae ATCC® 12403™*	87,35 €	group B; type III
0104K	KWIK-STIK™ / 6	Streptococcus agalactiae ATCC® 12403™*	235,85 €	group B; type III
0104L	LYFO DISK® / 6	Streptococcus agalactiae ATCC® 12403™*	219,75 €	group B; type III
0370P	KWIK-STIK™ / 2	Streptococcus agalactiae ATCC® 13813™*	60,45 €	group B; nonhemolytic in absence of CAMP Factor
0370K	KWIK-STIK™ / 6	Streptococcus agalactiae ATCC® 13813™*	161,00 €	group B; nonhemolytic in absence of CAMP Factor
0370L	LYFO DISK® / 6	Streptococcus agalactiae ATCC® 13813™*	141,10 €	group B; nonhemolytic in absence of CAMP Factor
0436P	KWIK-STIK™ / 2	Streptococcus agalactiae ATCC® 27956™*	60,45 €	group B;
0436K	KWIK-STIK™ / 6	Streptococcus agalactiae ATCC® 27956™*	161,00 €	group B;
0436L	LYFO DISK® / 6	Streptococcus agalactiae ATCC® 27956™*	141,10 €	group B;
0105P	KWIK-STIK™ / 2	Streptococcus agalactiae ATCC® BAA-611™*	76,80 €	group B; serotype V
0105K	KWIK-STIK™ / 6	Streptococcus agalactiae ATCC® BAA-611™*	207,50 €	group B; serotype V
0105L	LYFO DISK® / 6	Streptococcus agalactiae ATCC® BAA-611™*	192,40 €	group B; serotype V
0709P	KWIK-STIK™ / 2	Streptococcus agalactiae NCIMB 701348	69,50 €	group B
0709K	KWIK-STIK™ / 6	Streptococcus agalactiae NCIMB 701348	187,55 €	group B
0709L	LYFO DISK® / 6	Streptococcus agalactiae NCIMB 701348	166,80 €	group B
0480P	KWIK-STIK™ / 2	Streptococcus agalactiae NCTC 8017	69,50 €	group B
0480K	KWIK-STIK™ / 6	Streptococcus agalactiae NCTC 8017	187,55 €	group B
0480L	LYFO DISK® / 6	Streptococcus agalactiae NCTC 8017	166,80 €	Group B
0710P	KWIK-STIK™ / 2	Streptococcus agalactiae NCTC 9993	87,35 €	group B
0710K	KWIK-STIK™ / 6	Streptococcus agalactiae NCTC 9993	235,85 €	group B
0710L	LYFO DISK® / 6	Streptococcus agalactiae NCTC 9993	219,75 €	group B
01077P	KWIK-STIK™ / 2	Streptococcus anginosus ATCC® 33397™*	69,50 €	group G
01077K	KWIK-STIK™ / 6	Streptococcus anginosus ATCC® 33397™*	187,55 €	group G
01077L	LYFO DISK® / 6	Streptococcus anginosus ATCC® 33397™*	166,80 €	group G
0389P	KWIK-STIK™ / 2	Streptococcus anginosus NCTC 10713	76,80 €	group G
0389K	KWIK-STIK™ / 6	Streptococcus anginosus NCTC 10713	207,50 €	group G
0389L	LYFO DISK® / 6	Streptococcus anginosus NCTC 10713	192,40 €	group G
0463P	KWIK-STIK™ / 2	Streptococcus bovis ATCC® 33317™*	69,50 €	
0463K	KWIK-STIK™ / 6	Streptococcus bovis ATCC® 33317™*	187,55 €	
0463L	LYFO DISK® / 6	Streptococcus bovis ATCC® 33317™*	166,80 €	
0307P	KWIK-STIK™ / 2	Streptococcus bovis NCIMB 700597	76,80 €	
0307K	KWIK-STIK™ / 6	Streptococcus bovis NCIMB 700597	207,50 €	
0307L	LYFO DISK® / 6	Streptococcus bovis NCIMB 700597	192,40 €	

Référence Microbiologics	Gamme	Souche	Prix de vente 2016 HT susceptible d'évoluer	Commentaire
0174P	KWIK-STIK™ / 2	Streptococcus criceti ATCC® 19642™*	76,80 €	formerly Streptococcus cricetus
0174K	KWIK-STIK™ / 6	Streptococcus criceti ATCC® 19642™*	207,50 €	formerly Streptococcus cricetus
0174L	LYFO DISK® / 6	Streptococcus criceti ATCC® 19642™*	192,40 €	formerly Streptococcus cricetus
0603P	KWIK-STIK™ / 2	Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis ATCC® 12388™*	69,50 €	group C
0603K	KWIK-STIK™ / 6	Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis ATCC® 12388™*	187,55 €	group C
0603L	LYFO DISK® / 6	Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis ATCC® 12388™*	166,80 €	group C
0602P	KWIK-STIK™ / 2	Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis ATCC® 12394™*	69,50 €	group G
0602K	KWIK-STIK™ / 6	Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis ATCC® 12394™*	187,55 €	group G
0602L	LYFO DISK® / 6	Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis ATCC® 12394™*	166,80 €	group G
0967P	KWIK-STIK™ / 2	Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis ATCC® 35666™*	87,35 €	group C
0967K	KWIK-STIK™ / 6	Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis ATCC® 35666™*	235,85 €	group C
0967L	LYFO DISK® / 6	Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis ATCC® 35666™*	219,75 €	group C
0373P	KWIK-STIK™ / 2	Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis NCTC 8543	87,35 €	group C
0373K	KWIK-STIK™ / 6	Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis NCTC 8543	235,85 €	group C
0373L	LYFO DISK® / 6	Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis NCTC 8543	219,75 €	group C
0221P	KWIK-STIK™ / 2	Streptococcus equi subsp. equi ATCC® 33398™*	69,50 €	group C
0221K	KWIK-STIK™ / 6	Streptococcus equi subsp. equi ATCC® 33398™*	187,55 €	group C
0221L	LYFO DISK® / 6	Streptococcus equi subsp. equi ATCC® 33398™*	166,80 €	group C
0656P	KWIK-STIK™ / 2	Streptococcus equi subsp. equi ATCC® 9528™*	69,50 €	group C
0656K	KWIK-STIK™ / 6	Streptococcus equi subsp. equi ATCC® 9528™*	187,55 €	group C
0656L	LYFO DISK® / 6	Streptococcus equi subsp. equi ATCC® 9528™*	166,80 €	group C
0101P	KWIK-STIK™ / 2	Streptococcus equi subsp. zooepidemicus ATCC® 43079™*	69,50 €	
0101K	KWIK-STIK™ / 6	Streptococcus equi subsp. zooepidemicus ATCC® 43079™*	187,55 €	
0101L	LYFO DISK® / 6	Streptococcus equi subsp. zooepidemicus ATCC® 43079™*	166,80 €	
0743P	KWIK-STIK™ / 2	Streptococcus equi subsp. zooepidemicus ATCC® 700400™*	69,50 €	
0743K	KWIK-STIK™ / 6	Streptococcus equi subsp. zooepidemicus ATCC® 700400™*	187,55 €	
0743L	LYFO DISK® / 6	Streptococcus equi subsp. zooepidemicus ATCC® 700400™*	166,80 €	
0631P	KWIK-STIK™ / 2	Streptococcus gallolyticus ATCC® 49147™*	69,50 €	
0631K	KWIK-STIK™ / 6	Streptococcus gallolyticus ATCC® 49147™*	187,55 €	
0631L	LYFO DISK® / 6	Streptococcus gallolyticus ATCC® 49147™*	166,80 €	
0391P	KWIK-STIK™ / 2	Streptococcus gallolyticus ATCC® 9809™*	69,50 €	
0391K	KWIK-STIK™ / 6	Streptococcus gallolyticus ATCC® 9809™*	187,55 €	
0391L	LYFO DISK® / 6	Streptococcus gallolyticus ATCC® 9809™*	166,80 €	
0949P	KWIK-STIK™ / 2	Streptococcus gallolyticus subsp. gallolyticus ATCC® 49475™*	76,80 €	
0949K	KWIK-STIK™ / 6	Streptococcus gallolyticus subsp. gallolyticus ATCC® 49475™*	207,50 €	
0949L	LYFO DISK® / 6	Streptococcus gallolyticus subsp. gallolyticus ATCC® 49475™*	192,40 €	
01106P	KWIK-STIK™ / 2	Streptococcus iniae ATCC® 29177™*	76,80 €	
01106K	KWIK-STIK™ / 6	Streptococcus iniae ATCC® 29177™*	207,50 €	
01106L	LYFO DISK® / 6	Streptococcus iniae ATCC® 29177™*	192,40 €	
0383P	KWIK-STIK™ / 2	Streptococcus mitis NCIMB 13770	69,50 €	
0383K	KWIK-STIK™ / 6	Streptococcus mitis NCIMB 13770	187,55 €	
0383L	LYFO DISK® / 6	Streptococcus mitis NCIMB 13770	166,80 €	
0266P	KWIK-STIK™ / 2	Streptococcus mutans ATCC® 25175™*	69,50 €	
0266K	KWIK-STIK™ / 6	Streptococcus mutans ATCC® 25175™*	187,55 €	
0266L	LYFO DISK® / 6	Streptococcus mutans ATCC® 25175™*	166,80 €	
0969P	KWIK-STIK™ / 2	Streptococcus mutans ATCC® 35668™*	69,50 €	
0969K	KWIK-STIK™ / 6	Streptococcus mutans ATCC® 35668™*	187,55 €	
0969L	LYFO DISK® / 6	Streptococcus mutans ATCC® 35668™*	166,80 €	
0423P	KWIK-STIK™ / 2	Streptococcus oralis ATCC® 6249™*	69,50 €	Formerly Streptococcus mitis
0423K	KWIK-STIK™ / 6	Streptococcus oralis ATCC® 6249™*	187,55 €	Formerly Streptococcus mitis
0423L	LYFO DISK® / 6	Streptococcus oralis ATCC® 6249™*	166,80 €	Formerly Streptococcus mitis
0401P	KWIK-STIK™ / 2	Streptococcus parasanguinis ATCC® 15909™*	76,80 €	
0401K	KWIK-STIK™ / 6	Streptococcus parasanguinis ATCC® 15909™*	207,50 €	
0401L	LYFO DISK® / 6	Streptococcus parasanguinis ATCC® 15909™*	192,40 €	

Référence Microbiologics	Gamme	Souche	Prix de vente 2016 HT susceptible d'évoluer	Commentaire
0630P	KWIK-STIK™ / 2	Streptococcus pasteurianus ATCC® 49133™*	69,50 €	
0630K	KWIK-STIK™ / 6	Streptococcus pasteurianus ATCC® 49133™*	187,55 €	
0630L	LYFO DISK® / 6	Streptococcus pasteurianus ATCC® 49133™*	166,80 €	
0865P	KWIK-STIK™ / 2	Streptococcus pneumoniae ATCC® 10015™*	69,50 €	
0865K	KWIK-STIK™ / 6	Streptococcus pneumoniae ATCC® 10015™*	187,55 €	
0865L	LYFO DISK® / 6	Streptococcus pneumoniae ATCC® 10015™*	166,80 €	
0435P	KWIK-STIK™ / 2	Streptococcus pneumoniae ATCC® 27336™*	69,50 €	
0435K	KWIK-STIK™ / 6	Streptococcus pneumoniae ATCC® 27336™*	187,55 €	
0435L	LYFO DISK® / 6	Streptococcus pneumoniae ATCC® 27336™*	166,80 €	
0632P	KWIK-STIK™ / 2	Streptococcus pneumoniae ATCC® 49136™*	69,50 €	
0632K	KWIK-STIK™ / 6	Streptococcus pneumoniae ATCC® 49136™*	187,55 €	
0632L	LYFO DISK® / 6	Streptococcus pneumoniae ATCC® 49136™*	166,80 €	
0633P	KWIK-STIK™ / 2	Streptococcus pneumoniae ATCC® 49150™*	69,50 €	
0633K	KWIK-STIK™ / 6	Streptococcus pneumoniae ATCC® 49150™*	187,55 €	
0633L	LYFO DISK® / 6	Streptococcus pneumoniae ATCC® 49150™*	166,80 €	
0947P	KWIK-STIK™ / 2	Streptococcus pneumoniae ATCC® 49619™*	69,50 €	low level penicillin resistance by oxacillin test
0947K	KWIK-STIK™ / 6	Streptococcus pneumoniae ATCC® 49619™*	187,55 €	low level penicillin resistance by oxacillin test
0947-CRM	Lab-Elite CRM™ / 1	Streptococcus pneumoniae ATCC® 49619™*	68,65 €	low level penicillin resistance by oxacillin test
0947L	LYFO DISK® / 6	Streptococcus pneumoniae ATCC® 49619™*	166,80 €	low level penicillin resistance by oxacillin test
0523P	KWIK-STIK™ / 2	Streptococcus pneumoniae ATCC® 51916™*	87,35 €	
0523K	KWIK-STIK™ / 6	Streptococcus pneumoniae ATCC® 51916™*	235,85 €	
0523L	LYFO DISK® / 6	Streptococcus pneumoniae ATCC® 51916™*	219,75 €	
0763P	KWIK-STIK™ / 2	Streptococcus pneumoniae ATCC® 6301™*	69,50 €	
0763K	KWIK-STIK™ / 6	Streptococcus pneumoniae ATCC® 6301™*	187,55 €	
0763L	LYFO DISK® / 6	Streptococcus pneumoniae ATCC® 6301™*	166,80 €	
0380P	KWIK-STIK™ / 2	Streptococcus pneumoniae ATCC® 6303™*	69,50 €	mucoïd colonies
0380K	KWIK-STIK™ / 6	Streptococcus pneumoniae ATCC® 6303™*	187,55 €	mucoïd colonies
0380L	LYFO DISK® / 6	Streptococcus pneumoniae ATCC® 6303™*	166,80 €	mucoïd colonies
0447P	KWIK-STIK™ / 2	Streptococcus pneumoniae ATCC® 6305™*	69,50 €	
0447K	KWIK-STIK™ / 6	Streptococcus pneumoniae ATCC® 6305™*	187,55 €	
0447L	LYFO DISK® / 6	Streptococcus pneumoniae ATCC® 6305™*	166,80 €	
0267P	KWIK-STIK™ / 2	Streptococcus pneumoniae ATCC® 700677™*	76,80 €	
0267K	KWIK-STIK™ / 6	Streptococcus pneumoniae ATCC® 700677™*	207,50 €	
0267L	LYFO DISK® / 6	Streptococcus pneumoniae ATCC® 700677™*	192,40 €	
0469P	KWIK-STIK™ / 2	Streptococcus pneumoniae NCIMB 13286	87,35 €	
0469K	KWIK-STIK™ / 6	Streptococcus pneumoniae NCIMB 13286	235,85 €	
0469L	LYFO DISK® / 6	Streptococcus pneumoniae NCIMB 13286	219,75 €	
0508P	KWIK-STIK™ / 2	Streptococcus pyogenes ATCC® 12344™*	76,80 €	group A; type 1
0508K	KWIK-STIK™ / 6	Streptococcus pyogenes ATCC® 12344™*	207,50 €	group A; type 1
0508L	LYFO DISK® / 6	Streptococcus pyogenes ATCC® 12344™*	192,40 €	group A; type 1
0979P	KWIK-STIK™ / 2	Streptococcus pyogenes ATCC® 12384™*	60,45 €	group A; type 3
0979K	KWIK-STIK™ / 6	Streptococcus pyogenes ATCC® 12384™*	161,00 €	group A; type 3
0979L	LYFO DISK® / 6	Streptococcus pyogenes ATCC® 12384™*	141,10 €	group A; type 3
0385P	KWIK-STIK™ / 2	Streptococcus pyogenes ATCC® 19615™*	60,45 €	group A
0385K	KWIK-STIK™ / 6	Streptococcus pyogenes ATCC® 19615™*	161,00 €	group A
0385-CRM	Lab-Elite CRM™ / 1	Streptococcus pyogenes ATCC® 19615™*	68,65 €	group A
0385L	LYFO DISK® / 6	Streptococcus pyogenes ATCC® 19615™*	141,10 €	group A
0994P	KWIK-STIK™ / 2	Streptococcus pyogenes ATCC® 49399™*	60,45 €	group A
0994K	KWIK-STIK™ / 6	Streptococcus pyogenes ATCC® 49399™*	161,00 €	group A
0994L	LYFO DISK® / 6	Streptococcus pyogenes ATCC® 49399™*	141,10 €	group A
0314P	KWIK-STIK™ / 2	Streptococcus pyogenes NCIMB 13285	69,50 €	group A
0314K	KWIK-STIK™ / 6	Streptococcus pyogenes NCIMB 13285	187,55 €	group A
0314L	LYFO DISK® / 6	Streptococcus pyogenes NCIMB 13285	166,80 €	group A
0237P	KWIK-STIK™ / 2	Streptococcus salivarius ATCC® 13419™*	76,80 €	
0237K	KWIK-STIK™ / 6	Streptococcus salivarius ATCC® 13419™*	207,50 €	
0237L	LYFO DISK® / 6	Streptococcus salivarius ATCC® 13419™*	192,40 €	
0136P	KWIK-STIK™ / 2	Streptococcus salivarius subsp. thermophilus ATCC® 19258™*	69,50 €	formerly Streptococcus thermophilus
0136K	KWIK-STIK™ / 6	Streptococcus salivarius subsp. thermophilus ATCC® 19258™*	187,55 €	formerly Streptococcus thermophilus
0136L	LYFO DISK® / 6	Streptococcus salivarius subsp. thermophilus ATCC® 19258™*	166,80 €	formerly Streptococcus thermophilus
0858P	KWIK-STIK™ / 2	Streptococcus sanguinis ATCC® 10556™*	69,50 €	
0858K	KWIK-STIK™ / 6	Streptococcus sanguinis ATCC® 10556™*	187,55 €	
0858L	LYFO DISK® / 6	Streptococcus sanguinis ATCC® 10556™*	166,80 €	
0978P	KWIK-STIK™ / 2	Streptococcus species ATCC® 12392™*	76,80 €	group F; type 2
0978K	KWIK-STIK™ / 6	Streptococcus species ATCC® 12392™*	207,50 €	group F; type 2
0978L	LYFO DISK® / 6	Streptococcus species ATCC® 12392™*	192,40 €	group F; type 2
0864P	KWIK-STIK™ / 2	Streptococcus species ATCC® 12401™*	69,50 €	group B; type lb
0864K	KWIK-STIK™ / 6	Streptococcus species ATCC® 12401™*	187,55 €	group B; type lb
0864L	LYFO DISK® / 6	Streptococcus species ATCC® 12401™*	166,80 €	group B; type lb
01096P	KWIK-STIK™ / 2	Streptococcus species ATCC® 9884™*	76,80 €	group G
01096K	KWIK-STIK™ / 6	Streptococcus species ATCC® 9884™*	207,50 €	group G
01096L	LYFO DISK® / 6	Streptococcus species ATCC® 9884™*	192,40 €	group G

Référence Microbiologics	Gamme	Souche	Prix de vente 2016 HT susceptible d'évoluer	Commentaire
0744P	KWIK-STIK™ / 2	Streptococcus uberis ATCC® 700407™*	76,80 €	
0744K	KWIK-STIK™ / 6	Streptococcus uberis ATCC® 700407™*	207,50 €	
0744L	LYFO DISK® / 6	Streptococcus uberis ATCC® 700407™*	192,40 €	
0765P	KWIK-STIK™ / 2	Streptococcus uberis ATCC® 9927™*	76,80 €	
0765K	KWIK-STIK™ / 6	Streptococcus uberis ATCC® 9927™*	207,50 €	
0765L	LYFO DISK® / 6	Streptococcus uberis ATCC® 9927™*	192,40 €	
0224P	KWIK-STIK™ / 2	Streptococcus vestibularis ATCC® 49124™*	87,35 €	
0224K	KWIK-STIK™ / 6	Streptococcus vestibularis ATCC® 49124™*	235,85 €	
0224L	LYFO DISK® / 6	Streptococcus vestibularis ATCC® 49124™*	219,75 €	
0859P	KWIK-STIK™ / 2	Streptomyces griseus subsp. griseus ATCC® 10137™*	69,50 €	
0859K	KWIK-STIK™ / 6	Streptomyces griseus subsp. griseus ATCC® 10137™*	187,55 €	
0859L	LYFO DISK® / 6	Streptomyces griseus subsp. griseus ATCC® 10137™*	166,80 €	
01091P	KWIK-STIK™ / 2	Streptomyces species ATCC® 25607™*	87,35 €	
01091K	KWIK-STIK™ / 6	Streptomyces species ATCC® 25607™*	235,85 €	
01091L	LYFO DISK® / 6	Streptomyces species ATCC® 25607™*	219,75 €	
0728P	KWIK-STIK™ / 2	Thermoanaerobacterium thermosaccharolyticum ATCC® 7956™*	87,35 €	
0728K	KWIK-STIK™ / 6	Thermoanaerobacterium thermosaccharolyticum ATCC® 7956™*	235,85 €	
0728L	LYFO DISK® / 6	Thermoanaerobacterium thermosaccharolyticum ATCC® 7956™*	219,75 €	
01080P	KWIK-STIK™ / 2	Trichoderma virens ATCC® 9645™*	87,35 €	
01080K	KWIK-STIK™ / 6	Trichoderma virens ATCC® 9645™*	235,85 €	
01080L	LYFO DISK® / 6	Trichoderma virens ATCC® 9645™*	219,75 €	
0442P	KWIK-STIK™ / 2	Trichophyton mentagrophytes ATCC® 9533™*	87,35 €	fungus
0442K	KWIK-STIK™ / 6	Trichophyton mentagrophytes ATCC® 9533™*	235,85 €	fungus
0442L	LYFO DISK® / 6	Trichophyton mentagrophytes ATCC® 9533™*	219,75 €	fungus
0444P	KWIK-STIK™ / 2	Trichophyton rubrum ATCC® 28188™*	87,35 €	fungus
0444K	KWIK-STIK™ / 6	Trichophyton rubrum ATCC® 28188™*	235,85 €	fungus
0444L	LYFO DISK® / 6	Trichophyton rubrum ATCC® 28188™*	219,75 €	fungus
0891P	KWIK-STIK™ / 2	Trichophyton tonsurans ATCC® 28942™*	87,35 €	fungus
0891K	KWIK-STIK™ / 6	Trichophyton tonsurans ATCC® 28942™*	235,85 €	fungus
0891L	LYFO DISK® / 6	Trichophyton tonsurans ATCC® 28942™*	219,75 €	fungus
0771P	KWIK-STIK™ / 2	Trichosporon mucoides ATCC® 201382™*	87,35 €	
0771K	KWIK-STIK™ / 6	Trichosporon mucoides ATCC® 201382™*	235,85 €	
0771L	LYFO DISK® / 6	Trichosporon mucoides ATCC® 201382™*	219,75 €	
0778P	KWIK-STIK™ / 2	Trichosporon mucoides ATCC® 204094™*	87,35 €	
0778K	KWIK-STIK™ / 6	Trichosporon mucoides ATCC® 204094™*	235,85 €	
0778L	LYFO DISK® / 6	Trichosporon mucoides ATCC® 204094™*	219,75 €	
0151P	KWIK-STIK™ / 2	Ureaplasma parvum ATCC® 27813™*	87,35 €	formerly Ureaplasma urealyticum
0151K	KWIK-STIK™ / 6	Ureaplasma parvum ATCC® 27813™*	235,85 €	formerly Ureaplasma urealyticum
0151L	LYFO DISK® / 6	Ureaplasma parvum ATCC® 27813™*	219,75 €	formerly Ureaplasma urealyticum
0867P	KWIK-STIK™ / 2	Veillonella parvula ATCC® 10790™*	87,35 €	
0867K	KWIK-STIK™ / 6	Veillonella parvula ATCC® 10790™*	235,85 €	
0867L	LYFO DISK® / 6	Veillonella parvula ATCC® 10790™*	219,75 €	
0819P	KWIK-STIK™ / 2	Vibrio alginolyticus ATCC® 17749™*	69,50 €	
0819K	KWIK-STIK™ / 6	Vibrio alginolyticus ATCC® 17749™*	187,55 €	
0819L	LYFO DISK® / 6	Vibrio alginolyticus ATCC® 17749™*	166,80 €	
0720P	KWIK-STIK™ / 2	Vibrio furnissii NCTC 11218	69,50 €	
0720K	KWIK-STIK™ / 6	Vibrio furnissii NCTC 11218	187,55 €	
0720L	LYFO DISK® / 6	Vibrio furnissii NCTC 11218	166,80 €	
0818P	KWIK-STIK™ / 2	Vibrio parahaemolyticus ATCC® 17802™*	76,80 €	
0818K	KWIK-STIK™ / 6	Vibrio parahaemolyticus ATCC® 17802™*	207,50 €	
0818L	LYFO DISK® / 6	Vibrio parahaemolyticus ATCC® 17802™*	192,40 €	
01076P	KWIK-STIK™ / 2	Vibrio vulnificus ATCC® 27562™*	76,80 €	
01076K	KWIK-STIK™ / 6	Vibrio vulnificus ATCC® 27562™*	207,50 €	
01076L	LYFO DISK® / 6	Vibrio vulnificus ATCC® 27562™*	192,40 €	
0138P	KWIK-STIK™ / 2	Virgibacillus pantothenicus ATCC® 14576™*	69,50 €	
0138K	KWIK-STIK™ / 6	Virgibacillus pantothenicus ATCC® 14576™*	187,55 €	
0138L	LYFO DISK® / 6	Virgibacillus pantothenicus ATCC® 14576™*	166,80 €	
01141P	KWIK-STIK™ / 2	Wallemia sebi ATCC® 42694™*	76,80 €	
01141K	KWIK-STIK™ / 6	Wallemia sebi ATCC® 42694™*	207,50 €	
01141L	LYFO DISK® / 6	Wallemia sebi ATCC® 42694™*	192,40 €	
0950P	KWIK-STIK™ / 2	Yarrowia lipolytica ATCC® 9773™*	76,80 €	
0950K	KWIK-STIK™ / 6	Yarrowia lipolytica ATCC® 9773™*	207,50 €	
0950L	LYFO DISK® / 6	Yarrowia lipolytica ATCC® 9773™*	192,40 €	
0316P	KWIK-STIK™ / 2	Yersinia enterocolitica subsp. enterocolitica ATCC® 23715™*	69,50 €	biotype 1; serotype 8
0316K	KWIK-STIK™ / 6	Yersinia enterocolitica subsp. enterocolitica ATCC® 23715™*	187,55 €	biotype 1; serotype 8
0316L	LYFO DISK® / 6	Yersinia enterocolitica subsp. enterocolitica ATCC® 23715™*	166,80 €	biotype 1; serotype 8
0909P	KWIK-STIK™ / 2	Yersinia enterocolitica subsp. enterocolitica ATCC® 27729™*	69,50 €	biotype 1; serotype 8

Référence Microbiologics	Gamme	Souche	Prix de vente 2016 HT susceptible d'évoluer	Commentaire
0909K	KWIK-STIK™ / 6	Yersinia enterocolitica subsp. enterocolitica ATCC® 27729™*	187,55 €	biotype 1; serotype 8
0909L	LYFO DISK® / 6	Yersinia enterocolitica subsp. enterocolitica ATCC® 27729™*	166,80 €	biotype 1; serotype 8
0938P	KWIK-STIK™ / 2	Yersinia enterocolitica subsp. enterocolitica ATCC® 9610™*	76,80 €	biovar 1; serogroup O:8
0938K	KWIK-STIK™ / 6	Yersinia enterocolitica subsp. enterocolitica ATCC® 9610™*	207,50 €	biovar 1; serogroup O:8
0938L	LYFO DISK® / 6	Yersinia enterocolitica subsp. enterocolitica ATCC® 9610™*	192,40 €	biovar 1; serogroup O:8
0974P	KWIK-STIK™ / 2	Yersinia kristensenii ATCC® 33639™*	76,80 €	
0974K	KWIK-STIK™ / 6	Yersinia kristensenii ATCC® 33639™*	207,50 €	
0974L	LYFO DISK® / 6	Yersinia kristensenii ATCC® 33639™*	192,40 €	
0785P	KWIK-STIK™ / 2	Yersinia ruckeri ATCC® 29473™*	87,35 €	
0785K	KWIK-STIK™ / 6	Yersinia ruckeri ATCC® 29473™*	235,85 €	
0785L	LYFO DISK® / 6	Yersinia ruckeri ATCC® 29473™*	219,75 €	
0960P	KWIK-STIK™ / 2	Zygosaccharomyces bisporus ATCC® 34890™*	87,35 €	Formerly Zygosaccharomyces rouxii
0960K	KWIK-STIK™ / 6	Zygosaccharomyces bisporus ATCC® 34890™*	235,85 €	Formerly Zygosaccharomyces rouxii
0960L	LYFO DISK® / 6	Zygosaccharomyces bisporus ATCC® 34890™*	219,75 €	Formerly Zygosaccharomyces rouxii
01011P	KWIK-STIK™ / 2	Zygosaccharomyces parabailii ATCC® MYA-4549™*	87,35 €	Formerly Zygosaccharomyces bailii
01011K	KWIK-STIK™ / 6	Zygosaccharomyces parabailii ATCC® MYA-4549™*	235,85 €	Formerly Zygosaccharomyces bailii
01011L	LYFO DISK® / 6	Zygosaccharomyces parabailii ATCC® MYA-4549™*	219,75 €	Formerly Zygosaccharomyces bailii
0803E3	Epower™ / 10	Zygosaccharomyces rouxii ATCC® 28253™*	263,40 €	Mean Assay Value: 1.0-9.9E+03 CFU per pellet
0803E4	Epower™ / 10	Zygosaccharomyces rouxii ATCC® 28253™*	346,60 €	
0803E3-CRM	Epower™ / 10 CRM	Zygosaccharomyces rouxii ATCC® 28253™*	512,40 €	Mean Assay Value: 1.0-9.9E+03 CFU per pellet
0803FPC	EZ-FPC™ / 10	Zygosaccharomyces rouxii ATCC® 28253™*	285,00 €	Quantitative Preparations at a concentration of 1.0-9.9E+03 CFU per pellet
0803P	KWIK-STIK™ / 2	Zygosaccharomyces rouxii ATCC® 28253™*	87,35 €	
0803K	KWIK-STIK™ / 6	Zygosaccharomyces rouxii ATCC® 28253™*	235,85 €	
0803L	LYFO DISK® / 6	Zygosaccharomyces rouxii ATCC® 28253™*	219,75 €	
0255P	KWIK-STIK™ / 2	Zygosaccharomyces rouxii NCYC 381	87,35 €	
0255K	KWIK-STIK™ / 6	Zygosaccharomyces rouxii NCYC 381	235,85 €	
0255L	LYFO DISK® / 6	Zygosaccharomyces rouxii NCYC 381	219,75 €	
5218K	QC Sets and Panels	Big 6 STEC QC Set	1 889,80 €	USA shipment only License obligatoire pour Import avec Livraison directe chez client final - DELAI : 7-10 semaines
5218L	QC Sets and Panels	Big 6 STEC QC Set	1 783,90 €	USA shipment only License obligatoire pour Import avec Livraison directe chez client final - DELAI : 7-10 semaines
5218P	QC Sets and Panels	Big 6 STEC QC Set	699,00 €	USA shipment only License obligatoire pour Import avec Livraison directe chez client final - DELAI : 7-10 semaines
5219K	QC Sets and Panels	Big 7 STEC QC Set	2 097,20 €	USA shipment only License obligatoire pour Import avec Livraison directe chez client final - DELAI : 7-10 semaines
5219L	QC Sets and Panels	Big 7 STEC QC Set	1 976,30 €	USA shipment only License obligatoire pour Import avec Livraison directe chez client final - DELAI : 7-10 semaines
5219P	QC Sets and Panels	Big 7 STEC QC Set	775,80 €	USA shipment only License obligatoire pour Import avec Livraison directe chez client final - DELAI : 7-10 semaines

DÉCOUVREZ NOTRE SITE INTERNET



+33 (0)2 40 93 53 53

RECHERCHER UN PRODUIT

Rechercher avancée ou par index alphabétique

MON COMPTE

Mon compte

PANIER/DEVIS

Mon panier/devis

ACCUEIL

INGRÉDIENTS

MICROBIOLOGIE

PRODUITS CHIMIQUES

PETIT MATÉRIEL

MATÉRIEL

MOBILIER

HYGIÈNE & SÉCURITÉ

Votre compte client

Renouvelez vos commandes
Enregistrez vos devis et validez-les
Sauvegardez vos produits phares
Gérez vos informations personnelles



Mon compte

Les avantages de la commande en ligne

Commandez directement en ligne afin de suivre votre commande jusqu'à son expédition et de bénéficier d'avantages financiers.
Vous êtes déjà client ? Vos frais de port passent à 10 € HT si votre commande est en deçà de votre seuil de franco.



**Vous réglez par carte bancaire ?
Vos frais de port sont GRATUITS**

Retrouvez-nous sur notre site web
où plus de 30 000 références sont présentées
afin de répondre au mieux à vos besoins

www.humeau.com

Promotions

Profitez des promotions
Visualisez toutes nos promotions
et articles en déstockage



NOS PROMOTIONS